

Manual de uso del equipo de infusión Cleo™ 90




Consulte las instrucciones de uso si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Introducción del puerto y conexión del equipo de tubo

1. Lávese las manos exhaustivamente.
2. Prepare el puerto y déjelo secar.
3. Gire la tapa para extraerla.
4. Inspeccione el dispositivo para ver si están el adhesivo y la aguja de inserción.
5. Presione firmemente hasta que oiga un clic; mantenga presionado durante 5 segundos; retire el dispositivo.
6. Compruebe que la aguja se haya retraído.
7. Presione para fijar el adhesivo.
8. Conecte el tubo y llénelo de acuerdo con el manual del usuario de la bomba.*
9. Presione los brazos del conector del puerto hacia adentro y deslícelo para abrirlo por completo.
10. Conecte el tubo al puerto según la posición más adecuada. El equipo de infusión Cleo 90 tiene 8 posibles posiciones.
11. Cierre el conector. Un clic confirma el cierre.
12. Llene la cánula con la medicación.



 - La cánula de 6 mm tiene un volumen de cebado de 0,002 ml.
 - La cánula de 9 mm tiene un volumen de cebado de 0,003 ml.

Desconexión

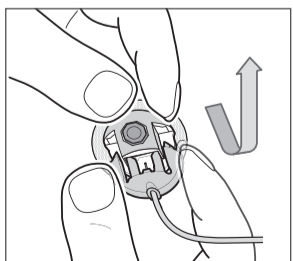

Abra el conector presionando los brazos del conector del puerto hacia dentro y deslizándolo para abrirlo por completo.

Retirada del puerto de inyección

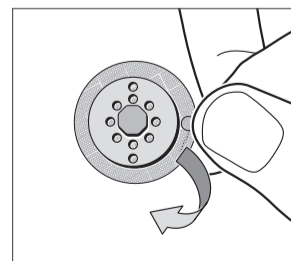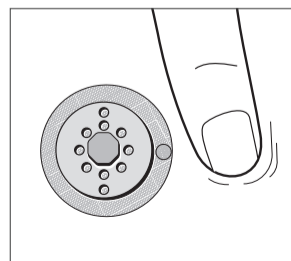

Cambio del catéter Cleo 90

Cambie el catéter de acuerdo con la política y los procedimientos de su centro.

* Advertencia: Nunca llene el tubo con medicación o insulina mientras el equipo de infusión está conectado a su cuerpo, o podría administrarse un bolo de medicación de forma involuntaria.