


Hospira MedNet™ Meds™

GUÍA DE USUARIO



Hospira, Inc., 275 North Field Drive,
Lake Forest, IL 60045, USA

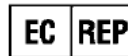

Hospira UK Limited
Horizon, Honey Lane, Hurley,
Maidenhead, SL6 6RJ, UK

430-98305-002 (A, 2016-06)

Notas:

Hospira MedNet™ Meds™

Guía del usuario de software

REF 16037-75-02

RxOnly



IMPORTANTE

Consulte esta Guía del usuario para obtener instrucciones de uso completas, advertencias y precauciones asociadas a Hospira MedNet™ Meds™ Software tras su instalación correcta. Consulte la Guía de instalación y configuración para hacer un uso adecuado y conocer las advertencias y precauciones asociadas a la instalación y configuración de Hospira MedNet™ Meds™ Software. Los archivos de ayuda incluidos en MedNet™ Meds™ Software se proporcionan únicamente con fines informativos.

Uso previsto

Hospira MedNet™ Medication Management Suite (MMS) se ha creado para facilitar la comunicación en red entre los sistemas de equipos compatibles con MMS y las bombas de infusión de Hospira. MMS ofrece a los profesionales de la atención médica experimentados la capacidad de enviar, recibir, indicar y almacenar información a partir de sistemas externos con una interfaz, y de configurar y editar parámetros de programación de infusión.

MMS se ha creado para proporcionar una forma de automatizar la programación de parámetros de infusión, y por lo tanto, reducir la cantidad de pasos manuales necesarios para especificar datos de infusión. Todo el proceso de inserción de datos y de validación de parámetros de infusión se realiza mediante un profesional de la salud calificado de acuerdo con las indicaciones de los médicos.

Consulte la guía completa antes de usar Hospira MedNet™ Meds™ Software.

**Hospira Advanced Knowledge Center
1-800-241-4002
Disponible las 24 horas del día (en EE. UU.)**






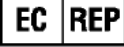


Para obtener asistencia fuera de EE. UU., póngase en contacto con su representante local de Hospira

Para conocer la compatibilidad de las características del dispositivo con Hospira MedNet™ y/u obtener una copia de esta guía, póngase en contacto con Hospira Advanced Knowledge Center o si está fuera de EE. UU., póngase en contacto con su representante local de Hospira.

A través del sitio web de Hospira, puede acceder a los manual del sistema operativo y a la guía, desde el centro de asistencia técnica para bombas de infusión y software clínico.

Historial de cambios

Número de pieza	Descripción del cambio	Páginas cambiadas
430-98305-002 (A, 2016-06)	Publicación inicial	

Símbolos	Descripción
	Precaución
	Advertencia
	Marca CE
	Número de catálogo
 Hospira, Inc., 275 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, USA	Fabricante
	Representante autorizado en la Unión Europea
RxOnly	PRECAUCIÓN: La ley federal (EE. UU.) restringe este aparato a la venta por o a la orden de un médico u otro profesional habilitado.
	Consulte las instrucciones de uso
	Fecha de fabricación

Notas:

CONTENIDOS

Capítulo 1: Introducción	1
Terminología	2
Advertencias y precauciones generales	2
Seguridad y gestión de ordenadores	3
Manipulación de infusores	3
Transferencia de datos	3
Capítulo 2: Inicio y cierre de sesión	5
Inicio de sesión	5
Cierre de sesión y salida	6
Capítulo 3: Configuración y gestión de certificados	9
Introducción	9
Gestión de certificados	10
Capítulo 4: Lista de medicamentos	11
Introducción	11
Importación de una lista de medicamentos	12
Vista Lista de medicamentos	17
Adición de un medicamento	18
Edición de un medicamento	20
Eliminación de un medicamento	21
Exportación de una lista de medicamentos	23
Informe de lista de medicamentos	26
Capítulo 5: Directorio de farmacia	27
Introducción	27
Convenciones del Directorio de farmacia	28
Procedimientos paso a paso	29
Capítulo 6: Gestión de la farmacia	41
Introducción	41
Convenciones de Gestión de la farmacia	43
Gestión de farmacias	43
Capítulo 7: Informes de Hospira MedNet Meds	59
Introducción	59
Informes de farmacias de Plum A+	61
Impresión de informes	70
Capítulo 8: Configuración de AAC	73
Introducción	73
Líneas de servicio	74
Creación de un AAC nueva	75
Edición de un AAC	76
Visualización de un AAC	77
Eliminación de un AAC	78
Cambie el orden de los nombres de AAC	79
Configuración de un Plum 360	80
Configuración de un AAC de Plum A+	84

Capítulo 9: Entradas de medicamento de Plum A+ y Plum 360.....	87
Introducción	87
Parte 1: Plum 360	88
Definición de conjuntos de reglas	88
Establecimiento de límites de velocidad de dosis.....	90
Reglas y convenciones de entradas de medicamento	92
Conjunto de reglas de medicamentos de Plum 360	93
Procedimientos paso a paso.....	96
Trabajo con entradas de medicamento de AAC.....	97
Trabajo con el Maestro de fármacos	110
Parte 2: Plum A+.....	121
Definición de conjuntos de reglas	121
Establecimiento de límites de velocidad de dosis.....	123
Reglas y convenciones de entradas de medicamento	124
El conjunto de reglas de medicamentos de Plum A+	125
Procedimientos paso a paso.....	127
Trabajo con entradas de medicamento de AAC.....	128
Trabajo con el Maestro de fármacos	137
Capítulo 10: Configuración del infusor maestro	147
Ajustes del Maestro de infusores de Plum 360.....	147
Ajustes del Maestro de infusores de Plum A+	150
Apéndice A: Hospira MedNet Integrator	153
Introducción	153
Glosario	155

Capítulo 1: Introducción

Hospira MedNet™ es un producto de software de seguridad basado en servidor diseñado para su uso en instalaciones de atención médica por parte de profesionales sanitarios capacitados para ofrecer orientación a pie de cama mediante la gestión de la información sobre infusiones intravenosas con sistemas de infusión de Hospira compatibles. La suite Hospira MedNet™ Software también incluye una aplicación independiente: Hospira MedNet™ Meds™.

Hospira MedNet™ Software mejora la seguridad en el centro de atención sanitaria con farmacotecas con un alto nivel de personalización que guían a los usuarios y ayudan a proteger a los pacientes mediante alertas de límites de dosificación superiores e inferiores (absolutos y relativos) diseñados para ayudar a evitar los errores de infusiones. Estos límites están basados en las prácticas de administración intravenosa específicas del hospital.

Hospira MedNet™ Software reduce los pasos de programación manual al permitir que los ajustes farmacéuticos fluyan directamente a las bombas de infusión compatibles a través de la solución de integración clínica intravenosa (IVCI). Hospira MedNet™ Software conecta el pedido del medicamento validado por la farmacia con la bomba de infusión y el registro médico electrónico (EMR) del paciente, lo que permite la programación automatizada de la bomba de infusión.

Hospira MedNet™ Software genera más de 20 informes diferentes basados en datos, ajustes y cambios recopilados de forma automática e inalámbrica de las bombas de infusión compatibles. Los informes generados ayudan a convertir los datos en información con la que se puede trabajar para ofrecer visibilidad de las prácticas clínicas. Según la capacidad del sistema EMR, la documentación automatizada en EMR también es compatible con Hospira MedNet™.

Los paquetes Hospira MedNet™ Software constan de los siguientes componentes. Los componentes específicos disponibles dependerán de la licencia de la institución.

Hospira MedNet™ Administrator™ permite gestionar los usuarios del sistema, los infusores, las descargas de farmacotecas, las actualizaciones de software del infusor, los puntos de acceso y otras configuraciones.

Hospira MedNet™ Connect™ establece la conectividad entre el servidor Hospira MedNet™ y los infusores. Incorpora los componentes inalámbricos y Ethernet que permiten que Hospira MedNet™ Meds™ y Hospira MedNet™ Administrator™ intercambien información con los infusores.

Hospira MedNet™ Integrator™ ofrece interfaces a las aplicaciones de nivel empresarial del hospital y actúa como conducto para el intercambio de datos entre infusores, el servidor Hospira MedNet™ y diferentes sistemas de información hospitalarios.

Hospira MedNet™ Meds™ ofrece funcionalidades a la farmacia para la definición y la gestión de medicamentos, farmacotecas, áreas de atención clínica y configuraciones de infusores.

Hospira MedNet™ Performance™ envía los datos del servidor Hospira MedNet™ a informes diseñados para la gestión de activos, así como la evaluación clínica del uso de Hospira MedNet™ con opciones seleccionables para satisfacer de forma más adecuada las necesidades del usuario.

Hospira MedNet™ Programmer™ toma los pedidos de dispensación de medicamentos del sistema de administración de medicamentos con códigos de barras (BCMA) y los traduce en comandos operativos que completan automáticamente los ajustes del infusor.

Terminología

Este documento utiliza las siguientes convenciones:

- Las referencias a valores específicos solo son aproximaciones, a menos que se indique lo contrario.
- Los términos "Hospira MedNet™ Software" y "el software" se utilizan indiferentemente en este manual.

Nota: Las ilustraciones y las representaciones en pantalla son solo para fines ilustrativos y pueden no coincidir con las del software real. Los ajustes de la pantalla del ordenador pueden afectar a las representaciones en pantalla.

Advertencias y precauciones generales

Las siguientes convenciones se utilizan en esta guía de usuario para indicar advertencias o precauciones:



Precaución: Contiene información que podría evitar daños en el producto o fallos de hardware. Al ignorar una precaución, el usuario o el paciente podrían sufrir lesiones.



ADVERTENCIA: Los mensajes de advertencia prestan especial atención a la seguridad y deben tenerse en cuenta en todo momento. Las consecuencias del incumplimiento de un mensaje de advertencia son potencialmente mortales.



Precaución: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este aparato a los médicos u otro profesional habilitado o bajo la prescripción de estos.

Seguridad y gestión de ordenadores

- Excepto en el caso de los archivos de datos de virus (a los que normalmente se hace referencia como archivos ".dat"), no instale actualizaciones, paquetes de servicio o parches en software que no sea de Hospira en ordenadores en los que Hospira MedNet™ Software esté instalado a no ser que estén autorizados por Hospira.
- No active las actualizaciones automáticas de sistemas operativos en ordenadores en los que esté instalado Hospira MedNet™ Software.
- Asegúrese de que los procedimientos de copia de seguridad de datos y restauración estén implementados, así como que los administradores puedan restaurar correctamente los datos de copias de seguridad anteriores.
- Asegúrese de que la red en la que se ha utilizado Hospira MedNet™ Software tenga implementados procedimientos de seguridad eficaces, incluido el control del acceso a la red y físico.
- Asegúrese de que las contraseñas de usuario estén protegidas.
- Asegúrese de que haya disponible una fuente de seguridad de reserva (fuente de la alimentación ininterrumpida) para evitar la pérdida de información crítica.

Importante: Recomendamos fehacientemente que realice una copia de seguridad y depure la base de datos regularmente. Una base de datos puede alcanzar un tamaño considerable y afectar al rendimiento de su sistema de Hospira MedNet™.

Sugerimos que se realice la depuración de la base de datos por lo menos cada cuatro años, si cuenta con más de 2000 infusores, sería recomendable realizar el procedimiento más a menudo. Puede encontrar instrucciones completas de copia de seguridad en la guía de instalación y configuración, o puede consultar el Advanced Knowledge Center.

Manipulación de infusores

- Consulte el *Manual del Sistema Operativo* del infusor correspondiente para obtener información sobre las advertencias y precauciones antes de manipular los infusores.
- Tenga cuidado al manipular los conectores y los cables.
- No tuerza ni doble los cables ni los conectores.
- Asegúrese de cumplir con IEC 60601-1-1 al conectar accesorios a dispositivos médicos.

Nota: Los dispositivos de infusión compatibles con Hospira MedNet presentarán opciones seleccionables según su licencia y la matriz de compatibilidad de Hospira.

Transferencia de datos

- Asegúrese de que solo se esté ejecutando una instancia de Hospira MedNet™ Meds™ Software en el ordenador cada vez.
- Con el fin de evitar las incoherencias entre las farmacotecas y los informes, asegúrese de que todos los infusores utilicen la misma versión de la farmacoteca.

Notas:

Capítulo 2: Inicio y cierre de sesión

Inicio de sesión

Para iniciar sesión en Hospira MedNet Meds Software, haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en el icono de Hospira MedNet Meds 6.2 en el escritorio de Windows.



2. Introduzca su ID de usuario y la contraseña en los campos correspondientes. Cada campo debe contener entre 8 y 20 caracteres.


La imagen muestra la interfaz de inicio de sesión de Hospira MedNet Meds. El título de la ventana es "Hospira MedNet Meds". El logotipo de Hospira MedNet Meds™ está acompañado del texto "PARA USAR CON INFUSORES HOSPIRA COMPATIBLES". Debajo, se indica "HOSPITAL GENERAL". Hay un formulario con dos campos de texto: "ID de usuario:" y "Contraseña:". Debajo de los campos hay dos botones: "Iniciar sesión" y "Borrar". En la parte inferior del formulario, se muestra "Hospira MedNet™ Meds™ 06.20.02.009" y "Hospira MedNet™ identificador unico del dispositivo: 111.111.111.111". Debajo de esto hay un botón "Salir". En la parte inferior de la ventana, hay varios logos y textos: "CE 0086", "Hospira UK Limited Horizon, Honey Lane Hurley, Maidenhead SL6 6RJ, UK", un símbolo de advertencia, "Las instrucciones de uso se proporcionan únicamente en formato electrónico.", "Hospira, Inc. 275 North Field Drive Lake Forest, IL 60045 USA" y "@m.date".

3. Haga clic en **Iniciar sesión**.


Cierre de sesión y salida

Para cerrar sesión en Hospira MedNet Meds Software, haga lo siguiente:


1. Haga clic en **Cerrar sesión**.

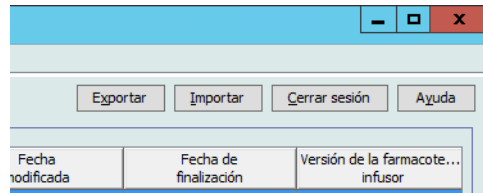


2. Haga clic en **Sí**.

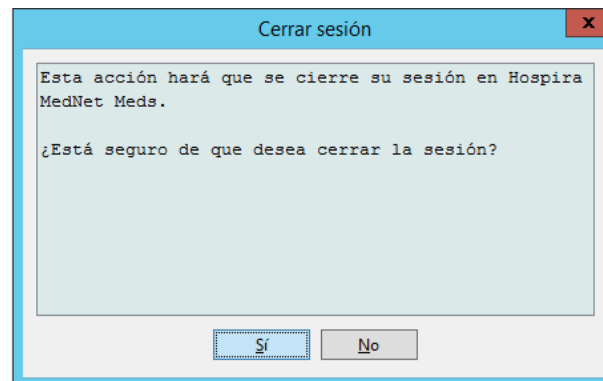

3. Haga clic en **Salir**.

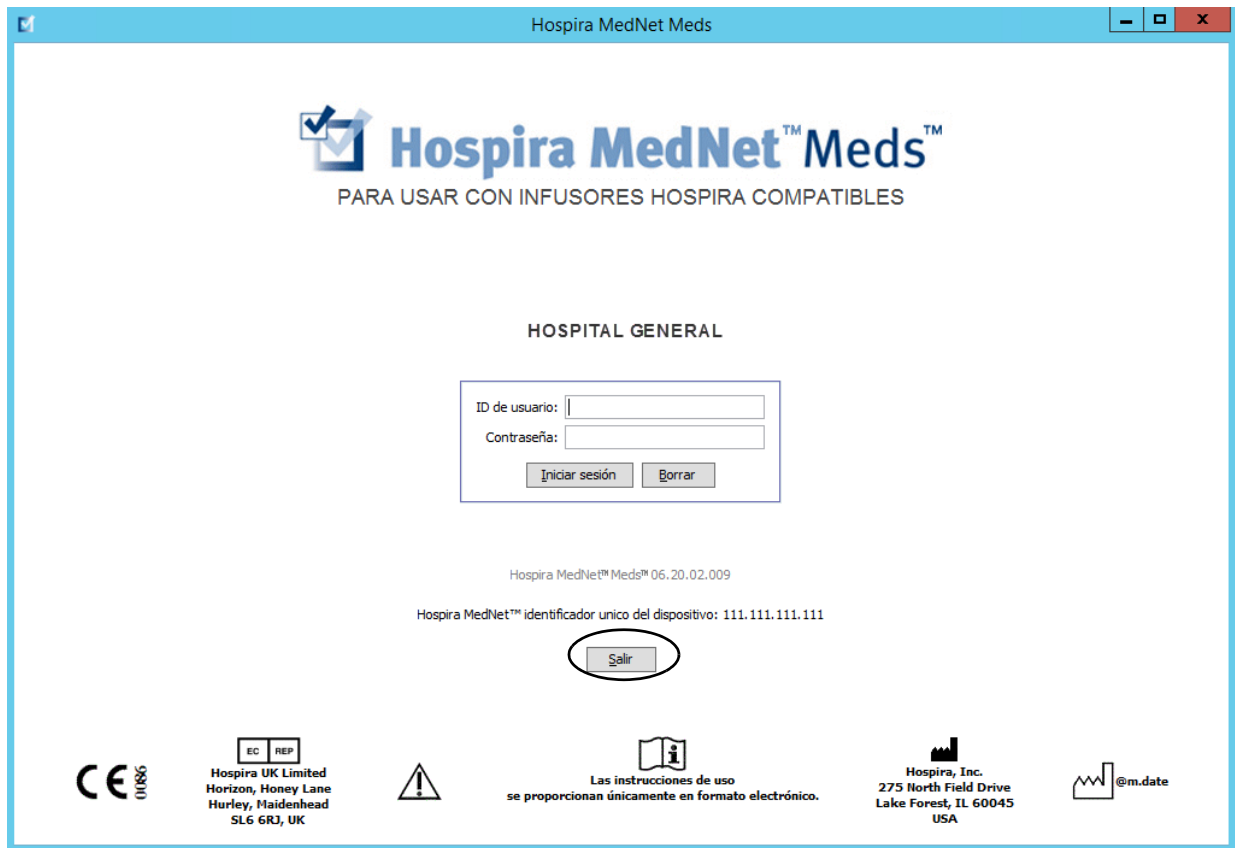

4. Haga clic en **Sí**.

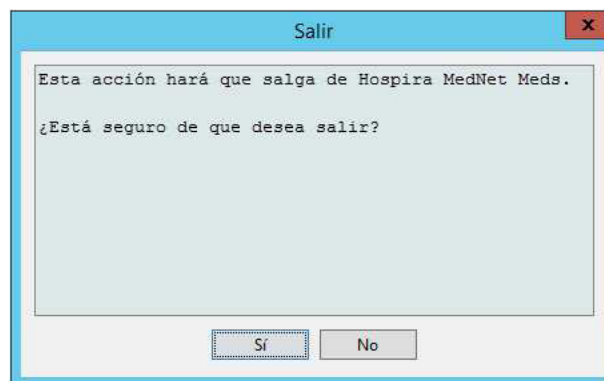

Nota: La sesión de la aplicación se cerrará automáticamente tras 60 minutos de inactividad.

Notas:

Capítulo 3: Configuración y gestión de certificados

Introducción

La vista de configuración le permite establecer los idiomas Inglés (internacional) o Francés (Francia). Una vez que realice su selección, toda la información del software aparecerá en dicho idioma.

Las bibliotecas asociadas a un idioma se visualizarán, se editarán, se importarán y se finalizarán en dicha opción de idioma.


Para Inglés (internacional), el formato de fecha se muestra como mmddaaaa y la unidad de presión distal es psi.

Para Francés (Francia), el formato de fecha se puede mostrar como sigue:

- dd/mm/aa
- dd/mm/aaaa
- dd/mmm/aa
- dd/mmm/aaaa

y la unidad de presión distal es mmHg.

Deberá desplazarse a la pestaña Configuración y realizar su selección.

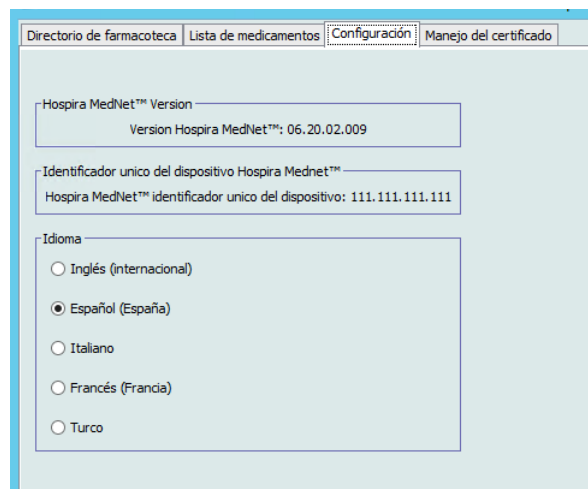


Haga clic en **Guardar** y se aplicará el idioma correspondiente de inmediato.

Nota: El idioma seleccionado en Hospira MedNet Meds se aplicará automáticamente a Hospira MedNet Software.

Gestión de certificados

Importante: Se requieren certificados para finalizar las farmacotecas y para descargar una farmacoteca a Plum 360. Puede obtener instrucciones detalladas relativas a la instalación de certificados en Advanced Knowledge Center o de su representante local de Hospira.

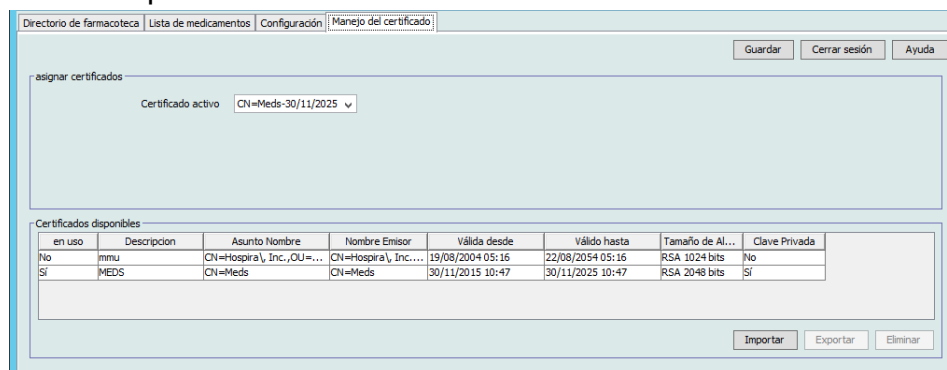

A continuación se muestran los formatos de certificados compatibles con Hospira MedNet:
Adecuados para importación:

Formato	Codificación		Contenido
	DER binario codificado	PEM Base64	
X.509	Sí	Sí	Solo certificado (sin clave privada)
PKCS #7	Sí	Sí	Solo cadena de certificados (sin clave privada)
PKCS #8	Sí	Sí	Solo clave privada (sin certificado)
PKCS #12	Sí	N/C	Certificado con clave privada

PKCS #8 permite varios algoritmos de cifrado basados en contraseña. Los algoritmos compatibles son:

- sin contraseña
- PBEwithMD5andDES
- PBEwithSHA1and3KEYDESEde
- PBEwithSHA1and40BITRC2

Nota: No puede importar claves privadas con PKCS #8

Adecuados para exportación:

Formato	Codificación DER binario codificado	Contenido
X.509	Sí	Solo certificado (sin clave privada)
PKCS #7	Sí	Solo cadena de certificados (sin clave privada)
PKCS #12	Sí	Certificado con clave privada

Capítulo 4: Lista de medicamentos

Introducción

La **Lista de medicamentos** incluye los medicamentos utilizados por el hospital; contiene elementos de datos importantes utilizados en el desarrollo de farmacotecas para los infusores utilizados en el hospital.

En este capítulo, le mostraremos cómo crear, importar y gestionar la lista de medicamentos. Los siguientes capítulos contienen información detallada sobre el desarrollo de farmacotecas.

Nota: Cuando un usuario se encuentra en la lista de medicamentos, ningún otro usuario puede estar en la lista de medicamentos o en cualquier farmacoteca. Cada farmacoteca solo admite un usuario a la vez.

Identificación de medicamentos en la lista de medicamentos

La lista de medicamentos requiere que todos los medicamentos tengan un identificador (ID) externo. El ID externo es especialmente importante si el sistema Hospira MedNet está integrado con otro sistema que envíe información de programación al infusor. El ID externo se utiliza para garantizar la coincidencia entre el medicamento enviado por el sistema que realiza el envío y el conjunto de reglas de medicamentos utilizado por Hospira MedNet Software.

Consideraciones para la asignación de un ID externo

Si se va a integrar Hospira MedNet con otro sistema (como un sistema de BCMA) que envía información de programación al infusor (medicamento, concentración, velocidad, etc.), cada nombre genérico de la lista de medicamentos debe tener un ID externo único. El sistema que realiza el envío (en este caso, el sistema de BCMA) también utilizará este ID externo. Por ejemplo, esto permite representar todos los productos con dopamina, como ampollas, viales y jeringas, como una sola entrada en la lista de medicamentos con el nombre genérico "dopamina". El número de ID externo del nivel genérico correspondiente variará según el sistema de BCMA integrado en Hospira MedNet, por ejemplo, código de catálogo o ID de Multum para Cerner Millennium, etc. Su asesor de farmacia colaborará con usted para crear el archivo correcto para la implementación.

Si Hospira MedNet no se ha diseñado para integrarse con otro sistema hospitalario que envíe información de programación al infusor, solo es necesario que cada elemento de la lista de medicamentos tenga un ID externo correspondiente. En este caso, es posible que desee tener varios fabricantes o tamaños de paquetes del mismo medicamento representados en la lista de medicamentos. Los nombres genéricos pueden aparecer varias veces siempre que cada uno tenga su propio ID externo único. Se pueden utilizar secuencias numéricas o identificadores maestros de cargas para este fin.

Uso de ID externos en farmacotecas

Al desarrollar una farmacoteca, se aplican determinadas reglas (enumeradas a continuación) que implican al ID externo.

En una farmacoteca, para las entradas de medicamento de un área de atención clínica (AAC):

- Solo puede haber un conjunto de reglas para cada combinación de ID externo y Concentración.
- Solo puede haber un conjunto de reglas para cada combinación de Nombre mostrado y Concentración.

Estas reglas permiten que Hospira MedNet Software y el software del infusor identifiquen positivamente el conjunto de reglas de medicamentos específico establecido en la farmacoteca.

Importación de una lista de medicamentos

Se puede importar un archivo de lista de medicamentos en Hospira MedNet Meds varias veces. Cada archivo de importación debe contener todos los medicamentos que se pueden infundir incluso aunque se hayan importado anteriormente.

Formato del archivo CSV

La importación de una lista de medicamentos conlleva la creación de un archivo de valores separados por comas (.csv) con información sobre los medicamentos. Su sistema farmacéutico puede admitir la creación de un archivo con este formato o uno similar que pueda manipularse en Excel. El archivo puede tener 12 columnas conforme a lo especificado a continuación si se va a importar una lista de medicamentos completa. No obstante, si solo desea editar el ID externo y los nombres genéricos, puede hacerlo a través de la característica Exportar, como se explica en [Exportación de una lista de medicamentos](#) en la página 23.

- La función de importación de la lista de medicamentos ignora la primera línea del archivo. Debe contener los nombres de campos de la siguiente tabla.
- Las siguientes líneas del archivo deben incluir una entrada de medicamento por línea.
- Cada línea del archivo debe incluir los datos de los campos ID externo y Nombre genérico.

Nota: ID externo y Nombre genérico son los únicos campos cuyos datos son obligatorios.

Nombre de campo	Tipo de campo	Número de caracteres permitido ¹
ID externo	Cadena	20
NDC	Cadena	20
Nombre genérico	Cadena	100
Denominación comercial	Cadena	100
Concentración	Numérico	20
Unidades de concentración	Cadena	25
Volumen	Numérico	20
Unidades de volumen	Cadena	25
ID de clase terapéutica	Cadena	20
Descripción de clase terapéutica	Cadena	200
ID de presentación farmacéutica	Cadena	20
Descripción de presentación farmacéutica	Cadena	200

¹ Las comas (,), los paréntesis angulares ($\langle \rangle$) y las comillas dobles (") no son caracteres admitidos en los campos del archivo de importación.

La lista de medicamentos puede crearse como una hoja de cálculo y guardarse en formato .csv para su importación. A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de 12 columnas con la información de la lista de medicamentos:

External ID	HDC	Generic Name	Brand Name	Strength	Strength Unit	Volume	Volume Units	Therapeutic Class ID	Therapeutic Class Description	Dosage Form	Dos. Form Description
1738	00173-0362-38	RANITIDINE	ZANTAC	50	MG	2	ML	56.28.12	HISTAMINE H2-ANTAGONISTS\1	VL	VIAL
2823	67286-0040-02	RETEPLASE	RETAVASE	10	UNITS	10	ML	28.12.20	THROMBOLYTIC AGENTS\1	VL	VIAL
2790	00944-2967-05	RHO(D) IMMUNE GLOBULIN(WINRHO)	WINRHO	1000	MCG	4.4	ML	80.04.00	SERUMS	VL	VIAL
2665	95390-0123-01	RIFAMPIN	RIFADIN (EQ)	600	MG	1	VIAL	08.16.00	ANTIMYCOBACTERIALS\1	VL	VIAL
412	00052-0450-15	ROCURONIUM	ZEMURON	50	MG	5	ML	12.20.20	NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTS\1	VL	VIAL
2412	00186-0863-77	ROPIVACAINE 0.5%	NAROPIN			30	ML	72.00.00	LOCAL ANESTHETICS (PARENTERAL)\1	VL	VIAL
32	00270-0556-15	SINCALIDE	KINEVAC	5	MCG	1	VIAL	36.34.00	GALLBLADDER FUNCTION	VL	VIAL
610	00409-6609-02	SODIUM BICARBONATE 4%	SODIUM BICARBONATE 4%			5	ML	40.08.00	ALKALINIZING AGENTS	VL	VIAL
1918	00409-6625-02	SODIUM BICARBONATE 8.4%	SODIUM BICARBONATE 8.4%	50	MEQ	50	ML	40.08.00	ALKALINIZING AGENTS	VL	VIAL
555	00409-1966-14	SODIUM CHLORIDE 0.9% BACT	SODIUM CHLORIDE 0.9% BACT			30	ML	40.12.00	REPLACEMENT PREPARATIONS	VL	VIAL
579	00409-4898-12	SODIUM CHLORIDE PF 0.9%	SODIUM CHLORIDE PF 0.9%			10	ML	40.12.00	REPLACEMENT PREPARATIONS	VL	VIAL
580	00409-4898-50	SODIUM CHLORIDE PF 0.9%	SODIUM CHLORIDE PF 0.9%			50	ML	40.12.00	REPLACEMENT PREPARATIONS	VL	VIAL
612	00409-6629-02	SUCCINYLCHOLINE	SUCCINYLCHOLINE	200	MG	10	ML	12.20.20	NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTS\1	VL	VIAL
1862	00703-9514-03	SULFAMETH/PRIMETH	BACTRIM (EQ)			10	ML	08.12.20	SULFONAMIDES (SYSTEMIC)\1	VL	VIAL
2329	00029-6571-26	TICARCILLIN/CLAVULANATE	TIMENTIN	3.1	GM	1	VIAL	08.12.16	PENICILLINS	VL	VIAL
10	63323-0303-95	TOBRAMYCIN	TOBRAMYCIN	1.2	GM	1	VIAL	08.12.02	AMINOGLYCOSIDES	VL	VIAL
1461	63323-0306-95	TOBRAMYCIN	TOBRAMYCIN	80	MG	2	ML	08.12.02	AMINOGLYCOSIDES	VL	VIAL

Consideraciones para el archivo de importación de listas de medicamentos en formato CSV

Guarde el archivo en formato .csv. Los extractos de los sistemas de información suelen ser archivos de Excel, archivos separados por tabulaciones o archivos separados por barras verticales. Estos pueden guardarse en forma de archivo CSV con Excel.

Elimine las filas o columnas del archivo CSV que no contengan datos necesarios. Asegúrese de que haya 12 columnas.

Evalúe la información proporcionada para determinar de qué forma se pueden asignar los campos proporcionados según las especificaciones de archivos de importación.

- ¿Hay algún identificador para cada fármaco que se pueda utilizar como ID externo?
- ¿Todos los fármacos tienen un Nombre genérico que solo contenga el nombre genérico (sin la concentración, el volumen o la presentación farmacéutica)?
- ¿Se proporcionan el ID de clase terapéutica y la descripción?
La clase terapéutica DEBE tener un ID. La descripción es opcional. (Si solo se proporciona una descripción, utilice la misma información para el ID y la descripción. Copie la columna Descripción en la columna ID).
- ¿Hay datos para el ID de presentación farmacéutica y la descripción?
La presentación farmacéutica DEBE tener un ID. La descripción es opcional. (Si solo se proporciona una descripción, utilice la misma información para el ID y la descripción. Copie la columna Descripción en la columna ID).

Elimine de la lista los medicamentos que no puedan infundirse en una bomba.

Formatee las columnas del archivo para cumplir las especificaciones de los archivos de importación.

- Asegúrese de que todas las columnas estén presentes y tengan los nombres correctos (incluso aunque no contengan datos).
- Asegúrese de que las columnas estén correctamente ordenadas.
- Quite los caracteres especiales (comas, paréntesis angulares de izquierda y derecha, comillas dobles).

En Excel, en el menú Editar, puede utilizar la opción Buscar y Reemplazar.

- Busque las comas y reemplácelas por espacios en blanco.

- Busque los paréntesis angulares izquierdos y reemplácelos por paréntesis izquierdos.
- Busque los paréntesis angulares derechos y reemplácelos por paréntesis derechos.
- Busque las comillas dobles y reemplácelas por comillas simples.

Verificación final:


- Ordene el archivo por ID Externos
- Un ID Externo concreto debe aparecer solo en una fila del archivo.
- Asegúrese de que cada medicamento tenga datos en las columnas ID Externo y Nombre Genérico.
- Un Nombre Genérico puede aparecer varias veces en el archivo con ID diferentes.

Importación de la lista de medicamentos

Importante: Al importar la lista de medicamentos, se sustituyen los medicamentos que ya figuren en la lista. En el siguiente segmento se proporcionan instrucciones completas, [Trabajo con la lista de medicamentos](#) en la página 16.


Una vez que se haya formateado el archivo del modo descrito anteriormente, haga lo siguiente:

- En la vista Lista de medicamentos, seleccione **Importar**.

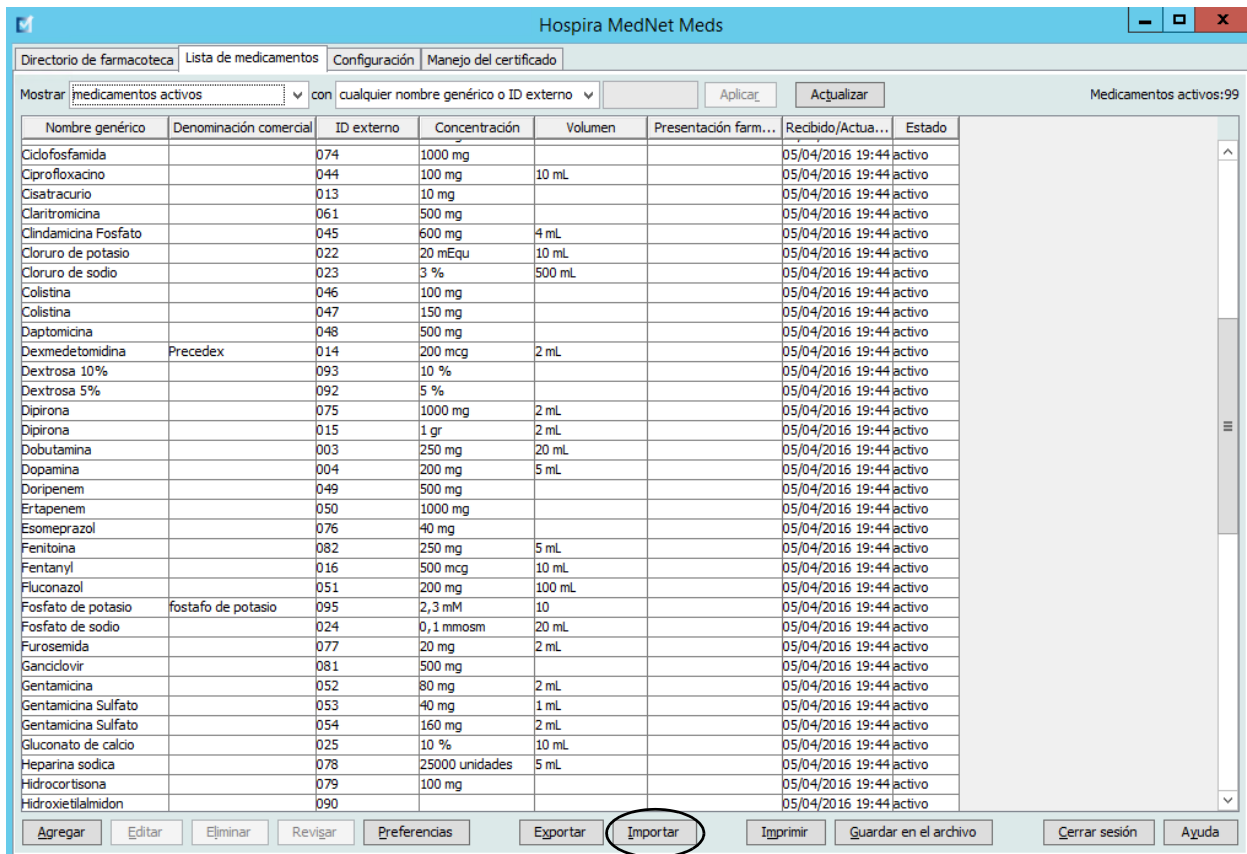

Aparecerá la pantalla Archivo para importar.


- Desplácese a la ubicación de la Lista de medicamentos que desee importar.

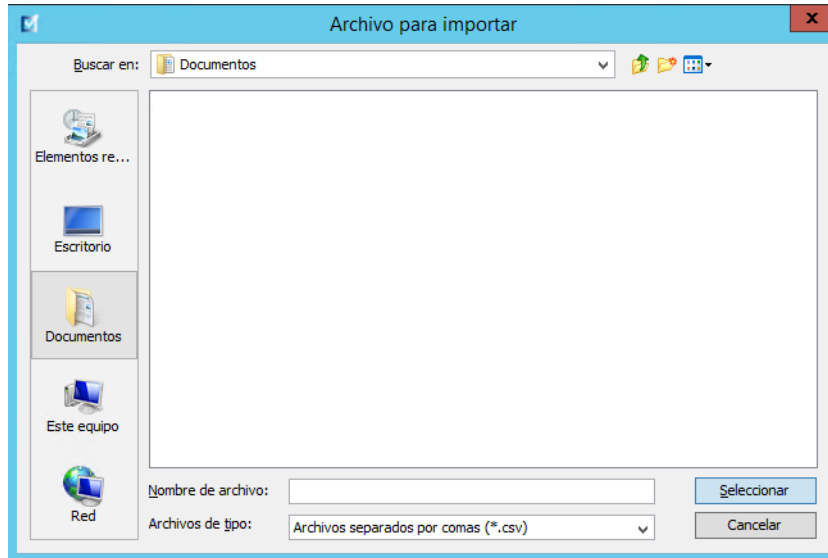

- Haga clic en **Seleccionar**. Aparecerá una ventana emergente con una vista previa de los cambios en la lista de medicamentos. Los medicamentos que se están agregando aparecen en verde. Si la lista de medicamentos contiene actualmente medicamentos, los medicamentos que se eliminarán aparecen en rojo y los que se actualizarán, en azul.



- Si está satisfecho con la vista previa, haga clic en **Aceptar**.
- Para impedir la importación, haga clic en **Cancelar**.
- Si selecciona **Aceptar**, aparecerá un mensaje de confirmación de la importación.

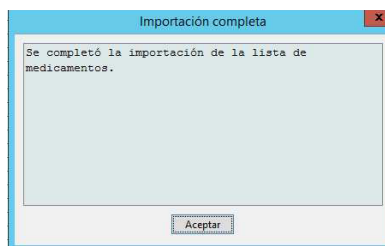

7. Haga clic en **Aceptar**.

Nota: Una vez que se complete, no será posible deshacer la importación de la lista de medicamentos.

Trabajo con la lista de medicamentos

Al importar un archivo de lista de medicamentos, se reemplaza la lista existente. Las entradas de medicamento asociadas a medicamentos que han dejado de figurar en la lista de medicamentos deben eliminarse o reasignarse a un nuevo medicamento antes de poder finalizar la hoja de trabajo.

En la siguiente tabla se resume el comportamiento al importar un nuevo medicamento cuando ya hay medicamentos en la lista:

Medicamento presente en la lista de medicamentos	Medicamento presente en el archivo de importación	Acción
Y	N	Quitado
Y	Y	Actualizado
N	Y	Agregado

Vista Lista de medicamentos

Aparecerá la vista Lista de medicamentos:

- Nombre genérico
- Denominación comercial
- ID externo
- Concentración
- Volumen
- Presentación farmacéutica
- Recibido/Actualizado
- Estado

Puede filtrar los medicamentos mostrados por:

- medicamentos activos
- medicamentos activos y pendientes
- medicamentos pendientes

con

- cualquier nombre genérico o ID externo
- nombres genéricos que empiecen por (cualquier carácter)
- ID externos que empiecen por (cualquier carácter)

Nombre genérico	Denominación comercial	ID externo	Concentración	Volumen	Presentación farm...	Recibido/Actua...	Estado
Ciclofosfamida		074	1000 mg			05/04/2016 19:44	activo
Ciprofloxacino		044	100 mg	10 mL		05/04/2016 19:44	activo
Cisatracurio		013	10 mg			05/04/2016 19:44	activo
Claritromicina		061	500 mg			05/04/2016 19:44	activo
Clindamicina Fosfato		045	600 mg	4 mL		05/04/2016 19:44	activo
Cloruro de potasio		022	20 mEqu	10 mL		05/04/2016 19:44	activo
Cloruro de sodio		023	3 %	500 mL		05/04/2016 19:44	activo
Colistina		046	100 mg			05/04/2016 19:44	activo
Colistina		047	150 mg			05/04/2016 19:44	activo
Daptomicina		048	500 mg			05/04/2016 19:44	activo
Dexmedetomidina	Precedex	014	200 mcg	2 mL		05/04/2016 19:44	activo
Dextrosa 10%		093	10 %			05/04/2016 19:44	activo
Dextrosa 5%		092	5 %			05/04/2016 19:44	activo
Dipirone		075	1000 mg	2 mL		05/04/2016 19:44	activo
Dipirone		015	1 gr	2 mL		05/04/2016 19:44	activo
Dobutamina		003	250 mg	20 mL		05/04/2016 19:44	activo
Dopamina		004	200 mg	5 mL		05/04/2016 19:44	activo
Doripenem		049	500 mg			05/04/2016 19:44	activo
Ertapenem		050	1000 mg			05/04/2016 19:44	activo
Esomeprazol		076	40 mg			05/04/2016 19:44	activo
Fenitoina		082	250 mg	5 mL		05/04/2016 19:44	activo
Fentanyl		016	500 mcg	10 mL		05/04/2016 19:44	activo
Fluconazol		051	200 mg	100 mL		05/04/2016 19:44	activo
Fosfato de potasio	fosfafo de potasio	095	2,3 mM	10		05/04/2016 19:44	activo
Fosfato de sodio		024	0,1 mmosm	20 mL		05/04/2016 19:44	activo
Furosemida		077	20 mg	2 mL		05/04/2016 19:44	activo
Ganciclovir		081	500 mg			05/04/2016 19:44	activo
Gentamicina		052	80 mg	2 mL		05/04/2016 19:44	activo
Gentamicina Sulfato		053	40 mg	1 mL		05/04/2016 19:44	activo
Gentamicina Sulfato		054	160 mg	2 mL		05/04/2016 19:44	activo
Gluconato de calcio		025	10 %	10 mL		05/04/2016 19:44	activo
Heparina sodica		078	25000 unidades	5 mL		05/04/2016 19:44	activo
Hidrocortisona		079	100 mg			05/04/2016 19:44	activo
Hidroxiethylmidon		090				05/04/2016 19:44	activo

Adición de un medicamento

1. Haga clic en la pestaña **Lista de medicamentos**.



2. Haga clic en **Agregar**. Aparecerá la pantalla Agregar medicamento.

The 'Agregar medicamento' form contains the following fields and tables:

- Nombre genérico:
- Denominación comercial:
- ID externo: NDC:
- Cantidad: Unidad:
- Concentración:
- Volumen:
- Clase terapéutica:
- Nombre:
- Descripción:
- Table 1:

Código	Descripción
class_09	Class_Descr_09
class_84	Class_Descr_84
class_83	Class_Descr_83
class_82	Class_Descr_82
class_81	Class_Descr_81
class_88	Class_Descr_88
- Presentación farmacéutica:
 - Nombre:
 - Descripción:
 - Table 2:

Código	Descripción
code_5	Description_5_Include
code_6	Description_6_Exclude
code_1	Description_1_Include
code_2	Description_2_Exclude
code_3	Description_3_Include
code_4	Description_4_Exclude
- Estado:
- Fuente: Creado el:
- Última edición el: Última edición por:

Buttons: Guardar, Cancelar, Ayuda

3. Introduzca el nombre del medicamento en el campo **Nombre genérico**. Este campo es obligatorio.
4. Introduzca la Denominación comercial (campo opcional).
5. Introduzca el **ID externo**. Este campo es obligatorio.

6. Introduzca la siguiente información opcional, en caso necesario:

- NDC (código nacional del fármaco)
- Concentración (cantidad y unidad)
- Volumen (cantidad y unidad)
- Código de clase terapéutica y descripción (haga clic en una fila de la tabla para seleccionarla)
- Código de presentación farmacéutica y descripción (haga clic en una fila de la tabla para seleccionarla)

Nota: El contenido de las tablas de clase terapéutica y presentación farmacéutica depende de la información del archivo de importación Lista de medicamentos.

Estado, Fuente, Creado el, Última edición el y Última edición por se rellenarán automáticamente tras la adición del medicamento.


Precaución: Los nombres genéricos no pueden contener los caracteres especiales mayor que (>), menor que (<), et (&), comillas dobles (“) ni comillas simples (‘).




7. Haga clic en **Guardar**.

Edición de un medicamento

1. En la vista Lista de medicamentos, resalte el medicamento que desee editar.

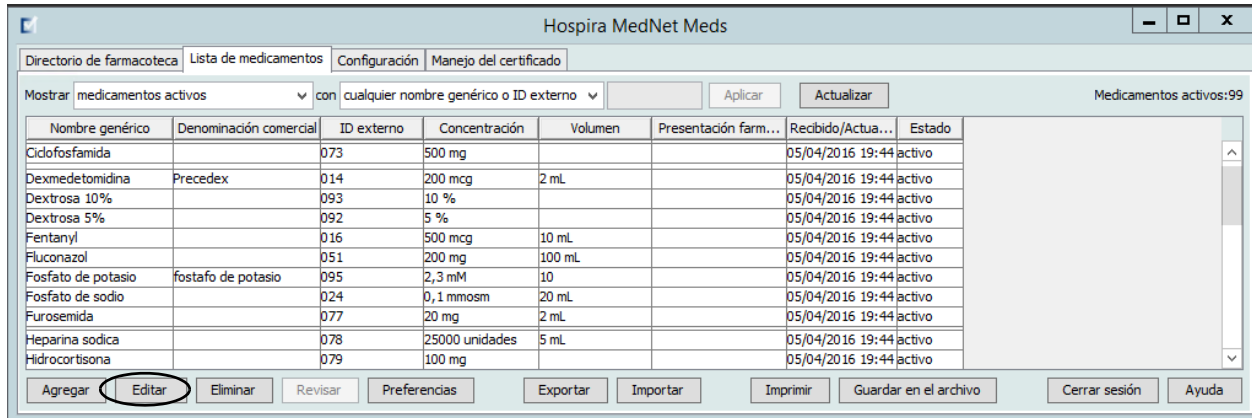

2. Haga clic en **Editar**. Aparecerá la pantalla Editar medicamento.
3. Realice los cambios necesarios.

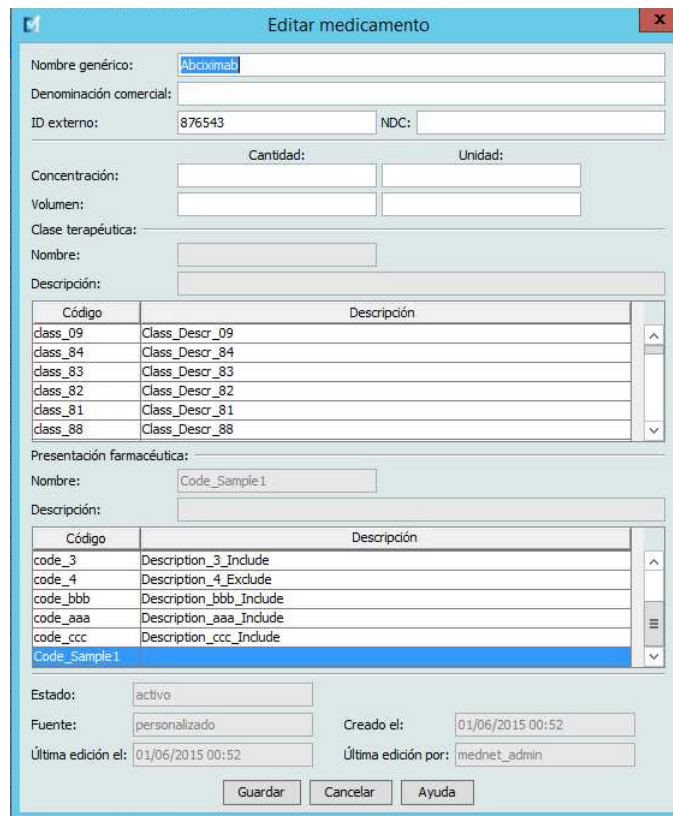


4. Haga clic en **Guardar**.

Eliminación de un medicamento

Para eliminar un medicamento no utilizado en una farmacoteca, haga lo siguiente:

1. En la vista Lista de medicamentos, resalte el medicamento que desee eliminar.

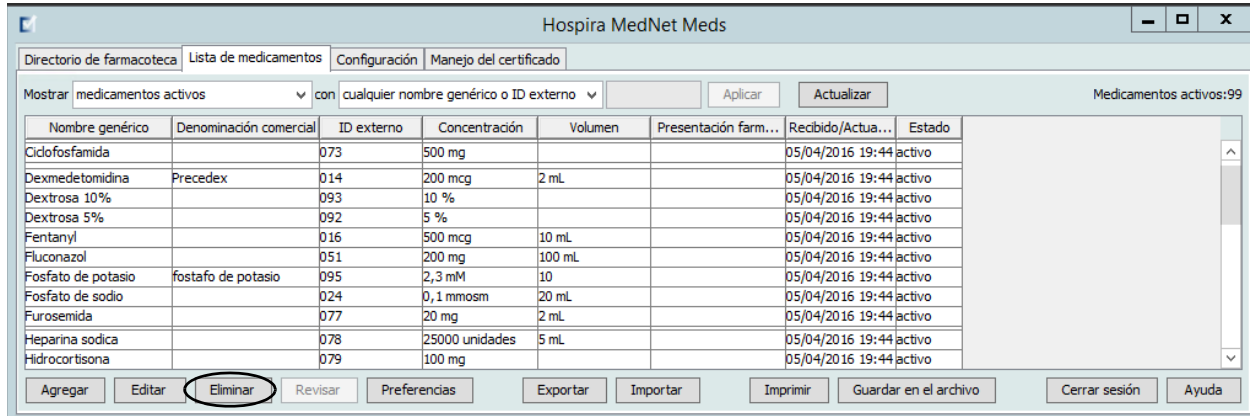

2. Haga clic en **Eliminar**. Aparecerá la pantalla Eliminar medicamento.


The 'Eliminar medicamento' dialog box contains the following fields and lists:

- Nombre genérico: CefoPERAZONE
- Denominación comercial: CefoPERAZONE
- ID externo: EXT_ID_020
- NDC: [Empty]
- Cantidad: [Empty]
- Unidad: [Empty]
- Concentración: [Empty]
- Volumen: [Empty]
- Clase terapéutica:
 - Nombre: class_20
 - Descripción: Class_Descr_20
- Presentación farmacéutica:
 - Nombre: code_2
 - Descripción: Description_2_Exclude
- Estado: activo
- Fuente: importar
- Creado el: 01/06/2015 00:59
- Última edición el: 01/06/2015 00:59
- Última edición por: mednet_admin

Buttons: Eliminar, Cancelar, Ayuda

3. Haga clic en **Eliminar**.


La pantalla de confirmación indica que el medicamento no está en uso en ninguna farmacia.

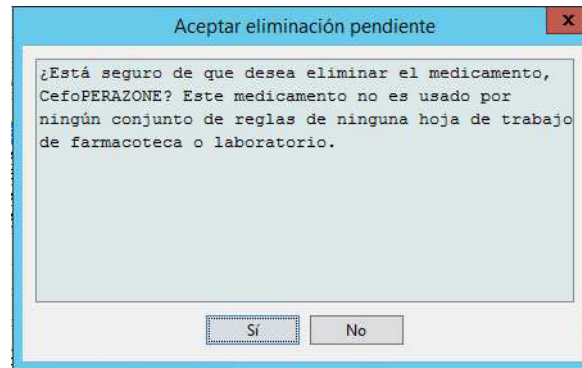

4. Si desea eliminar el medicamento de todos modos, haga clic en **Sí**.

Para eliminar un medicamento utilizado en una farmacia, haga lo siguiente:

1. En la vista Lista de medicamentos, resalte el medicamento que desee eliminar. Aparecerá el desplegable Eliminar medicamento.
2. Haga clic en **Eliminar**. El mensaje emergente indica las farmacias que contienen el medicamento.

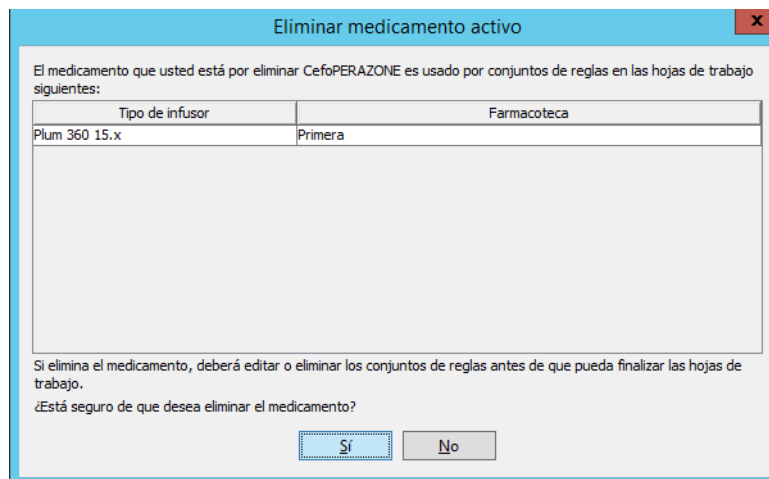


3. Si desea eliminar el medicamento de todos modos después de leer el mensaje, haga clic en **Sí**.


Exportación de una lista de medicamentos

Al seleccionar Exportar, puede exportar un archivo a la ubicación que desee.

1. En la vista Lista de medicamentos, seleccione **Exportar**.

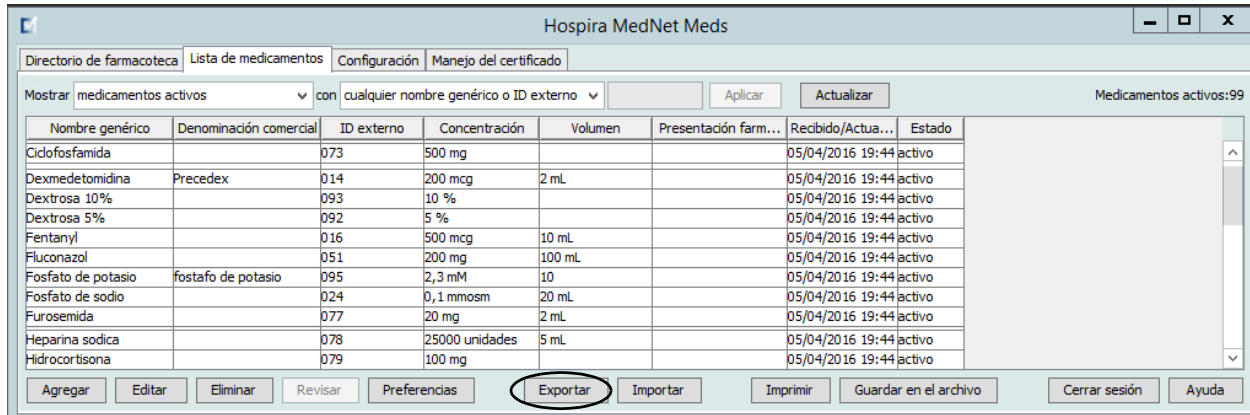

Aparecerá la pantalla Seleccione el contenido del archivo de exportación.

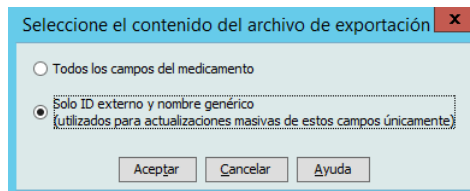


2. Seleccione **Todos los campos del medicamento** o **Solo los ID externos y los nombres genéricos**.

Nota: Al seleccionar que solo desea exportar los ID externos y los nombres genéricos, puede editar esos dos campos y volver a importarlos en la lista de medicamentos.

3. Haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la pantalla Exportar al archivo.

4. Seleccione una ubicación para exportar la lista de medicamentos.

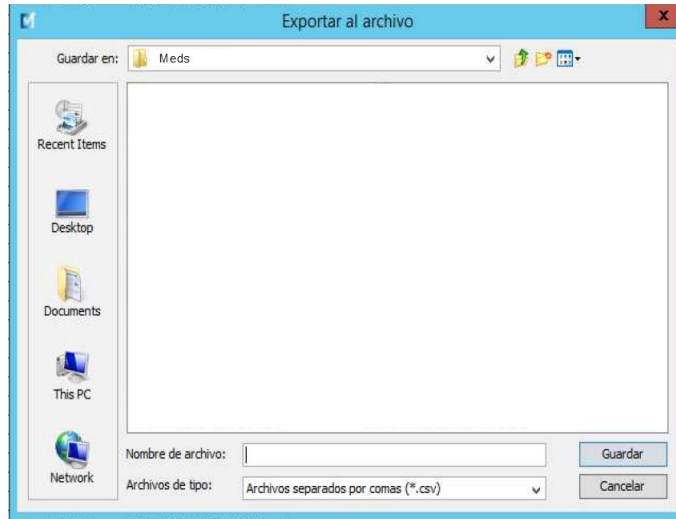


5. Introduzca un nombre de archivo.

Nota: La lista de medicamentos solo puede exportarse en formatos .csv (valores separados por comas) y XML. Si ha seleccionado que desea exportar solo el ID externo y el nombre genérico, debe realizar la exportación en formato .csv.


6. Haga clic en **Guardar**.

Edición de un archivo de ID externo y nombre genérico exportado

1. Seleccione el archivo .csv que ha exportado y haga clic con el botón derecho para acceder al Bloc de notas o a un programa similar.

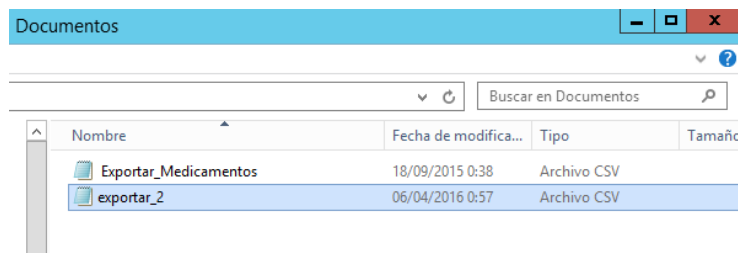


- Haga clic con el botón derecho sobre el nombre del archivo y, con el Bloc de notas o un programa similar, edítelo mediante la adición de un ID externo y un nombre genérico nuevos entre comas.

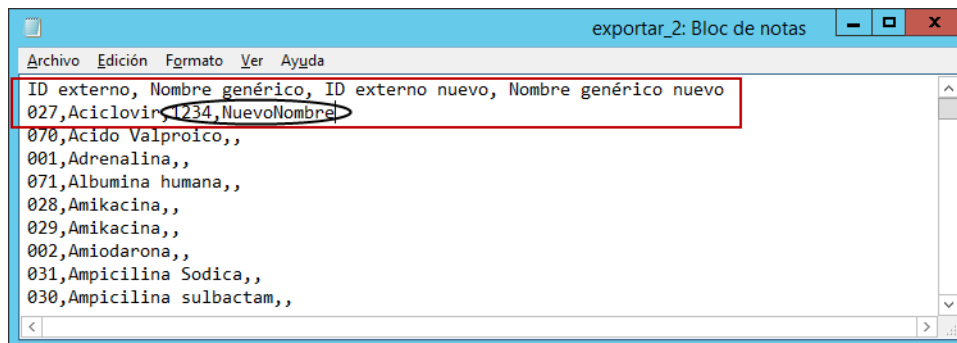



- En el menú Archivo, seleccione **Guardar**.
Ahora puede importar este archivo editado en la lista de medicamentos.

Informe de lista de medicamentos

1. Puede hacer lo siguiente:
 - a. Guardar el informe en formato .html en la ubicación que seleccione al hacer clic en **Guardar en el archivo**;
 - o bien
 - b. Imprimir un informe de los datos mostrados en la vista Lista de medicamentos al hacer clic en el botón **Imprimir**.

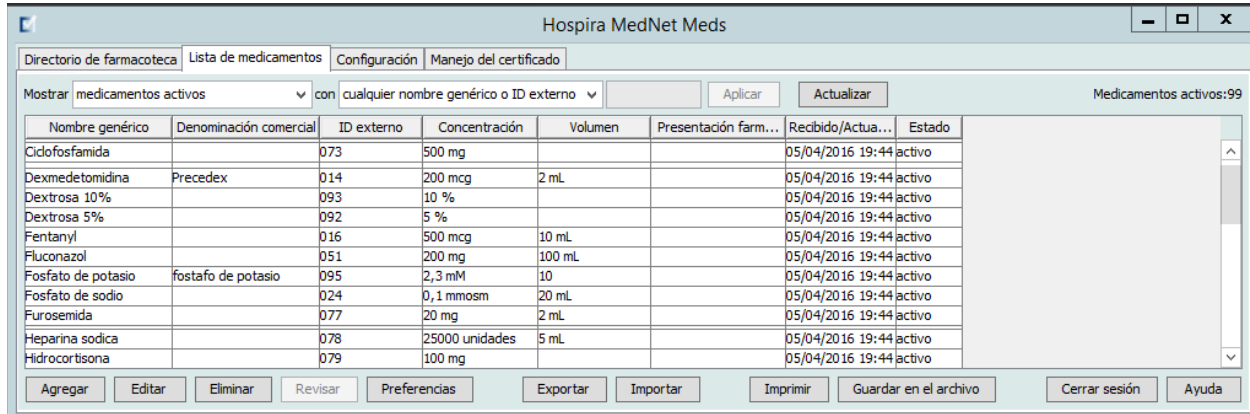

2. Aparecerá la ventana correspondiente:

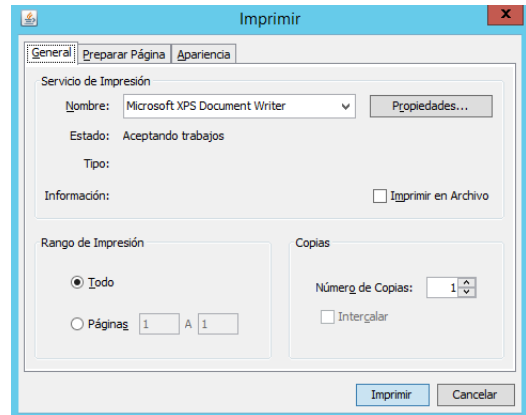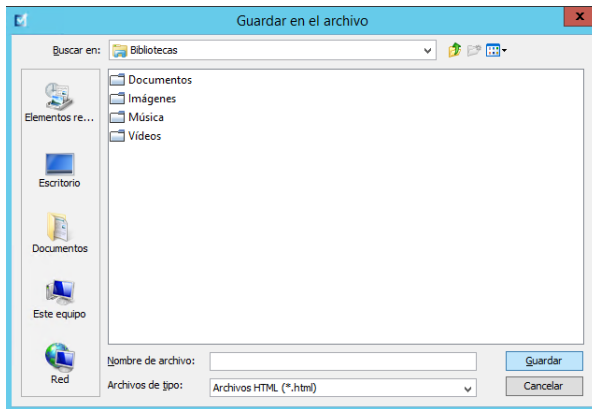

Realice sus selecciones.

3. Haga clic en **Guardar** o **Imprimir**.

Capítulo 5: Directorio de farmacoteca

Introducción

Una farmacoteca es una recopilación de nombres de medicamentos, conjuntos de reglas, Áreas de Atención Clínica (AAC) y ajustes de infusores. Hospira MedNet Meds Software almacena farmacotecas de tres formas:

- Hojas de trabajo
- Farmacotecas activas
- Farmacotecas archivadas

Una *hoja de trabajo* es una farmacoteca que todavía no se ha aprobado (finalizado) para su transferencia a los infusores. Puede almacenar varias hojas de trabajo en la base de datos; sin embargo, solo puede editar una hoja de trabajo cada vez.

Una *farmacoteca activa* es una hoja de trabajo finalizada. (Para obtener más información sobre la finalización, consulte [Finalización de hojas de trabajo](#) en la página 57). Una vez que se finalice una hoja de trabajo, no se pueden realizar más cambios en ella. Solo las farmacotecas activas pueden transferirse a los infusores. Solo puede haber una farmacoteca activa por tipo de infusor simultáneamente en la base de datos de Hospira MedNet Meds Software.

Una *farmacoteca archivada* es una farmacoteca (anteriormente activa) que se ha desactivado para su transferencia a los infusores. Aunque las farmacotecas archivadas pueden copiarse, no pueden editarse ni descargarse en infusores.

A menos que se especifique lo contrario (por ejemplo, "farmacoteca activa"), el término *farmacoteca* utilizado de forma independiente hace referencia tanto a hojas de trabajo como a farmacotecas activas y archivadas.

La *finalización* es el proceso de convertir una hoja de trabajo en una farmacoteca activa.

Al agregar una hoja de trabajo, es necesario configurar los nombres de AAC, los ajustes de los infusores y las entradas de medicamento para crear una farmacoteca completa.

Puede crear hojas de trabajo y farmacotecas de las siguientes formas:

- Mediante la creación de nuevas hojas de trabajo en blanco
- Mediante la copia de farmacotecas existentes o archivadas, o de hojas de trabajo
- Mediante la importación de archivos especiales que Hospira MedNet Meds Software puede convertir en hojas de trabajo

La vista Directorio de farmacoteca muestra la farmacoteca activa de cada tipo de infusor, todas las farmacotecas de hojas de trabajo y todas las farmacotecas archivadas de la base de datos. La siguiente información aparece en la vista Directorio de farmacoteca:

Directorio de farmacoteca	
Campo	Resultado
ID de farmacoteca	Un campo asignado automáticamente por el sistema al crear una hoja de trabajo
Tipo de infusores	El infusor Plum A+® o Plum360
Farmacoteca ¹	El nombre introducido al crear la farmacoteca
Estado de farmacoteca	Se categoriza como una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • Hoja de trabajo • Activo • Archivo
Fecha de modificación	La fecha y la hora de la última modificación de la farmacoteca
Fecha de finalización ²	La fecha y la hora de finalización de la farmacoteca
Versión de farmacoteca de infusión ³	La fecha de finalización, la versión de software y la identificación de farmacoteca asignada a esta en el momento de su creación
Notas de farmacoteca	Información adicional sobre una farmacoteca introducida por el usuario
¹ El nombre de la farmacoteca no puede editarse tras su creación. ² Este campo aparece en blanco si la farmacoteca es una hoja de trabajo. ³ La fecha de finalización se muestra según el estándar GMT (tiempo medio de Greenwich), no en la hora local.	

Convenciones del Directorio de farmacoteca

El Directorio de farmacoteca utiliza las siguientes convenciones:

- Todas las columnas de la vista Directorio de farmacoteca pueden organizarse en orden ascendente o descendente al hacer clic en el encabezado de la columna.
- Puede utilizar las barras de desplazamiento vertical y horizontal para desplazarse a una entrada.
- Al resaltar una entrada de la vista Directorio de farmacoteca, los botones o características que no se encuentren disponibles aparecerán "atenuados" o desactivados.

Procedimientos paso a paso

La siguiente sección presenta procedimientos paso a paso que le permitirán gestionar el Directorio de farmacoteca. En esta sección le mostraremos cómo hacer lo siguiente:

- Desplazarse a la vista de la lista Directorio de farmacoteca
- Crear, editar y agregar notas en una hoja de trabajo
- Eliminar hojas de trabajo y farmacotecas archivadas
- Ver una farmacoteca
- Copiar una farmacoteca
- Importar una farmacoteca
- Exportar una farmacoteca


Para desplazarse a la vista de la lista Directorio de farmacoteca, haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en el icono Hospira MedNet Meds Software en el Escritorio de Windows.
2. Introduzca su **ID de usuario** y su **Contraseña**.

Nota: Para iniciar sesión en la aplicación y realizar los procedimientos de este capítulo, debe tener los privilegios de acceso adecuados.

3. Haga clic en **Iniciar sesión**.


Aparecerá la vista Directorio de farmacoteca.

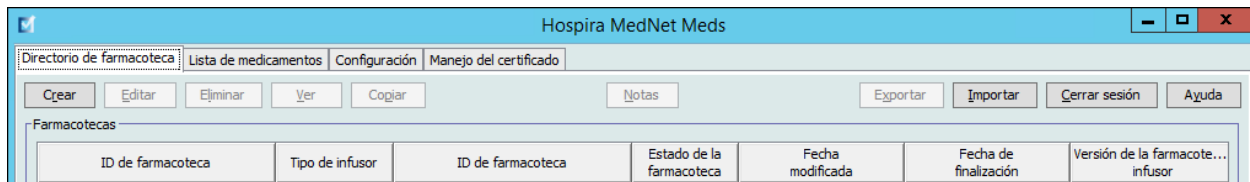


Nota: No aparecerá ninguna entrada en la lista hasta que cree una hoja de trabajo o importe una farmacoteca.

Creación de una hoja de trabajo

1. En la vista Directorio de farmacoteca, haga clic **Crear**.

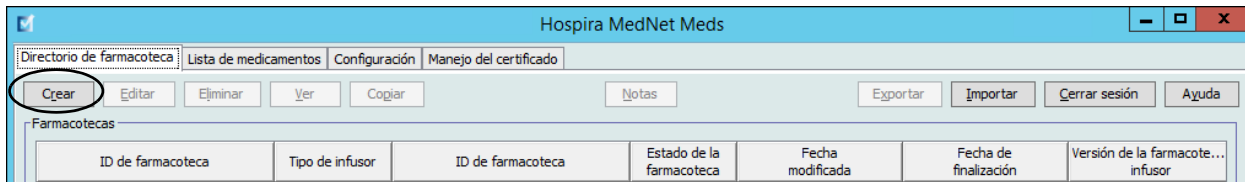

Aparecerá la pantalla Crear hoja de trabajo.

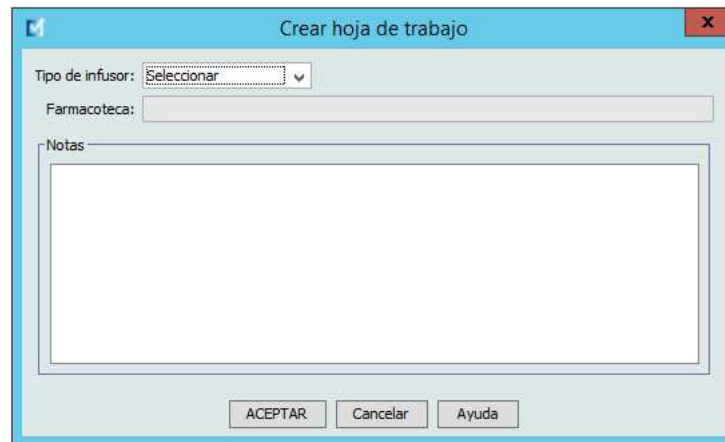

2. En el menú desplegable **Tipo de infusores**, seleccione un tipo de infusor.
3. En el campo **Farmacoteca**, escriba un nombre para la farmacoteca.
4. Si lo desea, introduzca una nota para la farmacoteca.

Nota: La nota puede contener información como "Para la revisión de Farmacia y Terapéutica" u otras sugerencias útiles para que pueda organizarse al crear la farmacoteca.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Se cerrará la pantalla Crear hoja de trabajo y aparecerá la entrada en la vista Directorio de farmacoteca.

Edición de una hoja de trabajo

1. En la vista Directorio de farmacoteca, resalte una hoja de trabajo.
2. Haga clic en **Editar**.
3. Realice los cambios que desee.
4. Haga clic en **Cerrar**.

Se guardará la modificación y aparecerá la vista Directorio de farmacoteca.


Nota: Puede encontrar información adicional sobre la edición de hojas de trabajo en los capítulos específicos del infusor.


Eliminación de una hoja de trabajo o farmacoteca archivada

Puede eliminar hojas de trabajo o farmacotecas archivadas desde el Directorio de farmacoteca. Al eliminar una farmacoteca, se quita del sistema de forma permanente.

Para eliminar una hoja de trabajo o farmacoteca archivada, haga lo siguiente:

1. En la vista Directorio de farmacoteca, resalte una hoja de trabajo o farmacoteca archivada.
2. Haga clic en **Eliminar**.
Se abrirá la pantalla Eliminar farmacoteca.

 **Precaución:** Al eliminar una farmacoteca, se quita del sistema de forma permanente. Es recomendable que se asegure de que se ha realizado una copia de seguridad del sistema antes de eliminar una farmacoteca.

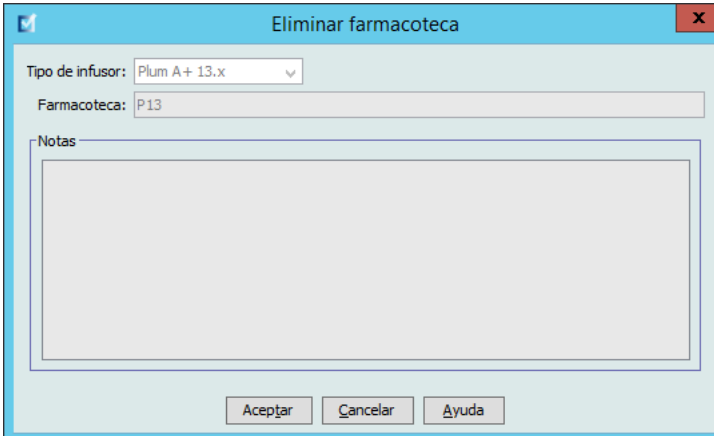

3. Haga clic en **Aceptar**.


La hoja de trabajo o farmacoteca se eliminará de forma permanente y aparecerá la vista Directorio de farmacoteca.

Visualización de una farmacoteca


1. En la vista Directorio de farmacoteca, resalte una farmacoteca.
2. Haga clic en **Ver**.

Aparecerá la vista Gestión de la farmacoteca.

Nota: No es posible realizar cambios al ver una farmacoteca.

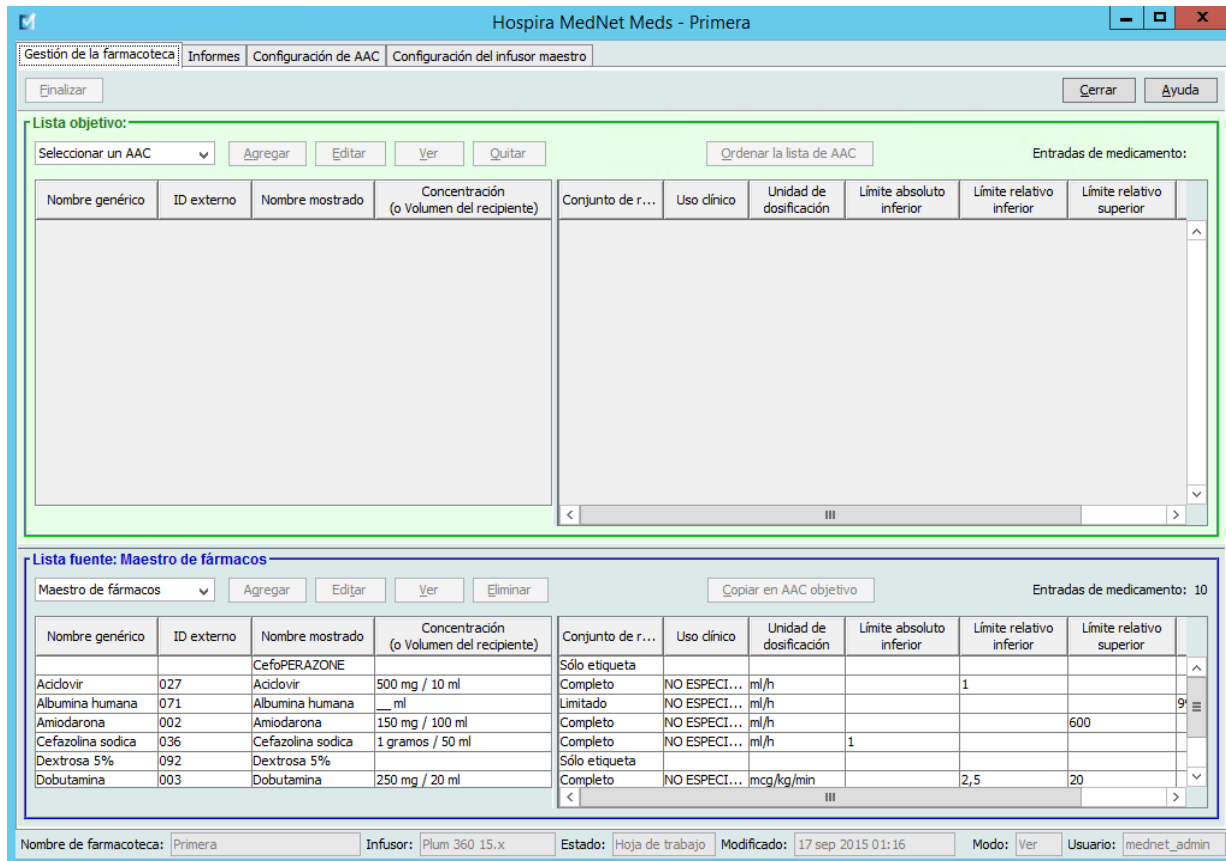

Sugerencia útil: Si desplaza el puntero del mouse sobre cualquier entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, se mostrará "información sobre herramientas" con el nombre genérico y la concentración del medicamento, así como las AAC a las que se ha asignado (obtenga más información a continuación). La información sobre herramientas desaparecerá pasados 5 segundos.

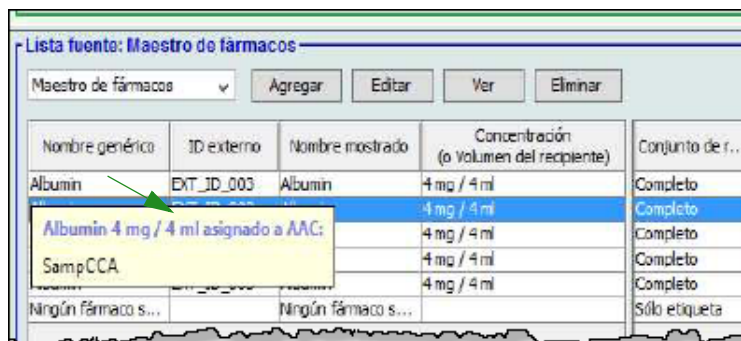


3. Haga clic en **Cerrar** para volver a la vista Directorio de farmacoteca.

Copia de una farmacoteca archivada, una farmacoteca activa o una hoja de trabajo

Para facilitar la creación o la actualización de una farmacoteca, puede copiar farmacotecas activas o archivadas, así como hojas de trabajo. Al copiar una farmacoteca, se incluyen todos los conjuntos de reglas y los ajustes de infusores y AAC. La farmacoteca copiada aparece como una entrada nueva en la vista Directorio de farmacoteca.

1. En la vista Directorio de farmacoteca, resalte la entrada de la farmacoteca que desee.
2. Haga clic en **Copiar**.

Se abrirá la pantalla Copiar farmacoteca.

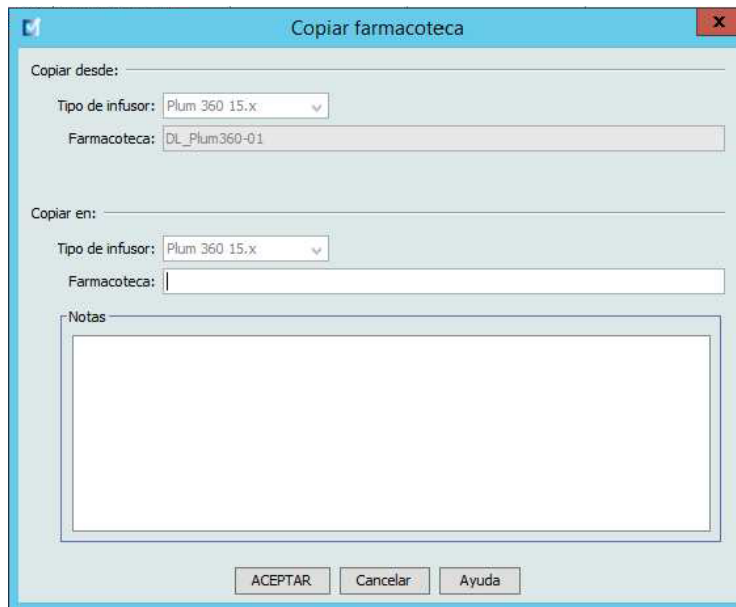

3. En el campo **Farmacoteca** escriba el nombre de la nueva farmacoteca como desee que aparezca en la vista Directorio de farmacoteca.

Nota: Puede introducir información en el campo **Notas**, en caso necesario.


4. Haga clic en **Aceptar**.

Se copiará la farmacoteca. La nueva hoja de trabajo aparecerá en la vista Directorio de farmacoteca.

Nota: Solo es posible realizar copias entre farmacotecas para el mismo tipo de infusor.


Adición o edición de notas en una hoja de trabajo

1. En la vista Directorio de farmacoteca, resalte una hoja de trabajo.
2. Haga clic en **Notas**.

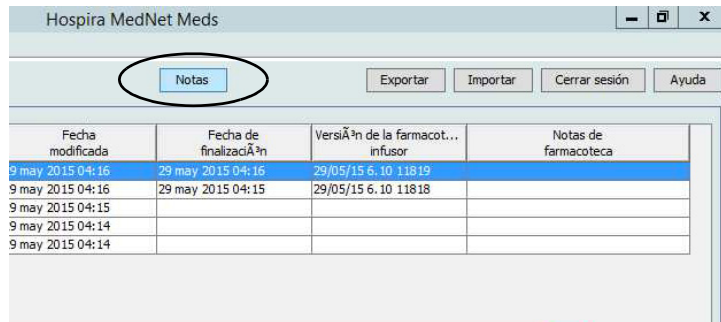

Se abrirá la pantalla Notas.

Nota: Los campos **Tipo de infusores** y **Farmacoteca** no pueden editarse.

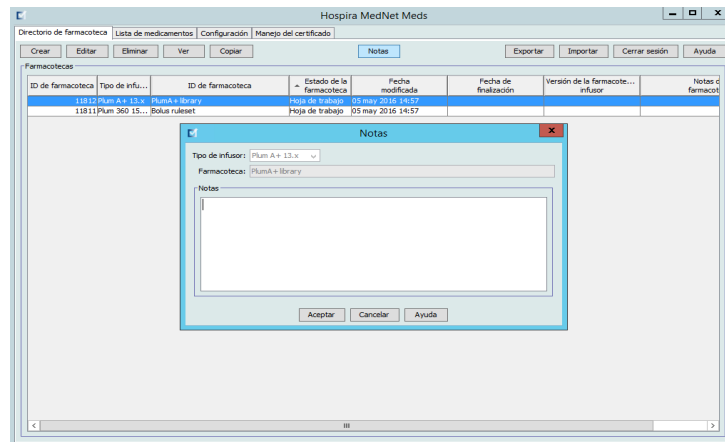

3. Escriba la nota o edite el texto en el campo **Notas**.
4. Haga clic en **Aceptar**. La nota se guarda y aparece en el campo **Notas de farmacoteca** del Directorio de farmacoteca.

Nota: El campo **Notas** no puede modificarse tras la finalización de una farmacoteca.

Exportación de una farmacoteca archivada, farmacoteca activa u hoja de trabajo

Nota: Solo los usuarios con los privilegios de inicio de sesión adecuados pueden exportar archivos.

Puede exportar los conjuntos de reglas de hojas de trabajo, farmacotecas archivadas y farmacotecas activas como archivos XML (lenguaje de marcas extensible).

Nota: Si modifica el archivo XML exportado, no podrá importarlo de nuevo en Hospira MedNet Meds.

También se pueden exportar las hojas de trabajo, las bibliotecas archivadas o las bibliotecas activas como archivos separados por comas (CSV). Los nombres de archivos CSV terminan en ".csv". El archivo puede utilizarse para ver los conjuntos de reglas en Microsoft Excel.


Nota: Los archivos separados por comas no pueden volver a importarse en Hospira MedNet Meds.

Al exportar una hoja de trabajo, una biblioteca archivada o una biblioteca activa, solo se exportarán las entradas de medicamento asignadas a AAC; las entradas de medicamento que solo figuren en el Maestro de fármacos no se exportarán.


Los ajustes de AAC y Maestro de infusores se incluyen en los archivos XML exportados.

Puede exportar una farmacoteca a una ubicación externa de su red o disco duro.


1. En la vista Directorio de farmacoteca, resalte la farmacoteca que desee.
2. Haga clic en **Exportar**.

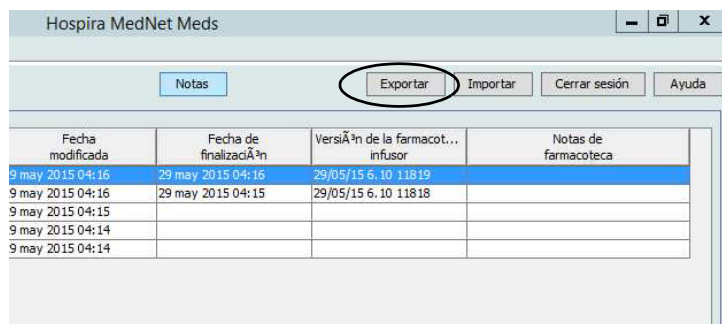

Se abrirá la pantalla Exportar farmacoteca.

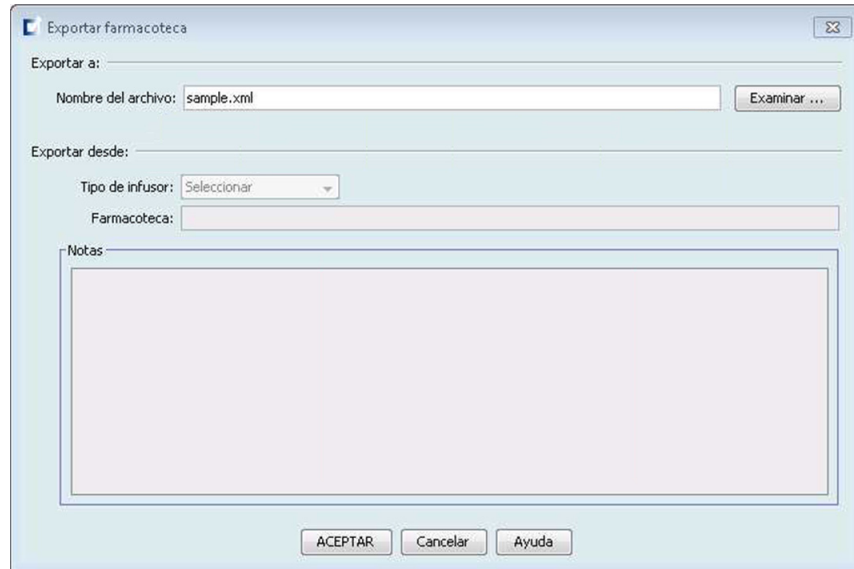

3. Haga clic en **Examinar**.

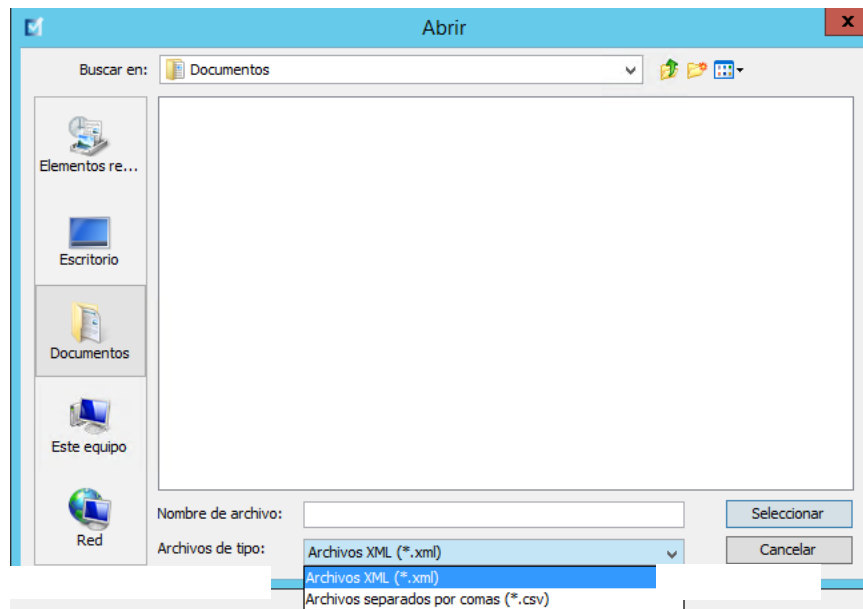


4. En el campo **Nombre del archivo**, escriba una ruta y un nombre para el archivo exportado.
5. Seleccione **Archivos XML** o **Archivos separados por comas (CSV)** en la lista desplegable.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Se cerrará la pantalla Exportar farmacoteca. La farmacoteca se exportará a la ubicación deseada.


Importación de una farmacoteca

Puede importar una farmacoteca de un archivo XML creado por Hospira MedNet Meds. Al importar una farmacoteca, se convierte en una hoja de trabajo. El software valida totalmente las relaciones, la precisión y los rangos de datos antes de agregar datos importados a la base de datos.

1. En la vista Directorio de farmacoteca, haga clic en **Importar**.

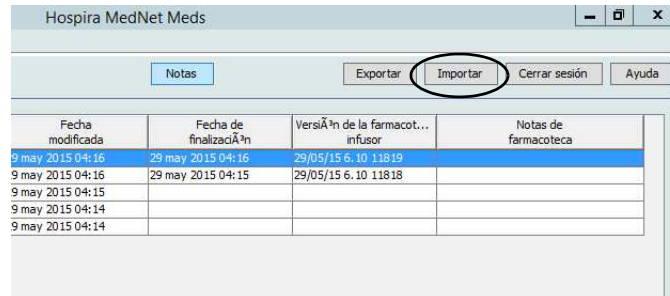

Se abrirá la pantalla Importar farmacoteca.

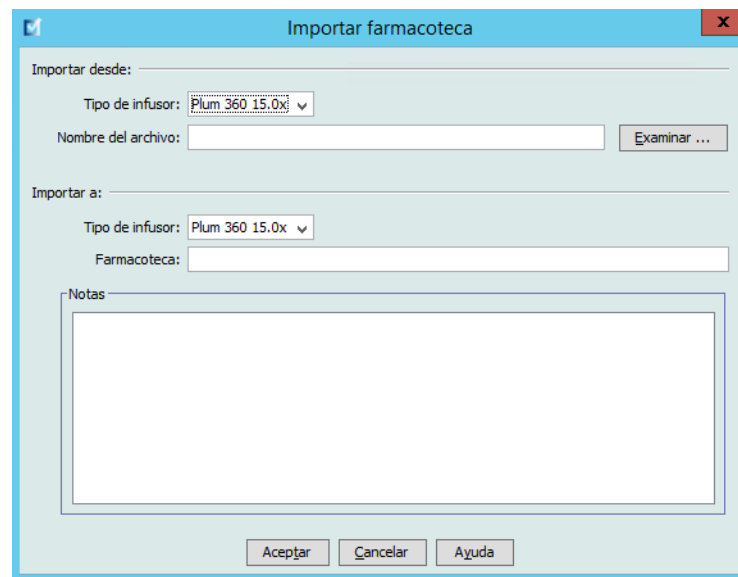

2. En el área de pantalla **Importar desde**, seleccione el **Tipo de infusores** correspondiente a la farmacoteca que va a importar.
3. En el campo **Nombre de archivo:** escriba la ruta y el nombre de archivo de la farmacoteca que desee importar.

Sugerencia útil: Para el nombre de archivo y la ruta, haga clic en **Examinar** y desplácese al archivo que desee.

4. En el área de pantalla **Importar a**, seleccione el **Tipo de infusores** correspondiente a la farmacoteca que va a importar.
5. En el campo **Farmacoteca**, escriba el nombre de la farmacoteca importada, como desearía que aparezca en la vista Directorio de farmacoteca.

Nota: Puede introducir información en el campo **Notas**, en caso necesario.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Se cerrará la pantalla Importar farmacoteca y la hoja de trabajo recién importada aparecerá en la vista Directorio de farmacoteca.

Nota: Se importará una farmacoteca con una o varias entradas de medicamento que hacen referencia a un medicamento que no aparece en la lista de medicamentos. Para finalizar la farmacoteca, es necesario asignar todas las entradas de medicamento a medicamentos de la lista de medicamentos.

Si el archivo que está intentando importar contiene datos inutilizables, aparecerá un mensaje de error en el software y el archivo no se importará.



ADVERTENCIA: Si realiza cambios en un archivo XML exportado, el archivo no podrá importarse.

Notas:

Capítulo 6: Gestión de la farmacoteca

Introducción

La vista Gestión de la farmacoteca le permite crear, editar y eliminar límites de seguridad para las entradas de medicamentos utilizadas por los infusores. Posteriormente, los conjuntos de reglas utilizados en la farmacoteca incorporan directamente los límites de seguridad establecidos.

La vista Gestión de la farmacoteca aparece al abrir una hoja de trabajo o una biblioteca activa o archivada. Esta vista está formada por dos paneles en los que aparecen las listas de medicamentos objetivo y fuente asociadas a AAC individuales y el Maestro de fármacos. Al crear un AAC, los medicamentos que tiene asignados aparecerán en el panel Lista objetivo en la parte superior de la vista. La lista completa de medicamentos disponible en el Maestro de fármacos aparece en el panel Lista fuente en la parte inferior de la vista. El Maestro de fármacos es la lista completa de medicamentos y conjuntos de reglas definidos para una farmacoteca.

La lista desplegable de cada panel muestra las AAC definidas para la biblioteca. Las funciones (botones) activas disponibles en la vista Gestión de la farmacoteca variarán dependiendo del tipo de biblioteca que haya abierto y de si hay AAC abiertas o no. Las funciones que no estén disponibles en esta vista aparecerán atenuadas.

Lista objetivo:

Seleccionar un AAC Entradas de medicamento:

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjunto de r...	Uso clínico	Unidad de dosificación	Límite absoluto inferior	Límite relativo inferior	Límite relativo superior

Lista fuente: Maestro de fármacos

Maestro de fármacos Entradas de medicamento: 10

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjunto de r...	Uso clínico	Unidad de dosificación	Límite absoluto inferior	Límite relativo inferior	Límite relativo superior
		CefoPERAZONE		Sólo etiqueta					
Aciclovir	027	Aciclovir	500 mg / 10 ml	Completo	NO ESPECI...	ml/h		1	
Albumina humana	071	Albumina humana	_ ml	Limitado	NO ESPECI...	ml/h			600
Amiodarona	002	Amiodarona	150 mg / 100 ml	Completo	NO ESPECI...	ml/h			
Cefazolina sodica	036	Cefazolina sodica	1 gramos / 50 ml	Completo	NO ESPECI...	ml/h	1		
Dextrosa 5%	092	Dextrosa 5%		Sólo etiqueta					
Dobutamina	003	Dobutamina	250 mg / 20 ml	Completo	NO ESPECI...	mccg/kg/min		2,5	20

Nombre de farmacoteca: Primera Infusor: Plum 360 15.x Estado: Hoja de trabajo Modificado: 17 sep 2015 01:16 Modo: Ver Usuario: mednet_admin

Nota: El maestro de fármacos (MDF) contiene una lista de medicamentos disponibles para que los utilicen las AAC de la farmacoteca. La lista MDF actúa como "matriz" de las entradas de medicamentos de Lista objetivo.

Para crear y completar una farmacoteca adecuada para su transferencia a un infusor, deberá hacer lo siguiente:

- Defina las AAC que desee.
Consulte: [Capítulo 8: Configuración de AAC](#) en la página 73
- Cree las entradas de medicamentos.
Consulte: [Capítulo 9: Entradas de medicamento de Plum A+ y Plum 360](#) en la página 87
- Organice la lista de medicamentos en el orden deseado.
Consulte: [Modificación del orden de visualización de entradas de medicamento](#) en la página 46
- Defina los ajustes del Maestro de infusores.
Consulte: [Capítulo 10: Configuración del infusor maestro](#) en la página 147

Convenciones de Gestión de la farmacoteca

La vista Gestión de la farmacoteca utiliza las siguientes convenciones:

- Los campos de los paneles Lista objetivo y Lista fuente son idénticos.
- La cuadrícula de la lista incluye una barra dividida móvil detrás de la cuarta columna. Las columnas restantes se encuentran debajo de las tres primeras.
- Los paneles Lista objetivo y Lista fuente incluyen un campo de solo lectura en el que se muestra el número total de medicamentos de una lista seleccionada.
- Puede cambiar el tamaño de todas las columnas. Además, puede organizarlas en orden ascendente o descendente al hacer clic en el encabezado de la columna.
- La vista incluye una barra de estado inferior de solo lectura donde se muestran el nombre de la farmacoteca, el infusor, el estado, la fecha de modificación, el modo y el usuario.
- Las comas (,), las comillas dobles (") y los paréntesis angulares (< >) no se consideran caracteres válidos y no se pueden utilizar en el nombre.

Gestión de farmacotecas

Los siguientes procedimientos le permiten gestionar farmacotecas para cada infusor. Los datos que aparecen en los paneles destino y fuente serán diferentes para cada infusor, así como coherentes con la entrada de medicamento del infusor.

Procedimientos de Lista objetivo

- Visualización de entradas de medicamento en un AAC
- Eliminación de entradas de medicamento de un AAC
- Modificación del orden de visualización de entradas de medicamento

Procedimientos de Lista fuente

- Visualización de entradas de medicamento en el Maestro de fármacos
- Copia de entradas de medicamento de un AAC a otra
- Eliminación de entradas de medicamento del Maestro de fármacos

Procedimientos generales

- Finalización de hojas de trabajo
- Cierre de hojas de trabajo



Precaución: En el caso de una programación automática, si Hospira MedNet Software no encuentra ningún conjunto de reglas que coincida, el pedido se enviará al infusor de "Ningún fármaco seleccionado" (depende de las AAC y del infusor) y los datos del pedido se enviarán al infusor. No hay límites de conjuntos de reglas disponibles para este pedido. Si el pedido es una programación automática parcial, los parámetros restantes se programarán automáticamente. Consulte el manual operativo del infusor específico para obtener información adicional.

Visualización de entradas de medicamento en un AAC

1. Desde la vista Directorio de farmacoteca, resalte una hoja de trabajo.
2. Haga clic en **Editar** o **Ver**.
Se abre la vista Gestión de la farmacoteca.
3. En Lista objetivo, seleccione la AAC que contenga la entrada de medicamento que desee ver.

3

4

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjunt
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo etic
Acidovir	027	Acidovir	500 mg / 10 ml	Comple
Amiodarona	002	Amiodarona	150 mg / 100 ml	Comple
Dextrosa 5%	092	Dextrosa 5%		Sólo etic
Furosemida	077	Furosemida	20 mg / 2 ml	Comple
Heparina sodica	078	Heparina sodica	25000 Unidades / 5 ml	Comple
Albumina humana	071	Albumina humana	__ ml	Limitad

4. Seleccione la entrada de medicamento.
5. En Lista objetivo, haga clic en **Ver**.
6. Cuando termine de ver la entrada de medicamento, haga clic en **Cerrar**.

Lista objetivo: Ver conjunto de reglas

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):
Heparina sodica (078) (25000 unidades / 5 mL) [Seleccionar]

Nombre mostrado: Heparina sodica Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Heparina sodica 25000 Unidades / 5 mL para uso clínico "___" dosificados en unids./h

Conjuntos de reglas:
Completo

Concentración
Cantidad de medicamento: 25000 Unidad de medicamento: Unidades Cantidad de diluyente: mL: 5

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)
Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.


Límites de dosis
Unidad de dosificación: unids./h LAI: LRI: LRS: 2000 LAS:

[Cerrar] [Ayuda]


Eliminación de entradas de medicamento de un AAC

Nota: Solo los usuarios que tengan los privilegios de inicio de sesión adecuados podrán agregar y eliminar las entradas de medicamento de las AAC.

1. En la vista Directorio de farmacoteca, abra una hoja de trabajo para editarla.
2. En Lista objetivo, seleccione el AAC que contenga la entrada de medicamento que desee quitar.

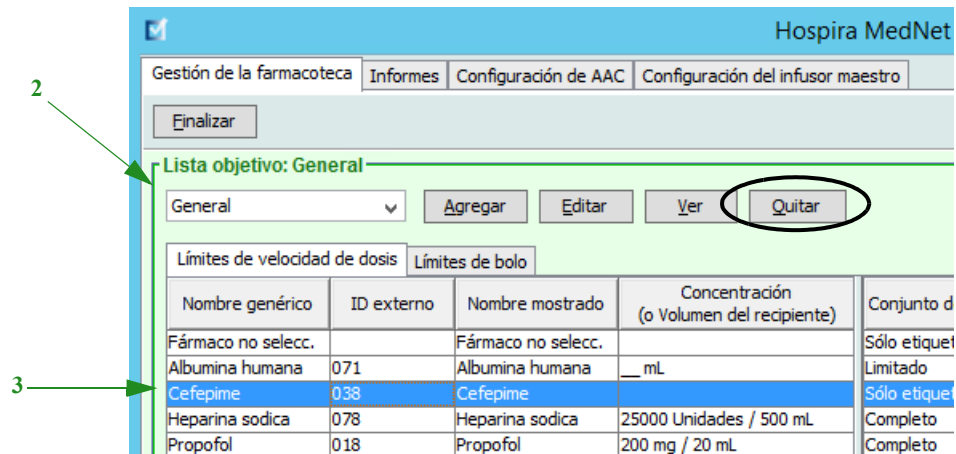

3. Seleccione la entrada de medicamento que se quitará.
4. En Lista objetivo, haga clic en **Quitar**.
5. En **Confirmar quitar** de AAC, haga clic en **Quitar**.

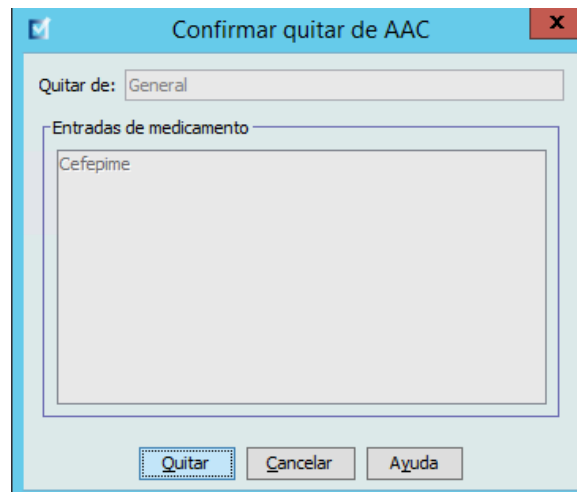

Nota: Puede eliminar los medicamentos de uno en uno desde el Maestro de fármacos o puede eliminar varios a la vez resaltándolos, utilizando las teclas Mayúsculas o Control, y eliminándolos.


Modificación del orden de visualización de entradas de medicamento

Nota: Solo los usuarios con los privilegios de inicio de sesión adecuados pueden cambiar el orden de las entradas de medicamento.

Importante: El orden en que aparecen los medicamentos en el panel Lista objetivo puede no coincidir con el orden en que aparecerán en el infusor.

Para cambiar o ver el orden en que se muestran las entradas de medicamento, haga lo siguiente:


1. En Lista objetivo, seleccione un AAC.
2. Haga clic en **Ordenar la lista de AAC**.

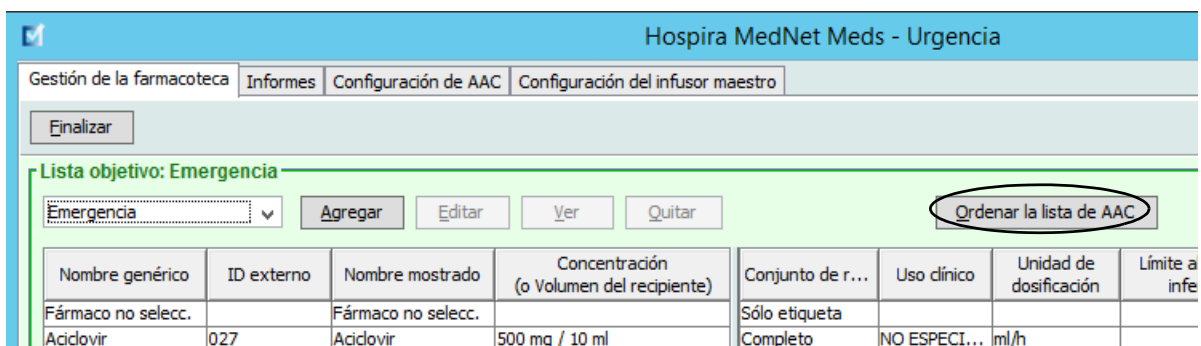

3. Seleccione la entrada de medicamento que desee mover.

Sugerencia útil: Puede seleccionar varios medicamentos para moverlos si los resalta.

4. Haga clic en **Subir** o **Bajar** para colocar las entradas de medicamento seleccionadas.

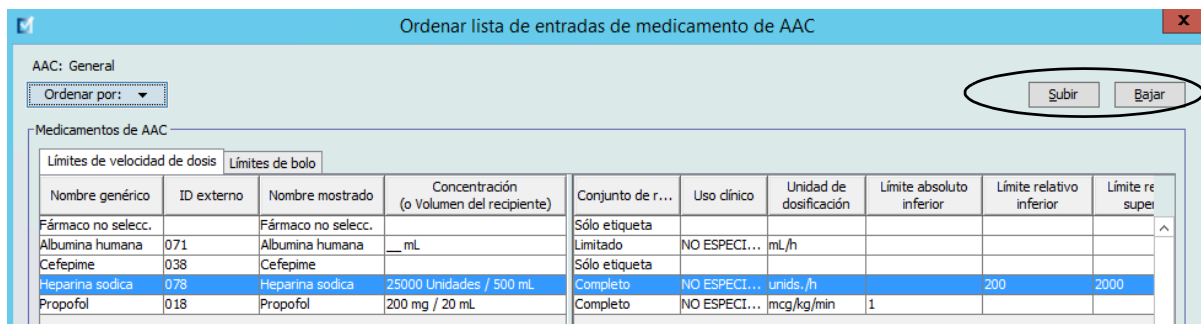


5. Repita el procedimiento para todas las entradas de medicamento, según corresponda.
6. Haga clic en **Guardar**.

Las entradas de medicamento recién agregadas a un AAC se colocan en la parte inferior de la lista de medicamentos asignados.

Ordenación de entradas de medicamento en un AAC:

1. En la vista Directorio de farmacoteca, abra una hoja de trabajo para editarla.
2. En la vista Gestión de la farmacoteca, seleccione un AAC de la Lista objetivo.
3. Haga clic en **Ordenar la lista de AAC**.

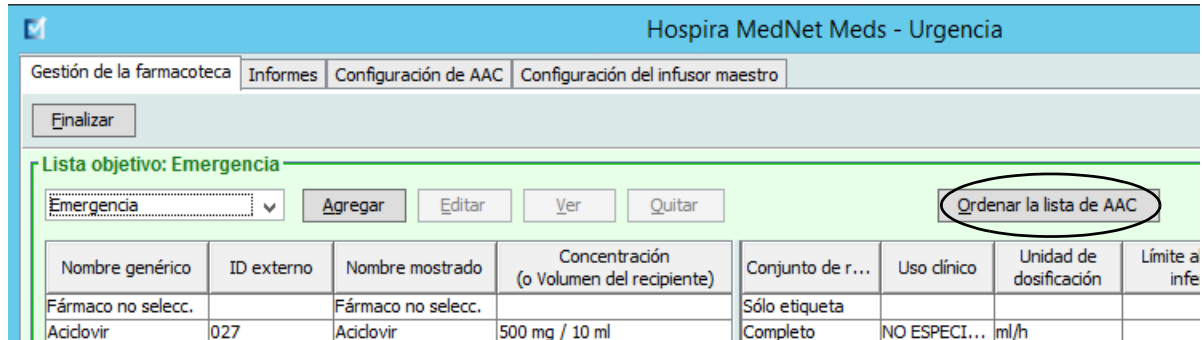


4. En el mensaje emergente que aparece, en la lista **Ordenar por**, seleccione el criterio de ordenación principal en la lista. La selección variará según el infusor.



5. En la lista **Después por**, seleccione el criterio de ordenación secundario si lo desea.
6. Haga clic en **Ordenar**.


En las Plum 360, el botón **Ordenar por** le permite ordenar por el nombre mostrado en orden ascendente o descendente. Las entradas de medicamento con el mismo nombre mostrado permanecerán juntos. (Consulte la matriz de compatibilidad de dispositivos con Hospira MedNet Software para determinar la disponibilidad de las versiones de Plum. La matriz se encuentra disponible a través de Advanced Knowledge Center).

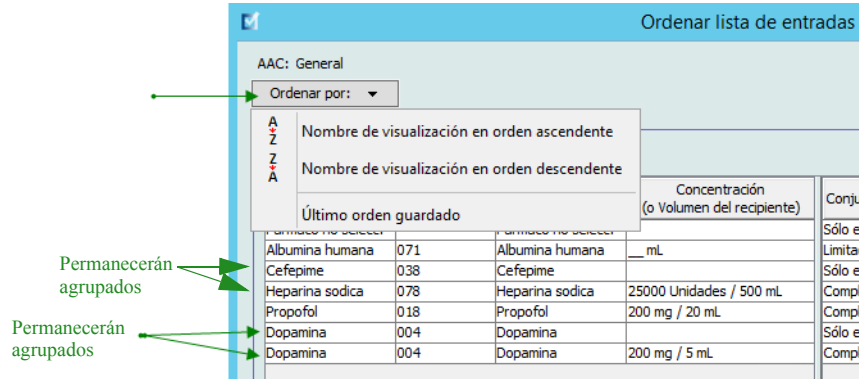


Visualización de entradas de medicamento en el Maestro de fármacos

Para ver una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, haga lo siguiente:


1. Seleccione **Maestro de fármacos** como ubicación fuente.

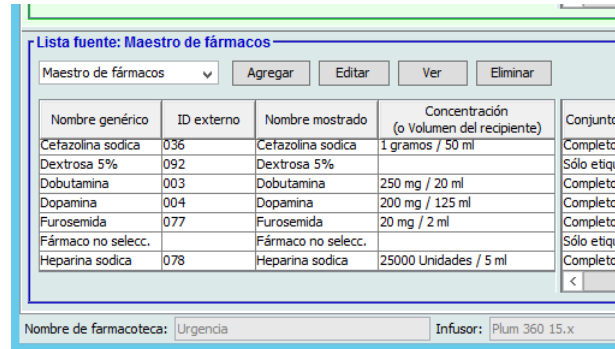

Sugerencia útil: Al desplazar el puntero del mouse sobre cualquier entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, aparecerá "información sobre herramientas" donde se muestra el nombre genérico y la concentración del medicamento, así como las AAC a las que se ha asignado. La información sobre herramientas desaparecerá pasados 5 segundos.

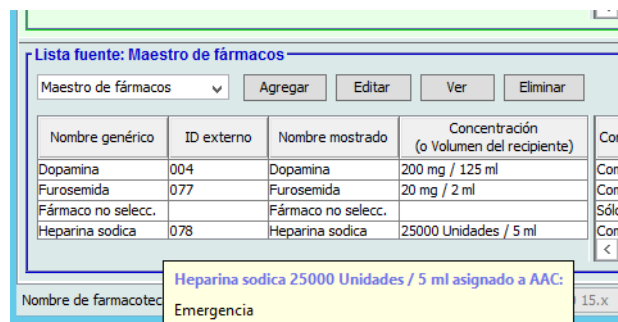

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee ver.
3. En Lista fuente, haga clic en **Ver**. La pantalla Lista fuente: Ver conjunto de reglas: aparecerá.

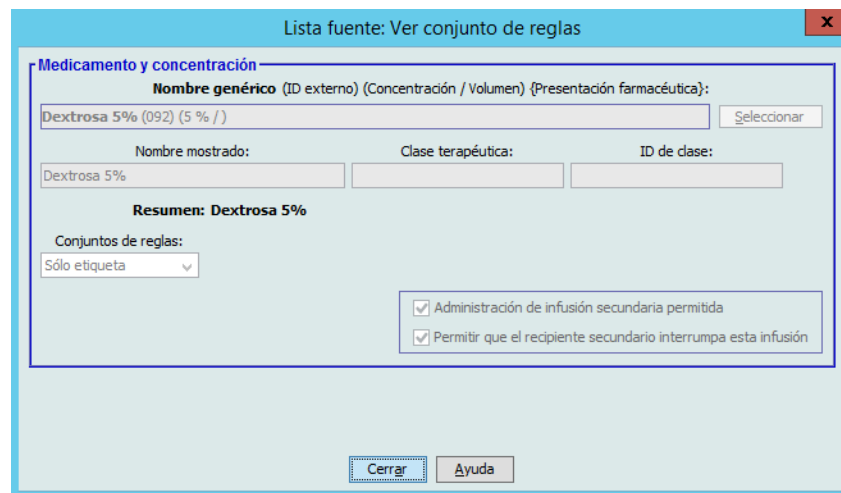


4. Cuando termine de verla, haga clic en **Cerrar**.

Sugerencia útil: Si está viendo una farmacoteca activa o archivada, también puede hacer doble clic en la entrada de medicamento para verla.

Mantenimiento o borrado de conjuntos de reglas para entradas de medicamento

1. Resalte una entrada de medicamento con los conjuntos de reglas existentes, en el Maestro de fármacos de Lista fuente o Lista objetivo.
2. Haga clic en **Editar**.

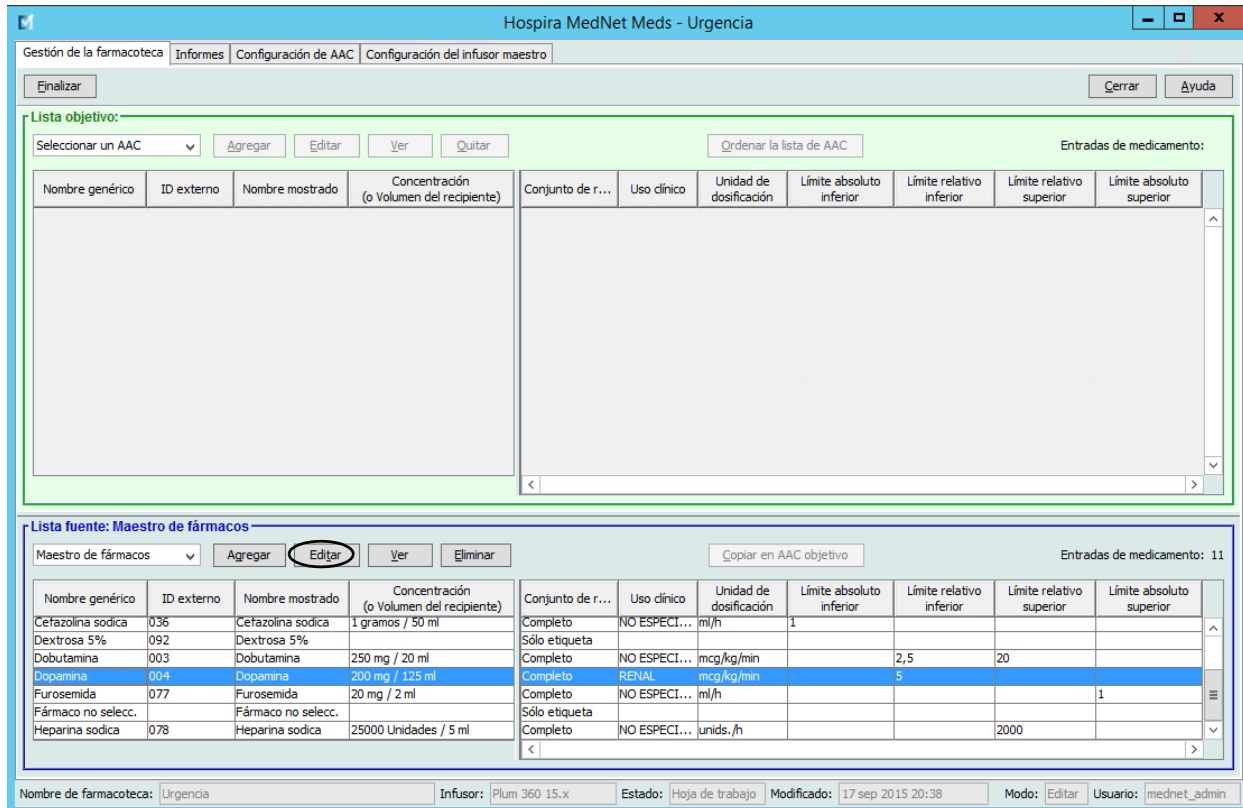

La entrada de medicamento seleccionada aparece con sus conjuntos de reglas.

3. Haga clic en **Seleccionar**.

Lista fuente: Editar conjunto de reglas

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica):
Dopamina (004) (200 mg / 5 mL) **Seleccionar**

Nombre mostrado: Dopamina Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Dopamina 200 mg / 125 mL para uso clínico "RENAL" dosificados en mcg/kg/min

Conjuntos de reglas:
Completo

Concentración

Cantidad de medicamento: 200 Unidad de medicamento: mg Cantidad de diluyente: mL: 125

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)
RENAL

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.


Límites de dosis

Unidad de dosificación: mcg/kg/min LAI: LRI: 5 LRS: LAS:

Guardar y cerrar Cancelar Ayuda

En este punto, podrá aplicar el conjunto de reglas actual a otro medicamento o seleccionar el medicamento resaltado y borrar su conjunto de reglas actual.

4. Si hace clic en **Seleccionar el medicamento y BORRAR el conjunto de reglas actual**, aparece un mensaje de confirmación: **El conjunto de reglas se restablecerá a los valores predeterminados.**
5. Haga clic en **Aceptar** y aparecerá la entrada de medicamento seleccionada, pero los campos del conjunto de reglas estarán vacíos.
6. Ahora puede rellenar el nuevo conjunto de reglas y, a continuación, hacer clic en **Guardar y cerrar** cuando se sienta satisfecho, o utilizar el botón **Cancelar**.

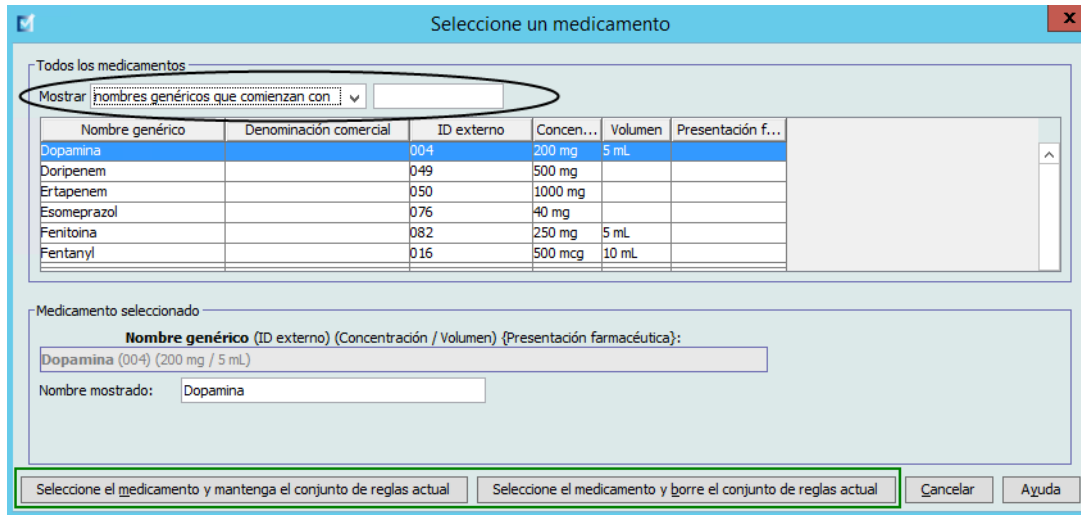

7. Si desea mantener el conjunto de reglas de la entrada de medicamento resaltado, pero quiere aplicar dicho conjunto de reglas a otro medicamento, haga lo siguiente:
 - Resalte la entrada de medicamento "nueva".

Sugerencia útil: Para seleccionar el medicamento, puede utilizar la barra de desplazamiento o escribir las primeras letras del medicamento o el nombre completo junto a **Mostrar nombres genéricos que empiecen por**. También puede encontrar el medicamento por su ID externo si utiliza el botón desplegable. Para ello, indique que desea mostrar el medicamento utilizando el **ID externo** y, a continuación, introdúzcalo.


- Haga clic en **Seleccionar el medicamento y MANTENER el conjunto de reglas actual**.

Aparecerá un mensaje de confirmación: **Revise los valores del conjunto de reglas antes de guardar dicho conjunto.**


8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Aparecerá la nueva entrada. Haga clic en **Guardar y cerrar** si está satisfecho con la entrada. En caso contrario, utilice el botón **Cancelar**.

Copia de entradas de medicamento en una o varias AAC

1. Seleccione el AAC objetivo en la que desee copiar una entrada de medicamento.

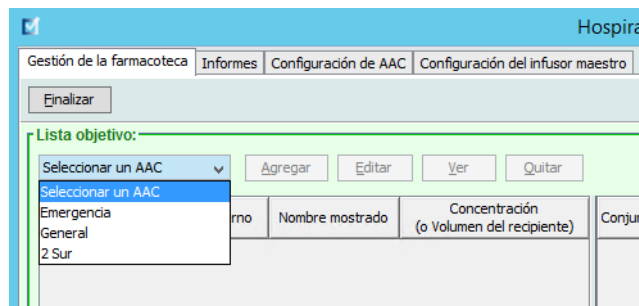


2. Seleccione el Maestro de fármacos o el ACC fuente cuya entrada de medicamento desee copiar (tanto el Maestro de fármacos como otra AAC).

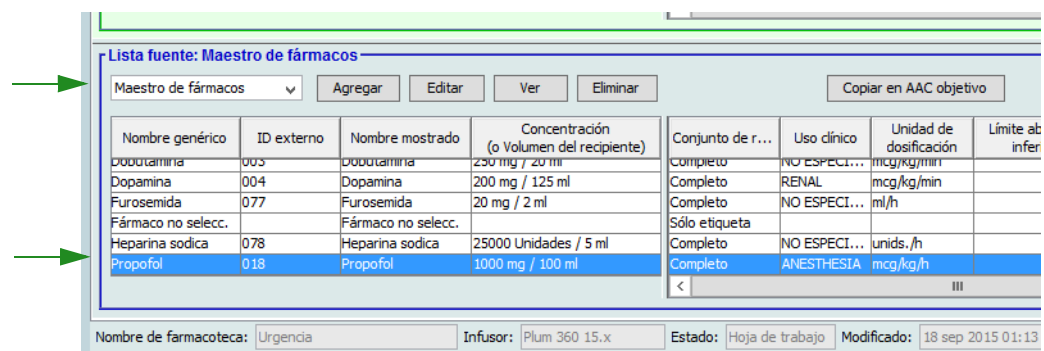


3. Seleccione las entradas de medicamento que desee copiar del AAC fuente.

Sugerencia útil: Para seleccionar varias entradas, haga clic en la primera entrada de medicamento que desee copiar y mantenga presionada la tecla Mayúsculas mientras hace clic en la última entrada de medicamento que vaya a copiar. Agregue o quite medicamentos del grupo seleccionado utilizando la tecla Control.

4. Haga clic en Copiar en AAC objetivo.

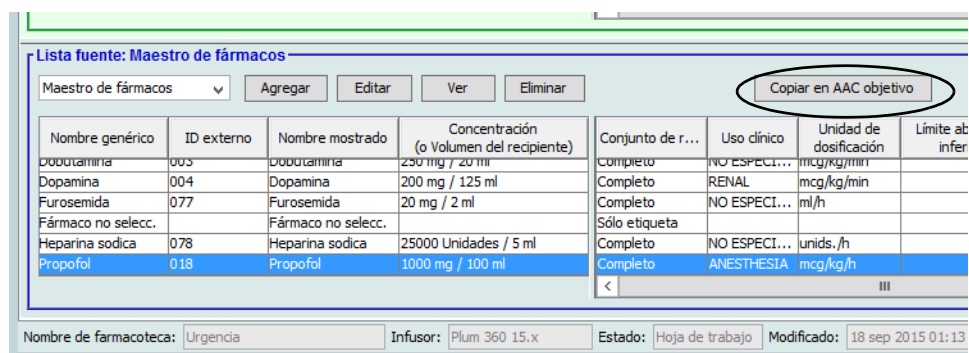

5. Verifique que ha seleccionado las entradas de medicamento correctas.

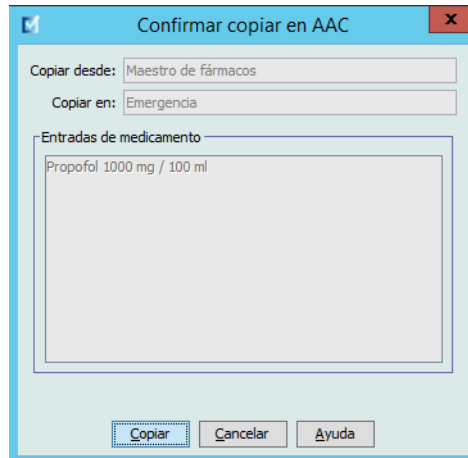

6. Haga clic en **Copiar** para copiar las entradas de medicamento seleccionadas en el AAC objetivo.

Nota: En el caso de Plum A+, el número máximo de entradas de medicamento en un AAC es 150. En el caso de determinados infusores Plum con licencia para Tamaño de la farmacoteca de nivel 2, las AAC pueden contener hasta 400 entradas de medicamento. (Consulte la matriz de compatibilidad de dispositivos con Hospira MedNet Software para determinar la disponibilidad de las versión de Plum. La matriz se encuentra disponible a través de Advanced Knowledge Center).

Nota: Las entradas de medicamento duplicadas o en conflicto no pueden copiarse.

Eliminación de entradas de medicamento del Maestro de fármacos

Nota: Las entradas de medicamento eliminadas se quitan permanentemente del Maestro de fármacos y de todas las AAC en las que aparecen.

Solo los usuarios con los privilegios de inicio de sesión adecuados pueden eliminar entradas de medicamento del Maestro de fármacos.

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjunto
Cefazolina sodica	036	Cefazolina sodica	1 gramos / 50 ml	Completo
Dextrosa 5%	092	Dextrosa 5%		Sólo etique
Dobutamina	003	Dobutamina	250 mg / 20 ml	Completo
Dopamina	004	Dopamina	200 mg / 125 ml	Completo
Furosemida	077	Furosemida	20 mg / 2 ml	Completo
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo etique
Heparina sodica	078	Heparina sodica	25000 Unidades / 5 ml	Completo

Nombre de farmacoteca: Urgencia Infusor: Plum 360 15.x

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee eliminar en Lista fuente.
3. Haga clic en **Eliminar**.
4. Haga lo siguiente en la ventana Lista fuente: Eliminar conjunto de reglas, haga clic en **Eliminar**.

Lista fuente: Eliminar conjunto de reglas

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):
 Heparina sodica (078) (25000 unidades / 5 mL) Seleccionar

Nombre mostrado: Heparina sodica Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Heparina sodica 25000 Unidades / 500 mL para uso clínico " " dosificados en unids./h

Conjuntos de reglas: Completo

Concentración

Cantidad de medicamento: 25000 Unidad de medicamento: Unidades Cantidad de diluyente: mL: 500

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.


Activar bolo

Límites de dosis

Unidad de dosificación: unids./h LAI: LRI: 200 LRS: 2000 LAS: 3000

Eliminar Cancelar Ayuda

5. Aparecerá un mensaje de confirmación con todas las AAC afectadas. Haga clic en **Aceptar** para quitar la entrada de medicamento seleccionada del Maestro de fármacos y de todas las AAC en las que aparezca.

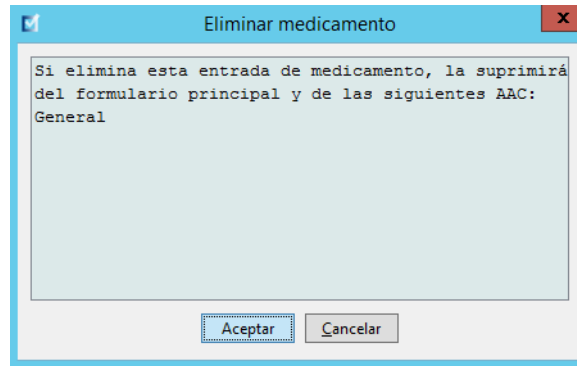

Nota: No se puede eliminar la entrada "Ningún fármaco seleccionado" de un Maestro de fármacos de Plum A+® ni de las AAC.

Finalización de hojas de trabajo

Nota: Antes de finalizar una hoja de trabajo, es recomendable que una persona calificada, como un farmacéutico hospitalario o un comité multidisciplinario de médicos revise la farmacoteca para garantizar la precisión, conforme a las políticas del hospital.


Solo los usuarios con los privilegios de inicio de sesión adecuados pueden finalizar una hoja de trabajo.

Se requieren certificados para terminar las farmacotecas.

Para finalizar una hoja de trabajo, haga lo siguiente:


Nota: El nombre genérico y el ID externo de una entrada de medicamento deben figurar en el Maestro de fármacos para finalizar la hoja de trabajo.

1. En la vista Gestión de la farmacoteca, haga clic en **Finalizar**.

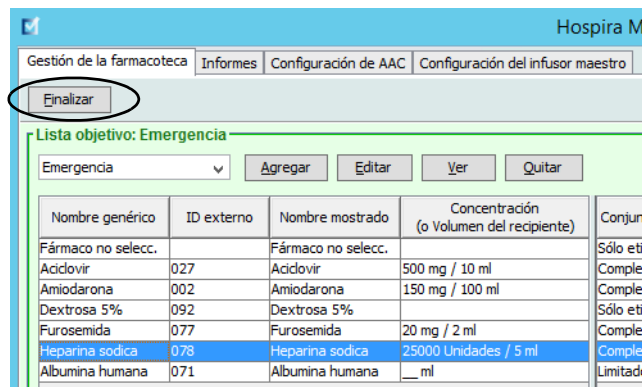

Nota: Una vez que comienza el proceso de finalización, no es posible detenerlo ni deshacerlo.

2. Haga clic en **Aceptar** para finalizar la hoja de trabajo.

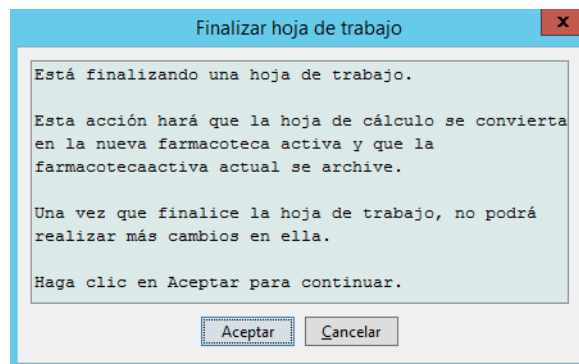


3. Aparecerá una barra de progreso brevemente.

Importante: Si se pierde la conexión con la red durante el proceso de finalización, copie la farmacoteca que se estaba finalizando y, a continuación, finalícela.

Nota: En el caso de farmacotecas de gran tamaño, la finalización puede tardar varios minutos. Puede aparecer un mensaje si la farmacoteca no se finaliza correctamente pasados 20 minutos.

4. Un mensaje emergente confirma que la hoja de trabajo se ha finalizado correctamente.

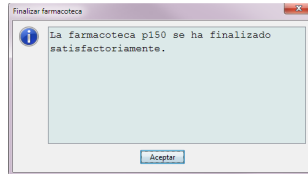

5. Haga clic en **Aceptar**.

La fecha de finalización aparece en el Directorio de farmacoteca.

Cierre de hojas de trabajo

Para cerrar una hoja de trabajo, haga lo siguiente:

1. En la vista Gestión de la farmacoteca, haga clic en **Cerrar**.
Regresará a la vista Directorio de farmacoteca.

Nota: Al cerrar una hoja de trabajo, esta se guardará.

Capítulo 7: Informes de Hospira MedNet Meds

Introducción

La vista de informes de Hospira MedNet Meds le permite crear e imprimir informes sobre las farmacotecas de los infusores Plum A+ y Plum 360. Para obtener detalles sobre informes individuales, consulte los informes por nombres más adelante en este capítulo.

Nota: Para obtener información sobre los informes de Hospira MedNet Software, consulte el **Capítulo 16: Informes** en la guía de usuario de Hospira MedNet Software.

Convenciones de informes

Las siguientes convenciones son comunes para todos los informes:

- Los usuarios que dispongan de los privilegios de inicio de sesión adecuados podrán acceder a la Vista de informes.
- En las listas desplegadas se muestran todas las selecciones válidas.
- Los campos aparecen en blanco si no hay datos disponibles.

Detalles de informe

Los informes pueden tener varias páginas por las que puede desplazarse con las barras de desplazamiento vertical y horizontal.

Todos los informes de farmacotecas muestran la siguiente información:


Plum A+/Plum 360	
Campo	Descripción
Farmacoteca	El nombre de la farmacoteca y hoja de trabajo
Tipo de infusores	El tipo de infusor
Fecha de finalización	La fecha y hora de finalización del archivo o la farmacoteca activa (no disponible para hojas de trabajo)
Estado de farmacoteca	El estado de la farmacoteca: activa, archivo y hoja de trabajo

Los detalles adicionales variarán según el infusor seleccionado, como se explica más adelante en este capítulo.

Nota: El usuario no puede alterar ni configurar la estructura de los informes de Hospira MedNet Meds.


Para mostrar la página Informes:

1. Abra una hoja de trabajo o farmacoteca. (Para obtener instrucciones sobre cómo abrir una hoja de trabajo o farmacoteca, consulte [Capítulo 5: Directorio de farmacoteca](#) en la página 27).
2. Haga clic en la pestaña **Informes**.

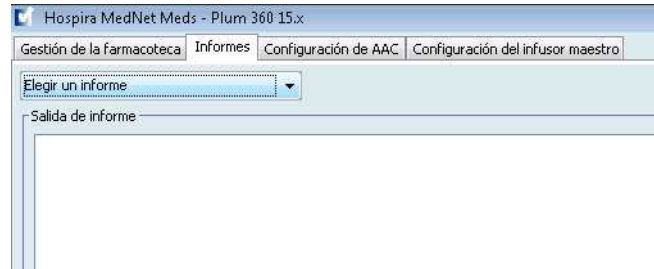

3. Seleccione un informe de la lista desplegable **Elegir un informe**.

La selección de informes variará según el infusor, como se describe más adelante en este capítulo.

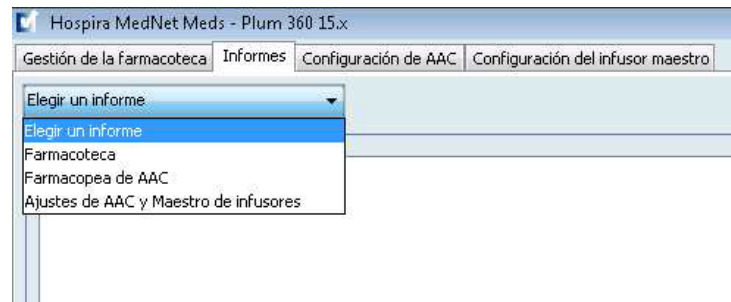

Informes de farmacotecas de Plum A+

Los siguientes informes se encuentran disponibles para el infusor Plum A+:

- Farmacoteca
- Farmacoteca de AAC
- Ajustes de AAC y Maestro de infusores

Farmacoteca de Plum 360

Este informe muestra información detallada sobre todos los medicamentos del Maestro de fármacos de Plum 360.

The screenshot shows the 'Farmacoteca de AAC' report in the 'Urgencia' facility. The report is titled 'Salida de informe' and displays a summary table and a detailed list of medications.

Farmacoteca	Tipo de infusores	Fecha de finalización	Estado de farmacoteca
Urgencia	Plum 360 15.x	N/C	Hoja de trabajo

Nombre genérico	Nombre [2]mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjuntos de reglas	Uso clínico	Unidad de dosificación	LAI	LRI	LRS	LAS	ID externo	Clase terapéutica	ID de clase
Nombre de AAC: Emergencia												
Fármaco no selecc.	Fármaco no selecc.		Sólo etiqueta									
Administración de infusión secundaria permitida: Si												
Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión: Si												
AAC asignadas: 2 Sur, Emergencia, General												
Amiodarona	Amiodarona	150 mg / 100 ml	Completo	NO ESPECIFICADO	ml/h			600		002		
Administración de infusión secundaria permitida: Si												
Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión: Si												
AAC asignadas: Emergencia												
Dextrosa 5%	Dextrosa 5%		Sólo etiqueta							092		
Administración de infusión secundaria permitida: Si												
Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión: Si												
AAC asignadas: Emergencia												
Furosemida	Furosemida	20 mg / 2 ml	Completo	NO ESPECIFICADO	ml/h			1		077		
Administración de infusión secundaria permitida: Si												
Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión: Si												

Footer information: Nombre de farmacoteca: Urgencia | Infusor: Plum 360 15.x | Estado: Hoja de trabajo | Modificado: 18 sep 2015 01:30 | Modo: Editar | Usuario: mednet_admin

Plum 360 con bolo

The screenshot shows the 'Farmacoteca' report for 'Amiodarona' in the 'Urgencia' facility, detailing bolus administration settings.

Grupos de conjunto de reglas	Unidad de dosificación	LAI	LRI	LRS	LAS	AAC asignadas
Nombre genérico: Amiodarona	ID externo: 002	Clase terapéutica:			ID de clase:	
Nombre mostrado: Amiodarona	Conjuntos de reglas: Completo	Concentración (o Volumen del recipiente): 450 mg / 250 mL				
Administración de infusión secundaria permitida: Si			Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión: Si			
Uso clínico: NO ESPECIFICADO		Activar bolo: Si		Cantidad máxima de bolo:		
Límites en bolo - Cantidad	mg					No
Límites en bolo - Tiempo						
Límites en bolo - Velocidad de dosis	mg/min					
Límites de velocidad de dosis - Velocidad	mg/min			1		

Plum 360	
Entradas de medicamento	Descripción
Nombre genérico	El nombre genérico del medicamento
Nombre mostrado	El nombre del medicamento mostrado en el infusor
Concentración (o Volumen del recipiente) ¹	Concatenación de la cantidad de medicamento, la unidad de medicamento, la cantidad de diluyente y la unidad de diluyente
Conjuntos de reglas	El tipo de conjunto de reglas creado para el medicamento; incluye completo, limitado y solo etiqueta
Uso clínico (solo Plum 360).	El uso clínico atribuido al medicamento
Unidad de dosificación	La unidad de dosificación seleccionada para el medicamento
LAI	Límite absoluto inferior (el límite inferior que no se puede ignorar)
LRI	Límite relativo inferior (el límite inferior que se puede ignorar)
LRS	Límite relativo superior (el límite superior que se puede ignorar)
LAS	Límite absoluto superior (el límite superior que no se puede ignorar)
ID externo	El número de ID utilizado para hacer coincidir un pedido con la entrada del medicamento en la farmacoteca
Clase terapéutica	Clase terapéutica asignada a la entrada del medicamento
ID de clase	El número de ID de la clase terapéutica
Administración de infusión secundaria permitida	Indica si esta opción estaba seleccionada
Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión	Indica si esta opción estaba seleccionada
AAC asignadas	AAC que tienen asignado el medicamento
Límites en bolo (solo Plum 360 con bolo)	Indica los límites en bolo de cantidad, tiempo y velocidad de dosis
Límites de velocidad de dosis (solo Plum 360 con bolo)	Indica la velocidad de bolo permitida
¹ Cuando el tipo de regla es Limitado, este campo muestra el volumen de recipiente.	

Farmacoteca de Plum A+

Este informe muestra información detallada sobre todos los medicamentos del Maestro de fármacos de Plum A+.

Plum A+	
Entradas de medicamento	Descripción
Nombre genérico	El nombre genérico del medicamento
Nombre mostrado	El nombre del medicamento mostrado en el infusor
Concentración (o Volumen del recipiente) ¹	Concatenación de la cantidad de medicamento, la unidad de medicamento, la cantidad de diluyente y la unidad de diluyente
Conjuntos de reglas	El tipo de conjunto de reglas creado para el medicamento; incluye completo, limitado y solo etiqueta
Unidad de dosificación	La unidad de dosificación seleccionada para el medicamento
LAI	Límite absoluto inferior (el límite inferior que no se puede ignorar)
LRI	Límite relativo inferior (el límite inferior que se puede ignorar)
LRS	Límite relativo superior (el límite superior que se puede ignorar)
LAS	Límite absoluto superior (el límite superior que no se puede ignorar)
AAC asignadas	AAC que tienen asignado el medicamento
ID externo	El número de ID utilizado para hacer coincidir un pedido con la entrada del medicamento en la farmacoteca
Clase terapéutica	Clase terapéutica asignada a la entrada del medicamento
ID de clase	El número de ID de la clase terapéutica
¹ Cuando el tipo de regla es Limitado, este campo muestra el volumen de recipiente.	

Farmacoteca de AAC de Plum 360

Este informe muestra cada AAC con sus entradas de medicamentos asociadas. Las AAC se muestran por orden de creación.

Plum 360 con bolo

Nombre de AAC: General						
Nombre genérico: Fármaco no selecc.		ID externo:		Clase terapéutica:		ID de clase:
Nombre mostrado: Fármaco no selecc.		Conjuntos de reglas: Sólo etiqueta		Concentración (o Volumen del recipiente):		
Administración de infusión secundaria permitida: Si			Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión: Si			
Uso clínico: NO ESPECIFICADO		Activar bolo: No		Cantidad máxima de bolo:		
Límites en bolo - Cantidad						General
Límites en bolo - Tiempo						
Límites en bolo - Velocidad de dosis						
Límites de velocidad de dosis - Velocidad						
Nombre genérico: Albumina humana		ID externo: 071		Clase terapéutica:		ID de clase:
Nombre mostrado: Albumina humana		Conjuntos de reglas: Limitado		Concentración (o Volumen del recipiente): __ mL		
Administración de infusión secundaria permitida: Si			Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión: Si			
Uso clínico: NO ESPECIFICADO		Activar bolo: No		Cantidad máxima de bolo:		
Límites en bolo - Cantidad						

Plum 360	
Entradas de medicamento	Descripción
Nombre genérico	El nombre genérico del medicamento
Nombre mostrado	El nombre del medicamento mostrado en el infusor
Concentración (o Volumen del recipiente) ¹	Concatenación de la cantidad de medicamento, la unidad de medicamento, la cantidad de diluyente y la unidad de diluyente
Conjuntos de reglas	El tipo de conjunto de reglas creado para el medicamento; incluye completo, limitado y sólo etiqueta
Unidad de dosificación	La unidad de dosificación seleccionada para el medicamento
LAI	Límite absoluto inferior (el límite inferior que no se puede ignorar)
LRI	Límite relativo inferior (el límite inferior que se puede ignorar)
LRS	Límite relativo superior (el límite superior que se puede ignorar)
LAS	Límite absoluto superior (el límite superior que no se puede ignorar)
Administración de infusión secundaria permitida	Indica si se permite o no la administración de infusión secundaria
Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión	Indica si la infusión secundaria se puede interrumpir
Uso clínico	El uso clínico atribuido al medicamento en particular
AAC asignadas	AAC que tienen asignado el medicamento
Activar bolo (solo Plum 360 con bolo)	Indica si el bolo está activado
Cantidad máxima en bolo	La cantidad máxima en bolo seleccionada
ID externo	El número de ID utilizado para hacer coincidir un pedido con la entrada del medicamento en la farmacoteca
Límites en bolo (solo Plum 360 con bolo)	Indica los límites en bolo de cantidad, tiempo y velocidad de dosis
Límites de velocidad de dosis (solo Plum 360 con bolo)	Indica la velocidad de bolo permitida
Clase terapéutica	Clase terapéutica asignada a la entrada del medicamento
ID de clase	El número de ID de la clase terapéutica
¹ Cuando el tipo de regla es Limitado, este campo muestra el volumen de recipiente.	

Farmacoteca de AAC de Plum A+

Este informe muestra cada AAC con sus entradas de medicamentos asociadas. Las AAC se muestran por orden de creación.

Farmacoteca	Tipo de infusores	Fecha de finalización	Estado de farmacoteca
Nuevo	Plum A+ 13.x	N/C	Hoja de trabajo

Nombre genérico	Nombre [2]mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjuntos de reglas	Unidad de dosificación	LAI	LRI	LRS	LAS	ID externo	Clase terapéutica	ID de clase
Nombre de AAC: Especial											
Fármaco no selecc.	Fármaco no selecc.		Sólo etiqueta								
AAC asignadas: Especial											
Clindamicina Fosfato	Clindamicina Fosfato		Sólo etiqueta						045		
AAC asignadas: Especial											
Dextrosa 5%	Dextrosa 5%	__ mg / __ ml	Completo	ml/h			5		092		
AAC asignadas: Especial											
Dopamina	Dopamina	40 mg / 1 ml	Completo	ml/h	1				004		
AAC asignadas: Especial											
Norepinefrina	Norepinefrina	4 mg / 4 ml	Completo	ml/h			2		011		
AAC asignadas: Especial											

Página 1 de 1

Plum A+	
Entradas de medicamento	Descripción
Nombre genérico	El nombre genérico del medicamento
Nombre mostrado	El nombre del medicamento mostrado en el infusor
Concentración (o Volumen del recipiente) ¹	Concatenación de la cantidad de medicamento, la unidad de medicamento, la cantidad de diluyente y la unidad de diluyente
Conjuntos de reglas	El tipo de conjunto de reglas creado para el medicamento; incluye completo, limitado y sólo etiqueta
Unidad de dosificación	La unidad de dosificación seleccionada para el medicamento
LAI	Límite absoluto inferior (el límite inferior que no se puede ignorar)
LRI	Límite relativo inferior (el límite inferior que se puede ignorar)
LRS	Límite relativo superior (el límite superior que se puede ignorar)
LAS	Límite absoluto superior (el límite superior que no se puede ignorar)
AAC asignadas	AAC que tienen asignado el medicamento
ID externo	El número de ID utilizado para hacer coincidir un pedido con la entrada del medicamento en la farmacoteca
Clase terapéutica	Clase terapéutica asignada a la entrada del medicamento
ID de clase	El número de ID de la clase terapéutica

¹ Cuando el tipo de regla es Limitado, este campo muestra el volumen de recipiente.

Ajustes de AAC e maestro de infusor de Plum 360

Este informe muestra información detallada sobre todos los ajustes de AAC y maestros de infusores de Plum A+.

The screenshot displays the 'Hospira MedNet Meds - Urgencia' application window. The main content area is titled 'Ajustes de AAC y Maestro de infusores'. It contains several tables and sections:

- Salida de informe:** A summary table with columns: Farmacoteca, Tipo de infusores, Fecha de finalización, and Estado de farmacoteca. The data row shows: Urgencia, Plum 360 15.x, N/C, and Hoja de trabajo.
- Ajustes del Maestro de infusores:** A table with parameters such as Velocidad continua (MVA), Administrar juntos (Alternativo), Tiempo límite del motivo de rechazo de la programación automática (segundos) (15), and Uso clínico predeterminado (NO ESPECIFICADO).
- Ajustes de AAC:** A section for 'Nombre de AAC: Emergencia' and 'Linea de servicio: Servicios de emergencia'. It includes a table for patient limits (BSA, Estatura del paciente, Peso del paciente) and alarm settings (Presión de oclusión distal, Reinicio automático de presión de oclusión).

The status bar at the bottom shows: Nombre de farmacoteca: Urgencia, Infusor: Plum 360 15.x, Estado: Hoja de trabajo, Modificado: 18 sep 2015 01:30, Modo: Editar, Usuario: mednet_admin.

Plum 360	
Ajustes del Maestro de infusores	Descripción
Velocidad continua	La velocidad de administración predeterminada a la que pasa el infusor tras completar una terapia: MVA o velocidad programada
Notificación recordatoria	La configuración de recordatorio predeterminada: Sí o No
Administrar juntos	El método de administración conjunta predeterminado: Alternativo o Concurrente
Forzar bomba para aceptar la farmacoteca durante consumo mínimo	Para instalar automáticamente una nueva farmacoteca tras apagar el infusor. El valor predeterminado es No
Tiempo límite del motivo de rechazo de la programación automática (segundos)	El tiempo durante el que el motivo de rechazo aparece en el infusor
Tiempo de espera máximo (horas)	El período que puede esperar el infusor antes de iniciar una terapia
Uso clínico predeterminado	El uso clínico predeterminado que sustituirá los campos "No especificado" en el conjunto de reglas
Ajustes de AAC	Descripción
Nombre de AAC	El nombre de AAC
Línea de servicio	El nombre de la línea de servicio
BSA	Los valores mínimos y máximos
Estatura del paciente	Las alturas mínimas y máximas de los pacientes
Peso del paciente	Los pesos mínimos y máximos de los pacientes
Presión de oclusión distal	Las configuraciones predeterminadas y máximas
Reinicio automático de presión de oclusión	Los reinicios automáticos de presión de oclusión
Reinicio automático de oclusión distal	Los reinicios automáticos de oclusión distal
Inicio demorado	La configuración de inicio demorado predeterminada: Activado o Desactivado
Espera	Los ajustes predeterminados para activar o desactivar la espera antes de iniciar una terapia
Velocidad de dosis máxima (mL/h)	La velocidad máxima de administración

Ajustes de AAC y Maestro de infusores de Plum A+

Este informe muestra información detallada sobre todos los ajustes de AAC y maestros de infusores de Plum A+.

Farmacoteca	Tipo de infusores	Fecha de finalización	Estado de farmacoteca
Nuevo	Plum A+ 13.x	N/C	Hoja de trabajo

Velocidad continua	Notificación recordatoria	Inicio demorado	Administrar juntos
MVA	No	Si	Alternativo

Nombre de AAC	Línea de servicio	Presión de oclusión predeterminada	Peso mínimo del paciente	Peso máximo del paciente	Velocidad máxima
Especial	UCI - general	310	0,1	500	999


Página 1 de 1

Plum A+	
Ajustes del Maestro de infusores	Descripción
Velocidad continua	La velocidad de administración predeterminada a la que pasa el infusor tras completar una terapia: MVA o velocidad programada
Notificación recordatoria	La configuración de recordatorio predeterminada: Sí o No
Inicio demorado	La configuración de inicio demorado predeterminada: Sí (activado) o No (desactivado)
Administrar juntos	El método de administración conjunta predeterminado: Alternativo o Concurrente
Ajustes de AAC	Descripción
Nombre de AAC	El nombre de AAC
Línea de servicio	El nombre de la línea de servicio
Presión de oclusión predeterminada	La presión mínima predeterminada que hará que el infusor notifique una alarma de oclusión
Peso mínimo del paciente	El peso mínimo del paciente permitido de AAC
Peso máximo del paciente	El peso máximo del paciente permitido de AAC
Velocidad máxima	La velocidad máxima de administración de AAC


Impresión de informes

Para imprimir un informe, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la pestaña **Informes**.

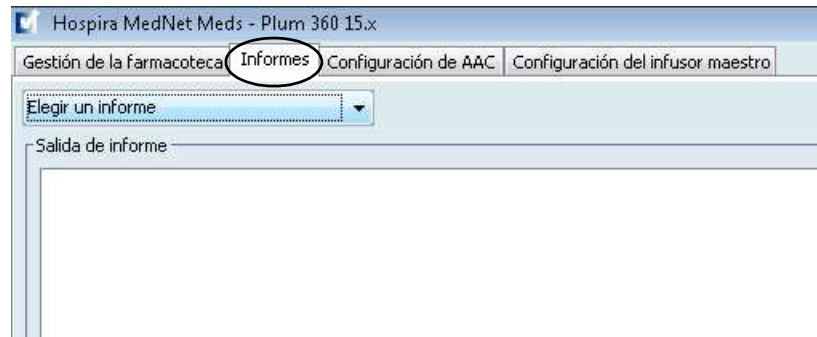

2. Seleccione el informe que desea imprimir en el menú desplegable.

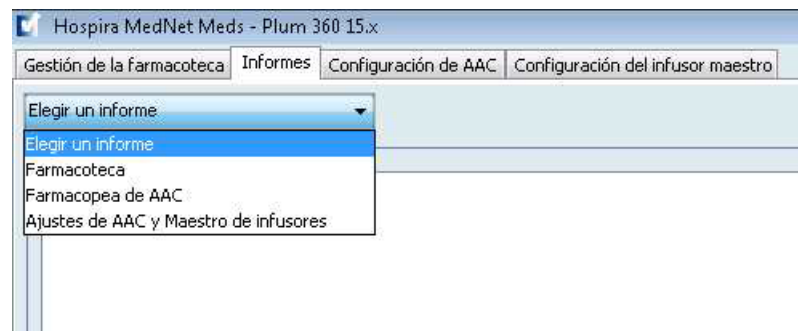

- Aparecerá el informe.
3. Haga clic en **Imprimir**.
Aparecerá el menú Imprimir. Realice su selección.
 4. Haga clic en **Imprimir**.

Para guardar un informe:

1. Seleccione el informe que desee guardar.
2. Haga clic en **Guardar en el archivo**.



3. Desplácese a la ubicación que desee.



4. Escriba un nombre para el archivo.
5. Haga clic en **Guardar** y el informe se guardará en formato .html.

Notas:

Capítulo 8: Configuración de AAC


Introducción

Antes de poder asignar entradas de medicamento a un área de atención clínica (AAC), debe agregar un AAC a su hoja de trabajo. Utilice la vista Configuración de AAC para agregar un AAC a la hoja de trabajo. Puede crear 18 AAC como máximo para el infusor Plum A+ 13.4x. Hospira MedNet Meds también es compatible con las versiones de Plum que aceptan hasta 40 AAC. (Consulte la matriz de compatibilidad de dispositivos con Hospira MedNet Software para determinar la disponibilidad de las versión de Plum. La matriz se encuentra disponible a través de Advanced Knowledge Center).

La vista Configuración de AAC le permite hacer lo siguiente:

- Crear una nueva AAC y asignarle una línea de servicio
- Realizar cambios en un nombre de AAC y línea de servicio existentes
- Eliminar un AAC existente
- Ver nombres de AAC y líneas de servicio
- Establecer el orden en que aparecen los nombres de AAC en el infusor
- Establecer configuraciones de infusores específicas de AAC

Para mostrar la vista Configuración de AAC, abra la hoja de trabajo que desee editar y haga clic en la pestaña **Configuración de AAC**. (Para obtener instrucciones sobre cómo abrir una hoja de trabajo, consulte [Capítulo 5: Directorio de farmacoteca](#), en la página 27).

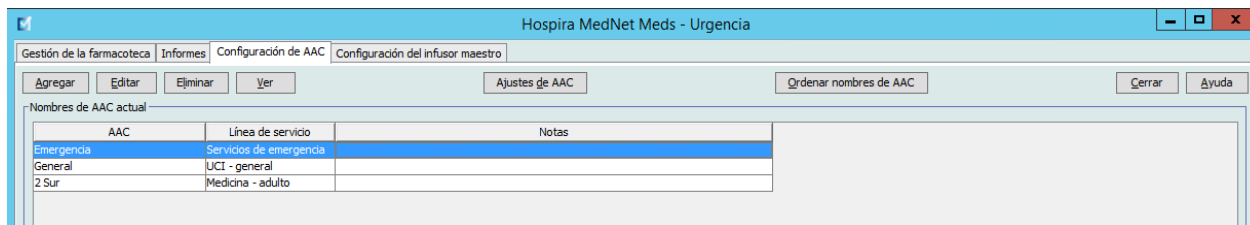

Nota: Si intenta agregar un medicamento a un AAC que ya tenga el número máximo de entradas de medicación permitido, aparecerá un mensaje de error. Deberá eliminar un medicamento del AAC y agregar uno nuevo a esta en la ventana Gestión de la farmacoteca.

Líneas de servicio

Las líneas de servicio se utilizan en los informes para agregar datos a varias AAC o instalaciones. Cada AAC se asigna a una línea de servicio. Por ejemplo, una línea de servicio llamada **Quirúrgico - adulto** puede utilizarse para examinar datos de las AAC Four West, Five North y Five East en un solo hospital.

Las siguientes líneas de servicios están disponibles para su uso:


Nota: No se puede editar ni cambiar el contenido de la lista de líneas de servicio.

- Ambulatorio
- Anestesia
- Salud conductual
- Trasplante de médula ósea
- Unidad de quemado
- Garganta, nariz y oído
- Servicios de emergencia
- Endocrinología
- Oftalmología
- Geriatria
- Hematología
- UCI - cardíaca
- UCI - general
- UCI - médica
- UCI - neonatal
- UCI - pediátrica
- UCI - quirúrgica
- Parto
- Medicina - adulto
- Medicina - neonatal
- Medicina - pediátrica
- Línea de servicio múltiple
- Obstetricia/Ginecología
- Oncología - adultos
- Oncología - pediátrica
- Ortopedia
- Otra especialidad
- Cirugía ambulatoria
- Tratamiento del dolor
- Rehabilitación
- Renal
- Estancia corta
- Enfermería especializada
- Procedimientos especiales
- Quirúrgico - adulto
- Quirúrgico - cardiovascular
- Quirúrgico - pediátrico
- Telemetría
- Centro de transfusión
- Trasplante
- Trauma
- Urología

Creación de un AAC nueva


Para crear un AAC nueva, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración de AAC**.
2. Haga clic en **Agregar**.

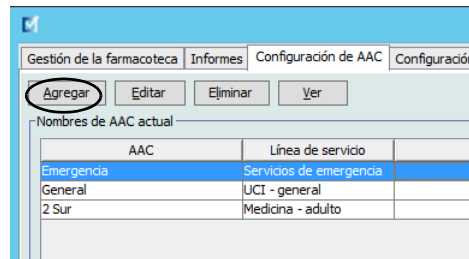

3. Introduzca el nombre de la nueva AAC.

Nota: Los nombres mostrados y los nombres de AAC no admiten el uso de comas (,) ni de comillas dobles ("). El número de caracteres permitido en las AAC varía para cada tipo de infusor. Plum tiene un máximo de 29. No se puede superar el número máximo de caracteres.

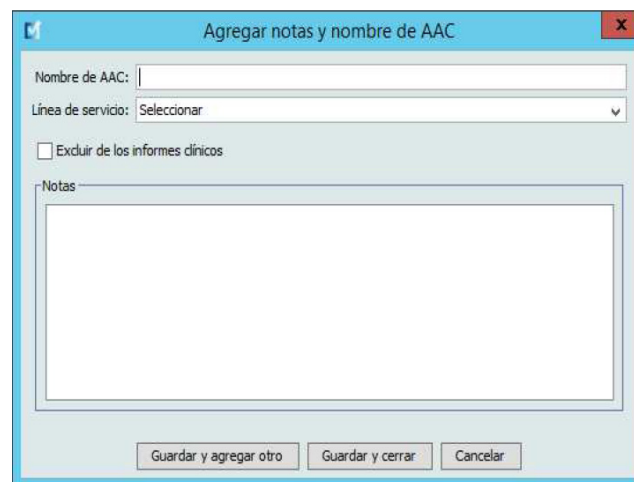

4. Seleccione una línea de servicio para su AAC en la lista desplegable.
5. Para excluir el AAC de los informes, coloque una marca de verificación en la casilla que aparece junto a **Excluir de los informes clínicos**.


Nota: Los informes clínicos incluyen todos los informes excepto Localizador de instrumentos, Utilización de activos, Registro de evento/alarma, Estado de infusores y Descarga de software.

6. Introduzca una nota si lo desea.
7. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar**.


Edición de un AAC

Para editar un AAC, línea de servicio o nota:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración de AAC**.
2. Seleccione el AAC que desee cambiar.

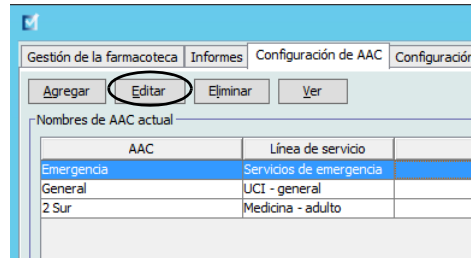

3. Haga clic en **Editar**.
4. Edite el nombre de AAC, la línea de servicio y las notas si lo desea.

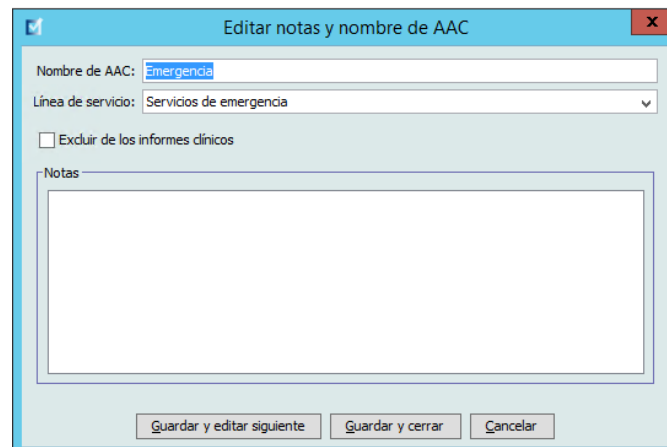


5. Haga clic en **Guardar y editar siguiente** o **Guardar y cerrar**.


Visualización de un AAC

Para ver un AAC, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración de AAC**.
2. Seleccione el AAC que desee ver.

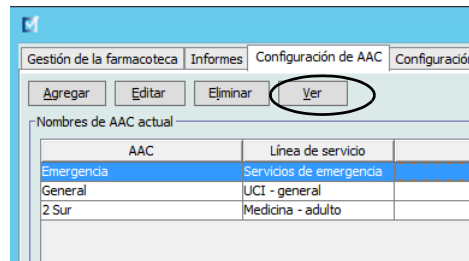


3. Haga clic en **Ver**.
4. Cuando termine de verla, haga clic en **Ver siguiente** o **Cerrar**.

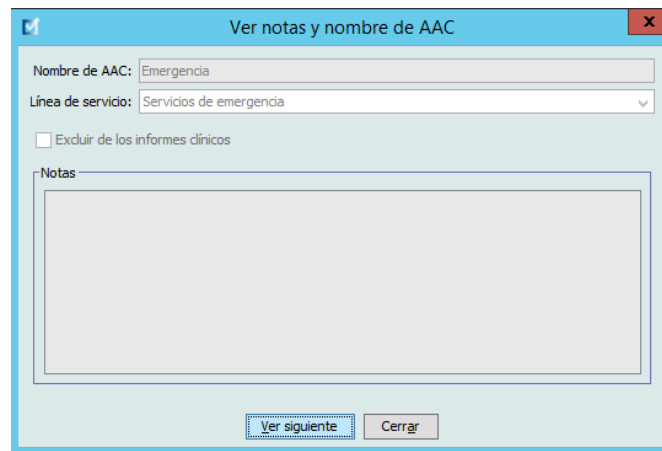


Eliminación de un AAC

Para eliminar un AAC, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración de AAC**.
2. Seleccione el AAC que desee eliminar.

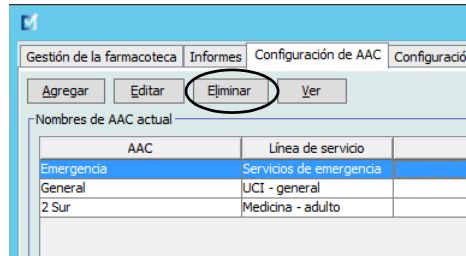

3. Haga clic en **Eliminar**.
4. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la eliminación.
5. Haga clic en **Eliminar**.

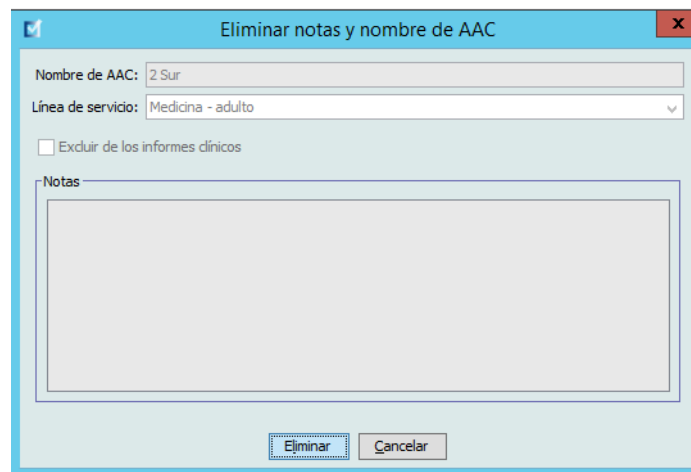


El AAC se elimina de la hoja de trabajo de forma permanente.

Nota: Las entradas de medicamento asignadas al AAC eliminada permanecerán en el Maestro de fármacos y las demás AAC a las que estaban asignadas.


Cambie el orden de los nombres de AAC

Para cambiar el orden de los nombres de AAC en el infusor:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración de AAC**.

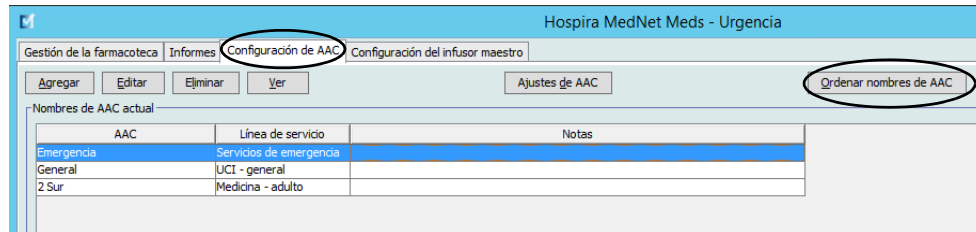

2. Haga clic en **Ordenar nombres de AAC**.
3. Seleccione los nombres de AAC que desee mover.
4. Haga clic en **Subir** y **Bajar** para reordenar la lista del modo deseado.
5. Haga clic en **Guardar** cuando esté satisfecho con el orden[4].[5]

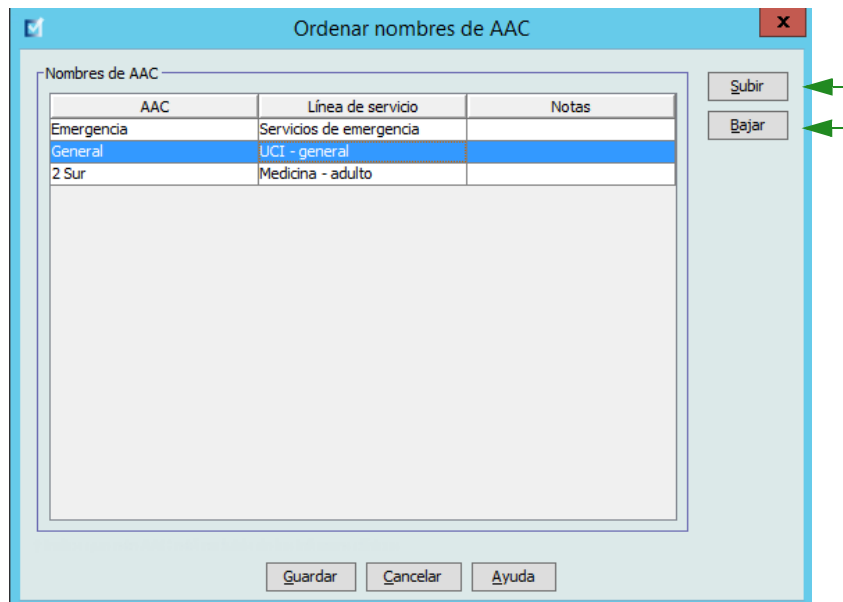

Sugerencia útil: Para seleccionar varias AAC, seleccione la primera AAC que desee mover y, a continuación, mantenga presionada la tecla Mayúsculas al hacer clic en la última AAC que desee mover.

Configuración de un Plum 360

Nota: Solo los usuarios con los privilegios de inicio de sesión adecuados pueden editar la configuración de los infusores de AAC.

Cada AAC está asociada a la configuración de infusores específicos. En el caso de los infusores Plum compatibles con 40 AAC, se admiten las siguientes configuraciones: Límites del paciente formados por el área de superficie corporal (BSA) mínima y máxima; alturas y pesos mínimos y máximos de pacientes; ajustes de alarma para la presión de oclusión predeterminada; y otros parámetros de infusores relacionados el inicio, la espera y las velocidades de dosis.

Nota: Los ajustes de AAC se aplican a todos los medicamentos del AAC.

El ajuste **Área de superficie corporal** le permite establecer los rangos mínimo y máximo para la AAC específica.

El ajuste **Altura mínima del paciente** le permite establecer la altura mínima del paciente admitida en el AAC.

El ajuste **Altura máxima del paciente** le permite establecer la altura máxima del paciente admitida en el AAC.

El ajuste **Peso mínimo del paciente** le permite establecer el peso mínimo del paciente admitido en el AAC.

El ajuste **Peso máximo del paciente** le permite establecer el peso máximo del paciente admitido en el AAC.

El ajuste **Presión de oclusión predeterminada** le permite seleccionar la presión a la que el infusor hará sonar la alarma de oclusión distal. Este ajuste se utiliza como valor predeterminado para el AAC seleccionada y puede cambiarse al programar el infusor.

El ajuste **Reinicio automático de presión de oclusión** le permite establecer el número de veces que el infusor reanudará la infusión de forma automática si se borra una oclusión a los 60 segundos de la detección. Si el reinicio automático es cero, las alarmas de oclusión no se reiniciarán automáticamente.

La velocidad de dosis máxima es la velocidad de administración máxima admitida en el AAC.

La configuración **Inicio demorado** le permite seleccionar esta opción en el AAC y, a su vez, hace posible dicha opción para el infusor.

La configuración **Espera** le permite seleccionar esta opción en el AAC y, a su vez, hace posible dicha opción para el infusor.

Nota: El médico no puede cambiar los valores de Peso mínimo del paciente, Peso máximo del paciente y Velocidad de dosis máxima al programar el infusor.


A continuación puede ver los ajustes del infusor de AAC predeterminados:

BSA mínima	0,012 (m²)
BSA máxima	7,07 (m²)
Altura mínima del paciente	7,5 cm
Altura máxima del paciente	305 cm
Peso mínimo del paciente	0,1 kg
Peso máximo del paciente	500 kg
Presión de oclusión predeterminada	6 psi (310 mmHg)
Reinicio automático de presión de oclusión	0
Velocidad de dosis máxima	999 mL/h
Inicio demorado	Activado
Espera	Activado


Nota: Al crear un AAC nueva, contiene los ajustes de infusor predeterminados hasta que los cambie.

Para configurar un AAC, haga lo siguiente:

1. Abra una hoja de trabajo para editarla para mostrar la vista Configuración de AAC y haga clic en la pestaña **Configuración de AAC** (para obtener instrucciones sobre la apertura de una hoja de trabajo, consulte [Capítulo 5: Directorio de farmacia](#), en la página 27).

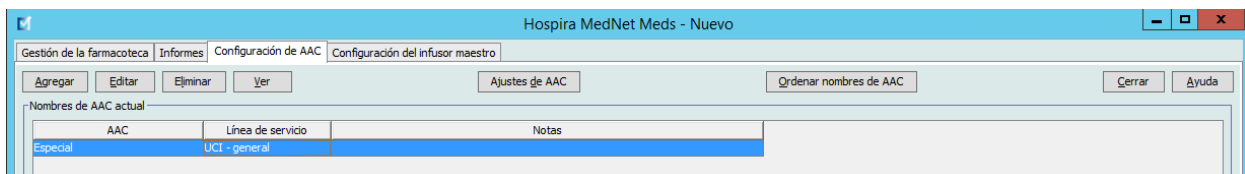

2. Seleccione un AAC en la vista Configuración de AAC.

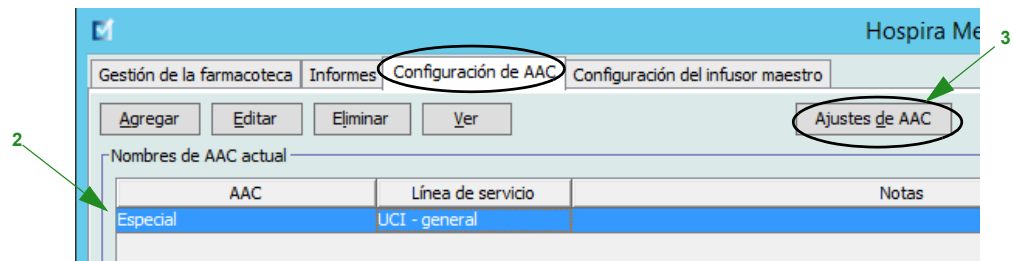

3. Haga clic en el botón **Ajustes de AAC**.

4. Seleccione la pestaña **Límites del paciente** y edite la siguiente información:

- **BSA mínima** (de 0,012 a 7,07)
- **BSA máxima** (de 0,012 a 7,07)
- **Altura mínima del paciente** (de 7,5 a 305 cm)
- **Altura máxima del paciente** (de 7,5 a 305 cm)
- **Peso mínimo del paciente** (de 0,1 a 500 kg)
- **Peso máximo del paciente** (de 0,1 a 500 kg)

The screenshot shows the 'Ajustes de AAC' window with the 'Límites del paciente' tab selected. The settings are as follows:

Parameter	Minimum Value	Maximum Value
BSA (m ²)	0,012	7,07
Estatura del paciente (cm)	7,5	305
Peso del paciente (kg)	0,1	500

Buttons at the bottom: Guardar y continuar, Guardar y cerrar, Cancelar, Ayuda.

5. Seleccione la pestaña **Ajustes de alarma** y edite la siguiente información:


- **Presión de oclusión distal** (de 1 psi a 15 psi o de 52 a 776 mmHg)
- **Reinicio automático de oclusión distal** (de 0 a 10)

The screenshot shows the 'Ajustes de AAC' window with the 'Ajustes de alarma' tab selected. The settings are as follows:

Parameter	Value	Range
Presión de oclusión distal (mmHg)	310	52 - 776
Reinicio automático de oclusión distal	0	0 - 10

Buttons at the bottom: Guardar y continuar, Guardar y cerrar, Cancelar, Ayuda.

6. Seleccione la pestaña **Otros parámetros de infusor**.

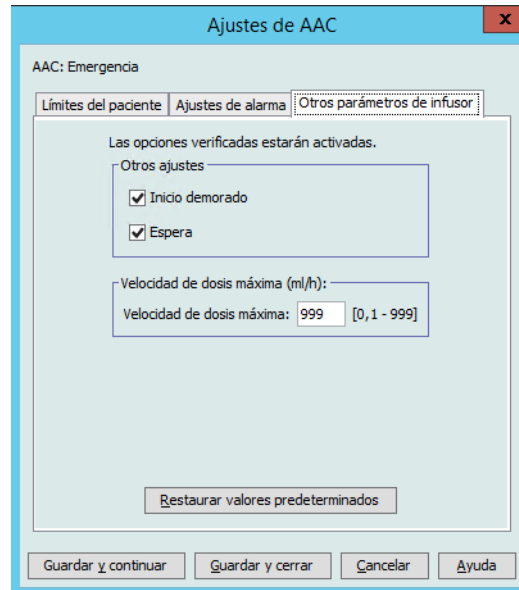

7. Seleccione que desea activar las configuraciones **Inicio demorado** y **Espera** (recomendadas).
8. Edite la **Velocidad de dosis máxima**.
9. Haga clic en **Guardar y continuar** o **Guardar y cerrar**.

Configuración de un AAC de Plum A+

Nota: Solo los usuarios con los privilegios de inicio de sesión adecuados pueden editar la configuración de los infusores de AAC.

Cada AAC está asociada a la configuración de infusores específicos. Esta configuración incluye: los ajustes de presión de oclusión predeterminada, peso de paciente mínimo y máximo, y velocidad de dosis máxima.

Nota: Los ajustes de AAC se aplican a todos los medicamentos del AAC.

El ajuste **Presión de oclusión predeterminada** le permite seleccionar la presión a la que el infusor hará sonar la alarma de oclusión distal. Este ajuste se utiliza como valor predeterminado para el AAC seleccionada y puede cambiarse al programar el infusor.

El ajuste **Peso mínimo del paciente** le permite establecer el peso mínimo del paciente admitido en el AAC.

El ajuste **Peso máximo del paciente** le permite establecer el peso máximo del paciente admitido en el AAC.

La velocidad de dosis máxima es la velocidad de administración máxima admitida en el AAC.

Nota: El médico no puede cambiar los valores de Peso mínimo del paciente, Peso máximo del paciente y Velocidad de dosis máxima al programar el infusor.


A continuación puede ver los ajustes del infusor de AAC predeterminados:

Presión de oclusión predeterminada	6 psi (310 mmHg)
Peso mínimo del paciente	0,1 kg
Peso máximo del paciente	500 kg
Velocidad de dosis máxima	999 mL/h


Nota: Al crear un AAC nueva, contiene los ajustes de infusor predeterminados hasta que los cambie.

Para configurar los Plum A+ ajustes de AAC, haga lo siguiente:

1. Abra una hoja de trabajo para editarla para mostrar la vista Configuración de AAC y haga clic en la pestaña **Configuración de AAC** (para obtener instrucciones sobre la apertura de una hoja de trabajo, consulte [Capítulo 5: Directorio de farmacoteca](#), en la página 27).

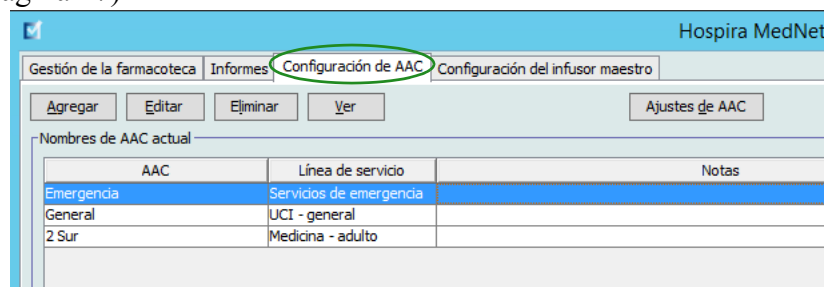

2. Seleccione un AAC en la vista Configuración de AAC.

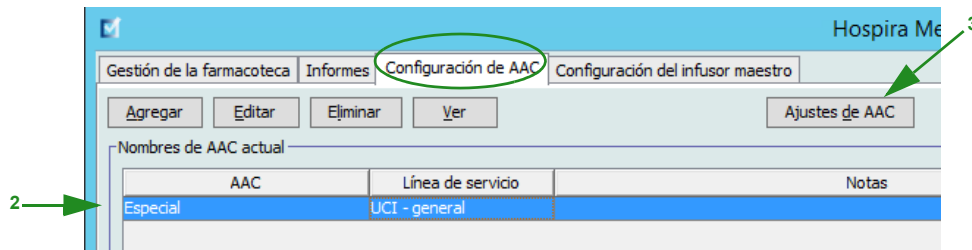

3. Haga clic en el botón **Ajustes de AAC**. Aparecerá la pantalla de selección de AAC.
4. Edite la siguiente información:
 - **Presión de oclusión predeterminada** (de 1 psi a 15 psi o de 52 a 776 mmHg). El valor de Presión de oclusión predeterminada es el umbral para la alarma de oclusión distal.

Nota: Si su institución utiliza infusores hiperbáricos (HB) Plum A+ (versión 13.5), consulte el manual del sistema operativo del infusor para ver el rango de presión de oclusión predeterminado ampliado de este modelo. El médico puede establecer el valor de presión de oclusión predeterminado al programar el infusor para uso hiperbárico.

- **Peso mínimo del paciente** (de 0,1 a 500 kg)
- **Peso máximo del paciente** (de 0,1 a 500 kg)
- **Velocidad de dosis máxima** (de 0,1 a 999 mL/h)

Ajustes de AAC

AAC: Especial

Presión de oclusión predeterminada (mmHg): [52 - 776]

Peso mínimo del paciente (kg): [0,1 - 500]

Peso máximo del paciente (kg): [0,1 - 500]

Velocidad de dosis máxima (mL/h): [0,1 - 999]

5. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración en el AAC seleccionada.

Notas:

Capítulo 9: Entradas de medicamento de Plum A+ y Plum 360

Introducción

En este capítulo, le mostraremos cómo puede definir reglas de decisiones clínicas para medicamentos en la farmacoteca de Plum A+. Hospira MedNet Meds Software le permite personalizar límites de dosis para los medicamentos utilizados en farmacotecas. Puede personalizar las reglas de decisiones clínicas para el número máximo de áreas de atención clínica (AAC) del hospital, y 150 (Plum A+) o 400 entradas de medicamento (Plum 360) en cada AAC, según su licencia.

Las entradas de medicamento pueden crearse con uno de los tres tipos de conjuntos de reglas descritos a continuación:

- Conjunto de reglas completo: entradas de medicamento configuradas con un nombre de medicamento, una concentración completa o parcial, una unidad de dosificación específica y los límites de velocidad de dosis correspondientes.
- Conjunto de reglas limitados: entradas de medicamento configuradas con un nombre de medicamento, un volumen de diluyente opcional y límites de velocidad.
- Conjunto de reglas solo etiqueta: entradas de medicamento configuradas con un nombre de medicamento, una concentración completa o parcial, y una unidad de dosificación específica.

La visualización del medicamento en la lista de fármacos y la secuencia de programación para el médico en el infusor variará según el tipo de conjunto de reglas definido en la farmacoteca.

Nota: El campo Uso clínico (solo Plum 360) es un campo opcional y puede quedarse en blanco. El valor predeterminado de Uso clínico puede actualizarse en Configuración del Maestro de infusores.

La referencia a Plum con 40 AAC se aplica a Plum 360.

Parte 1: Plum 360

Definición de conjuntos de reglas

Conjunto de reglas completo

Un conjunto de reglas completo le permite introducir una concentración completa (por ejemplo 250 mg/500 mL) o una concentración parcial (por ejemplo, 250 mg/_ mL, _mg/500 mL o _mg/_mL). Al crear una entrada de medicamento para las concentraciones estándares de cualquier medicamento, se reduce el número de pasos de programación del infusor que debe realizar el médico. Como mínimo, **se debe** introducir un valor de límite de dosificación para cada conjunto de reglas completo.

Al dejar las cantidades de medicamentos o diluyentes en blanco, el médico puede introducir una concentración no estándar en el momento de la programación. En el caso de los conjuntos de reglas definidos con una concentración parcial, el médico deberá introducir los valores de concentración si la unidad de dosificación no es mL/h. Si la unidad de dosificación es mL/h, no es necesario introducir la información de concentración.

Conjunto de reglas limitado

Los conjuntos de reglas limitados no requieren la definición de la concentración. Como mínimo, se debe introducir un valor de límite de dosificación para cada conjunto de reglas limitado. El campo Volumen de recipiente es opcional. Al programar el infusor para un medicamento con un conjunto de reglas limitado, el clínico solo introduce la velocidad, el volumen a infundir (VAI) y la duración.

Conjunto de reglas solo etiqueta

Un conjunto de reglas solo etiqueta permite que el médico vea el nombre del medicamento en el infusor. No hay límites de dosificación asociados a los conjuntos de reglas solo etiqueta. El médico selecciona las unidades de dosificación durante la programación. Si la unidad de dosificación no es mL/h, el médico también debe introducir los valores de concentración.

Cada tipo de conjunto de reglas hará que el medicamento aparezca de forma diferente en la lista de medicamentos en el infusor.

Para crear entradas de medicamento, agréguelas al Maestro de fármacos o directamente a un AAC. Las entradas de medicamento agregadas a un AAC se agregan automáticamente al Maestro de fármacos.

En un AAC, los ID externos y las concentraciones de dos entradas de medicamento no pueden ser idénticos. Así mismo, los nombres mostrados y las concentraciones de dos entradas de medicamento no pueden ser idénticos.

En un AAC, una entrada de medicamento con un nombre mostrado y una concentración puede tener hasta cuatro usos clínicos. Cada uso clínico puede tener hasta cuatro unidades de dosificación o un total de 16 unidades de dosificación posibles para un medicamento en un AAC.

En el Maestro de fármacos, el nombre mostrado, la cantidad de medicamento, la unidad de medicamento, la cantidad de diluyente y las unidades de dosificación de dos entradas de medicamento pueden ser idénticos, siempre que uno o varios de los siguientes límites sean diferentes:

- Límite relativo inferior (LRI)
- Límite absoluto inferior (LAI)
- Límite relativo superior (LRS)
- Límite absoluto superior (LAS)

Establecimiento de límites de velocidad de dosis

Hospira MedNet Meds le permite definir los límites de dosis para las infusiones principales y secundarias. Es importante que comprenda el funcionamiento de los límites de velocidad de dosis, por lo que le recomendamos que lea esta sección detenidamente.

Puede definir los límites absolutos y relativos superiores e inferiores como parte del conjunto de reglas para cada entrada de medicamento creado en la farmacoteca. A medida que configure los límites, el software aplica la siguiente regla:

Límite absoluto inferior (LAI) < Límite relativo inferior (LRI) <= Límite relativo superior (LRS) < Límite absoluto superior (LAS)

Límites relativos

Los *límites relativos* son límites de velocidad de dosis que pueden ignorarse al programar el infusor. Cuando un valor introducido en el infusor es menor que el límite relativo inferior o mayor que el límite relativo superior, aparece un mensaje para que confirme que desea ignorar un límite relativo. El infusor registra las alertas de límite relativo y la respuesta del usuario a la alerta en los registros del historial.

Por ejemplo, si el límite relativo superior está establecido en 15 mL/h y el médico introduce 16 mL/h, aparecerá una alerta de anulación de límite relativo. Esta alerta indica al médico que la entrada está fuera del rango del conjunto de límites relativos establecido para dicha entrada de medicamento. El médico puede continuar con la programación utilizando la anulación, o cancelarla y editar el valor. Los eventos de anulación y edición se registran de forma independiente en el registro del historial del infusor.

Límites absolutos

Los *límites absolutos* son los límites de velocidad de dosis que no pueden anularse. No se puede programar el infusor con una velocidad menor que el límite absoluto inferior o mayor que el límite absoluto superior.

Nota: El peso real del paciente no se introduce hasta que el médico programa el infusor. Por lo tanto, Hospira MedNet Meds Software no puede verificar la validez de un límite inferior al introducir una entrada de medicamento basada en el peso. El infusor realiza la comprobación final cuando el médico programa el infusor.

Límites en bolo (Plum 360 con bolo)

Los *límites en bolo* se pueden definir de tres maneras:

- La **cantidad de bolo mediante bomba** le permite definir la unidad de la cantidad de bolo mediante bomba, establecer límites inferiores y superiores, seleccionar la unidad de bolo máxima y la cantidad máxima de medicamento que se puede administrar en un bolo.
- Los **límites de tiempo del bolo** le permiten definir el periodo de tiempo durante el cual se puede administrar un bolo. Con el límite inferior se define un tiempo de administración de bolo mínimo, mientras que con el límite superior se define un tiempo de administración de bolo máximo.
- Los **límites de velocidad de dosis en bolo** le permiten definir la velocidad a la que se puede administrar un bolo.

Nota: Si define las reglas de bolo con unidades basadas en peso o en el BSA:
Los límites de velocidad de dosis en bolo se pueden definir en función del peso, solo si las unidades de cantidad en bolo también están basadas en peso.
Los límites de velocidad de dosis en bolo se pueden definir en función del BSA, solo si las unidades de cantidad en bolo también están basadas en el BSA.

Reglas y convenciones de entradas de medicamento

Hospira MedNet Meds Software utiliza las siguientes convenciones para las entradas de medicamento de Plum:

- Los conjuntos de reglas completos o limitados requieren al menos un límite absoluto o relativo.
- Para crear entradas de medicamento, agréguelas al Maestro de fármacos o directamente a un AAC. Las entradas de medicamento agregadas a una Lista objetivo de AAC se agregan automáticamente a la lista Maestro de fármacos.
- Los mensajes de "validez" aparecen en rojo en la parte inferior de la ventana Conjunto de reglas. Al introducir un valor no permitido, el mensaje especifica el rango definido para el campo, o el motivo por el que no se permite el valor.
- No puede utilizar los siguientes caracteres en el nombre del medicamento: comas (,), menor que (<), mayor que (>), comillas simples ('), comillas dobles (") y et (&).
- Una vez que seleccione una unidad de medicamento, el campo Unidad de dosificación solo mostrará el tipo de unidad activado.
- El software no acepta las entradas numéricas no válidas y las indica con un "bip".
- Puede utilizar las barras de desplazamiento vertical y horizontal para desplazarse a una entrada.
- Si no selecciona o rellena un campo obligatorio, aparecerá un mensaje de error.
- Al resaltar una entrada de la lista Gestión de la farmacoteca, los botones o características que no se encuentren disponibles aparecerán "atenuados" o desactivados.
- Al agregar un nuevo medicamento al campo Nombre genérico de la ventana Conjunto de reglas, puede escribir los primeros caracteres del nombre genérico de un medicamento para buscarlo. La lista desplegable aparecerá para mostrarle los medicamentos que coincidan.

Conjunto de reglas de medicamentos de Plum 360

La ventana Conjunto de reglas que se muestra aquí sirve para configurar una entrada de medicamento para la farmacoteca de Plum 360.

Lista fuente: Agregar conjunto de reglas

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica):
 Propofol (018) (200 mg / 20 mL) Seleccionar

Nombre mostrado: Propofol Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Propofol 200 mg / 20 mL para uso clínico " __ " dosificados en __

Conjuntos de reglas: Completo

Concentración

Cantidad de medicamento: 200 Unidad de medicamento: mg Cantidad de diluyente: mL: 20

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.

Límites de dosis

Unidad de dosificación: Seleccionar LAI: LRI: LRS: LAS:

Especifique la unidad de dosificación.

Guardar y añadir otra unidad de dosificación Guardar y añadir otro conjunto de reglas Guardar y cerrar Cancelar Ayuda

Plum 360 con bolo activado

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica):
 Amiodarona (002) (150 mg / 3 mL) Seleccionar

Nombre mostrado: Amiodarona Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Amiodarona 450 mg / 250 mL para uso clínico " __ " dosificados en mg/min

Conjuntos de reglas: Completo

Concentración

Cantidad de medicamento: 450 Unidad de medicamento: mg Cantidad de diluyente: mL: 250

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.

Activar bolo

Cantidad de bolos bombeada

Cantidad de bolos bombeada en u... mg LAI: LRI: LRS: LAS:

Unidad de cantidad máxima en bolo: Cantidad máxima en bolo:

Límites de tiempo del bolo (hh:mm:ss): LAI: LRI: LRS: LAS:

Límites de velocidad de dosis en bolo: mg/min LAI: LRI: LRS: LAS:

Límites de dosis

Unidad de dosificación: mg/min LAI: LRI: LRS: LAS: 1

Guardar y cerrar Cancelar Ayuda

Campos Conjunto de reglas

En la siguiente tabla se muestran los campos, una breve descripción y el rango de valores permitido para el infusor.

Cada entrada de medicamento debe tener un nombre genérico y un nombre mostrado; las entradas de medicamento no pueden guardarse sin un nombre en estos campos. El número de caracteres del nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre mostrado puede variar de 17 a 29.

Con el fin de evitar posibles confusiones al crear entradas de medicamento, utilice únicamente el nombre del medicamento en el campo **Nombre mostrado** y asegúrese de que el ID externo coincida exactamente con el utilizado en el formulario de la institución. No incluya el diluyente como parte del nombre del medicamento.

Parámetro	Descripción	Rango permitido
Nombre genérico	Es el nombre del medicamento de la lista de medicamentos. Se selecciona en la lista desplegable y muestra el ID externo (el identificador del hospital para un medicamento). Concentración/ Volumen y Presentación farmacéutica solo aparecen si forman parte de la lista de medicamentos.	No se puede editar en el conjunto de reglas.
Nombre mostrado	Es el nombre que aparecerá en el infusor.	<ul style="list-style-type: none"> Varía según el ancho de los caracteres. No puede estar en blanco. <p>Precaución: No puede utilizar los siguientes caracteres en el nombre mostrado: comas (,), menor que (<), mayor que (>), comillas simples ('), comillas dobles (") y et (&).</p> <p>Nota: La fuente mostrada cambia en el infusor Plum A+ para los nombres largos.</p>
Clase terapéutica	La clase terapéutica asignada a las entradas de medicamento.	No se puede editar en el conjunto de reglas.
ID de clase	El número de ID de la clase terapéutica asignado a la entrada de medicamento.	No se puede editar en el conjunto de reglas.
Cantidad de medicamento	Le permite introducir la cantidad de medicamento en las unidades seleccionadas. La combinación de cantidad de medicamento, unidad de medicamento y cantidad de diluyente crea la concentración del medicamento.	<p>Para cantidades de medicamento en mcg, mg, g, mEq, millones de unidades o mmol:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,1–9999 y "en blanco". <p>Para cantidades de medicamento en unidades: 0,1–99999999 y "en blanco".</p>
Unidad de medicamento	Le permite seleccionar la unidad de medida de la cantidad de medicamento.	mcg, mg, g, mEq, mmol o millones de unidades.

Parámetro	Descripción	Rango permitido
Cantidad de diluyente	Le permite establecer la cantidad de diluyente asociada a la entrada de medicamento. La cantidad de diluyente variará según el tamaño del recipiente, el sobrellenado y el volumen de la solución agregada.	<ul style="list-style-type: none"> 0,1–9999 y "en blanco".
Administración de infusión secundaria permitida	Le permite activar una infusión alternativa.	Marcada (activada) o no marcada (la funcionalidad no está activada).
Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión	Le permite configurar si una infusión alternativa puede interrumpir este medicamento.	Marcada (activada) o no marcada (la funcionalidad no está activada).
Unidad de dosificación	Le permite establecer la unidad de dosificación estándar para el medicamento. Este será el valor predeterminado que aparecerá en el infusor.	Para obtener información completa sobre las unidades de dosificación, consulte el manual de uso del sistema de su infusor.
LAI, LRI, LRS, LAS	<p>Límite absoluto inferior, límite relativo inferior, límite relativo superior, límite absoluto superior.</p> <p>Le permite establecer los límites de velocidad de dosificación superior o inferior para el medicamento seleccionado.</p>	Las unidades de los límites relativos y absolutos coinciden con las unidades de dosificación seleccionadas en el conjunto de reglas de medicamentos.
Activar bolo (Plum 360 con bolo)	Unidades de cantidad en bolo mediante bomba y Unidades de velocidad de dosis en bolo dependen de la selección de la unidad de medicamento.	La unidad de medicamento seleccionada determinará las unidades de bolo permitidas que se pueden seleccionar en la lista desplegable de los campos disponibles.
Nota: Consulte el manual de uso del sistema para obtener instrucciones detalladas y conocer el rango permitido.		

Procedimientos paso a paso

La siguiente sección presenta procedimientos paso a paso que le permitirán crear y gestionar entradas de medicamento. En esta sección le mostraremos cómo hacer lo siguiente:

- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas completo a un AAC
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas limitado a un AAC
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas solo etiqueta a un AAC
- Editar una entrada de medicamento en un AAC
- Ver una entrada de medicamento en un AAC
- Eliminar una entrada de medicamento de un AAC
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas completo al Maestro de fármacos
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas limitado al Maestro de fármacos
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas solo etiqueta al Maestro de fármacos
- Editar una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos
- Ver una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos
- Eliminar una entrada de medicamento del Maestro de fármacos
- Copiar una entrada de medicamento del Maestro de fármacos en un AAC de destino

Trabajo con entradas de medicamento de AAC

Nota: Al agregar entradas de medicamento a la Lista objetivo, se actualizan el AAC seleccionada y el Maestro de fármacos. Al realizar la adición a la lista fuente, solo se actualiza el Maestro de fármacos.

El número máximo de entradas de medicamento permitido en una AAC es 150-400 según su licencia.


En la Lista objetivo, las entradas de medicamento creadas se agrupan por nombre mostrado y concentración. Si no hay grupos de entradas de medicamento con los mismos nombres mostrados y concentraciones, la entrada aparecerá en la parte inferior de la lista de entradas de medicamento.

En el grupo hay una ordenación.

- Usó clínico con el ajuste Predeterminado de Uso clínico encabezando la serie
- Cada grupo en orden alfabético
- Unidades de dosificación

Para agregar una entrada de medicación con un conjunto de reglas completo establecido en un AAC, haga lo siguiente:

- Seleccione el AAC deseado en el menú desplegable Lista objetivo.

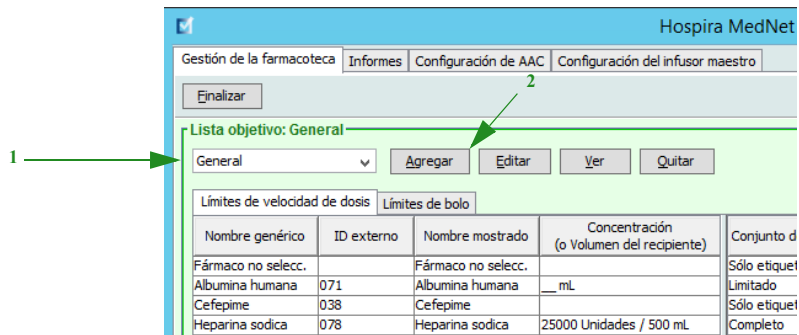

- En Lista objetivo, haga clic en **Agregar**.

3. Seleccione el nombre genérico de un medicamento.

Nota: Al seleccionar un nombre genérico en la lista se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

3

Nombre genérico	Denominación comercial	ID externo	Concen...	Volumen	Presentación f...
Dextrosa 10%		093	10 %		
Dextrosa 5%		092	5 %		
Dipirona		015	1 gr	2 mL	
Dipirona		075	1000 mg	2 mL	
Dobutamina		003	250 mg	20 mL	
Dopamina		004	200 mg	5 mL	
Doripenem		049	500 mg		
Ertapenem		050	1000 mg		
Esomeprazol		076	40 mg		
Fenitoina		082	250 mg	5 mL	

Medicamento seleccionado

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica)

Dopamina (004) (200 mg / 5 mL)

Nombre mostrado: Dopamina Clase terapéutica: ID de clase:

Conjuntos de reglas: Completo

Concentración

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista **Nombre genérico**, puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

Nota: El campo **Nombre mostrado** puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto u otro nombre único. El número máximo de caracteres en Nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

4. Seleccione **Completo** (si no se ha seleccionado) en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.

- Introduzca una cantidad de medicamento. Seleccione una unidad de medicamento en la lista desplegable e introduzca una cantidad de diluyente si lo desea.

Especifique una entrada de medicamento

Todos los medicamentos

Mostrar: nombres genéricos que comienzan con

Nombre genérico	Denominación comercial	ID externo	Concen...	Volumen	Presentación f...
Dextrosa 10%		093	10 %		
Dextrosa 5%		092	5 %		
Dipirona		015	1 gr	2 mL	
Dipirona		075	1000 mg	2 mL	
Dobutamina		003	250 mg	20 mL	
Dopamina		004	200 mg	5 mL	
Doripenem		049	500 mg		
Ertapenem		050	1000 mg		
Esomeprazol		076	40 mg		
Fenitoina		082	250 mg	5 mL	

Medicamento seleccionado

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica}:

Dopamina (004) (200 mg / 5 mL)

Nombre mostrado: Clase terapéutica: ID de clase:

Conjuntos de reglas:

4

Concentración

Cantidad de medicamento: Unidad de medicamento: Cantidad de diluyente: mL

5

6 Administración de infusión secundaria permitida

7 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

8

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.

- Coloque una marca de verificación en la casilla junto a Administración de infusión secundaria permitida si lo desea.
- Coloque una marca de verificación en la casilla junto a Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión si lo desea.
- Introduzca un uso clínico si lo desea.
- Haga clic en **Siguiente**.

10. Seleccione la unidad de dosificación en el menú desplegable e introduzcan los valores de los límites relativos y absolutos (debe especificar un límite como mínimo).
11. Una vez que introduzca un valor para Límites y unidades de dosificación, podrá agregar tres unidades de dosificación más, hasta llegar a las cuatro unidades de dosificación en total para la entrada de medicamento seleccionada con los mismos nombres mostrados y concentraciones.

Puede agregar cada selección al hacer clic en el signo más verde "+".

Nota: Una pestaña con el texto en rojo indica la existencia de límites de dosificación o unidades de dosificación incompletos o no válidos.

12. Haga clic en **Guardar y añadir otro conjunto de reglas** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al AAC.

o

Si tiene un infusor con bolo activado puede poner una marca de verificación junto a **Activar bolo** si desea establecer límites de dosis en bolo para este medicamento (opcional).

Solo para Plum 360 con bolo:

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica}:
Amiodarona (002) (150 mg / 3 mL) Seleccionar

Nombre mostrado: Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Amiodarona 450 mg / 250 mL para uso clínico "___" dosificados en mg/min

Conjuntos de reglas:

Concentración

Cantidad de medicamento: Unidad de medicamento: Cantidad de diluyente: mL

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.

Activar bolo

Cantidad de bolus bombeada

Cantidad de bolus bombeada en u... LAI: LRI: LRS: LAS:

Unidad de cantidad máxima en bolo: Cantidad máxima en bolo:

Límites de tiempo del bolo (hhhh:mm): LAI: LRI: LRS: LAS:

Límites de velocidad de dosis en bolo: Unidad de velocidad de dosis del bolo: LAI: LRI: LRS: LAS:

Límites de dosis

Unidad de dosificación: LAI: LRI: LRS: LAS:

Para establecer un bolo:


- a. Seleccione la **unidad de la cantidad en bolo mediante bomba** en el menú desplegable. (Las unidades permitidas vienen determinadas por la selección de la unidad del medicamento). Introduzca los valores deseados para Límite absoluto inferior, Límite relativo inferior, Límite absoluto superior y Límite relativo superior.

Introduzca la **unidad** y la **cantidad de bolo máxima** si lo desea. Estos campos se activan si la unidad de límites de cantidad en bolo se basa en el peso o en el BSA.

- b. Introduzca los valores que desee para los **límites de tiempo de bolo**: Límite absoluto inferior, Límite relativo inferior, Límite absoluto superior y Límite relativo superior.
- c. Seleccione los límites de velocidad de dosis en bolo de la lista desplegable e introduzca los valores deseados para Límite absoluto inferior, Límite relativo inferior, Límite absoluto superior y Límite relativo superior.
- d. Haga clic en **Guardar y cerrar**.


Para agregar una entrada de medicación con un conjunto de reglas limitado establecido en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC deseado en el menú desplegable Lista objetivo.
2. En Lista objetivo, haga clic en **Agregar**.

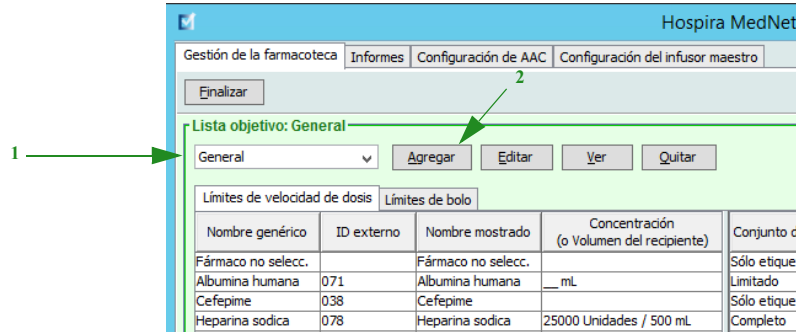

3. Seleccione el nombre genérico de un medicamento.

Nota: Al seleccionar un nombre genérico en la lista se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

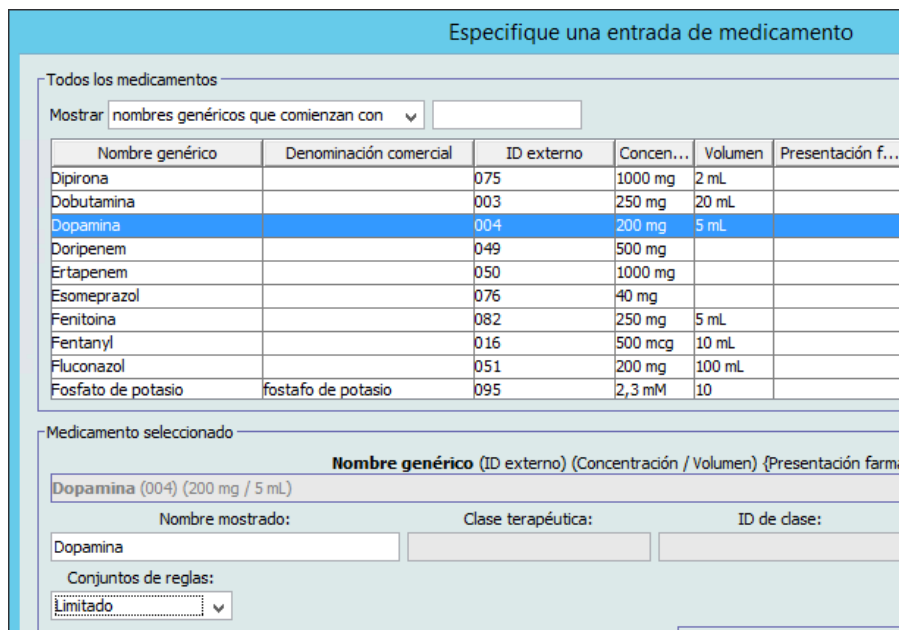

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista **Nombre genérico**, puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

4. El campo **Nombre mostrado** puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto u otro nombre único. El número máximo de caracteres en Nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

5. Seleccione **Limitado** (si no se ha seleccionado) en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
6. Introduzca un volumen de recipiente si lo desea.
7. Coloque una marca de verificación en la casilla junto a Administración de infusión secundaria permitida si lo desea.
8. Coloque una marca de verificación en la casilla junto a Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión si lo desea.
9. Introduzca un uso clínico si lo desea.

Especifique una entrada de medicamento x

Todos los medicamentos

Mostrar nombres genéricos que comienzan con

Nombre genérico	Denominación comercial	ID externo	Concen...	Volumen	Presentación f...
Dipirona		075	1000 mg	2 mL	
Dobutamina		003	250 mg	20 mL	
Dopamina		004	200 mg	5 mL	
Doripenem		049	500 mg		
Ertapenem		050	1000 mg		
Esomeprazol		076	40 mg		
Fenitoina		082	250 mg	5 mL	
Fentanyl		016	500 mcg	10 mL	
Fluconazol		051	200 mg	100 mL	
Fosfato de potasio	fosfafo de potasio	095	2,3 mM	10	

Medicamento seleccionado

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):

Dopamina (004) (200 mg / 5 mL)

Nombre mostrado: Dopamina Clase terapéutica: ID de clase:

Conjuntos de reglas:

Limitado ▼

Volumen del recipiente:...

Administración de infusión secundaria permitida

Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.

Siguiente
Cancelar
Ayuda

10. Haga clic en **Siguiente**.

11. Seleccione la unidad de dosificación en el menú desplegable e introduzcan los valores de los límites relativos y absolutos (debe especificar un límite como mínimo).
12. Una vez que introduzca un valor para Límites y unidades de dosificación, podrá agregar tres unidades de dosificación más, hasta llegar a las cuatro unidades de dosificación en total para la entrada de medicamento seleccionada con los mismos nombres mostrados y concentraciones.

Puede agregar cada selección al hacer clic en el signo más verde "+".

Nota: Una pestaña con el texto en rojo indica la existencia de límites de dosificación o unidades de dosificación incompletos o no válidos.


13. Haga clic en **Guardar y añadir otro conjunto de reglas** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al AAC.

o

Si tiene un infusor con bolo activado puede poner una marca de verificación junto a **Activar bolo** si desea establecer límites de dosis en bolo para este medicamento. Consulte [Para establecer un bolo](#): en la página 101.


Para agregar una entrada de medicamento de conjunto de reglas sólo etiqueta en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC deseado en el menú desplegable Lista objetivo.

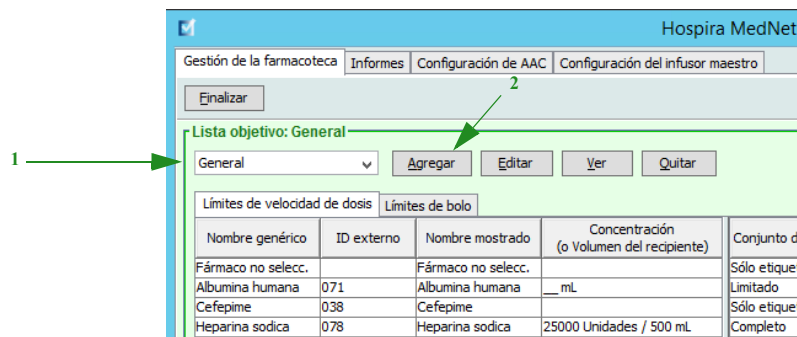

2. En Lista objetivo, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de un medicamento.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

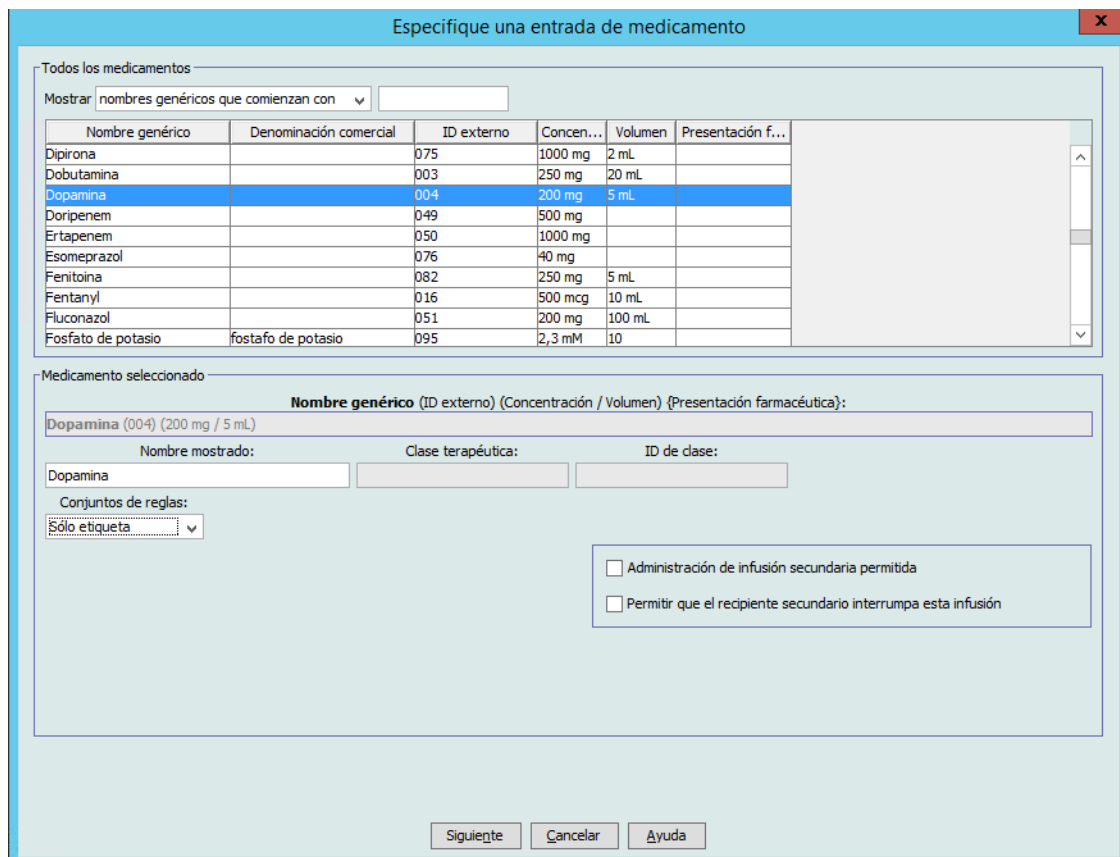

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista **Nombre genérico**, puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.


4. El campo **Nombre mostrado** puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto u otro nombre único. El número máximo de caracteres en Nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.
5. Seleccione **Solo etiqueta** en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
6. Coloque una marca de verificación en la casilla junto a **Administración de infusión secundaria permitida** si lo desea.
7. Coloque una marca de verificación en la casilla junto a **Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión** si lo desea.
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al AAC.

o

Si tiene un infusor con bolo activado puede poner una marca de verificación junto a **Activar bolo** si desea establecer límites de dosis en bolo para este medicamento. Consulte [Para establecer un bolo](#): en la página 101.

Para editar una entrada de medicamento en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC que contenga la entrada de medicamento que desee ver en el menú desplegable Lista objetivo.

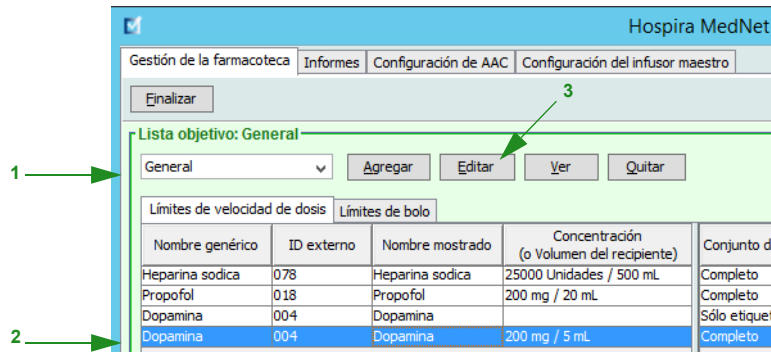


2. Seleccione la entrada de medicamento que desee editar en Lista objetivo.
3. Haga clic en **Editar**.

Sugerencia útil: También puede hacer doble clic en una entrada de medicamento para ver el cuadro de diálogo **Conjunto de reglas**.

4. Realice los cambios que desee.

Nota: No se pueden cambiar los campos **Clase terapéutica** o **ID de clase** al editar una entrada de medicamento en un AAC.

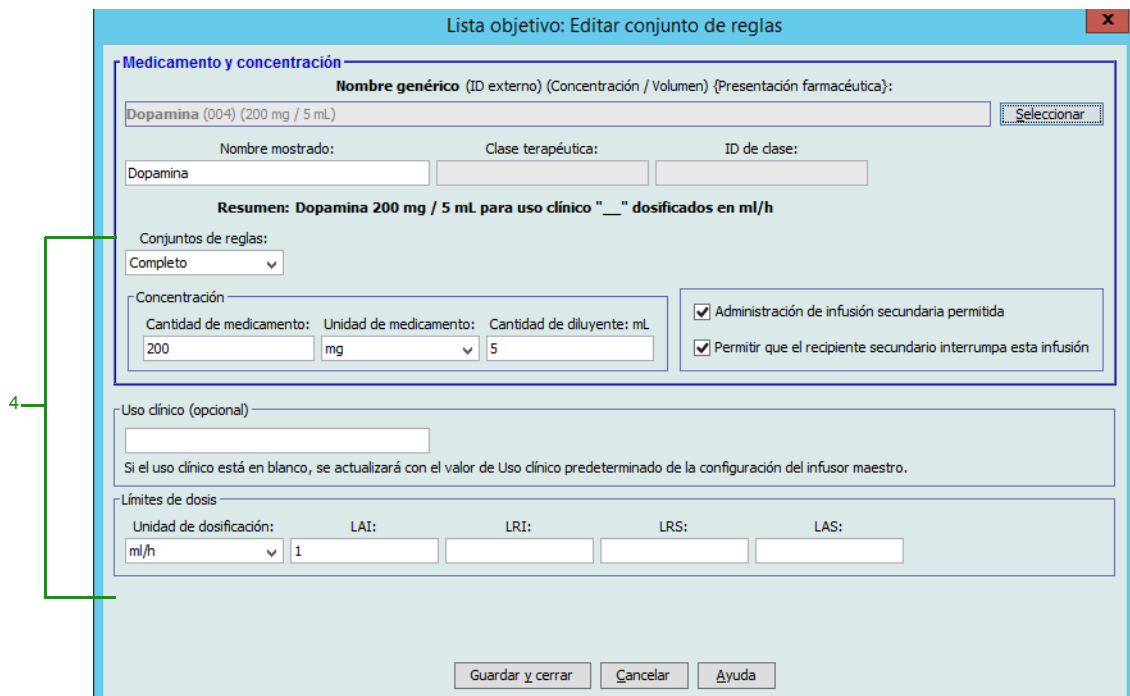


5. Haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar los cambios.


Nota: Si la entrada de medicamento editada se asigna a una sola AAC, la entrada de medicamento también se actualizará con el mismo cambio en el Maestro de fármacos. Si la entrada de medicamento editada se asigna a varias AAC, se creará una nueva entrada de medicamento en el Maestro de fármacos.

Para ver una entrada de medicamento en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC que contenga la entrada de medicamento que desee ver en el menú desplegable Lista objetivo.

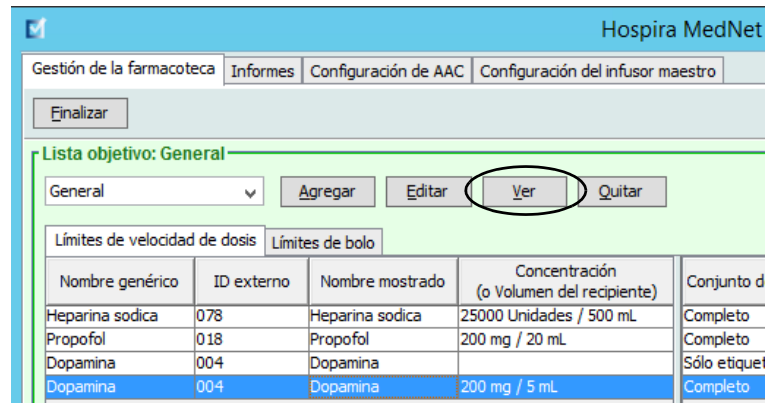


2. Seleccione la entrada de medicamento que desee ver en Lista objetivo.
3. Haga clic en **Ver**.

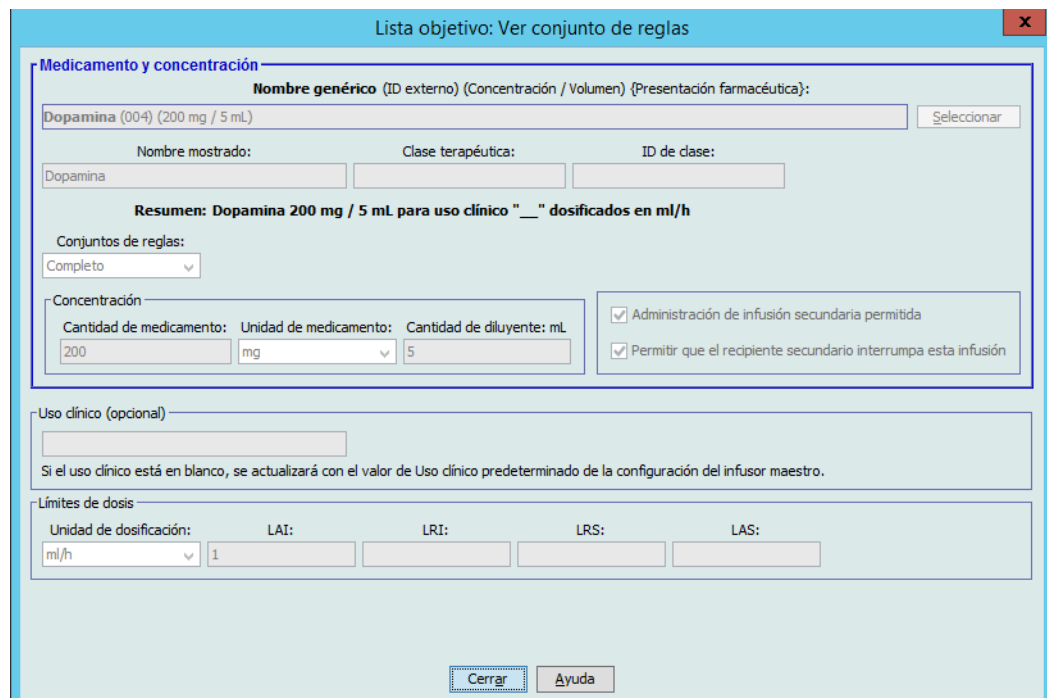


4. Haga clic en **Cerrar** para salir de la pantalla.

Para eliminar una entrada de medicamento de un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC que contenga la entrada de medicamento que desee eliminar en el mensaje desplegable Lista objetivo.

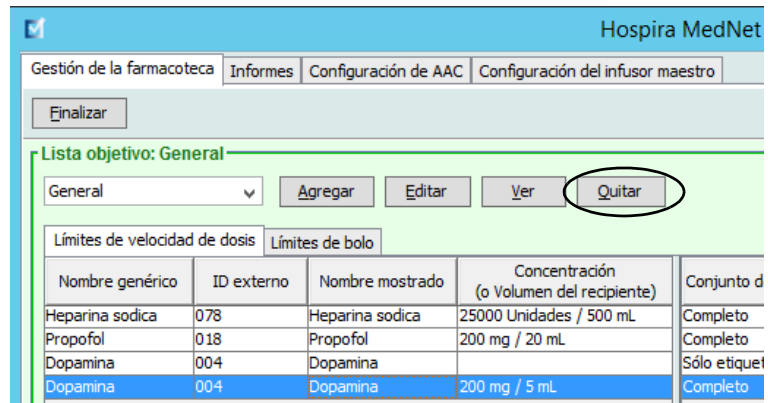

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee eliminar.
3. Haga clic en **Quitar**.

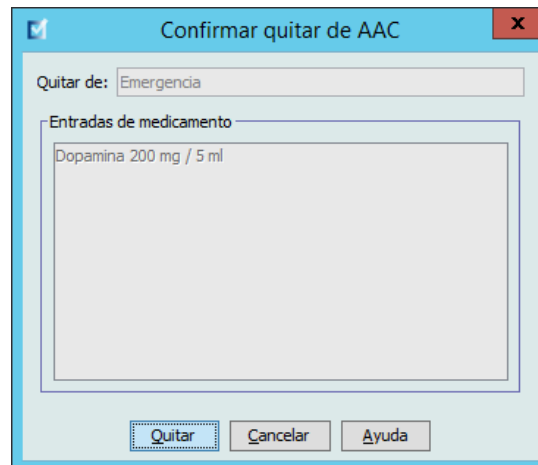


4. Para confirmar que desea quitarla del AAC, haga clic en **Quitar**.

Trabajo con el Maestro de fármacos

El Maestro de fármacos puede contener entradas de medicamentos no asignados a un AAC para facilitar su uso en el futuro. El número total de entradas de medicamento en el Maestro de fármacos para el infusor Plum A+ no puede ser mayor que 3510.


Para agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas completo al Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

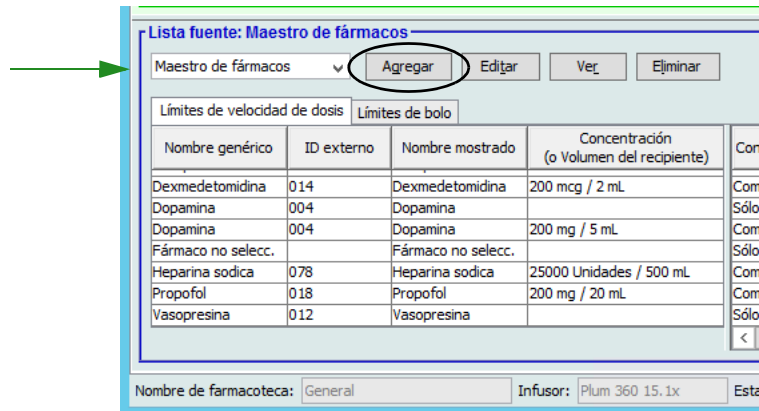

2. En Lista fuente, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

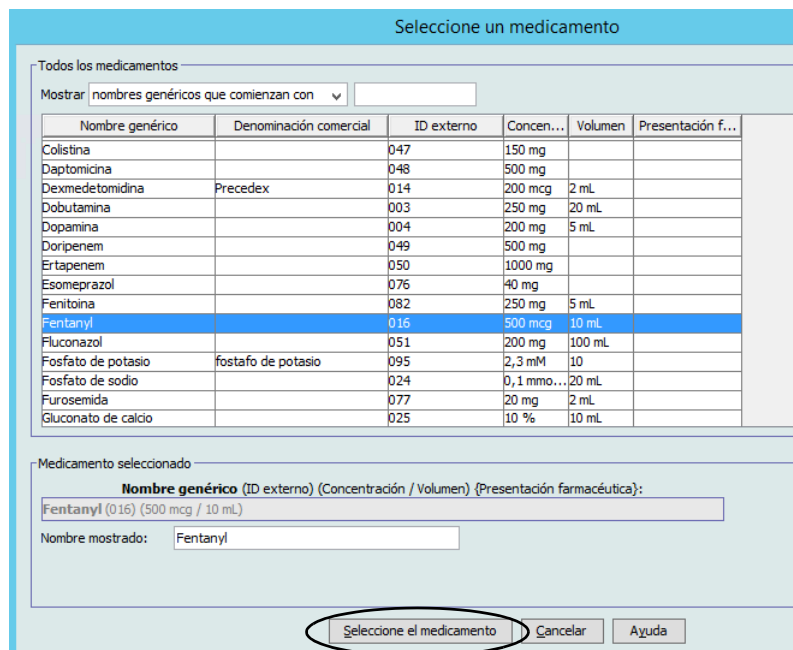

4. Haga clic en **Seleccione el medicamento**.

Nota: El campo **Nombre mostrado** no puede dejarse en blanco. El número máximo de caracteres en un nombre de medicamento depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor tras su descarga. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico**, puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

5. Seleccione **Completo** (si no se ha seleccionado todavía) en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
6. Introduzca una **cantidad de medicamento** (opcional), seleccione la **unidad de medicamento** y la **cantidad de diluyente** (opcional).

7. Seleccione la unidad de dosificación y escriba los valores de los límites relativos y absolutos (debe especificar un límite como mínimo).
8. Haga clic en **Guardar y añadir otra unidad de dosificación** o en **Guardar y cerrar**

o
Si tiene un infusor con bolo activado puede poner una marca de verificación junto a **Activar bolo** si desea establecer límites de dosis en bolo para este medicamento. Consulte [Para establecer un bolo](#): en la página 101.

Nota: Al agregar una entrada de medicamento al Maestro de fármacos, no se asigna a otra AAC.

Para agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas limitado al Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.
2. En Lista fuente, haga clic en **Agregar**.

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Con...
Dexmedetomidina	014	Dexmedetomidina	200 mcg / 2 mL	Com...
Dopamina	004	Dopamina		Sólo
Dopamina	004	Dopamina	200 mg / 5 mL	Com...
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo
Heparina sodica	078	Heparina sodica	25000 Unidades / 500 mL	Com...
Propofol	018	Propofol	200 mg / 20 mL	Com...
Vasopresina	012	Vasopresina		Sólo

Nombre de farmacoteca: General Infusor: Plum 360 15.1x Esta

3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

Nombre genérico	Denominación comercial	ID externo	Concen...	Volumen	Presentación f...
N- acetilcisteina		069	300 mg	3 mL	
Nitroglicerina		009	50 mg	10 mL	
Nitroprusiato		010	50 mg	2 mL	
Norepinefrina		011	4 mg	4 mL	
NUTRICION PARENTERAL	NPT	096	1 CC		
Oxacilina		058	1000 mg		
Piperacilina Tazobactam		059	4500 mg		
Propofol		018	200 mg	20 mL	
PURGADO	PURGADO	099	20 mL		
Ranitidina		085	50 mg	2 mL	
Remifentanyl		019	2 mg		
Solucion Hartman		088			
SOLUCION SALINA 0.45	SOLUCION SALINA 0.45	097	0,45 %		
Solucion salina Normal		087	0,9 %	500 mL	
SOMATOSTATINA	Somatostatina	098	3 mg		
Sulfato de Mg		026	20 %	10 mL	
Tigeciclina		066	50 mg		
Tramal		086	50 mg	1 mL	
Trimetoprim		067	80 mg	5 mL	
Vancomicina		060	500 mg		
Vasopresina		012	20 Unid...	1 mL	
Vecuronio		020	10 mg		
Voriconazol		068	200 mg		

Medicamento seleccionado

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):
 Vancomicina (060) (500 mg /)

Nombre mostrado: Vancomicina

Botones: Seleccione el medicamento, Cancelar, Ayuda

4. Haga clic en **Seleccione el medicamento**.

Nota: El campo **Nombre mostrado** no puede dejarse en blanco. El número máximo de caracteres en un nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor tras su descarga. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico**, puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

5. Seleccione **Limitado** en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.

6. Introduzca la cantidad en **Volumen de recipiente** (opcional).

7. Seleccione mL/h e introduzca los valores de los límites relativos y absolutos (debe especificar un límite como mínimo).

8. Haga clic en **Guardar y añadir otra unidad de dosificación** o en **Guardar y añadir otro conjunto de reglas** o en **Cerrar**


o

Si tiene un infusor con bolo activado puede poner una marca de verificación junto a **Activar bolo** si desea establecer límites de dosis en bolo para este medicamento. Consulte [Para establecer un bolo](#): en la página 101.

Nota: Al agregar una entrada de medicamento al Maestro de fármacos, no se asigna a otra AAC.


Para agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas solo etiqueta al Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

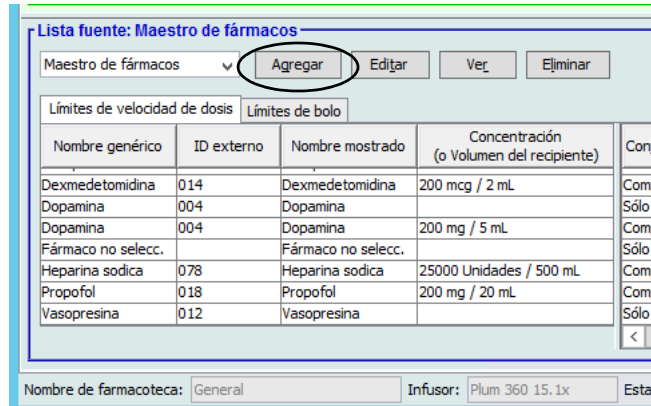

2. En Lista fuente, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

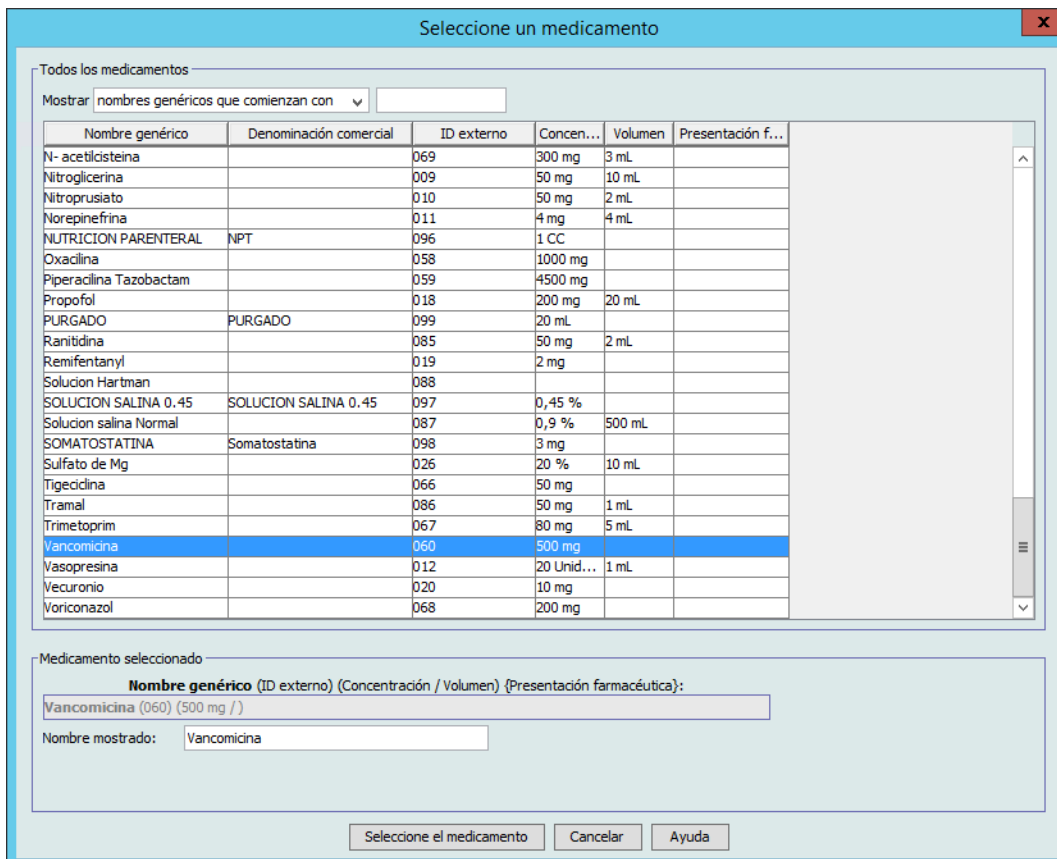

Nota: El campo **Nombre mostrado** no puede dejarse en blanco. El número máximo de caracteres en un nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor tras su descarga. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico** (o si no aparece ningún nombre genérico en la lista), puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

4. Seleccione **Solo etiqueta** en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
5. Coloque una marca de verificación en la casilla junto a **Administración de infusión secundaria permitida** si lo desea.
6. Haga clic en **Guardar y cerrar**


o

Si tiene un infusor con bolo activado puede poner una marca de verificación junto a **Activar bolo** si desea establecer límites de dosis en bolo para este medicamento. Consulte [Para establecer un bolo](#): en la página 101.

Nota: Al agregar una entrada de medicamento al Maestro de fármacos, no se asigna a otra AAC.

Para editar una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

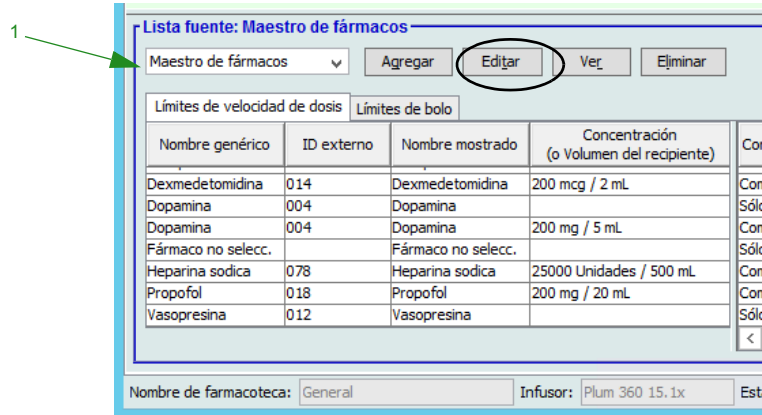

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee editar en Lista fuente.
3. Haga clic en **Editar**.

Sugerencia útil: También puede hacer doble clic en una entrada de medicamento para ver el cuadro de diálogo **Conjunto de reglas**.

4. Realice los cambios que desee.

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):
 Dopamina (004) (200 mg / 5 mL) [Seleccionar]

Nombre mostrado: Dopamina Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Dopamina 200 mg / 5 mL para uso clínico " " dosificados en mL/h

Conjuntos de reglas: Completo

Concentración

Cantidad de medicamento: 200 Unidad de medicamento: mg Cantidad de diluyente: mL: 5

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.

Límites de dosis

Unidad de dosificación: mL/h LAI: LRI: LRS: LAS: 1

[Guardar y cerrar] [Cancelar] [Ayuda]

5. Haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar los cambios.

Importante: Al cambiar la unidad de dosificación o la unidad de medicación se eliminarán todos los Límites introducidos anteriormente.

Nota: Al editar una entrada de medicamento, los cambios aparecen reflejados en el Maestro de fármacos y aparece un mensaje emergente de confirmación con las AAC afectadas.

Para ver una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** en Lista fuente.

Lista fuente: Maestro de fármacos

Maestro de fármacos ▼ Agregar Editar Ver **Eliminar**

Límites de velocidad de dosis Límites de bolo

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Con
Dexmedetomidina	014	Dexmedetomidina	200 mcg / 2 mL	Com
Dopamina	004	Dopamina		Sólo
Dopamina	004	Dopamina	200 mg / 5 mL	Com
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo
Heparina sodica	078	Heparina sodica	25000 Unidades / 500 mL	Com
Propofol	018	Propofol	200 mg / 20 mL	Com
Vasopresina	012	Vasopresina		Sólo

Nombre de farmacoteca: General Infusor: Plum 360 15.1x Esta

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee ver en Lista fuente.
3. Haga clic en **Ver**.

Lista fuente: Ver conjunto de reglas

Medicamento y concentración

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):
 Dopamina (004) (200 mg / 5 mL) Seleccionar

Nombre mostrado: Dopamina Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Dopamina 200 mg / 5 mL para uso clínico "..." dosificados en mL/h

Conjuntos de reglas: Completo ▼

Concentración

Cantidad de medicamento: 200 Unidad de medicamento: mg Cantidad de diluyente: mL

Administración de infusión secundaria permitida
 Permitir que el recipiente secundario interrumpa esta infusión

Uso clínico (opcional)

Si el uso clínico está en blanco, se actualizará con el valor de Uso clínico predeterminado de la configuración del infusor maestro.

Límites de dosis


Unidad de dosificación: mL/h LAI: LRI: LRS: LAS: 1

Cerrar Ayuda


4. Haga clic en **Cerrar** para salir de la pantalla.

Para eliminar una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** en Lista fuente.

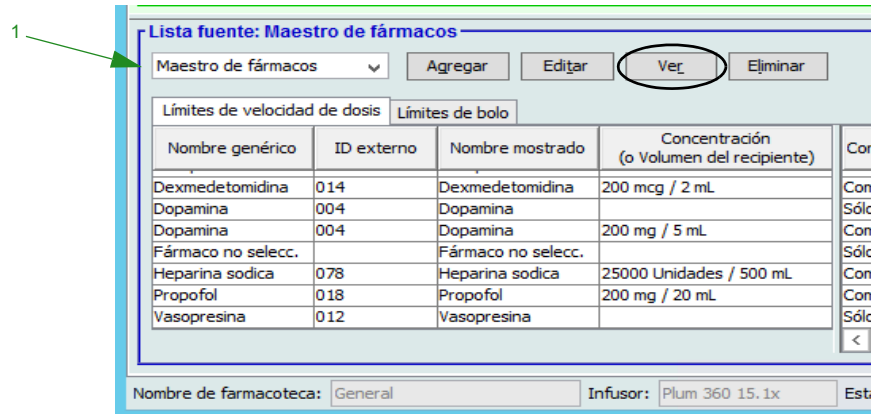


2. Seleccione la entrada de medicamento que desee eliminar en Lista fuente.
3. Haga clic en **Eliminar**.

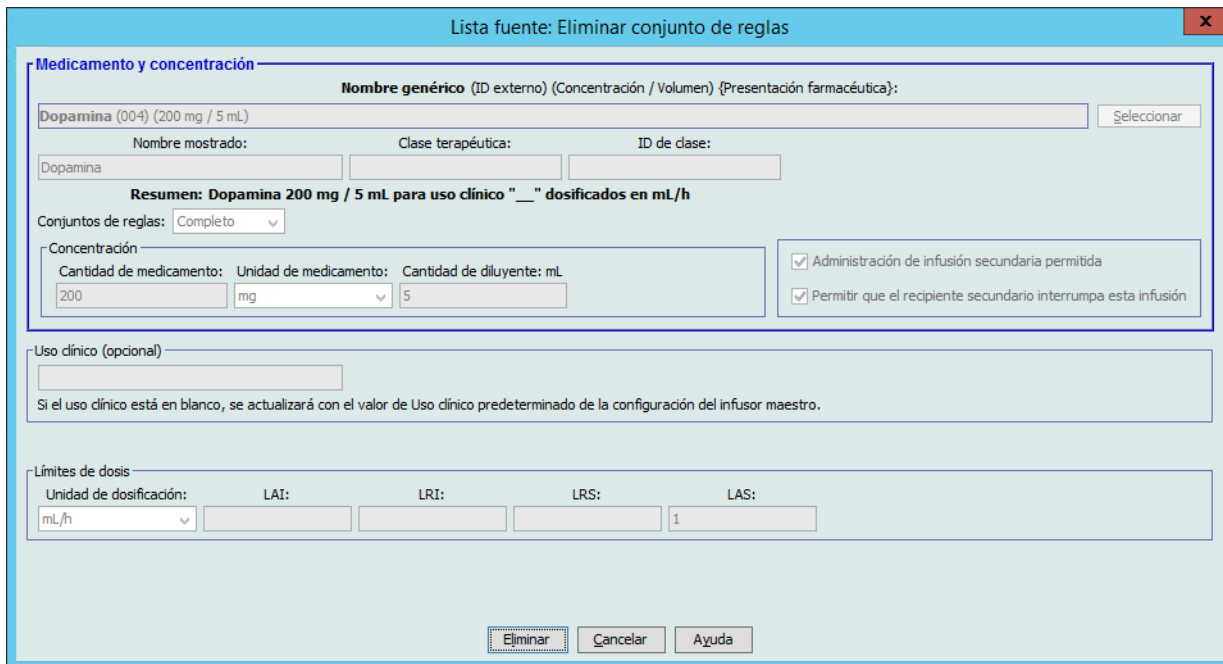

4. Haga clic en **Eliminar**.

El siguiente mensaje emergente solo aparecerá si la entrada de medicamento está asignada a una o varias AAC.

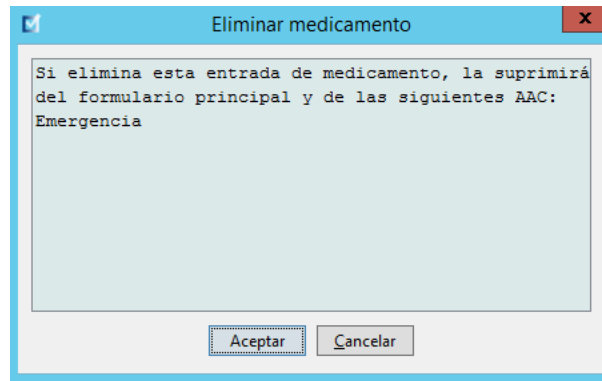


5. Haga clic en **Aceptar**.

Para copiar en el AAC objetivo, haga lo siguiente:


1. Seleccione una entrada de medicamento del Maestro de fármacos.

Nota: Es necesario seleccionar una AAC de Lista objetivo antes de poder copiar una entrada de medicamento en un AAC objetivo en el Maestro de fármacos.

2. Haga clic en **Copiar en AAC objetivo**.

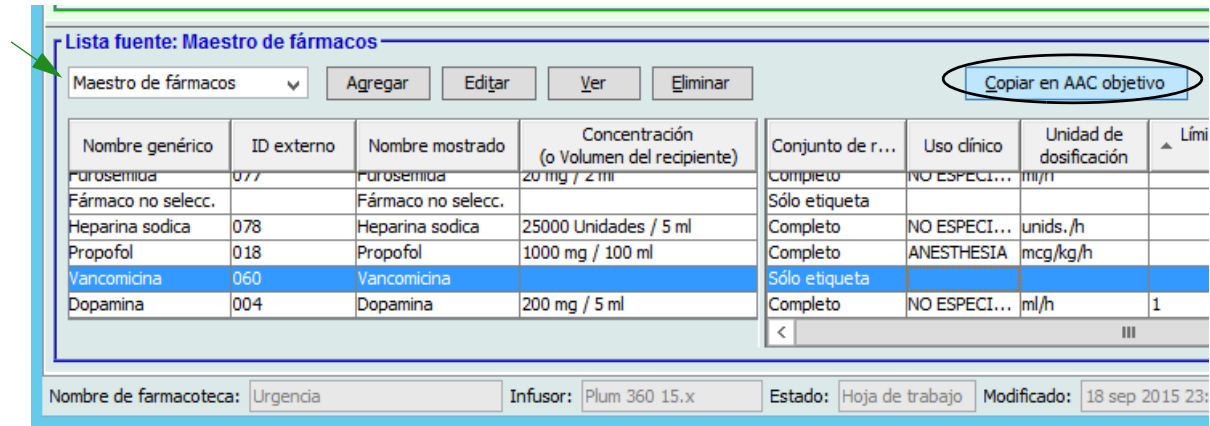

3. Haga clic en **Copiar** en el mensaje emergente **Confirmar copiar en AAC**.

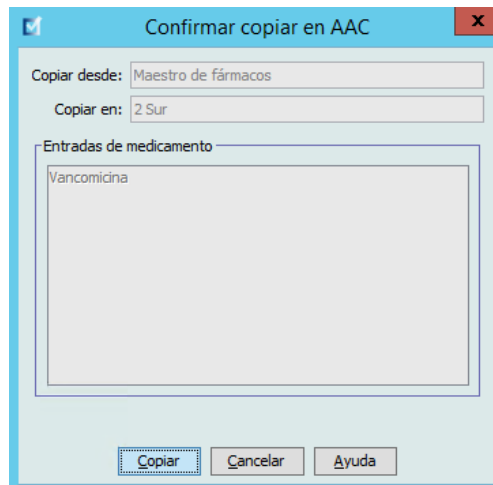

Parte 2: Plum A+

Definición de conjuntos de reglas

Conjunto de reglas completo

Un conjunto de reglas completo le permite introducir una concentración completa (por ejemplo 250 mg/500 mL) o una concentración parcial (por ejemplo, 250 mg/_ mL, _mg/500 mL o _mg/_mL). Al crear una entrada de medicamento para las concentraciones estándares de cualquier medicamento, se reduce el número de pasos de programación del infusor que debe realizar el médico. Como mínimo, **se debe** introducir un valor de límite de dosificación para cada conjunto de reglas completo.

Al dejar las cantidades de medicamentos o diluyentes en blanco, el médico puede introducir una concentración no estándar en el momento de la programación. En el caso de los conjuntos de reglas definidos con una concentración parcial, el médico deberá introducir los valores de concentración si la unidad de dosificación no es mL/h. Si la unidad de dosificación es mL/h, no es necesario introducir la información de concentración.

Conjunto de reglas limitado

Los conjuntos de reglas limitados no requieren la definición de la concentración. Como mínimo, se debe introducir un valor de límite de dosificación para cada conjunto de reglas limitado. El campo Volumen de recipiente es opcional. Al programar el infusor para un medicamento con un conjunto de reglas limitado, el clínico solo introduce la velocidad, el volumen a infundir (VAI) y la duración.

The screenshot shows a dialog box titled "Lista fuente: Agregar conjunto de reglas" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is light blue and contains the following fields and controls:

- Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica}:** A text input field containing "Dopamina (004) (200 mg / 5 mL)" and a "Seleccionar" button to its right.
- Nombre mostrado:** A text input field containing "Dopamina".
- Clase terapéutica:** An empty text input field.
- ID de clase:** An empty text input field.
- Resumen:** A label "Resumen: Dopamina __ mL dosificado en mL/h" with a blank space for the value.
- Conjuntos de reglas:** A dropdown menu currently set to "Limitado".
- Volumen del recipiente:...** An empty text input field.
- Límites de dosis:** A section containing:
 - Unidad de dosificación:** A dropdown menu set to "mL/h".
 - LAI:** A text input field containing "10".
 - LRI:** An empty text input field.
 - LRS:** An empty text input field.
 - LAS:** An empty text input field.
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: "Guardar y agregar otro", "Guardar y cerrar", "Cancelar", and "Ayuda".

Conjunto de reglas solo etiqueta

Un conjunto de reglas solo etiqueta permite que el médico vea el nombre del medicamento en el infusor. No hay límites de dosificación asociados a los conjuntos de reglas solo etiqueta. El médico selecciona las unidades de dosificación durante la programación. Si la unidad de dosificación no es mL/h, el médico también debe introducir los valores de concentración.

The screenshot shows a dialog box titled "Lista fuente: Agregar conjunto de reglas" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is light blue and contains the following fields and controls:

- Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica}:** A text input field containing "Aciclovir (027) (250 mg /)" and a "Seleccionar" button to its right.
- Nombre mostrado:** A text input field containing "Aciclovir".
- Clase terapéutica:** An empty text input field.
- ID de clase:** An empty text input field.
- Resumen:** A label "Resumen: Aciclovir".
- Conjuntos de reglas:** A dropdown menu currently set to "Sólo etiqueta".
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: "Guardar y agregar otro", "Guardar y cerrar", "Cancelar", and "Ayuda".

Cada tipo de conjunto de reglas hará que el medicamento aparezca de forma diferente en la lista de medicamentos en el infusor.

Para crear entradas de medicamento, agréguelas al Maestro de fármacos o directamente a un AAC. Las entradas de medicamento agregadas a un AAC se agregan automáticamente al Maestro de fármacos.

En un AAC, los ID externos y las concentraciones de dos entradas de medicamento no pueden ser idénticos. Así mismo, los nombres mostrados y las concentraciones de dos entradas de medicamento no pueden ser idénticos.

En el Maestro de fármacos, el nombre mostrado, la cantidad de medicamento, la unidad de medicamento, la cantidad de diluyente y las unidades de dosificación de dos entradas de medicamento pueden ser idénticos, siempre que uno o varios de los siguientes límites sean diferentes:

- Límite relativo inferior (LRI)
- Límite absoluto inferior (LAI)
- Límite relativo superior (LRS)
- Límite absoluto superior (LAS)

Establecimiento de límites de velocidad de dosis

Hospira MedNet Meds le permite definir los límites de dosis para las infusiones principales y secundarias. Es importante que comprenda el funcionamiento de los límites de velocidad de dosis, por lo que le recomendamos que lea esta sección detenidamente.

Puede definir los límites absolutos y relativos superiores e inferiores como parte del conjunto de reglas para cada entrada de medicamento creado en la farmacoteca. A medida que configure los límites, el software aplica la siguiente regla:

Límite absoluto inferior (LAI) < Límite relativo inferior (LRI) <= Límite relativo superior (LRS) < Límite absoluto superior (LAS)

Límites relativos

Los *límites relativos* son límites de velocidad de dosis que pueden ignorarse al programar el infusor. Cuando un valor introducido en el infusor es menor que el límite relativo inferior o mayor que el límite relativo superior, aparece un mensaje para que confirme que desea ignorar un límite relativo. El infusor registra las alertas de límite relativo y la respuesta del usuario a la alerta en los registros del historial.

Por ejemplo, si el límite relativo superior está establecido en 15 mL/h y el médico introduce 16 mL/h, aparecerá una alerta de anulación de límite relativo. Esta alerta indica al médico que la entrada está fuera del rango del conjunto de límites relativos establecido para dicha entrada de medicamento. El médico puede continuar con la programación utilizando la anulación, o cancelarla y editar el valor. Los eventos de anulación y edición se registran de forma independiente en el registro del historial del infusor.

Límites absolutos

Los *límites absolutos* son los límites de velocidad de dosis que no pueden anularse. No se puede programar el infusor con una velocidad menor que el límite absoluto inferior o mayor que el límite absoluto superior. (Estos eventos no se registran en el archivo de registro del historial de los infusores Plum con las versiones de software anteriores a 13.4).

Nota: El peso real del paciente no se introduce hasta que el médico programa el infusor. Por lo tanto, Hospira MedNet Meds Software no puede verificar la validez de un límite inferior al introducir una entrada de medicamento basada en el peso. El infusor realiza la comprobación final cuando el médico programa el infusor.

Reglas y convenciones de entradas de medicamento

Hospira MedNet Meds Software utiliza las siguientes convenciones para las entradas de medicamento de Plum A+:

- Los conjuntos de reglas completos o limitados requieren al menos un límite absoluto o relativo.
- Para crear entradas de medicamento, agréguelas al Maestro de fármacos o directamente a un AAC. Las entradas de medicamento agregadas a una Lista objetivo de AAC se agregan automáticamente a la lista Maestro de fármacos.
- Los mensajes de "validez" aparecen en rojo en la parte inferior de la ventana Conjunto de reglas. Al introducir un valor no permitido, el mensaje especifica el rango definido para el campo, o el motivo por el que no se permite el valor.
- No puede utilizar los siguientes caracteres en el nombre del medicamento: comas (,), menor que (<), mayor que (>), comillas simples ('), comillas dobles (") y et (&).
- Una vez que seleccione una unidad de medicamento, el campo Unidad de dosificación solo mostrará el tipo de unidad activado.
- El software no acepta las entradas numéricas no válidas y las indica con un "bip".
- Puede utilizar las barras de desplazamiento vertical y horizontal para desplazarse a una entrada.
- Si no selecciona o rellena un campo obligatorio, aparecerá un mensaje de error.
- Al resaltar una entrada de la lista Gestión de la farmacoteca, los botones o características que no se encuentren disponibles aparecerán "atenuados" o desactivados.
- Al agregar un nuevo medicamento al campo Nombre genérico de la ventana Conjunto de reglas, puede escribir los primeros caracteres del nombre genérico de un medicamento para buscarlo. La lista desplegable aparecerá para mostrarle los medicamentos que coincidan.

El conjunto de reglas de medicamentos de Plum A+

La ventana Conjunto de reglas que se muestra aquí sirve para configurar una entrada de medicamento para la farmacoteca de Plum A+.

Lista fuente: Agregar conjunto de reglas

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica}:
Dopamina (004) (200 mg / 5 mL)

Nombre mostrado: Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Dopamina 200 mg / 5 mL dosificado en mL/h

Conjuntos de reglas: ▼

Concentración

Cantidad de medicamento: Unidad de medicamento: Cantidad de diluyente: mL

Límites de dosis

Unidad de dosificación: LAI: LRI: LRS: LAS:

Campos Conjunto de reglas

En la siguiente tabla se muestran los campos, una breve descripción y el rango de valores permitido para el infusor.

Cada entrada de medicamento debe tener un nombre genérico y un nombre mostrado; las entradas de medicamento no pueden guardarse sin un nombre en estos campos. El número de caracteres del nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre mostrado puede variar de 17 a 29.

Con el fin de evitar posibles confusiones al crear entradas de medicamento, utilice únicamente el nombre del medicamento en el campo **Nombre mostrado** y asegúrese de que el ID externo coincida exactamente con el utilizado en el formulario de la institución. No incluya el diluyente como parte del nombre del medicamento.

Parámetro	Descripción	Rango permitido
Nombre genérico	Es el nombre del medicamento de la lista de medicamentos. Se selecciona en la lista desplegable y muestra el ID externo (el identificador del hospital para un medicamento). Concentración/ Volumen y Presentación farmacéutica solo aparecen si forman parte de la lista de medicamentos.	No se puede editar en el conjunto de reglas.
Nombre mostrado	Es el nombre que aparecerá en el infusor.	<ul style="list-style-type: none"> Varía según el ancho de los caracteres. No puede estar en blanco. <p>Precaución: No puede utilizar los siguientes caracteres en el nombre mostrado: comas (,), menor que (<), mayor que (>), comillas simples ('), comillas dobles (") y et (&).</p> <p>Nota: La fuente mostrada cambia en el infusor Plum A+ para los nombres largos.</p>
Clase terapéutica	La clase terapéutica asignada a las entradas de medicamento.	No se puede editar en el conjunto de reglas.
ID de clase	El número de ID de la clase terapéutica asignado a la entrada de medicamento.	No se puede editar en el conjunto de reglas.
Cantidad de medicamento	Le permite introducir la cantidad de medicamento en las unidades seleccionadas. La combinación de cantidad de medicamento, unidad de medicamento y cantidad de diluyente crea la concentración del medicamento.	<p>Para cantidades de medicamento en mcg, mg, g, mEq, millones de unidades o mmol:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,1–9999 y "en blanco". <p>Para cantidades de medicamento en unidades:</p> <p>0,1–99999999 y "en blanco".</p>

Parámetro	Descripción	Rango permitido
Unidad de medicamento	Le permite seleccionar la unidad de medida de la cantidad de medicamento.	mcg, mg, g, mEq, mmol o millones de unidades.
Cantidad de diluyente	Le permite establecer la cantidad de diluyente asociada a la entrada de medicamento. La cantidad de diluyente variará según el tamaño del recipiente, el sobrellenado y el volumen de la solución agregada.	<ul style="list-style-type: none"> • 0,1–9999 y "en blanco".
Unidad de dosificación	Le permite establecer la unidad de dosificación estándar para el medicamento. Este será el valor predeterminado que aparecerá en el infusor.	Para obtener información completa sobre las unidades de dosificación, consulte el manual de uso del sistema de su infusor.
LAI, LRI, LRS, LAS	<p>Límite absoluto inferior, límite relativo inferior, límite relativo superior, límite absoluto superior.</p> <p>Le permite establecer los límites de velocidad de dosificación superior o inferior para el medicamento seleccionado.</p>	Las unidades de los límites relativos y absolutos coinciden con las unidades de dosificación seleccionadas en el conjunto de reglas de medicamentos
Nota: Consulte el manual de uso del sistema para obtener instrucciones detalladas y conocer el rango permitido.		

Procedimientos paso a paso

La siguiente sección presenta procedimientos paso a paso que le permitirán crear y gestionar entradas de medicamento. En esta sección le mostraremos cómo hacer lo siguiente:

- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas completo a un AAC
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas limitado a un AAC
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas solo etiqueta a un AAC
- Editar una entrada de medicamento en un AAC
- Ver una entrada de medicamento en un AAC
- Eliminar una entrada de medicamento de un AAC
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas completo al Maestro de fármacos
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas limitado al Maestro de fármacos
- Agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas solo etiqueta al Maestro de fármacos
- Editar una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos
- Ver una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos
- Eliminar una entrada de medicamento del Maestro de fármacos
- Copiar una entrada de medicamento del Maestro de fármacos en un AAC de destino

Trabajo con entradas de medicamento de AAC

Nota: Al agregar entradas de medicamento a la Lista objetivo, se actualizan el AAC seleccionada y el Maestro de fármacos. Al realizar la adición a la lista fuente, solo se actualiza el Maestro de fármacos.

El número máximo de entradas de medicamento permitidas en un AAC es 150.

Para agregar una entrada de medicación con un conjunto de reglas completo establecido en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC deseado en el menú desplegable Lista objetivo.

The screenshot shows the 'Lista objetivo: Emergencia' section of the Hospira MedNet software. A dropdown menu is set to 'Emergencia'. Below the menu are buttons for 'Agregar', 'Editar', 'Ver', and 'Quitar'. A table lists various medications with columns for generic name, external ID, displayed name, concentration, and combination. The 'Agregar' button is highlighted with a green arrow labeled '2'.

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjunt
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo etic
Aciclovir	027	Aciclovir	500 mg / 10 ml	Comple
Amiodarona	002	Amiodarona	150 mg / 100 ml	Comple
Dextrosa 5%	092	Dextrosa 5%		Sólo etic
Furosemda	077	Furosemda	20 mg / 2 ml	Comple
Heparina sodica	078	Heparina sodica	25000 Unidades / 5 ml	Comple
Albumina humana	071	Albumina humana	_ ml	Limitad

2. En Lista objetivo, haga clic en **Agregar**.

3. Seleccione el **nombre genérico** de la entrada de medicamento.

Nota: Al seleccionar un nombre genérico en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.


Nota: El **nombre mostrado** puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto. El número máximo de caracteres en **Nombre mostrado** depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico** (o si no aparece ningún nombre genérico en la lista), puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

4. El campo **Nombre mostrado** ahora puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto u otro nombre único.
5. Seleccione **Completo** (si no se ha seleccionado) en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
6. Seleccione una unidad de medicación e introduzca un valor en Cantidad de medicamento y Cantidad de diluyente si lo desea.
7. Seleccione la unidad de dosificación e introduzca los valores de los límites relativos y absolutos. (debe especificar un límite como mínimo).
8. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al AAC.

Para agregar una entrada de medicación con un conjunto de reglas limitado establecido en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC deseado en Lista objetivo.

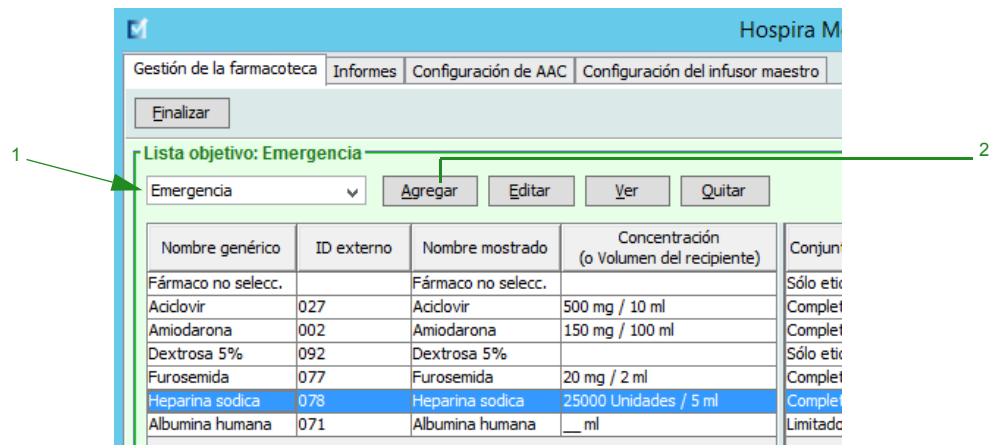

2. En Lista objetivo, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

Nota: El **nombre mostrado** puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto. El número máximo de caracteres en **Nombre mostrado** depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico** (o si no aparece ningún nombre genérico en la lista), puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

Lista objetivo: Agregar conjunto de reglas

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica}:
 Dopamina (004) (200 mg / 5 mL) Seleccionar

Nombre mostrado: Clase terapéutica: ID de clase:

4

Resumen: Dopamina __ mL dosificado en ml/h

Conjuntos de reglas:
 5 Limitado

Volumen del recipiente: ...
 6

Límites de dosis


Unidad de dosificación: LAI: LRI: LRS: LAS:

7

4. El campo **Nombre mostrado** ahora puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto u otro nombre único.
5. Seleccione **Limitado** en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
6. Introduzca la cantidad en Volumen de recipiente (opcional).
7. Seleccione mL/h e introduzca los valores de los límites relativos y absolutos (debe especificar un límite como mínimo).
8. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al AAC.

Para agregar una entrada de medicamento de conjunto de reglas sólo etiqueta en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC deseado en Lista objetivo.

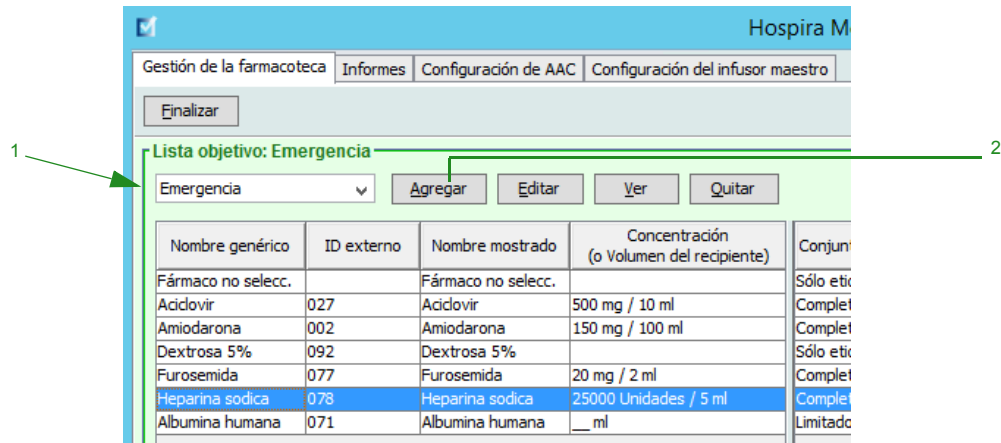


2. En Lista objetivo, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento en la lista desplegable.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

Nota: El **nombre mostrado** puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto. El número máximo de caracteres en **Nombre mostrado** depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico** (o si no aparece ningún nombre genérico en la lista), puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

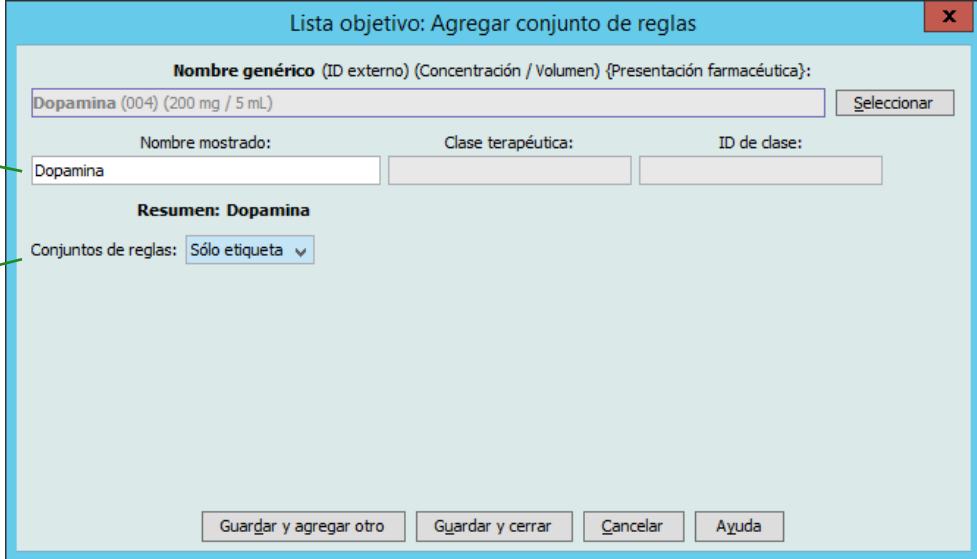

Lista objetivo: Agregar conjunto de reglas

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) {Presentación farmacéutica}:
Dopamina (004) (200 mg / 5 mL)

Nombre mostrado: Clase terapéutica: ID de clase:


Resumen: Dopamina

Conjuntos de reglas:

4. El campo **Nombre mostrado** ahora puede cambiarse del modo deseado; por ejemplo, para que quepan las palabras Hombre alto u otro nombre único.
5. Seleccione **Solo etiqueta** en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
6. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al AAC.

Para editar una entrada de medicamento en un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC que contenga la entrada de medicamento que desee editar en el menú desplegable Lista objetivo.

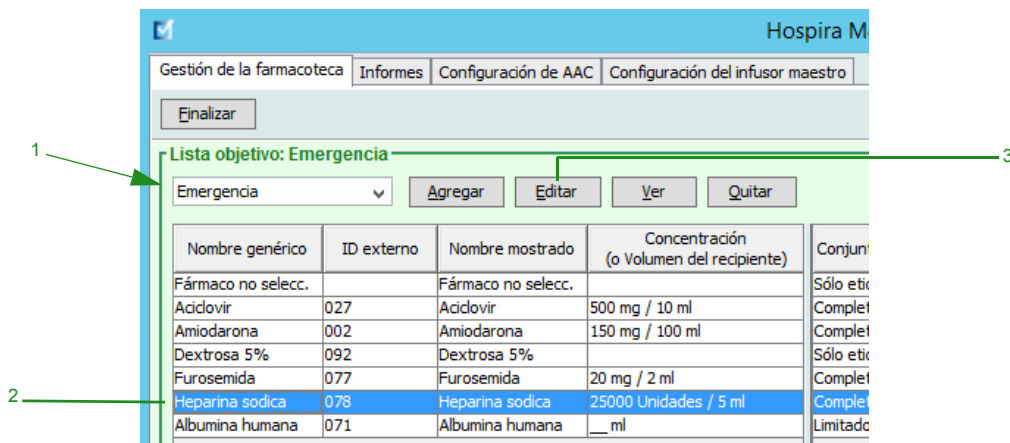


2. Seleccione la entrada de medicamento que desee editar en Lista objetivo.
3. Haga clic en **Editar**.

Sugerencia útil: También puede hacer doble clic en una entrada de medicamento para ver el cuadro de diálogo **Conjunto de reglas**.

4. Realice los cambios que desee.

Nota: No se pueden cambiar los campos **Clase terapéutica** o **ID de clase** al editar una entrada de medicamento en un AAC.

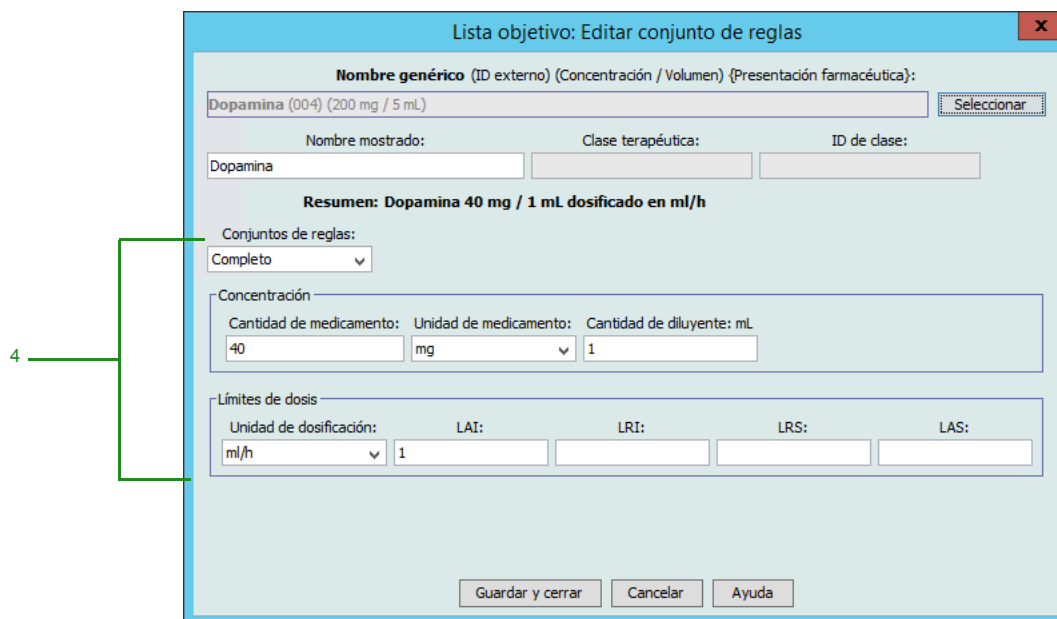


5. Haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar los cambios.

Nota: Si el medicamento editado solo está asignado a un AAC, el medicamento también se editará en el Maestro de fármacos. Si el medicamento editado se asigna a varias AAC, se creará un nuevo medicamento en el Maestro de fármacos.

Para ver una entrada de medicamento en un AAC, haga lo siguiente:


1. Seleccione el AAC que contenga la entrada de medicamento que desee ver en el menú desplegable Lista objetivo.

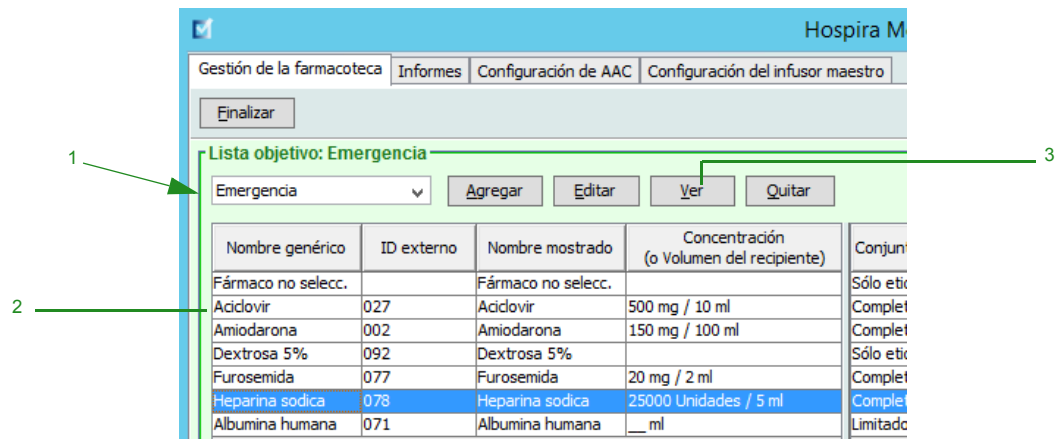

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee ver en Lista objetivo.
3. Haga clic en **Ver**.


Para eliminar una entrada de medicamento de un AAC, haga lo siguiente:

1. Seleccione el AAC que contenga la entrada de medicamento que desee eliminar en el mensaje desplegable Lista objetivo.

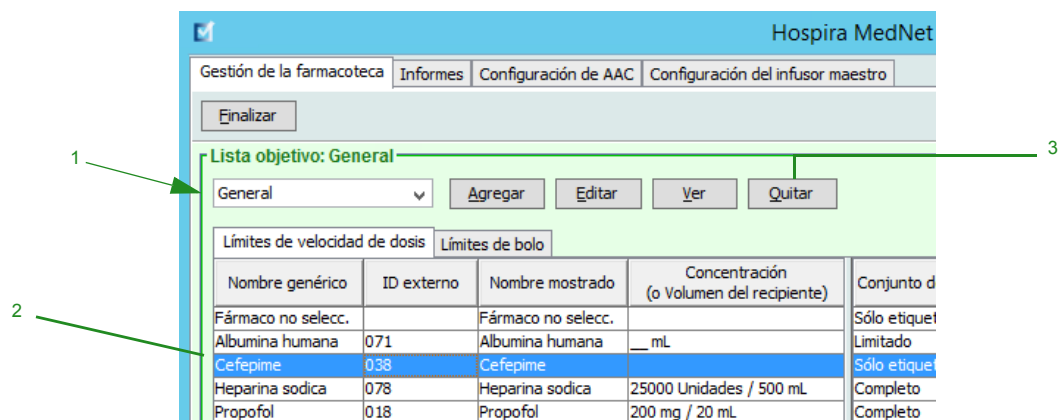

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee quitar.
3. Haga clic en **Quitar**.

4. Para confirmar que desea quitarla del AAC, haga clic en **Quitar**.

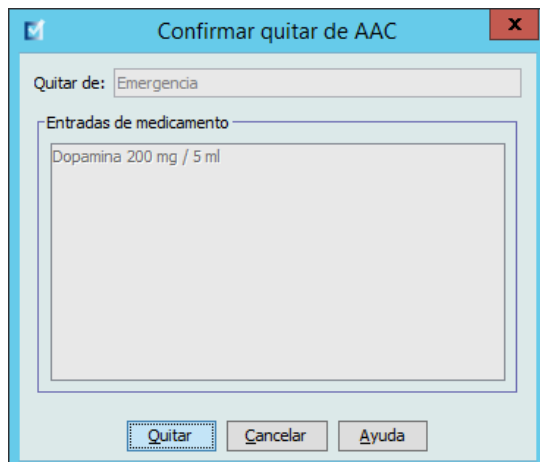


Trabajo con el Maestro de fármacos

El Maestro de fármacos puede contener entradas de medicamentos no asignados a un AAC para facilitar su uso en el futuro. El número total de entradas de medicamento en el Maestro de fármacos para el infusor Plum A+ no puede ser mayor que 3510.

Para agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas completo al Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

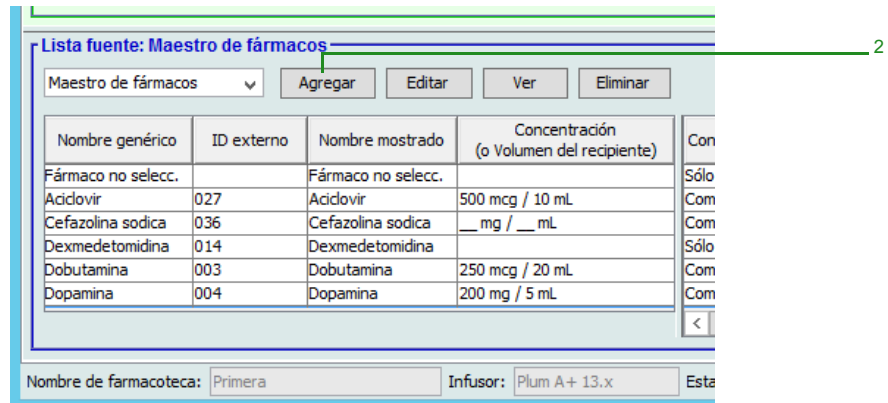

2. En Lista fuente, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento en la lista desplegable.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

Nota: El campo **Nombre mostrado** no puede dejarse en blanco. El número máximo de caracteres en un nombre de medicamento depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor tras su descarga. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico**, puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

Lista fuente: Agregar conjunto de reglas

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):
 Aciclovir (027) (250 mg /) Seleccionar

Nombre mostrado: Aciclovir Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Aciclovir 500 mg / 10 mL dosificado en mcg/kg/h

Conjuntos de reglas:
 Completo

Concentración
 Cantidad de medicamento: 500 Unidad de medicamento: mg Cantidad de diluyente: mL 10

Límites de dosis
 Unidad de dosificación: mcg/kg/h LAI: 1 LRI: LRS: LAS:


Guardar y agregar otro Guardar y cerrar Cancelar Ayuda

4. Seleccione **Completo** (si no se ha seleccionado todavía) en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
5. Seleccione la **Unidad de medicamento** e introduzca una **Cantidad de medicamento** (opcional) y una **Cantidad de diluyente** (opcional).
6. Seleccione la unidad de dosificación y escriba los valores de los límites relativos y absolutos (debe especificar un límite como mínimo).
7. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al Maestro de fármacos.

Nota: Al agregar una entrada de medicamento al Maestro de fármacos, no se asigna a otra AAC.

Para agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas limitado al Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

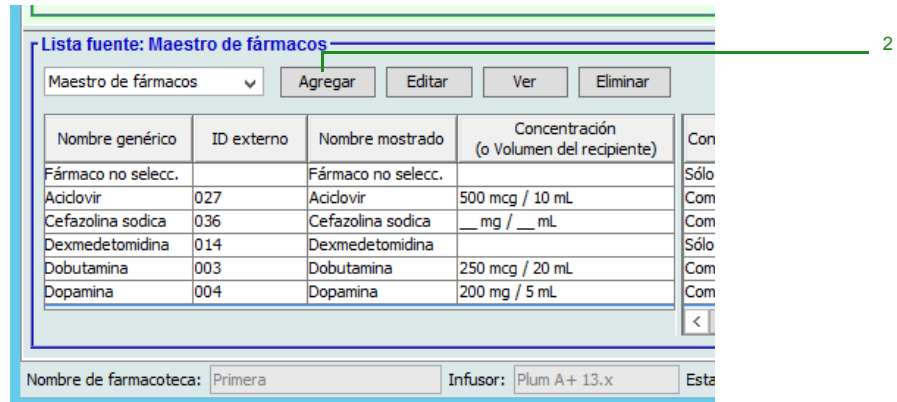

2. En Lista fuente, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento en la lista desplegable.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

Nota: El campo **Nombre mostrado** no puede dejarse en blanco. El número máximo de caracteres en un nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor tras su descarga. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico** (o si no aparece ningún nombre genérico en la lista), puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

4. Seleccione **Limitado** en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
5. Escriba la cantidad en **Volumen de recipiente** (opcional).
6. Seleccione mL/h e introduzca los valores de los límites relativos y absolutos (debe especificar un límite como mínimo).
7. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al Maestro de fármacos.

Nota: Al agregar una entrada de medicamento al Maestro de fármacos, no se asigna a otra AAC.

Para agregar una entrada de medicamento con un conjunto de reglas solo etiqueta al Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Con
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo
Acidovir	027	Acidovir	500 mcg / 10 mL	Com
Cefazolina sodica	036	Cefazolina sodica	__ mg / __ mL	Com
Dexmedetomidina	014	Dexmedetomidina		Sólo
Dobutamina	003	Dobutamina	250 mcg / 20 mL	Com
Dopamina	004	Dopamina	200 mg / 5 mL	Com

2. En Lista fuente, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione el nombre genérico de la entrada de medicamento en la lista desplegable.

Nota: Al seleccionar un **nombre genérico** en la lista desplegable, se rellenan automáticamente los campos **Nombre mostrado**, **ID externo**, **Clase terapéutica** e **ID de clase**.

Nota: El campo **Nombre mostrado** no puede dejarse en blanco. El número máximo de caracteres en un nombre mostrado depende de cómo aparezca en la pantalla del infusor tras su descarga. Según la anchura de los caracteres, el número máximo de caracteres permitido en el nombre de medicamento puede variar de 17 a 29.

Nota: Si el nombre genérico deseado no aparece en la lista desplegable **Nombre genérico** (o si no aparece ningún nombre genérico en la lista), puede agregar un medicamento a la lista de medicamentos. Así mismo, puede agregar el nombre genérico al importar una nueva **lista de medicamentos** mediante la función de **importación de medicación** de Hospira MedNet Software.

Lista objetivo: Agregar conjunto de reglas

Nombre genérico (ID externo) (Concentración / Volumen) (Presentación farmacéutica):
 Dopamina (004) (200 mg / 5 mL) Seleccionar

Nombre mostrado: Dopamina Clase terapéutica: ID de clase:

Resumen: Dopamina
 Conjuntos de reglas: Sólo etiqueta ▾

Guardar y agregar otro Guardar y cerrar Cancelar Ayuda

4. Seleccione **Sólo etiqueta** en la lista desplegable **Conjuntos de reglas**.
5. Haga clic en **Guardar y agregar otro** o **Guardar y cerrar** para agregar la entrada de medicamento al Maestro de fármacos.

Nota: Al agregar una entrada de medicamento al Maestro de fármacos, no se asigna a otra AAC.

Para editar una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** como Lista fuente.

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Con
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo
Aciclovir	027	Aciclovir	500 mcg / 10 mL	Com
Cefazolina sodica	036	Cefazolina sodica	_ mg / _ mL	Com
Dexmedetomidina	014	Dexmedetomidina		Sólo
Dobutamina	003	Dobutamina	250 mcg / 20 mL	Com
Dopamina	004	Dopamina	200 mg / 5 mL	Com

2. Seleccione la entrada de medicamento que desee editar en Lista fuente.
3. Haga clic en **Editar**.

Sugerencia útil: También puede hacer doble clic en una entrada de medicamento para ver el cuadro de diálogo **Conjunto de reglas**.

4. Realice los cambios que desee.

5. Haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar los cambios.

Importante: Al cambiar la unidad de dosificación o la unidad de medicación se eliminarán todos los límites introducidos anteriormente.

Nota: Al editar una entrada de medicamento, los cambios aparecen reflejados en el Maestro de fármacos y en todas las AAC en las que se encuentra el medicamento.

Para ver una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, haga lo siguiente:


1. Seleccione **Maestro de fármacos** en Lista fuente.

3


2. Seleccione la entrada de medicamento que desee ver en Lista fuente.
3. Haga clic en **Ver**.
4. Haga clic en **Cerrar** para salir de la pantalla.

Para eliminar una entrada de medicamento en el Maestro de fármacos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Maestro de fármacos** en Lista fuente.

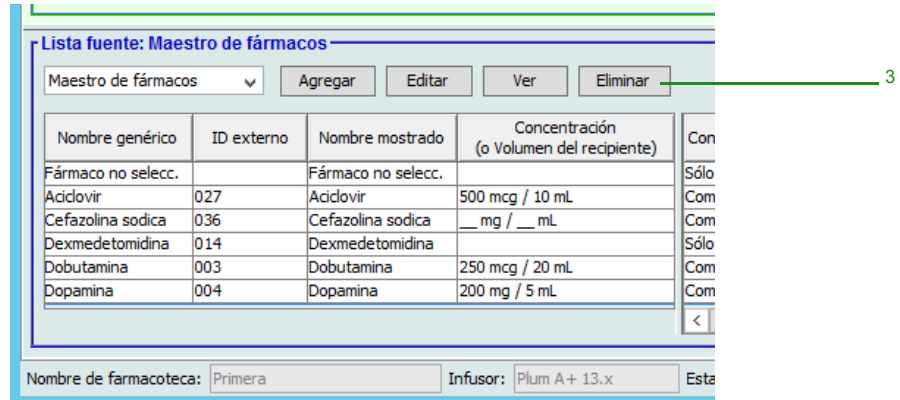


2. Seleccione la entrada de medicamento que desee eliminar en Lista fuente.
3. Haga clic en **Eliminar**.

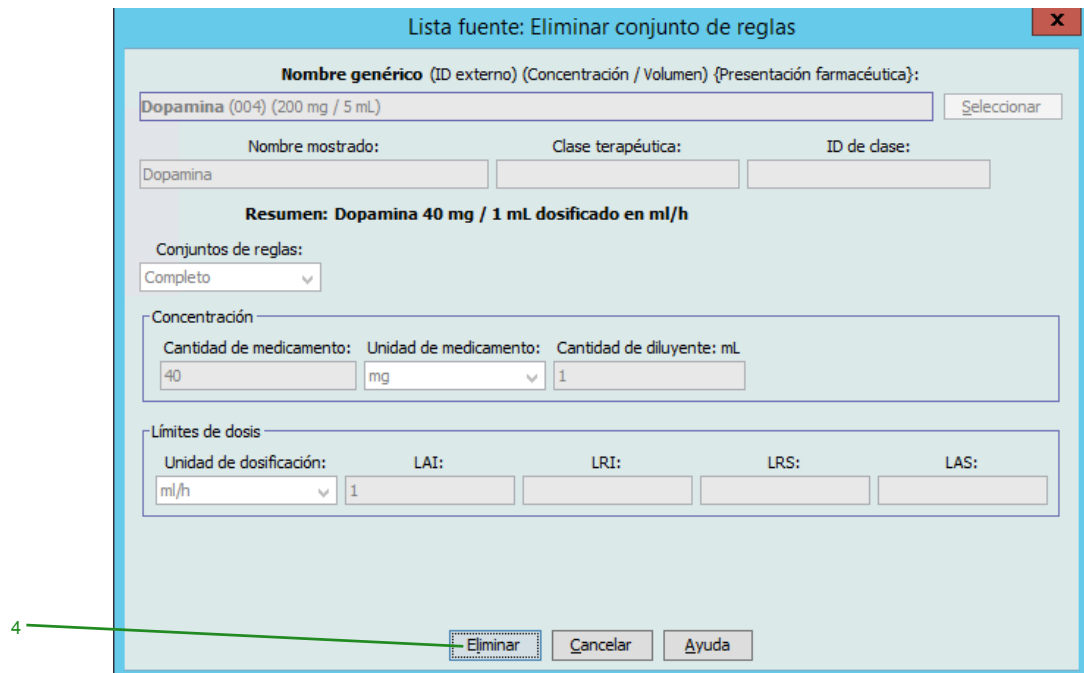

4. Haga clic en **Eliminar**.

El siguiente mensaje emergente solo aparecerá si la entrada de medicamento está asignada a una o varias AAC.

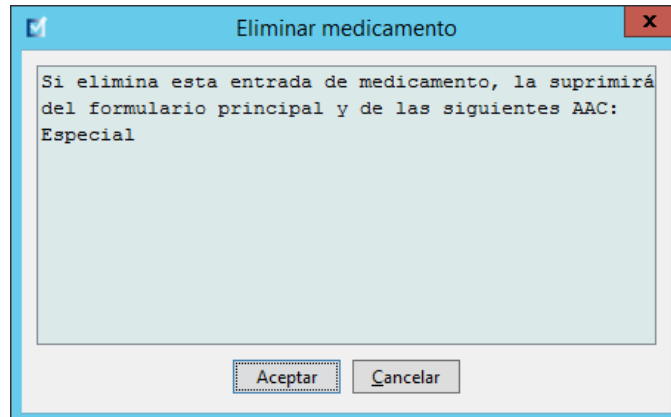

5. Haga clic en **Aceptar**.

Para copiar en el AAC objetivo, haga lo siguiente:

1. Seleccione una entrada de medicamento del Maestro de fármacos.

Nota: Es necesario seleccionar una AAC de Lista objetivo antes de poder copiar una entrada de medicamento en un AAC objetivo en el Maestro de fármacos.

2. Haga clic en **Copiar en AAC objetivo**.

Lista fuente: Maestro de fármacos

Maestro de fármacos

Nombre genérico	ID externo	Nombre mostrado	Concentración (o Volumen del recipiente)	Conjunto de r...	Unidad de dosificación	Límite absoluto inferior
Fármaco no selecc.		Fármaco no selecc.		Sólo etiqueta		
Clindamicina Fosfato	045	Clindamicina Fosfato		Sólo etiqueta		
Dextrosa 5%	092	Dextrosa 5%	__ mg / __ ml	Completo	ml/h	
Dopamina	004	Dopamina	40 mg / 1 ml	Completo	ml/h	1
Norepinefrina	011	Norepinefrina	4 mg / 4 ml	Completo	ml/h	

3. Haga clic en **Copiar** en el mensaje emergente **Confirmar copiar en AAC**.

Confirmar copiar en AAC

Copiar desde:

Copiar en:

Entradas de medicamento

Dopamina 40 mg / 1 ml

Capítulo 10: Configuración del infusor maestro

Ajustes del Maestro de infusores de Plum 360

La vista Ajustes del Maestro de infusores de Plum A+ le permite seleccionar los siguientes ajustes de infusores:

- Velocidad continua
- Notificación recordatoria
- Administrar juntos
- Forzar bomba para aceptar la farmacoteca durante consumo mínimo
- Tiempo límite del motivo de rechazo de la programación automática (segundos)
- Tiempo de espera máximo (horas)
- Uso clínico predeterminado

Para mostrar la vista **Ajustes del Maestro de infusores**, abra una hoja de trabajo y haga clic en la pestaña **Configuración del Maestro de infusores**. (Para obtener instrucciones sobre cómo abrir una hoja de trabajo, consulte [Capítulo 5: Directorio de farmacoteca](#), en la página 27).

Velocidad continua

El ajuste *Velocidad continua* le permite seleccionar la velocidad predeterminada a la que pasa el infusor tras completar una terapia. Las opciones de Velocidad continua son *MVA* y *Velocidad*. *MVA* (mantener vena abierta) es una velocidad muy baja (1 mL/h) que reduce la coagulación potencial en el lugar de la infusión. Velocidad es la misma velocidad de administración que en la terapia completada. El ajuste Velocidad continua puede cambiarse al programar el infusor:

- Seleccione **MVA** para convertir MVA en la velocidad continua predeterminada.
- Seleccione **Velocidad** para hacer que la velocidad continua predeterminada coincida con la velocidad de la terapia completada.

Notificación recordatoria

Cuando está activado, el ajuste *Notificación recordatoria* hace que el infusor emita una alarma recordatoria acústica a enfermería y muestra una notificación entre los pasos de una infusión de varios pasos, una infusión alternativa o tras una dosis de carga. El ajuste de Notificación recordatoria predeterminado es **No** (desactivado). Este ajuste puede cambiarse al programar el infusor manualmente. Para obtener más información sobre las alarmas recordatorias a enfermería, consulte el manual del sistema operativo del infusor.

Administrar juntos

El ajuste *Administrar juntos* le permite elegir el método de administración de dos líneas predeterminado. Esta funcionalidad define la relación predeterminada entre las líneas A y B del infusor. Las opciones de Administrar juntos son **Alternativo** y **Concurrente**. Al seleccionar Alternativo, la administración de la línea A se detiene, mientras que la línea B infunde. La línea A se reanuda cuando finaliza la administración por la línea B. Al seleccionar Concurrente, ambas líneas infunden simultáneamente. El ajuste Administrar juntos puede cambiarse al programar el infusor.

- Seleccione **Alternativo** para convertirlo en el ajuste de Administrar juntos predeterminado.
- Seleccione **Concurrente** para convertirlo en el ajuste de Administrar juntos predeterminado.

Forzar bomba para aceptar la farmacoteca durante consumo mínimo

Este ajuste determina si el infusor instalará automáticamente una nueva farmacoteca después de apagar el infusor. Si el ajuste es **Sí**, el infusor instalará la farmacoteca sin preguntarle al usuario durante su desconexión. El ajuste predeterminado es **No**.

Tiempo límite del motivo de rechazo de la programación automática (segundos)

Cuando Hospira MedNet rechaza una programación automática, el motivo del rechazo aparece en el infusor para avisar a enfermería de que se ha rechazado la programación automática antes de realizar el envío al infusor. El ajuste Tiempo límite le permite establecer el tiempo durante el que el mensaje permanecerá en la pantalla del infusor. El rango es de 10-30 segundos y el valor predeterminado de 15 segundos.

Tiempo de espera máximo (horas)

El ajuste *Tiempo de espera máximo* le permite seleccionar el período que el infusor puede esperar antes de iniciar una terapia. El ajuste Espera *no puede* ignorarse al programar el infusor.

Nota: Este ajuste afecta tanto a Inicio demorado como a Espera. Si está activado, ambos estarán disponibles en el infusor. Si está desactivado, ninguno estará disponible en el infusor.

El rango es de 24-72 horas en incrementos de 1 hora. El valor predeterminado es 72 horas.

Uso clínico predeterminado

El ajuste *Uso clínico predeterminado* le permite cambiar el valor "NO ESPECIFICADO" introducido en un AAC por el valor de Uso clínico predeterminado que introduzca.

Nota: El valor introducido como Predeterminado se atribuirá a TODAS las entradas marcadas como "NO ESPECIFICADO" en todas las AAC y en el Maestro de fármacos.

Para configurar los ajustes del Maestro de infusores, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración del Maestro de infusores**.
2. Seleccione la opción deseada para cada ajuste.
3. Cuando termine de realizar las selecciones, haga clic en **Guardar**.

Nota: Para guardar los cambios en los ajustes del Maestro de infusores, debe hacer clic en **Guardar** antes de salir de la vista **Ajustes del Maestro de infusores**.


Las selecciones realizadas en la vista Ajustes del Maestro de infusores se aplicarán a todas las AAC de la farmacia.

Ajustes del Maestro de infusores de Plum A+

La vista Ajustes del Maestro de infusores de Plum A+ le permite seleccionar los siguientes ajustes de infusores:

- Velocidad continua
- Notificación recordatoria
- Administrar juntos
- Activar demora/espera

Para mostrar la vista **Ajustes del Maestro de infusores**, abra una hoja de trabajo y haga clic en la pestaña **Configuración del Maestro de infusores**. (Para obtener instrucciones sobre cómo abrir una hoja de trabajo, consulte [Capítulo 5: Directorio de farmacia](#), en la página 27).

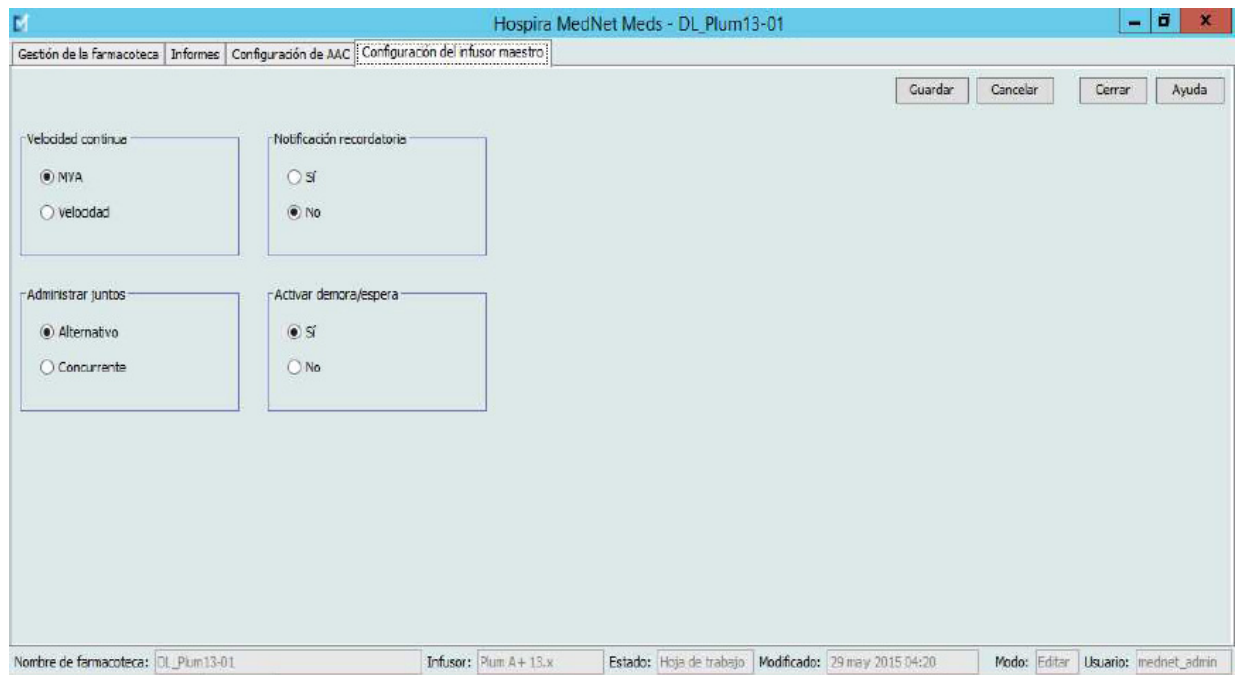

Velocidad continua

El ajuste *Velocidad continua* le permite seleccionar la velocidad predeterminada a la que pasa el infusor tras completar una terapia. Las opciones de Velocidad continua son *MVA* y *Velocidad*. *MVA* (mantener vena abierta) es una velocidad muy baja (1 mL/h) que reduce la coagulación potencial en el lugar de la infusión. *Velocidad* es la misma velocidad de administración que en la terapia completada. El ajuste Velocidad continua puede cambiarse al programar el infusor:

- Seleccione **MVA** para convertir MVA en la velocidad continua predeterminada.
- Seleccione **Velocidad** para hacer que la velocidad continua predeterminada coincida con la velocidad de la terapia completada.

Notificación recordatoria

Cuando está activado, el ajuste *Notificación recordatoria* hace que el infusor emita una alarma recordatoria acústica a enfermería y muestra una notificación entre los pasos de una infusión de varios pasos, una infusión alternativa o tras una dosis de carga. El ajuste de Notificación recordatoria predeterminado es **No** (desactivado). Este ajuste puede cambiarse al programar el infusor manualmente. Para obtener más información sobre las alarmas recordatorias a enfermería, consulte el manual del sistema operativo del infusor Hospira Plum A+/A+ 3.

Administrar juntos

El ajuste *Administrar juntos* le permite elegir el método de administración de dos líneas predeterminado. Esta funcionalidad define la relación predeterminada entre las líneas A y B del infusor. Las opciones de Administrar juntos son **Alternativo** y **Concurrente**. Al seleccionar Alternativo, la administración de la línea A se detiene, mientras que la línea B infunde. La línea A se reanuda cuando finaliza la administración por la línea B. Al seleccionar Concurrente, ambas líneas infunden simultáneamente. El ajuste Administrar juntos puede cambiarse al programar el infusor.

- Seleccione **Alternativo** para convertirlo en el ajuste de Administrar juntos predeterminado.
- Seleccione **Concurrente** para convertirlo en el ajuste de Administrar juntos predeterminado.

Activar demora/espera


El ajuste *Activar demora/espera* le permite seleccionar el ajuste Espera, **Sí** (activado) o **No** (desactivado). Cuando está activado, el infusor puede programarse para que espere un período antes de iniciar una terapia. Cuando está desactivado, la opción para programar el infusor para que espere un período antes de iniciar una terapia no está disponible. El ajuste Espera *no puede* ignorarse al programar el infusor.

Nota: Este ajuste afecta tanto a Inicio demorado como a Espera. Si está activado, ambos estarán disponibles en el infusor. Si está desactivado, ninguno estará disponible en el infusor.

- Seleccione **Sí** para activar demora/espera.
- Seleccione **No** para desactivar demora/espera.

Para configurar los ajustes del Maestro de infusores, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la pestaña **Configuración del Maestro de infusores**.
2. Seleccione la opción deseada para cada ajuste.
3. Cuando termine de realizar las selecciones, haga clic en **Guardar**.

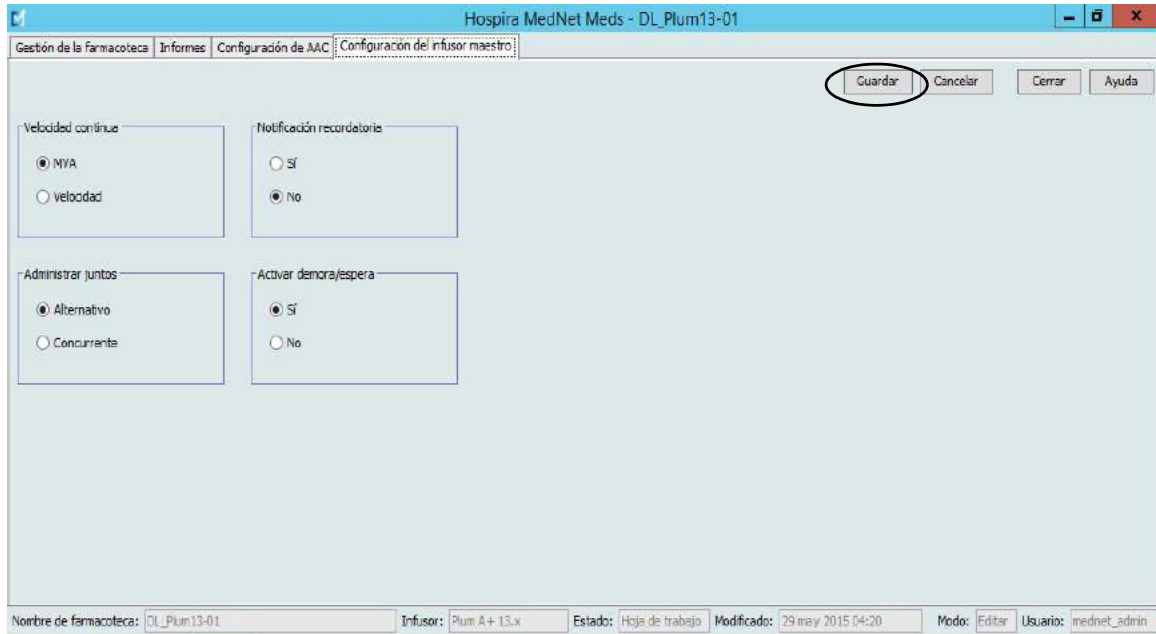

Nota: Para guardar los cambios en los ajustes del Maestro de infusores, debe hacer clic en **Guardar** antes de salir de la vista **Ajustes del Maestro de infusores**.

Las selecciones realizadas en la vista Ajustes del Maestro de infusores se aplicarán a todas las AAC de la farmacia.

Apéndice A: Hospira MedNet Integrator

Introducción

Hospira MedNet Integrator ofrece interfaces a las aplicaciones de nivel empresarial del hospital y actúa como conducto para el intercambio de datos entre infusores, el servidor Hospira MedNet y diferentes sistemas de información hospitalarios.

Al conectarse a un sistema de BCMA, Hospira MedNet Integrator admite la documentación electrónica de eventos de administración intravenosa en el registro del paciente. La integración también permite que el sistema de BCMA incorpore la velocidad de infusión intravenosa en el proceso de verificación de cinco derechos.

El flujo de trabajo del médico es el siguiente:

- Escanear la identificación del paciente, el envase del medicamento y la bomba con la aplicación de BCMA y su escáner de código de barras
- Programar el infusor de acuerdo con el pedido del médico
- Confirmar la programación e iniciar la infusión

Nota: Dependiendo del sistema de BCMA, el escaneado del paciente, el medicamento y la bomba también pueden producirse tras el inicio de la infusión.

Una vez que se haya iniciado la infusión, Hospira MedNet envía los valores de programación (medicamento/concentración, dosis, velocidad, volumen que se infundirá y duración) al sistema de BCMA para su revisión por parte del médico, su verificación y su trazado electrónico.

Nota: La funcionalidad específica disponible dependerá de la licencia de software de Hospira MedNet de la institución.

Configuración de Hospira MedNet Integrator para la integración de BCMA

- Defina una estrategia de códigos de barras para identificar los canales de los infusores que se utilizarán; fije la etiqueta con el código de barras a cada canal.



ADVERTENCIA: Con el fin de asegurarse de que la información se envía al sistema de administración de medicamentos con códigos de barras (BCMA) desde el infusor correcto, Hospira recomienda que, antes de poner Hospira MedNet Integrator en funcionamiento, verifique que las etiquetas con códigos de barras fijadas a cada infusor correspondan a los canales correctos.

Importante: Compare los datos del infusor con los datos recibidos del BCMA. En caso de discrepancia, trace los datos del infusor manualmente.

Notas:

Glosario

AAC (área de atención clínica)	<p>Grupo de pacientes con los mismos parámetros de terapia de infusión.</p> <p>Un AAC puede coincidir con una unidad de enfermería física o puede abarcar una población de pacientes o un uso clínico. Por ejemplo, las siguientes opciones pueden definirse como AAC: UCI, productos sanguíneos, medicina/cirugía, ortopedia, endoscopia, etc.</p>
Activar demora/espera	Ajuste de infusor de Plum A+ que permite programar el infusor con un período de espera antes del inicio de una terapia.
Activar farmacoteca	Hoja de trabajo finalizada y disponible para su envío a los infusores.
Administración concurrente (Plum A+)	Ajustes del modo Línea B
Administrar juntos	Ajustes de Plum A+ que definen el tipo del modo de administración, alternativo o concurrente.
Alerta de límite absoluto	Una alerta presentada al usuario cuando se supera un límite absoluto. La respuesta del usuario depende del infusor: en el caso de Plum A+, el usuario debe editar el valor introducido para que no se supere el límite absoluto.
Alerta de límite relativo	Una alerta presentada al usuario cuando se supera un límite relativo. El usuario puede decidir si desea editar o ignorar el valor introducido en respuesta a la alerta.
Archivo CSV	Archivo de valores separados por comas utilizado por el software para importar y exportar determinados archivos.
BCMA	Acónimo de "administración de medicamentos con códigos de barras".
Cantidad de diluyente	Volumen de líquido en el que se diluye un medicamento.
CE	Acónimo de "motor de conectividad", que permite que el infusor se comunique con una red inalámbrica o con cable.
Cebado	Vaciado o purgado del aire de los tubos. Igual que el purgado.
Conjunto de reglas	<p>Restricciones asignadas a entradas de medicamento. El tipo de regla del medicamento de la farmacoteca.</p> <p>Los conjuntos de reglas pueden incluir límites absolutos y relativos. Plum A+ tiene un único conjunto de reglas.</p>
Conjunto de reglas completo	Tipo de conjunto de reglas que permite configurar las entradas de medicamento con un nombre de medicamento, una concentración completa o parcial, la unidad de dosificación específica y los límites de velocidad de dosis correspondientes.
Conjunto de reglas limitado (Plum A+)	<p>Tipo de conjunto de reglas que permite configurar las entradas de medicamento con un nombre de medicamento, volumen de diluyente opcional y límites de velocidad.</p> <p>Entre las unidades de dosificación de un conjunto de reglas limitado, se incluye mL/h.</p>

Conjunto de reglas solo etiqueta (Plum A+)	<p>Tipo de conjunto de reglas que permite configurar las entradas de medicamento con un nombre de medicamento, una concentración completa o parcial y la unidad de dosificación específica.</p> <p>Los límites de velocidad de dosis no pueden asignarse a una entrada de medicamento "Solo etiqueta".</p> <p>El icono "ningún conjunto de reglas" aparece en el infusor al utilizar este tipo de conjunto de reglas.</p>
Editar	El usuario cambió el valor introducido para responder a una alerta.
Entrada de medicamento	Conjunto de reglas definido para una única combinación de medicamento y concentración.
Espera	Opción de programación que permite iniciar la infusión posteriormente. Similar al inicio demorado.
Farmacoteca	Recopilación de entradas de medicamento y ajustes de infusor que, si se utiliza con infusores compatibles, puede reducir la frecuencia de errores humanos al limitar las formas en que los medicamentos pueden administrarse.
Farmacoteca archivada	Farmacoteca anteriormente activa.
Farmacoteca finalizada	Farmacoteca aprobada para su uso en infusores y que ya no se puede cambiar.
Finalización	El acto de aprobar una hoja de trabajo y convertirla en la biblioteca activa.
HIS	Acónimo de "sistema de información hospitalario".
Hoja de trabajo	Borrador de farmacoteca sin finalizar.
Hoja de trabajo de farmacoteca	Farmacoteca que, aunque puede editarse, no puede enviarse a los infusores hasta su finalización.
ID externo	Un identificador de un medicamento. Cada medicamento de la lista de medicamentos debe tener un ID externo único.
Ignorar	El usuario reconoce una alerta y acepta el valor introducido como respuesta a una alerta.
Infusión	<p>Medicamento y concentración únicos infundidos a un paciente.</p> <p>Una infusión puede estar asociada a una o varias programaciones.</p>
Inicio demorado	<p>Opción de programación que permite iniciar la infusión posteriormente.</p> <p>Similar a espera.</p>
Jeringa o vial personalizados	Vial estéril vacío con código de barras con relleno personalizado por una farmacia.
LDAP	Acónimo de "Protocolo ligero de acceso a directorios". Se trata de un protocolo de red que permite que las aplicaciones utilicen un listado de directorios existentes de una empresa para los nombres de usuario y las contraseñas, lo que permite que los administradores de la red de la empresa gestionen el acceso con inicio de sesión a varias aplicaciones desde un origen central. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar la información de inicio de sesión de la red de la empresa con las mismas credenciales (nombre de usuario y contraseña) para acceder a Hospira MedNet Software.

Límite absoluto	<p>Límites superiores o inferiores para el medicamento seleccionado y el AAC seleccionada que no pueden ignorarse (Plum A+). No es necesario definir los límites absolutos para un medicamento.</p> <p>Los límites absolutos pueden variar para las diferentes AAC.</p>
Límite relativo	Límites de dosis superiores o inferiores para el medicamento seleccionado y el AAC seleccionada que no pueden ignorarse. Los límites relativos de un medicamento concreto pueden variar entre AAC.
Línea de servicio	Una designación utilizada en los informes para agregar datos a varias AAC o instalaciones. Cada AAC se asigna a una línea de servicio. Por ejemplo, una línea de servicio llamada Medicina/cirugía puede utilizarse para examinar datos de las AAC Four West, Five North y Five East en un solo hospital.
Lista de medicamentos	Lista de medicamentos utilizados por el hospital. La lista de medicamentos se utiliza para definir farmacotecas.
Maestro de fármacos	Lista completa de medicamentos y conjuntos de reglas definidos para una farmacoteca.
Modo Alternativo (Plum A+)	Opción de programación que hace posible la administración de un recipiente secundario mientras la administración del principal está suspendida. Cuando el recipiente secundario completa la administración del volumen que se infundirá, el principal reanuda la administración.
MVA (mantener vena abierta)	Velocidad de administración muy baja que puede reducir la formación de coagulación potencial en la punta del catéter.
Notificación recordatoria	<p>Ajuste que configura el infusor para emitir un tono acústico.</p> <p>En el caso de Plum A+, puede producirse una notificación recordatoria cuando se completa una dosis de carga y entre dosis en una terapia de pasos múltiples.</p>
Oclusión	Bloqueo en el juego de tubos que evita que el infusor infunda líquidos en el paciente. Entre las posibles causas de las oclusiones, se encuentran los tubos doblados o taponados.
Oclusión distal	Bloqueo entre el infusor y el paciente.
Oclusión proximal	Bloqueo entre el infusor y el recipiente de líquido.
Opciones de informe	Configuraciones introducidas por el usuario para definir la salida de informe deseada. Ejemplos: período, AAC, medicamento, etc.
Pasos múltiples	Opción de programación que hace posible la administración en pasos o fases con diferentes parámetros para cada paso.
Presión de oclusión predeterminada	Presión a la que el infusor hará sonar la alarma de oclusión distal.
Programación	<p>Ajuste del infusor realizado por el médico que puede provocar una alerta. Se incluyen los ajustes para iniciar una nueva infusión o los cambios en la dosis o la velocidad:</p> <p>En el caso de Plum A+, el cambio de una bolsa, botella o jeringa no se considera una programación nueva si no se cambia ningún otro ajuste.</p> <p>Una o varias programaciones pueden asociarse a una infusión.</p> <p>Diferencias entre infusores:</p> <p>Plum A+: Dosis de carga y Pasos múltiples se consideran una sola programación.</p>

Purga	Vaciado o purgado del aire de los tubos. Igual que el cebado.
Uso clínico	El uso clínico atribuido a una entrada de medicamento.
VAI	Acrónimo de "volumen a infundir".
Variación	<p>La variación es un valor calculado diseñado para representar la diferencia entre el valor programado inicial del usuario en comparación con el límite definido.</p> <p>La variación se define como $(Dosis\ inicial - Límite\ infringido) / Límite\ infringido$. Se expresa en forma de porcentaje. Es un número negativo para infracciones del límite inferior y positivo para infracciones del límite superior.</p>
Velocidad continua	Velocidad de administración tras la infusión de la cantidad de VTBI.
Velocidad de dosis máxima	Velocidad más alta a la que se puede programar el funcionamiento del infusor.
Volumen de recipiente	Volumen de la bolsa, la botella o el vial utilizados para definir una entrada de medicamento.
