



Guida di riferimento del prodotto SuperCath® 5 Catetere endovenoso di sicurezza

Preparazione per l'inserimento


Adottare una tecnica asettica

1. Aprire la confezione.
2. Rimuovere il copriago e ispezionare la punta dell'ago introduttore.
3. Separare il catetere dall'ago introduttore ruotando e riposizionando il cono del catetere con la linguetta di avanzamento rivolta verso l'alto. Ciò contribuirà a garantire un corretto avanzamento del catetere e la ritrazione dell'ago durante la venipuntura.
 - › Non toccare il catetere o l'ago introduttore metallico.



Inserimento e avanzamento del catetere

4. Impugnare correttamente il SuperCath 5 dalle prese ergonomiche a entrambi i lati del dispositivo. Stabilizzare il sito ed eseguire la venipuntura.
 - › L'ago introduttore con finestra laterale e la camera di ritorno forniscono la conferma visiva della penetrazione dell'ago nel vaso. (La finestra laterale non è disponibile nei cateteri da 16 G e 14 G).
5. Far avanzare completamente e inserire il catetere nel vaso fino a raggiungere la profondità richiesta.

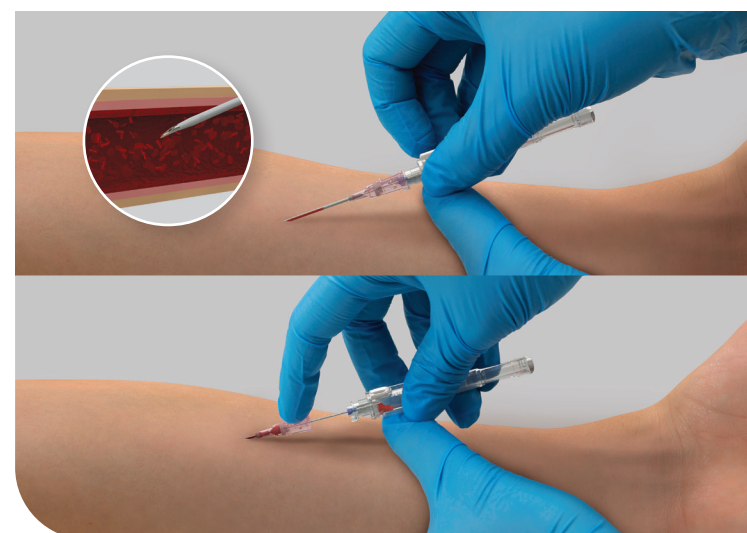


Rimozione dell'ago

6. Rilasciare il laccio emostatico e applicare la pressione delle dita per interrompere il flusso sanguigno.
7. Stabilizzare il cono del catetere e premere il pulsante di attivazione bianco per ritirare l'ago introduttore nella copertura di sicurezza.
 - › La valvola di non ritorno integrata monouso, unitamente alla pressione delle dita applicata, contribuiscono a ridurre la fuoriuscita di sangue dal catetere durante il ritiro dell'ago.
 - › La valvola di non ritorno integrata non prevede il completo arresto del sanguinamento.



Preparazione all'uso

8. Smaltire in modo appropriato il SuperCath 5 in un contenitore per taglienti, secondo la politica e le procedure della propria struttura.
9. Fissare asetticamente il set per infusione al cono del catetere. Medicare il catetere in base alla prassi e alle procedure della struttura.

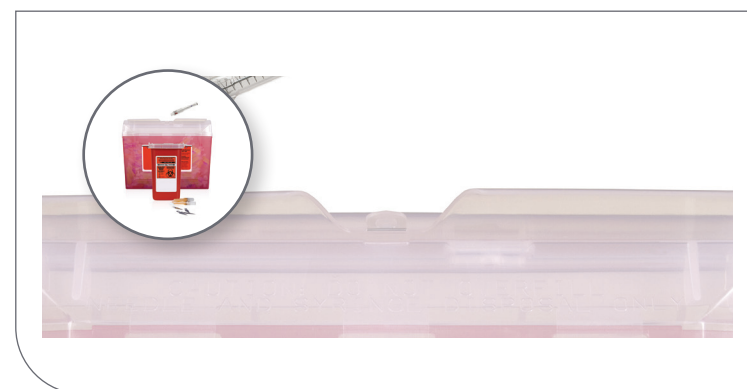

AVVERTENZA: non riutilizzare, ricondizionare o risterilizzare. **ESCLUSIVAMENTE MONOUSO.** La risterilizzazione, il riutilizzo o il ricondizionamento possono causare la contaminazione del dispositivo, con conseguente possibile infezione del paziente o infezione crociata.

Prodotto senza lattice di gomma naturale. I cateteri ad alette contengono DEHP solo nelle alette, non nel percorso del fluido.

Indicazioni

SuperCath 5 è destinato all'accesso a una vena o arteria e alla somministrazione di liquidi. È progettato per l'uso a breve termine (meno di 30 giorni) e per ridurre al minimo punture involontarie e accidentali.

Precauzioni

- › Prestare attenzione durante la manipolazione del SuperCath 5 e adottare una tecnica asettica adeguata durante l'inserimento, il ritiro e lo smaltimento, nonché quando il catetere è in uso sul paziente.
- › Non spostare l'ago introduttore in avanti o all'indietro nel catetere prima dell'uso o durante la puntura.
- › Non reinserire un ago parzialmente o completamente ritirato.
- › Fare riferimento ai protocolli della propria struttura per gli intervalli di utilizzo appropriati.
- › Se non si riesce a garantire l'accesso al vaso sanguigno, utilizzare un nuovo catetere per pungere nuovamente il vaso.
- › Fare attenzione a non premere accidentalmente il pulsante di attivazione prima dell'uso o durante la puntura.
- › Non usare se la confezione è bagnata, aperta, sporca o danneggiata.
- › Usare immediatamente dopo l'apertura della confezione. Smaltire correttamente dopo l'uso.
- › Eseguire tutte le manipolazioni in modo asettico.
- › Non usare vicino al catetere oggetti taglienti come forbici.
- › SuperCath 5 può essere usato esclusivamente da operatori sanitari che abbiano familiarità con le tecniche di accesso vascolare.
- › Non usare per scopi diversi da quelli previsti.
- › Conservare il SuperCath 5 in un armadietto o armadio asciutto (umidità inferiore al 75%), al buio (evitare la luce solare diretta), a temperatura ambiente (15,6-26,6 °C – 60-80 °F).
- › Indossare guanti adeguati durante la procedura.
- › Il materiale dell'ago introduttore non è compatibile con la risonanza magnetica (RM). Non inserire l'ago introduttore in ambiente RM.
- › Non piegare l'ago durante l'uso del prodotto.
- › Valutare attentamente e selezionare il catetere della misura appropriata.
- › I cateteri da 18 G a 22 G sono adatti all'uso con iniettori automatici impostati su una pressione massima di 300 psi.

SuperCath è un marchio registrato di MediKit Co., Ltd

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente e reca la corrispondente marcatura CE.

Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, consultare le istruzioni per l'uso del prodotto.