



Set per infusione Cleo™ 90

Set per infusione sottocutanea monoblocco

Il set per infusione Cleo 90 offre chiari vantaggi

Struttura monoblocco

Il set per infusione Cleo 90 preassemblato è dotato di un esclusivo alloggiamento che include un introduttore e una cannula per semplificare l'inserimento e consentire il controllo della velocità di inserimento.

Sicurezza dell'ago retrattile

Il set per infusione Cleo 90 è un sistema dotato di un proprio dispositivo di protezione dell'ago. L'ago retrattile si

ritira automaticamente nell'alloggiamento dopo l'inserimento, riducendo il rischio di punture accidentali.

Bendaggio ipoallergenico

La piccola medicazione adesiva trasparente è progettata per permettere alla cute di respirare e rimanere in posizione con una quantità minima di nastro. La sua linguetta di rilascio facilita anche la rimozione

Connessione flessibile a 360°

La connessione Flex Attach™ del tubo al sito può ruotare di 360° intorno al sito per una maggiore flessibilità.

Facilità di apprendimento

Il set per infusione Cleo 90 può essere inserito con una sola mano, con un singolo movimento. Progettato con una connessione Luer standard, Cleo può essere utilizzato con qualsiasi pompa dotata di raccordo Luer.


È sufficiente ruotare, inserire e collegare



Ruotare il cappuccio per rimuoverlo.



Inserire la cannula. Premere a fondo il dispositivo fino a udire un clic, quindi mantenere la pressione per almeno 5 secondi. Estrarre delicatamente l'applicatore.

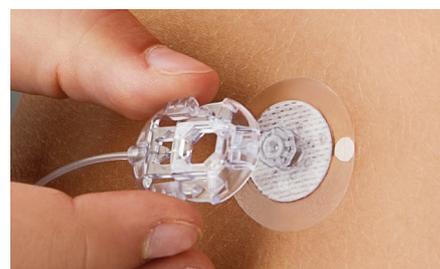

Collegare il set tubo.

Una gamma completa di set per infusione sottocutanea adatti alle esigenze di tutti i pazienti



Connessione Luer Lock standard

Set per infusione Cleo 90 — Catetere ad angolo retto

Articolo	Lunghezza della cannula (mm)	Lunghezza del tubo
21-7220-24	6	61 cm
21-7221-24	6	79 cm
21-7222-24	6	107 cm
21-7230-24	9	61 cm
21-7231-24	9	79 cm
21-7232-24	9	107 cm

Fornito in confezioni sterili da 10 unità
Ago introduttore 28G e cannula 25G

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente e reca la corrispondente marcatura CE (2797). Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, consultare le istruzioni per l'uso del fabbricante.

icumedical
human connections