



ChemoClave™

Nadelfreies, geschlossenes Transfersystem (CSTD)

Einführung eines nadelfreien, geschlossenen Systems, um die Risiken einer Exposition mit gefährlichen Arzneimitteln zu minimieren und die Richtlinien der Industrie zur sicheren Handhabung zu erfüllen

icumedical
menschliche verbindungen

Ein kostengünstigster Weg, sich selbst zu schützen


Mit den niedrigsten Implementierungskosten vereinfacht ChemoClave die Entscheidung, die Sicherheit bei der venösen Medikamentenverabreichung zu erhöhen.

Wir wissen, dass die Kosten für die Implementierung eines geschlossenen System (CSTD) in der klinischen Praxis ein entscheidender Faktor im Einkaufsprozess sein können. Wir haben das nadelfreie ChemoClave-CSTD nicht nur entwickelt, um Ihnen zu helfen, Kontakt mit gefährlichen Medikamenten zu vermeiden und die Medikamentenverabreichung sicherer zu gestalten, sondern dabei auch darauf geachtet, dass unser System weniger Kosten verursacht als andere kommerziell verfügbare CSTDs.¹ Der ChemoClave CSTD besteht aus einer Auswahl von Fläschchenadaptern, die den Transfer und das Entweichen von Kontaminanten mechanisch verhindern, sowie aus nadelfreien Beutelspitzen und primären Add-on und Verabreichungssets.

Der ChemoClave ist ein nadelfreies, geschlossenes System, das Ihnen hilft, die Exposition gegenüber gefährlichen Arzneimitteln zu minimieren und den Sicherheitsrichtlinien der Industrie zu entsprechen.

Das intuitiv zu bedienende ChemoClave-System gewährleistet ein nadelfreies, mechanisch geschlossenes System, um das Risiko von gefährlichen Nadelstichverletzungen zu vermeiden und gleichzeitig die Sicherheit des Klinikpersonals gegenüber gefährlichen Arzneimitteln zu gewährleisten.

CSTD-Preise pro Einheit, nach Anbieter
Der Vergleich der jährlichen Gesamtkosten einer Apotheke im Zusammenhang mit der Implementierung konkurrierender CSTDs zeigt, dass die Implementierung der ChemoLock™ und ChemoClave™ CSTDs von ICU Medical weniger kostet.

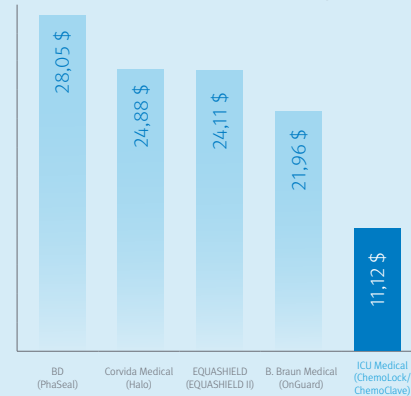

Die Komponentenkosten können aufgrund von Preisänderungen des Herstellers, Vertragspreisen und/oder Mengenrabatten leicht abweichen.

In Kombination mit anderen Sicherheitsvorkehrungen unterstützt Sie ChemoClave bei der Erfüllung von branchenspezifischen Richtlinien zur sicheren Handhabung



Sichere Vorbereitung

Das ChemoClave-System gewährleistet während der Vorbereitung gefährlicher Arzneimittel ein nadelfreies, mechanisch geschlossenes System, um Sie zu schützen und bei der Erfüllung der branchenspezifischen Richtlinien zur sicheren Handhabung zu unterstützen.



Sicherer Transport

Das ChemoClave-System minimiert das Risiko von Leckagen und Verschüttungen während des Transports gefährlicher Arzneimittel von der Apotheke zum Pflegebereich.



Sichere Verabreichung

Das ChemoClave-System erhöht die Patientensicherheit, indem es versehentliche Dekonnektionen verhindert und die Arzneimittlexposition minimiert, ohne dass standardmäßige Patientenversorgungsprotokolle verändert werden müssen.



Sichere Entsorgung

Das ChemoClave-System bleibt während der gesamten Entsorgungsphase mechanisch geschlossen, um eine mögliche Medikamentenbelastung für Sie oder die Umwelt auszuschließen.

¹ Greystone Research Associates. Closed System Drug Transfer Devices – Devices, Markets, Players and Forecasts, [77-78]. 2017.

Suchen Sie die passenden ChemoClave-Komponenten aus, die Ihren Ansprüchen an einen sicheren Umgang mit IV-Medikamenten entsprechen

Da alle ChemoClave-Komponenten über einen passiven Selbstabdichtungsmechanismus verfügen, der nicht vom Anwender deaktiviert werden kann und von der Vorbereitung bis zur Entsorgung aktiv ist, fällt die Auswahl der richtigen Komponentenkombination leicht.


Hier einige Beispiele, aus denen Sie wählen können:

Flaschendorne



Flaschendorn

Ermöglicht den Zugang zu Flaschen mit 13-mm-/20-mm-/28-mm-Verschlässen und der externe Ballon gleicht den Druck beim Wiedereinsetzen aus

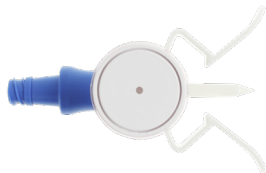

Universeller belüfteter Flaschendorn

Große Belüftung ermöglicht bessere Flussraten und Zuverlässigkeit; Konfiguration mit Umrandung möglich



Belüfteter Flaschendorn, 13 mm

Ermöglicht den Zugang zu kleinen Flaschen mit 13-mm-Verschlässen und gleicht den Druck automatisch aus

Beuteldorne



Beuteldorn

Zur Verwendung an beliebigen Lösungsbehältern



Beuteldorn mit zusätzlichem Port, Trockendorn


Spezielles Lumen für direkten Zugang zu Lösungsbeutel und Trockenspike



Belüfteter Beuteldorn

Zur Verwendung an einem Lösungsbehälter, der belüftet werden muss

Verbreichungssets und -komponenten

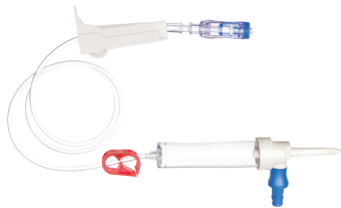


Sekundäres 30"-Set mit integrierter Clave-Tropfkammer und verbundenem Spinning Spiros



Beutelspikeadapter mit Spiros

Ermöglicht die Beibehaltung des Pumpensets bei der Verabreichung mehrerer kompatibler Arzneimittel

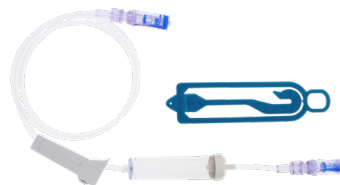

Sekundäres 40"-Set mit integrierter Tropfkammer und 2 Spinning Spiros

Ermöglicht die Beibehaltung des sekundären Setschlauchs bei der Verabreichung mehrerer kompatibler Arzneimittel

Geschlossener männlicher Luer-Anschluss



Spiros™, geschlossener männlicher Luer-Anschluss

Zur Verwendung an einer Spritze oder einem Verabreichungsset; entfernbare Konfiguration verfügbar

Das Produkt entspricht den geltenden Gesetzen und trägt die entsprechende CE-Kennzeichnung. Weitere Informationen, Warnungen und / oder Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

icumedical
menschliche verbindungen