



# Cleo™ 90 Infusions-Set

## Kompaktes subkutanes Infusions-Set

### Die Vorteile des Cleo 90 Infusions-Sets liegen auf der Hand

#### Kompaktes Design

Das vormontierte Cleo 90 Infusions-Set verfügt über ein einzigartiges, von uns entwickeltes Gehäuse, das mit einer Einführhilfe und einer Kanüle ausgestattet ist, um die Einführung zu erleichtern und die Einführgeschwindigkeit zu steuern.

#### Sicherheit durch eine umschlossene Nadel

Das Cleo 90 Infusions-Set ist ein System mit integriertem Schutz vor

Nadelstichverletzungen. Die umschlossene Nadel fährt nach dem Einstechen automatisch in das Gehäuse ein, wodurch das Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen minimiert wird.

#### Hypoallergene Kontaktfläche

Der kleine, transparente Klebeverband ist luftdurchlässig und bleibt an Ort und Stelle – mit einem Minimum an Klebematerial. Die von uns entwickelte Freigabehilfe erleichtert auch die Entfernung.

#### Flexible 360°-Verbindung

Die Flex Attach™ 360°-Schlauchverbindung ermöglicht die Rotation direkt an der Einstichstelle und bietet somit größere Flexibilität.

#### Leicht anzuwenden

Das Cleo 90 Infusions-Set kann mit einer Hand und in einer Bewegung angebracht werden. Cleo ist mit einem Standard-Luer-Anschluss ausgestattet und kann mit jeder Pumpe mit Luer-Anschluss verwendet werden.


### Einfach nur drehen, zusammenschieben und anschließen



Kappe abdrehen.



Kanüle einsetzen. Produkt fest andrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist; anschließend 5 Sekunden lang gedrückt halten. Den Applikator vorsichtig abziehen.

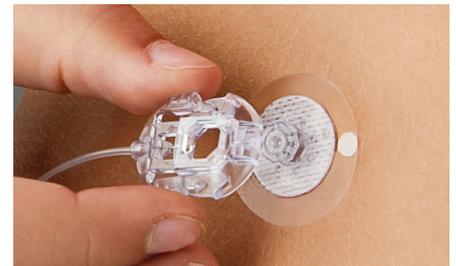

Schlauchsatz verbinden.

Ein umfassendes Sortiment an subkutanen Infusions-Sets, ausgerichtet auf die Anforderungen des jeweiligen Patienten



Standardmäßige Luer-Lock-Verbindung

Cleo 90 Infusions-Set – Katheter ohne Winkelung

Artikelnummer	Kanülenlänge (mm)	Schlauchlänge
21-7220-24	6	61 cm
21-7221-24	6	79 cm
21-7222-24	6	107 cm
21-7230-24	9	61 cm
21-7231-24	9	79 cm
21-7232-24	9	107 cm

Steril, in 10er-Packungen  
28G Einführnadel und 25G Kanüle

Das Produkt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung (2797). Weitere Informationen, Warnhinweise und/oder Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

**icumedical**  
human connections

Deutschland: +49 (0)89 242959 – 0  
Österreich: +43 (0)1 8906444 – 0  
www.icumed.com