



Canules de trachéotomie en silicone
Bivona™
Catalogue produits

Sommaire

Introduction.....	4
Bivona™ TTS.....	5
Canules de trachéotomie Bivona TTS pour adulte (avec ballonnet)	5
Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS (collerette en V, à ballonnet).....	5
Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS (collerette droite, à ballonnet)	5
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS (collerette en V, à ballonnet).....	5
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS (collerette droite, à ballonnet).....	6
Bivona™ TTS™ FlexTend™	7
Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS FlexTend (collerette en V, à ballonnet).....	7
Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS FlexTend (collerette droite, à ballonnet)	7
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend (collerette en V, à ballonnet).....	7
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend (collerette droite, à ballonnet).....	7
Bivona™ TTS™ FlexTend™ Plus™	8
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend Plus (collerette en V, à ballonnet)	8
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend Plus (collerette droite, à ballonnet)	8
Bivona™ FlexTend™	9
Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette en V)	9
Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette droite).....	9
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette en V)	9
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette droite).....	9
Bivona™ FlexTend™ Plus™	10
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend Plus (extra longue, collerette en V)	10
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend Plus (extra longue, collerette droite).....	10
Bivona™ Aire-Cuf™	11
Canules de trachéotomie Bivona Mid-Range Aire-Cuf pour adulte	11
Canules de trachéotomie Bivona Mid-Range Aire-Cuf pour adulte avec dispositif de vocalisation	11
Canules de trachéotomie néonatales Bivona Aire-Cuf (collerette en V)	11
Canules de trachéotomie néonatales Bivona Aire-Cuf (collerette droite)	12
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Aire-Cuf (collerette en V)	12
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Aire-Cuf (collerette droite)	12
Bivona™ Fome-Cuf™	13
Canules de trachéotomie Bivona Fome-Cuf pour adulte.....	13
Canules de trachéotomie Bivona Fome-Cuf pour adulte (avec dispositif de vocalisation)	13
Canules de trachéotomie néonatales Bivona Fome-Cuf (collerette en V)	13
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Fome-Cuf (collerette en V)	13

Bivona™ Hyperflex™ à collerette réglable	14
Canules de trachéotomie Bivona TTS Hyperflex à collerette réglable.....	14
Canules de trachéotomie Bivona Mid-Range Aire-Cuf Hyperflex à collerette réglable	14
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Hyperflex sans ballonnet à collerette en V réglable	14
Bivona™ Hyperflex à collerette fixe	15
Canules de trachéotomie Bivona Hyperflex extra-longues sans ballonnet à collerette fixe.....	15
Canules de trachéotomie Bivona TTS Hyperflex extra-longues à collerette fixe	15
Canules de trachéotomie Bivona Hyperflex extra-longues à ballonnet à collerette fixe.....	15
Bivona™ sans ballonnet.....	16
Canules de trachéotomie Bivona sans ballonnet pour adulte	16
Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet (collerette en V)	16
Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet (collerette droite).....	16
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet (collerette en V).....	16
Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet (collerette droite)	17
Canules de trachéotomie en silicone personnalisées Bivona™	18
Chemise interne Bivona™	19
Accessoires.....	19

Chaque canule est emballée individuellement avec un obturateur, un découpleur de canule et du ruban tissé.

Canules de trachéotomie en silicone Bivona™

Le silicone offre des avantages importants par rapport aux matériaux de canule conventionnels :

Douceur et souplesse

Pour plus de confort, une meilleure facilité d'utilisation et une plus grande plage de mobilité.

Biocompatibilité

Hydrophobe et hypoallergénique, respectueux des tissus et facile à nettoyer.

Durabilité

Robuste pour un retraitement fiable, résiste à des désinfections répétées jusqu'à dix fois (tailles adultes) et cinq fois (tailles néonatales et pédiatriques).



Les canules de trachéotomie en silicone Bivona sont disponibles avec de nombreuses options de configuration pour répondre à chaque âge, morphologie et environnement. Des canules en silicone Bivona personnalisées sont disponibles.

Pour le confort

Une variété de canules conçues pour améliorer le confort du patient :

- › permet au connecteur de 15 mm d'être en aval du menton.
- › aide à réduire le risque d'escarres liées au dispositif.
- › offre l'option d'utiliser un ballonnet auto-expansible pour atténuer le risque de surgonflage.

Pour la conception

Intègre des caractéristiques uniques pour améliorer le confort du patient, faciliter l'utilisation et éviter la contamination.

Pour la fonctionnalité et la sécurité

Matériau hydrophobe pour un nettoyage facile, exempt de DEHP, de latex et de plastifiants.

Pour le choix

Associe la douceur et la souplesse du silicone à une large gamme de tailles et de formes pour tous les âges.

Pour un bon rapport coût-efficacité

Les canules Bivona peuvent être nettoyées et désinfectées pour un maximum de dix réinsertions (tailles adultes) ou de cinq réinsertions (tailles néonatales et pédiatriques).

Bivona™ TTS™

La conception du ballonnet TTS offre les avantages d'un ballonnet avec le profil d'une canule sans ballonnet. Lorsque le ballonnet en silicone est complètement dégonflé, il n'ajoute aucune dimension significative au diamètre externe de canule, mais il peut être partiellement ou complètement gonflé pour répondre à différents besoins de prise en charge des voies aériennes.




Hôpital



Domicile



MRM
RM
sous
conditions

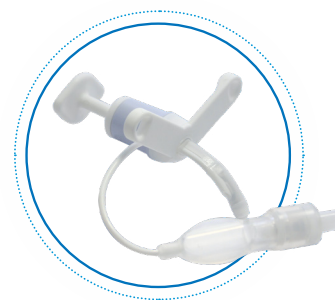

670180

Canules de trachéotomie Bivona TTS pour adulte (avec ballonnet)							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
670150	5.0	5.0	7.4	60.0	100°	9.5	1
670160	6.0	6.0	8.8	70.0	100°	11.0	1
670170	7.0	7.0	10.0	80.0	100°	12.0	1
670175	7.5	7.5	10.5	80.0	100°	12.5	1
670180	8.0	8.0	11.0	88.0	100°	13.0	1
670185	8.5	8.5	11.8	88.0	100°	14.0	1
670190	9.0	9.0	12.3	98.0	100°	14.5	1



67N030

Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS (collerette en V, à ballonnet)							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67N025	2.5	2.5	4.0	30.0	120°	4.0	1
67N030	3.0	3.0	4.7	32.0	120°	4.7	1
67N035	3.5	3.5	5.3	34.0	120°	5.3	1
67N040	4.0	4.0	6.0	36.0	120°	6.0	1



67SN030

Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS (collerette droite, à ballonnet)							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67SN025	2.5	2.5	4.0	30.0	120°	4.0	1
67SN030	3.0	3.0	4.7	32.0	120°	4.7	1
67SN035	3.5	3.5	5.3	34.0	120°	5.3	1
67SN040	4.0	4.0	6.0	36.0	120°	6.0	1



67P045

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS (collerette en V, à ballonnet)							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67P025	2.5	2.5	4.0	38.0	120°	4.0	1
67P030	3.0	3.0	4.7	39.0	120°	4.7	1
67P035	3.5	3.5	5.3	40.0	120°	5.3	1
67P040	4.0	4.0	6.0	41.0	120°	6.0	1
67P045	4.5	4.5	6.7	42.0	120°	6.7	1
67P050	5.0	5.0	7.3	44.0	120°	7.3	1
67P055	5.5	5.5	8.0	46.0	120°	8.0	1



67SP045

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS (collerette droite, à ballonnet)

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67SP025	2.5	2.5	4.0	38.0	120°	4.0	1
67SP030	3.0	3.0	4.7	39.0	120°	4.7	1
67SP035	3.5	3.5	5.3	40.0	120°	5.3	1
67SP040	4.0	4.0	6.0	41.0	120°	6.0	1
67SP045	4.5	4.5	6.7	42.0	120°	6.7	1
67SP050	5.0	5.0	7.3	44.0	120°	7.3	1
67SP055	5.5	5.5	8.0	46.0	120°	8.0	1

Bivona™ TTS™ FlexTend™

Canules de trachéotomie en silicone radio-opaques avec une extension renforcée par un fil, en amont de la collerette. Le ballonnet en silicone repose à plat contre la tige lorsqu'il est dégonflé. L'extension proximale permet au connecteur de 15 mm d'être en aval du menton. La canule est dotée d'un ballonnet de gonflage transparent avec une valve anti-retour et une connexion intégrée de 15 mm. Elle est fabriquée avec la formulation Bivona SuperSlick™.




Hôpital



Domicile



RM
sous
conditions

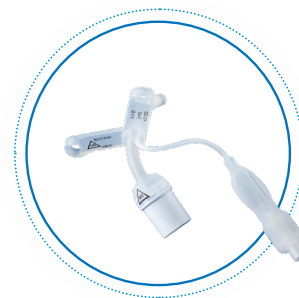

67NFP25

Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS FlexTend (collerette en V, à ballonnet)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67NFP25	2.5	2.5	4.0	20.0	30.0	120°	4.0	1
67NFP30	3.0	3.0	4.7	20.0	32.0	120°	4.7	1
67NFP35	3.5	3.5	5.3	20.0	34.0	120°	5.3	1
67NFP40	4.0	4.0	6.0	20.0	36.0	120°	6.0	1



67NFPS25

Canules de trachéotomie néonatales Bivona TTS FlexTend (collerette droite, à ballonnet)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67NFPS25	2.5	2.5	4.0	20.0	30.0	120°	4.0	1
67NFPS30	3.0	3.0	4.7	20.0	32.0	120°	4.7	1
67NFPS35	3.5	3.5	5.3	20.0	34.0	120°	5.3	1
67NFPS40	4.0	4.0	6.0	20.0	36.0	120°	6.0	1



67PFSS25

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend (collerette en V, à ballonnet)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67PFSS25	2.5	2.5	4.0	20.0	38.0	120°	4.0	1
67PFSS30	3.0	3.0	4.7	20.0	39.0	120°	4.7	1
67PFSS35	3.5	3.5	5.3	20.0	40.0	120°	5.3	1
67PFSS40	4.0	4.0	6.0	20.0	41.0	120°	6.0	1
67PFSS45	4.5	4.5	6.7	30.0	42.0	120°	6.7	1
67PFSS50	5.0	5.0	7.3	30.0	44.0	120°	7.3	1
67PFSS55	5.5	5.5	8.0	30.0	46.0	120°	8.0	1




67PFSS25

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend (collerette droite, à ballonnet)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67PFSS25	2.5	2.5	4.0	20.0	38.0	120°	4.0	1
67PFSS30	3.0	3.0	4.7	20.0	39.0	120°	4.7	1
67PFSS35	3.5	3.5	5.3	20.0	40.0	120°	5.3	1
67PFSS40	4.0	4.0	6.0	20.0	41.0	120°	6.0	1
67PFSS45	4.5	4.5	6.7	30.0	42.0	120°	6.7	1
67PFSS50	5.0	5.0	7.3	30.0	44.0	120°	7.3	1
67PFSS55	5.5	5.5	8.0	30.0	46.0	120°	8.0	1

Bivona™ TTS™ FlexTend Plus™

Canules de trachéostomie en silicone radio-opaques avec une extension renforcée par un fil, en amont de la collerette. Le ballonnet en silicone repose à plat contre la tige lorsqu'il est dégonflé. L'extension proximale permet au connecteur de 15 mm d'être en aval du menton. La canule est dotée d'un ballonnet de gonflage transparent avec une valve anti-retour et une connexion intégrée de 15 mm. Les canules FlexTend Plus fournissent également une longueur distale supplémentaire pour les patients nécessitant une longueur totale supplémentaire. Elle est fabriquée avec la formulation Bivona SuperSlick™.

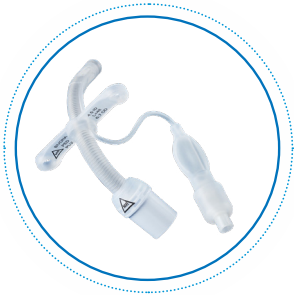

67PFP40

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend Plus (extra longue, collerette en V, à ballonnet)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67PFP40	4.0	4.0	6.0	30.0	44.0	120°	6.0	1
67PFP45	4.5	4.5	6.7	30.0	48.0	120°	6.7	1
67PFP50	5.0	5.0	7.3	30.0	50.0	120°	7.3	1
67PFP55	5.5	5.5	8.0	30.0	52.0	120°	8.0	1
67PFP60	6.0	6.0	8.7	30.0	56.0	120°	8.7	1



67PFPS40

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona TTS FlexTend Plus (extra longue, collerette droite, à ballonnet)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67PFPS40	4.0	4.0	6.0	30.0	44.0	120°	6.0	1
67PFPS45	4.5	4.5	6.7	30.0	48.0	120°	6.7	1
67PFPS50	5.0	5.0	7.3	30.0	50.0	120°	7.3	1
67PFPS55	5.5	5.5	8.0	30.0	52.0	120°	8.0	1
67PFPS60	6.0	6.0	8.7	30.0	56.0	120°	8.7	1

Bivona™ FlexTend™

Les sections proximale et distale renforcées offrent un niveau élevé de résistance aux plicatures et à l'écrasement. La canule proximale étendue permet au connecteur de 15 mm d'être en aval du menton.



Hôpital



Domicile



RM
sous
conditions



60NFP30

Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette en V)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Distal Length (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60NFP25	2.5	2.5	4.0	20.0	30.0	120°	N/A	1
60NFP30	3.0	3.0	4.7	20.0	32.0	120°	N/A	1
60NFP35	3.5	3.5	5.3	20.0	34.0	120°	N/A	1
60NFP40	4.0	4.0	6.0	20.0	36.0	120°	N/A	1



60NFPS35

Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette droite)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Distal Length (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60NFPS25	2.5	2.5	4.0	20.0	30.0	120°	N/A	1
60NFPS30	3.0	3.0	4.7	20.0	32.0	120°	N/A	1
60NFPS35	3.5	3.5	5.3	20.0	34.0	120°	N/A	1
60NFPS40	4.0	4.0	6.0	20.0	36.0	120°	N/A	1



60PFS40

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette en V)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60PFS25	2.5	2.5	4.0	20.0	38.0	120°	N/A	1
60PFS30	3.0	3.0	4.7	20.0	39.0	120°	N/A	1
60PFS35	3.5	3.5	5.3	20.0	40.0	120°	N/A	1
60PFS40	4.0	4.0	6.0	20.0	41.0	120°	N/A	1
60PFS45	4.5	4.5	6.7	30.0	42.0	120°	N/A	1
60PFS50	5.0	5.0	7.3	30.0	44.0	120°	N/A	1
60PFS55	5.5	5.5	8.0	30.0	46.0	120°	N/A	1



60PFSS25

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend (collerette droite)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Distal Length (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60PFSS25	2.5	2.5	4.0	20.0	38.0	120°	N/A	1
60PFSS30	3.0	3.0	4.7	20.0	39.0	120°	N/A	1
60PFSS35	3.5	3.5	5.3	20.0	40.0	120°	N/A	1
60PFSS40	4.0	4.0	6.0	20.0	41.0	120°	N/A	1
60PFSS45	4.5	4.5	6.7	30.0	42.0	120°	N/A	1
60PFSS50	5.0	5.0	7.3	30.0	44.0	120°	N/A	1
60PFSS55	5.5	5.5	8.0	30.0	46.0	120°	N/A	1

Bivona™ FlexTend Plus™

Les sections proximale et distale renforcées offrent un niveau élevé de résistance aux plicatures et à l'écrasement. La canule proximale étendue permet au connecteur de 15 mm d'être en aval du menton. Les canules FlexTend Plus fournissent également une longueur distale supplémentaire pour les patients nécessitant une longueur totale supplémentaire.



60PFP45

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend Plus (extra longue, collerette en V)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60PFP40	4.0	4.0	6.0	30.0	44.0	120°	N/A	1
60PFP45	4.5	4.5	6.7	30.0	48.0	120°	N/A	1
60PFP50	5.0	5.0	7.3	30.0	50.0	120°	N/A	1
60PFP55	5.5	5.5	8.0	30.0	52.0	120°	N/A	1
60PFP60	6.0	6.0	8.7	30.0	56.0	120°	N/A	1



60PFPS50


Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet FlexTend Plus (extra longue, collerette droite)								
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur proximale (mm)	Longueur distale (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60PFPS40	4.0	4.0	6.0	30.0	44.0	120°	N/A	1
60PFPS45	4.5	4.5	6.7	30.0	48.0	120°	N/A	1
60PFPS50	5.0	5.0	7.3	30.0	50.0	120°	N/A	1
60PFPS55	5.5	5.5	8.0	30.0	52.0	120°	N/A	1
60PFPS60	6.0	6.0	8.7	30.0	56.0	120°	N/A	1

Bivona™ Aire-Cuf™

Une canule souple et réglable avec un ballonnet souple et sécurisé. Les canules néonatales et pédiatriques sont renforcées pour offrir un niveau élevé de résistance aux plicatures et à l'écrasement. Certaines configurations adultes sont dotées d'un dispositif de vocalisation permettant la phonation pour les patients ventilo-dépendants avec des cordes vocales viables.



RM
sous
conditions

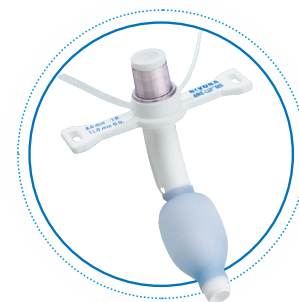

750160

Canules de trachéotomie Bivona Mid Range Aire Cuf pour adulte							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
750150	5.0	5.0	7.4	60.0	100°	17.0	1
750160	6.0	6.0	8.8	70.0	100°	18.0	1
750170	7.0	7.0	10.0	80.0	100°	21.0	1
750180	8.0	8.0	11.0	88.0	100°	25.0	1
750190	9.0	9.0	12.3	98.0	100°	28.0	1
750195	9.5	9.5	13.3	98.0	100°	28.0	1



755180

Canules de trachéotomie Bivona Mid Range Aire Cuf pour adulte avec dispositif de vocalisation							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
755150-SM	5.0	5.0	7.3	60.0	100°	17.0	1
755160-SM	6.0	6.0	8.7	70.0	100°	18.0	1
755170-SM	7.0	7.0	10.0	80.0	100°	21.0	1
755180-SM	8.0	8.0	11.0	88.0	100°	25.0	1
755190-SM	9.0	9.0	12.3	98.0	100°	28.0	1
755195-SM	9.5	9.5	13.3	98.0	100°	28.0	1



65N035

Canules de trachéotomie néonatales Bivona Aire Cuf (collerette en V)							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
65N025	2.5	2.5	4.0	30.0	120°	12.0	1
65N030	3.0	3.0	4.7	32.0	120°	14.0	1
65N035	3.5	3.5	5.3	34.0	120°	14.0	1
65N040	4.0	4.0	6.0	36.0	120°	18.0	1



65SN025

Canules de trachéotomie néonatales Bivona Aire Cuf (collerette droite)

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
65SN025	2.5	2.5	4.0	30.0	120°	12.0	1
65SN030	3.0	3.0	4.7	32.0	120°	14.0	1
65SN035	3.5	3.5	5.3	34.0	120°	14.0	1
65SN040	4.0	4.0	6.0	36.0	120°	18.0	1



65P030

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Aire Cuf (collerette en V)

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
65P025	2.5	2.5	4.0	38.0	120°	12.0	1
65P030	3.0	3.0	4.7	39.0	120°	14.0	1
65P035	3.5	3.5	5.3	40.0	120°	14.0	1
65P040	4.0	4.0	6.0	41.0	120°	18.0	1
65P045	4.5	4.5	6.7	42.0	120°	18.0	1
65P050	5.0	5.0	7.3	44.0	120°	20.0	1
65P055	5.5	5.5	8.0	46.0	120°	20.0	1



65SP030

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Aire Cuf (collerette droite)

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
65SP025	2.5	2.5	4.0	38.0	120°	12.0	1
65SP030	3.0	3.0	4.7	39.0	120°	14.0	1
65SP035	3.5	3.5	5.3	40.0	120°	14.0	1
65SP040	4.0	4.0	6.0	41.0	120°	18.0	1
65SP045	4.5	4.5	6.7	42.0	120°	18.0	1
65SP050	5.0	5.0	7.3	44.0	120°	20.0	1
65SP055	5.5	5.5	8.0	46.0	120°	20.0	1

Bivona™ Fome-Cuf™

Le ballonnet auto-expansible permet de réduire le risque de gonflage excessif ou insuffisant associé aux ballonnets traditionnels. Certaines configurations adultes sont dotées d'un dispositif de vocalisation permettant la phonation pour les patients ventilo-dépendants avec des cordes vocales viables.




Hôpital



Domicile



Sans danger
dans un
environnement
RM

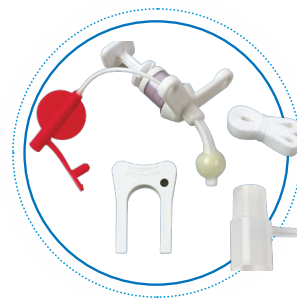

850180

Canules de trachéotomie Bivona Fome Cuf pour adulte							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
850150	5.0	5.0	7.3	60.0	100°	20.0	1
850160	6.0	6.0	8.7	70.0	100°	30.0	1
850170	7.0	7.0	10.0	80.0	100°	32.0	1
850180	8.0	8.0	11.0	88.0	100°	33.0	1
850190	9.0	9.0	12.3	98.0	100°	33.0	1
850195	9.5	9.5	13.3	98.0	100°	33.0	1



855180

Canules de trachéotomie Bivona Fome Cuf pour adulte (avec dispositif de vocalisation)							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
855150	5.0	5.0	7.3	60.0	100°	20.0	1
855160	6.0	6.0	8.7	70.0	100°	30.0	1
855170	7.0	7.0	10.0	80.0	100°	32.0	1
855180	8.0	8.0	11.0	88.0	100°	33.0	1
855190	9.0	9.0	12.3	98.0	100°	33.0	1



85N030

Canules de trachéotomie néonatales Bivona Fome Cuf (collerette en V)*							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
85N030	3.0	3.0	4.7	32.0	N/A	14.0	1
85N035	3.5	3.5	5.3	34.0	N/A	14.0	1
85N040	4.0	4.0	6.0	36.0	N/A	18.0	1

* Les produits mentionnés ci-dessus sont autorisés sous certaines conditions en IRM.



85P035

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Fome Cuf (collerette en V)*							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
85P025	2.5	2.5	4.0	38.0	N/A	12.0	1
85P030	3.0	3.0	4.7	39.0	N/A	14.0	1
85P035	3.5	3.5	5.3	40.0	N/A	14.0	1
85P040	4.0	4.0	6.0	41.0	N/A	18.0	1
85P045	4.5	4.5	6.7	42.0	N/A	18.0	1
85P050	5.0	5.0	7.3	44.0	N/A	20.0	1
85P055	5.5	5.5	8.0	46.0	N/A	20.0	1

* Les produits mentionnés ci-dessus sont autorisés sous certaines conditions en IRM.

Bivona™ Hyperflex™ à collerette réglable


Les canules à collerette réglable permettent une modification immédiate de la position de la collerette pour répondre aux différents besoins du patient. Elles peuvent être ajustées pour une position horizontale ou verticale de la tige afin de s'adapter à une anatomie ou une pathologie inhabituelle. Les tiges souples en silicone renforcées par des fils offrent une meilleure résistance aux plicatures et à l'écrasement.



Hôpital



RM
sous
conditions

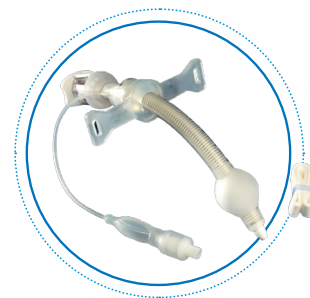

67HA60

Canules de trachéotomie Bivona TTS Hyperflex à collerette réglable							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67HA60	6.0	6.0	9.2	110.0	180°	11.0	1
67HA70	7.0	7.0	10.6	120.0	180°	12.0	1
67HA80	8.0	8.0	11.7	130.0	180°	13.0	1
67HA90	9.0	9.0	12.9	140.0	180°	14.5	1



75HA70

Canules de trachéotomie Bivona Mid Range Aire Cuf Hyperflex à collerette réglable							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
75HA60	6.0	6.0	9.2	110.0	180°	18.0	1
75HA70	7.0	7.0	10.6	120.0	180°	21.0	1
75HA80	8.0	8.0	11.7	130.0	180°	25.0	1
75HA90	9.0	9.0	12.9	140.0	180°	28.0	1



60HA35

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona Hyperflex sans ballonnet à collerette en V réglable							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur utile maximale de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60HA25	2.5	2.5	4.0	55.0	180°	N/A	1
60HA30	3.0	3.0	4.7	60.0	180°	N/A	1
60HA35	3.5	3.5	5.3	65.0	180°	N/A	1
60HA40	4.0	4.0	6.0	70.0	180°	N/A	1
60HA45	4.5	4.5	6.7	75.0	180°	N/A	1
60HA50	5.0	5.0	7.3	80.0	180°	N/A	1
60HA55	5.5	5.5	8.0	85.0	180°	N/A	1

Bivona™ Hyperflex™ à collerette fixe

La canule à collerette fixe fournit une solution plus permanente pour les patients qui nécessitent une longueur verticale et horizontale supplémentaire. Les tiges souples en silicone renforcées par des fils offrent une meilleure résistance aux plicatures et à l'écrasement.



RM
sous
conditions



60AFHXL70

Canules de trachéotomie Bivona Hyperflex extra longues sans ballonnet à collerette fixe							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60AFHXL60	6.0	6.0	9.2	100.0	180°	N/A	1
60AFHXL70	7.0	7.0	10.6	110.0	180°	N/A	1
60AFHXL80	8.0	8.0	11.7	120.0	180°	N/A	1
60AFHXL90	9.0	9.0	12.9	130.0	180°	N/A	1



67FHXL70

Canules de trachéotomie Bivona TTS Hyperflex extra longues à collerette fixe							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
67FHXL60	6.0	6.0	9.2	100.0	180°	11.0	1
67FHXL70	7.0	7.0	10.6	110.0	180°	12.0	1
67FHXL80	8.0	8.0	11.7	120.0	180°	13.0	1
67FHXL90	9.0	9.0	12.9	130.0	180°	14.5	1



75FHXL60

Canules de trachéotomie Bivona Hyperflex extra longues à ballonnet à collerette fixe							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
75FHXL60	6.0	6.0	9.2	100.0	180°	18.0	1
75FHXL70	7.0	7.0	10.6	110.0	180°	21.0	1
75FHXL80	8.0	8.0	11.7	120.0	180°	25.0	1
75FHXL90	9.0	9.0	12.9	130.0	180°	28.0	1

Bivona™ sans ballonnet

Lorsqu'une canule sans ballonnet est indiquée, la construction entièrement en silicone de cette canule douce et souple garantit le confort du patient.



Hôpital



Domicile



RM
sous
conditions



60A160

Canules de trachéotomie Bivona sans ballonnet pour adulte*

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60A150	5.0	5.0	7.4	60.0	N/A	N/A	1
60A160	6.0	6.0	8.8	70.0	N/A	N/A	1
60A170	7.0	7.0	10.0	80.0	N/A	N/A	1
60A180	8.0	8.0	11.0	88.0	N/A	N/A	1
60A190	9.0	9.0	12.3	98.0	N/A	N/A	1

* Les produits mentionnés ci-dessus sont autorisés sous certaines conditions en IRM.



60N030

Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet (collerette en V)

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60N025	2.5	2.5	4.0	30.0	120°	N/A	1
60N030	3.0	3.0	4.7	32.0	120°	N/A	1
60N035	3.5	3.5	5.3	34.0	120°	N/A	1
60N040	4.0	4.0	6.0	36.0	120°	N/A	1



60SN025

Canules de trachéotomie néonatales Bivona sans ballonnet (collerette droite)

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60SN025	2.5	2.5	4.0	30.0	120°	N/A	1
60SN030	3.0	3.0	4.7	32.0	120°	N/A	1
60SN035	3.5	3.5	5.3	34.0	120°	N/A	1
60SN040	4.0	4.0	6.0	36.0	120°	N/A	1



60P040

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet (collerette en V)

Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60P025	2.5	2.5	4.0	38.0	120°	N/A	1
60P030	3.0	3.0	4.7	39.0	120°	N/A	1
60P035	3.5	3.5	5.3	40.0	120°	N/A	1
60P040	4.0	4.0	6.0	41.0	120°	N/A	1
60P045	4.5	4.5	6.7	42.0	120°	N/A	1
60P050	5.0	5.0	7.3	44.0	120°	N/A	1
60P055	5.5	5.5	8.0	46.0	120°	N/A	1



ACCUEIL

Bivona™ sans ballonnet



60SP040

Canules de trachéotomie pédiatriques Bivona sans ballonnet (collerette droite)							
Référence	Taille de la canule (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Ø ext. de la canule (mm)	Longueur de la canule (mm)	Angle de la canule	Diamètre du ballonnet au repos (mm)	Unités par carton
60SP025	2.5	2.5	4.0	38.0	120°	N/A	1
60SP030	3.0	3.0	4.7	39.0	120°	N/A	1
60SP035	3.5	3.5	5.3	40.0	120°	N/A	1
60SP040	4.0	4.0	6.0	41.0	120°	N/A	1
60SP045	4.5	4.5	6.7	42.0	120°	N/A	1
60SP050	5.0	5.0	7.3	44.0	120°	N/A	1
60SP055	5.5	5.5	8.0	46.0	120°	N/A	1

Canules de trachéotomie en silicone personnalisées Bivona™

Le traitement d'un patient dont l'anatomie est complexe ou inhabituelle peut être difficile, mais trouver une canule de trachéotomie correctement ajustée pour ce patient ne devrait pas l'être. Les ingénieurs de personnalisation Bivona peuvent fabriquer à la main une canule en silicone souple et durable adaptée au cou, à la stomie et à la trachée du patient.

La conception d'une canule de trachéotomie personnalisée Bivona peut être réalisée à l'aide de nos modèles en ligne.


Délais de livraison pour une canule de trachéotomie personnalisée Bivona :

- › Service standard (stérile) : 8 à 10 semaines.
- › Service standard (non stérile) : 7 à 10 jours ouvrables.

Consulter le site bivonacustom.com pour plus d'informations ou nous contacter à l'adresse :

Téléphone : +33 (0)1 58 42 50 00

E-mail : bivonacustomorder@icumed.com

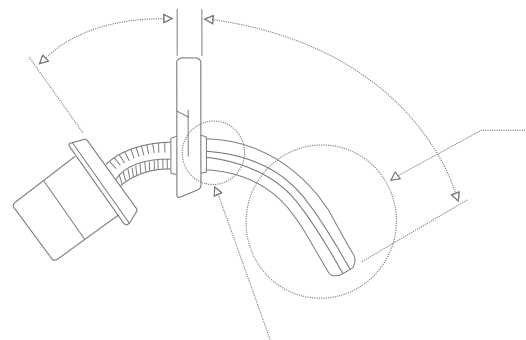


Chemises internes Bivona™

Le système de chemise interne Bivona combine les avantages associés à l'utilisation d'une canule de trachéotomie en silicone Bivona pour adulte avec une chemise interne souple conçue pour conserver l'intégrité de la souplesse de la canule. Disponible en tailles 7,0 à 9,0 pour une utilisation avec les canules de trachéotomie Bivona à ballonnet « tight to shaft » (ballonnet plaqué, TTS), Mid-Range Air-Cuf et sans ballonnet, offrant une solution pour une prise en charge efficace des sécrétions en milieu hospitalier et dans le cadre de soins à domicile. Les chemises internes Bivona sont fabriquées dans un matériau doux et souple, pour faciliter l'insertion et le retrait.



RM
sous
conditions

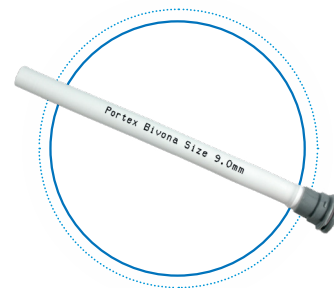

BRCA90

Bivona Inner cannulas				
Référence	Ø int. de la chemise interne (mm)	Longueur de la chemise interne (mm)	Ø int. de la canule (mm)	Unités par carton
BRCA70	5.5	111.6	7.0	10
BRCA75	6.0	113.9	7.5	10
BRCA80	6.5	123.5	8.0	10
BRCA85	7.0	124.4	8.5	10
BRCA90	7.5	134.2	9.0	10
BRC270	5.5	111.6	7.0	2
BRC275	6.0	113.9	7.5	2
BRC280	6.5	123.5	8.0	2
BRC285	7.0	124.4	8.5	2
BRC290	7.5	134.2	9.0	2

Accessoires

Accessoires		
Référence	Description	Unités par carton
100/550/000	Valve de phonation Orator™	2
525351	Dual-Axis Swivel Adapter (Sterile)	50
100/570/015CZ	Thermovent™ T (stérile)	50
100/580/015	ECH Thermovent 600	20
100/570/022	Thermovent T2 (stérile)	50
100/582/000	ECH Thermovent 1200, adulte, droit	20

Désignation	Classe du DM	Fabricant	Organisme notifié	Prise en charge
Canule de trachéotomie Bivona				
› Bivona Aire-Cuf				Code LPP 2426766
› Bivona Fome-Cuf				
› Bivona Mid-Range Aire-Cuf	IIb	ICU Medical, Inc.	BSI (2797)	Canule trachéale simple en élastomère de silicone. La prise en charge est assurée dans la limite de 2 attributions tous les 2 mois (ou 12 par an).
› Bivona TTS				
› Bivona FlexTend Plus				
› Bivona FlexTend TTS Plus				
Chemise interne Bivona	IIa	ICU Medical, Inc.	BSI (2797)	-

Le produit est conforme à la législation actuelle et dispose du marquage CE correspondant (2797).
Pour des informations supplémentaires, les mises en garde et/ou les précautions de sécurité, se reporter à la notice d'utilisation.