



# SuperCath<sup>®</sup> 5

Catéter de seguridad i.v.




Catéter periférico i.v. con tecnología de contención sanguínea integrada y protección de aguja totalmente encapsulada.

**icu**medical  
human connections

# Ayuda a minimizar la exposición a la sangre a la vez que reduce el riesgo de pinchazos de aguja accidentales

El catéter de seguridad i.v. SuperCath 5 combina la tecnología de contención sanguínea con la protección de la aguja totalmente encapsulada para ayudarle a reducir el riesgo de pinchazos de aguja accidentales y a cumplir con la directiva de la UE sobre objetos punzocortantes.<sup>1</sup>

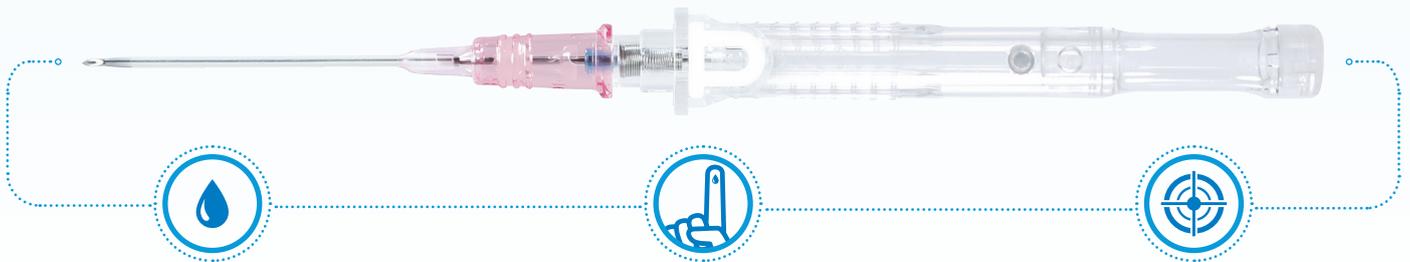

## Ayuda a minimizar el riesgo de exposición a la sangre

Evite la fuga de sangre durante la inserción y preparación del catéter con una válvula de contención de sangre integrada.

## Reduce el riesgo de pinchazos de aguja accidentales

Evite pinchazos accidentales y la exposición a la aguja con el encapsulamiento de la aguja accionado por resorte con un botón pulsador.

## Evita la repetición de los intentos de inserción

Asegúrese de que el catéter quede bien colocado en el vaso en la primera punción con la tecnología de doble indicador.

## Información del producto

Código de producto sin aletas	Código de producto con aletas	Calibre	Largo (mm)	D.E. (mm)	D.I. (mm)	Caudal (ml/min)
SP125-26-14T*	SP125-26-14-WT*	● 26	14	0,6	0,4	14
SP125-26-19T*		● 26	19	0,6	0,4	12
SP125-24-14T*	SP125-24-14-WT*	● 24	14	0,7	0,4	21
SP125-24-19T*	SP125-24-19-WT*	● 24	19	0,7	0,4	16
SP120-24-19T	SP120-24-19-WT	● 24	19	0,7	0,4	16
SP120-22-25T	SP120-22-25-WT	● 22	25	0,9	0,6	31
SP120-22-31T	SP120-22-31-WT	● 22	31	0,9	0,6	28
SP120-20-25T	SP120-20-25-WT	● 20	25	1,1	0,7	62
SP120-20-31T	SP120-20-31-WT	● 20	31	1,1	0,7	55
SP120-20-50T	SP120-20-50-WT	● 20	50	1,1	0,7	52
SP120-18-31T	SP120-18-31-WT	● 18	31	1,3	0,9	100
SP120-18-50T	SP120-18-50-WT	● 18	50	1,3	0,9	90
SP120-16-31T	SP120-16-31-WT	● 16	31	1,7	1,3	183
SP125-16-31T*	SP125-16-31-WT*	● 16	31	1,7	1,3	183
SP125-14-31T*	SP125-14-31-WT*	● 14	31	2,1	1,6	272



<sup>1</sup> Directiva del Consejo 2010/32/UE - 10 de mayo de 2010

\*Sin válvula de contención sanguínea.

SuperCath es una marca comercial registrada de MediKit Co., Ltd.

El producto cumple la normativa actual y tiene el marcado CE correspondiente. Para más información, advertencias o precauciones de seguridad, consulte el manual de usuario del fabricante.