

SuperCath™ 5


IV-Sicherheitskatheter

Setzen Sie auf Präzision in der Praxis – mit peripheren IV-Kathetern mit integrierter Blutrückhaltetechnologie und vollständig ummanteltem Nadelschutz.

icumedical
human connections

Minimiert die Blutexposition und reduziert gleichzeitig das Risiko einer versehentlichen Nadelstichverletzung

Der SuperCath 5 IV-Sicherheitskatheter kombiniert die Technologie zum Schutz vor Blutexposition mit einer vollständigen Schutzummantelung der Nadel, um Sie dabei zu unterstützen, das Risiko von Nadelstichverletzungen zu reduzieren und die Richtlinie der Europäischen Union über Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente einzuhalten.¹

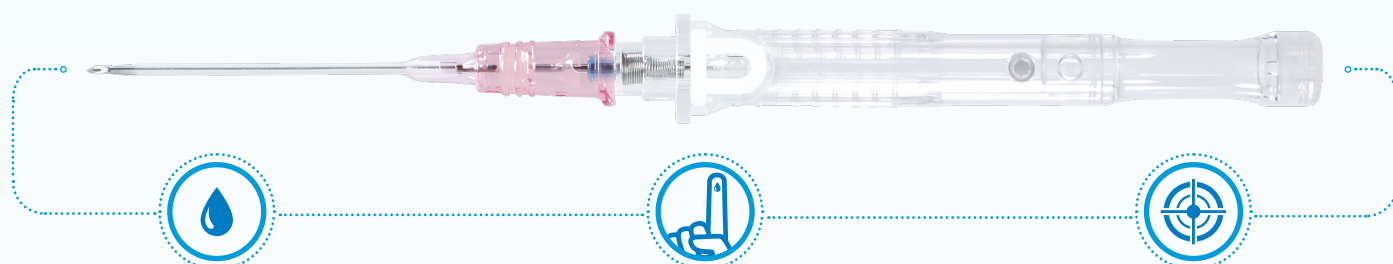

Minimieren Sie das Risiko einer Blutexposition

Mit dem integrierten Ventil zum Schutz vor Blutexposition vermeiden Sie Blutleckagen während des Einführens und Einrichtens des Katheters.

Reduzieren Sie das Risiko für Nadelstichverletzungen

Mit dem Druckknopf und federbelasteten Spitzenschutz vermeiden Sie versehentliche Nadelstichverletzungen und Kontakt mit der Kanüle.

Vermeiden Sie mehrfache Einführversuche

Die Dual-Flash-Technologie hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass der Katheter beim ersten Einführen korrekt im Gefäß positioniert ist.

Produktinformationen

Artikelnummer ohne Flügel	Artikelnummer mit Flügeln	Größe (Gauge)	Länge (mm)	AD (mm)	ID (mm)	Flussrate (ml/min)
SP125-26-14T*	SP125-26-14-WT*	● 26	14	0,6	0,4	14
SP125-26-19T*	SP125-26-19-WT*	● 26	19	0,6	0,4	12
SP125-24-14T*	SP125-24-14-WT*	● 24	14	0,7	0,4	21
SP125-24-19T*	SP125-24-19-WT*	● 24	19	0,7	0,4	16
SP120-24-19T	SP120-24-19-WT	● 24	19	0,7	0,4	16
SP120-22-25T	SP120-22-25-WT	● 22	25	0,9	0,6	31
SP120-22-31T	SP120-22-31-WT	● 22	31	0,9	0,6	28
SP120-20-25T	SP120-20-25-WT	● 20	25	1,1	0,7	62
SP120-20-31T	SP120-20-31-WT	● 20	31	1,1	0,7	55
SP120-20-50T	SP120-20-50-WT	● 20	50	1,1	0,7	52
SP120-18-31T	SP120-18-31-WT	● 18	31	1,3	0,9	100
SP120-18-50T	SP120-18-50-WT	● 18	50	1,3	0,9	90
SP120-16-31T	SP120-16-31-WT	● 16	31	1,7	1,3	183
SP125-16-31T*	SP125-16-31-WT*	● 16	31	1,7	1,3	183
SP125-14-31T*	SP125-14-31-WT*	● 14	31	2,1	1,6	272

*Kein Ventil zum Schutz vor Blutexposition.



icumedical
human connections

¹ Richtlinie 2010/32/EU des Europäischen Rates – 10. Mai 2010

SuperCath ist eine Marke von MediKit Co., Ltd.

Das Produkt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung. Weitere Informationen, Warnhinweise und/oder Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Deutschland: +49 2349 7849009
Österreich: +43 800296430
www.icumed.com