



Catalogo del sistema infusionale Plum 360™



Connect Smarter. Care Safer™

Prestazioni cliniche pluripremiate.

Il sistema infusionale Plum 360 Best in KLAS offre affidabilità e sicurezza, efficienza e interoperabilità ineguagliabili connesse in un unico sistema per infusioni endovenose.

Il sistema Plum 360 è una combinazione esclusiva di una cassetta e un meccanismo di infusione e offre:

- › collegamento diretto della linea secondaria alla cassetta Plum™, in modo che la pompa riconosca da quale sacca, primaria o secondaria, sta infondendo;
- › somministrazione simultanea di due farmaci compatibili a velocità indipendenti attraverso una singola linea di infusione;
- › cattura di 1 mL di aria prima di generare un allarme, contribuendo a ridurre gli allarmi per la presenza di aria nella linea;
- › integrazione con la cartella clinica elettronica per una sicurezza e un'efficienza maggiori.



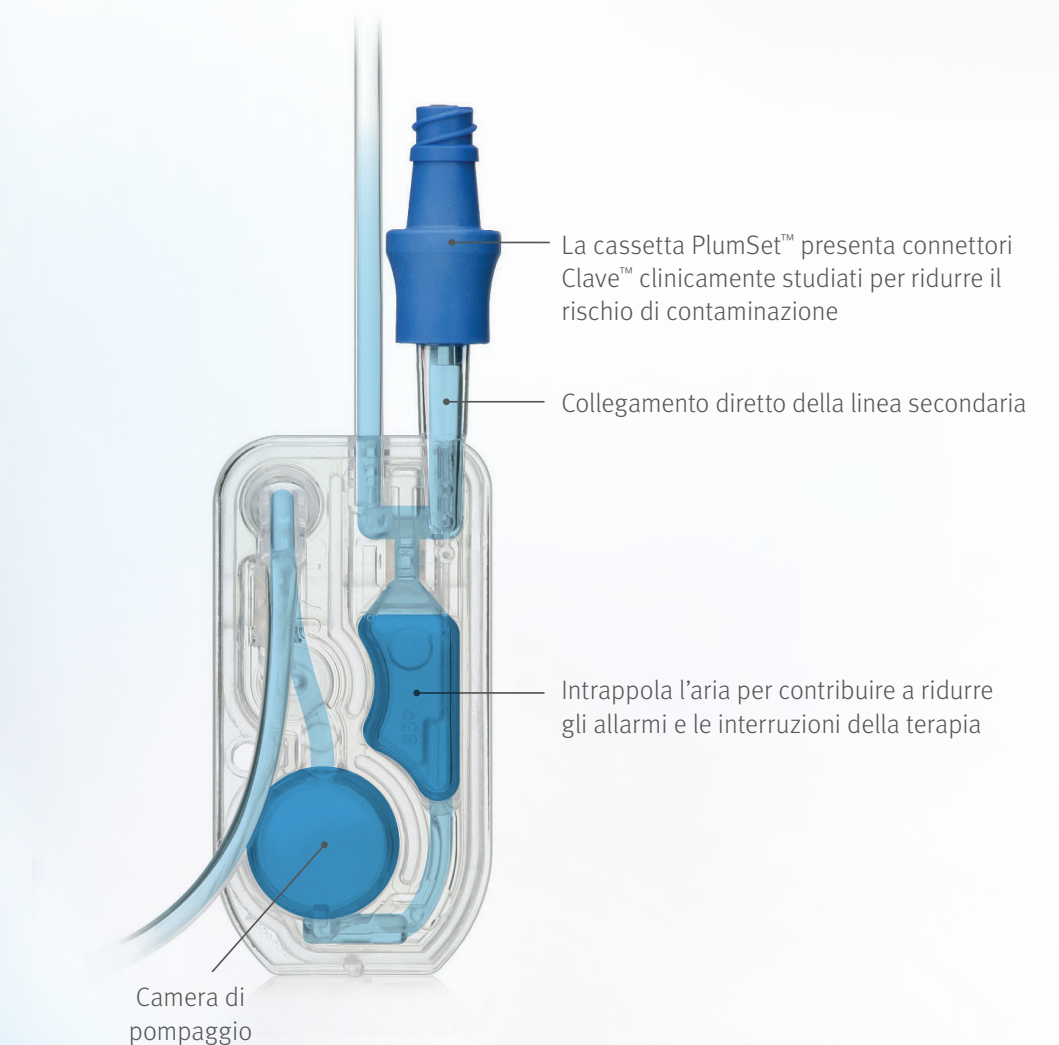
Codice matricola	Codice articolo
443001007	300104221
Descrizione	
Pompa Plum 360 compatibile con il software ICU Medical MedNet™	



Plum set dedicati

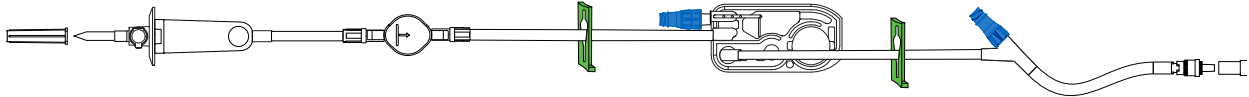
La cassetta Plum nel deflussore è l'elemento centrale dell'esclusivo sistema di infusione Plum. Il collegamento diretto della linea secondaria alla cassetta permette il controllo e la gestione di infusioni primarie e secondarie. È possibile avere la certezza che sia le infusioni alternate sia quelle simultanee (di farmaci compatibili) vengano somministrate come da programmazione.

La cassetta Plum è dotata di una camera d'aria che cattura fino a 1 mL di aria prima di generare un allarme. È stato dimostrato che questa funzione contribuisce a ridurre gli allarmi per la presenza di aria in linea. In caso di generazione di un allarme di aria nella linea, è possibile rimuovere facilmente l'aria presente senza la necessità di scollegare il sistema dal paziente. Questo sistema chiuso aiuta inoltre a ridurre il rischio di contaminazione, nonché a limitare l'esposizione a farmaci pericolosi.

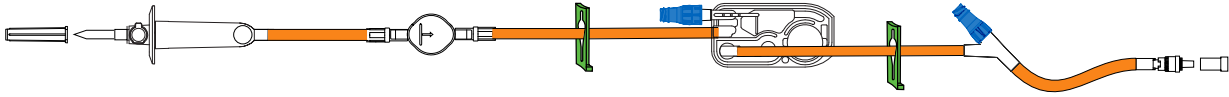


Set primari con valvole a sfera

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14240	Primary Plum Set, Valvola di controllo della sfera nella camera di gocciolamento, Filtro da 15 micron, Accesso secondario Clave, Connettore a Y Clave, Secure Lock, 264 cm / 20 ml	264	20.0	PVC non-DEHP	50

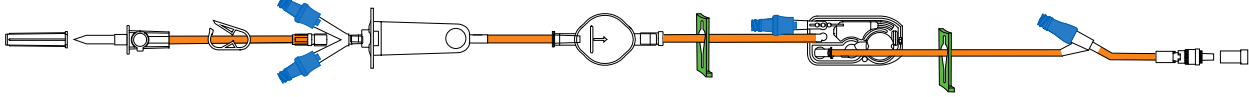
A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 14240. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14241	Primary Plum Set, Valvola di controllo della sfera nella camera di gocciolamento, Filtro da 15 micron, Accesso secondario Clave, Tubi rivestiti in polietilene resistenti alla luce, Tubi Microbore distali, Connettore a Y Clave, Secure Lock, 264 cm / 12 ml	264	12.0	PVC non-DEHP/PE	50

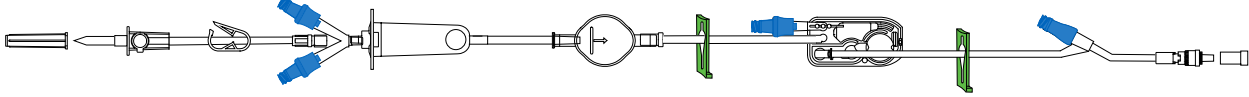
A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 14241. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

Set primari oncologici multiterapia

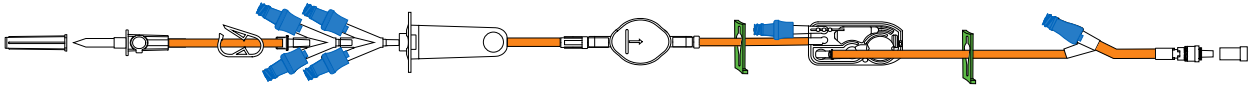
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
12193	Primary Plum Set, 2 connettori Clave multi-accesso, Valvola di controllo della sfera nella camera di gocciolamento, Filtro da 15 micron, Accesso secondario Clave, Connettore a Y Clave, Tubi rivestiti in polietilene resistenti alla luce, Secure Lock, 213 cm / 18 ml	213	18.0	PVC non-DEHP/PE	25

A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 12193. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

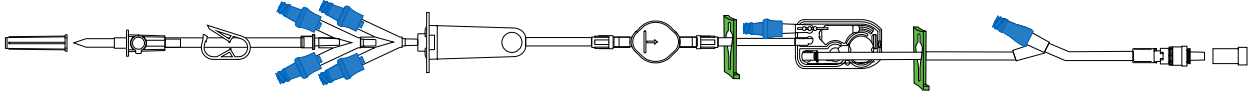
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
12194	Primary Plum Set, 2 connettori Clave multi-accesso, Valvola di controllo della sfera nella camera di gocciolamento, Filtro da 15 micron, Accesso secondario Clave, Connettore a Y Clave, Tubi rivestiti in polietilene, Secure Lock, 213 cm / 18 ml	213	18.0	PVC non-DEHP/PE	25

A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 12194. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
12195	Primary Plum Set, 4 connettori Clave multi-accesso, Valvola di controllo della sfera nella camera di gocciolamento, Filtro da 15 micron, Accesso secondario Clave, Connettore a Y Clave, Tubi rivestiti in polietilene resistenti alla luce, Secure Lock, 216 cm / 19 ml	216	19.0	PVC non-DEHP/PE	25

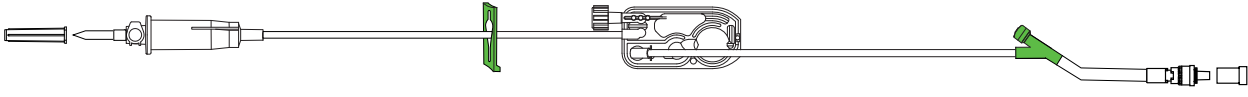
A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 12195. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
12196	Primary Plum Set, 4 connettori Clave multi-accesso, Valvola di controllo della sfera nella camera di gocciolamento, Filtro da 15 micron, Accesso secondario Clave, Tubi rivestiti in polietilene, Secure Lock, 216 cm / 19 ml	216	19.0	PVC non-DEHP/PE	25

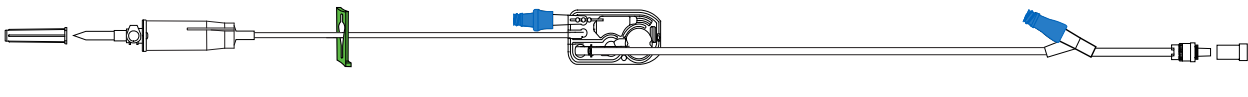
A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 12196. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

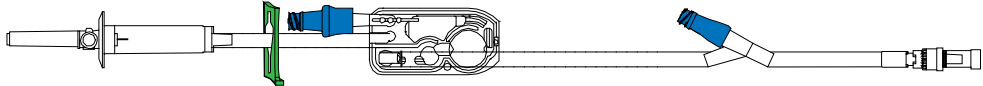
Set primari standard

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14000	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Sito a Y pre-forato, Secure Lock, 272 cm / 19 ml	272	19.0	Non DEHP PVC	50

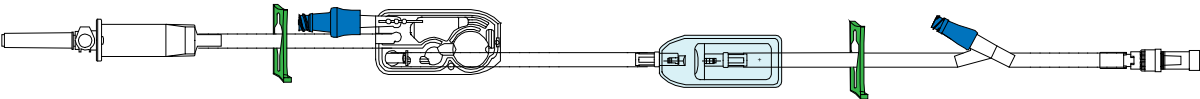
A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 14000. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

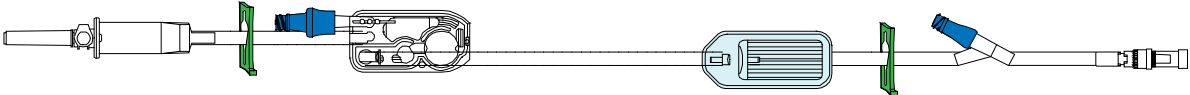
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14001	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Connettore a Y Clave, Secure Lock, 272 cm / 19 ml	272	19.0	Non DEHP PVC	50

A detailed technical diagram of the Primary Plum Set 14001. It shows a long, thin tube with various components: a needle at one end, a control valve with a ball, a filter, a secondary access point, and a Y-connector. The tube is shown in a slightly curved position.

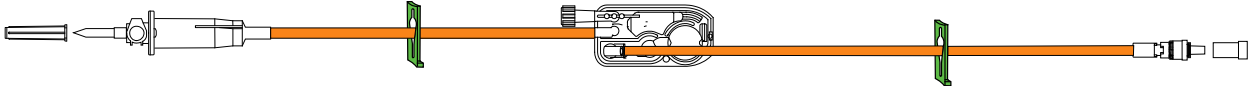
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14024	Primary Plum MICRODRIP Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Connettore a Y Clave, Tubi Microbore distali, Secure Lock, 262 cm / 12.7 ml	262	12.7	PVC non-DEHP	50
					

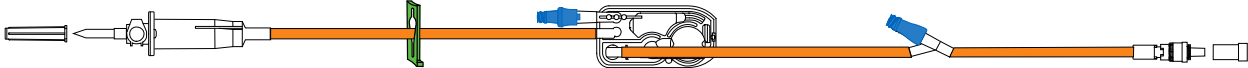
Set primari filtro

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14015	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Filtro da 0,2 micron, Connettore a Y Clave, Tubi rivestiti in polietilene, Secure Lock, 272 cm / 23 ml	272	23.0	PVC non-DEHP/PE	50
					

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14022	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Filtro da 1,2 micron, Connettore a Y Clave, Secure Lock, 264 cm / 22 ml	264	22.0	PVC non-DEHP	50
					

Set primari protetti dalla luce

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14006	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Tubi rivestiti in polietilene resistenti alla luce, Tubi Microbore distali, Secure Lock, 272 cm / 12 ml	272	12.0	PVC non-DEHP/PE	50
					

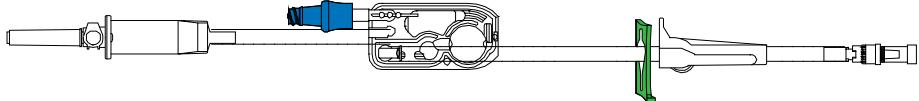
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14007	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Connettore a Y Clave, Tubi rivestiti in polietilene resistenti alla luce, Tubi Microbore distali, Secure Lock, 272 cm / 12 ml	272	12.0	PVC non-DEHP/PE	50
					

Set primari filtro protetti dalla luce

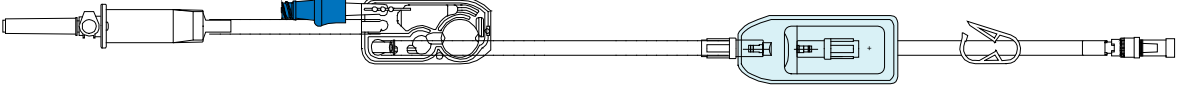
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14009	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Filtro da 0,2 micron, Connettore a Y Clave, Tubi rivestiti in polietilene resistenti alla luce, Tubi Microbore distali, Secure Lock, 272 cm / 15 ml	272	15.0	PVC non-DEHP/PE	50
					

Set primari oncologici personalizzati

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14012	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Secure Lock, 225 cm / 17 ml	225	17.0	PVC non-DEHP	50

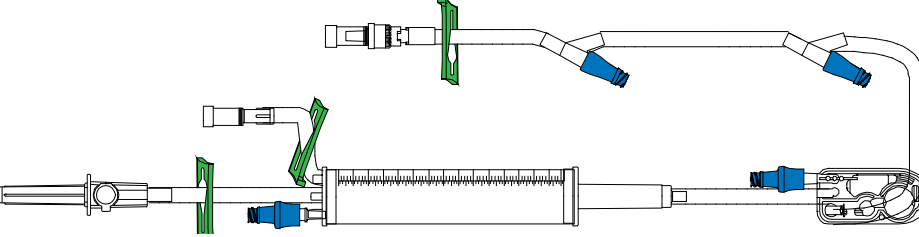


Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14014	Primary Plum Set, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, Accesso secondario Clave, Filtro da 0,2 micron, Tubi rivestiti in polietilene, Secure Lock, 225 cm / 20 ml	225	20.0	PVC non-DEHP/PE	50



Set primario buretta

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
12564	Primary Plum Set buretta da 150 mL, Connettore addizionale Clave, Filtro da 15 micron nella camera di gocciolamento, 2 connettori a Y Clave, Secure Lock, 290 cm / 19 ml Il volume retrogrado è di circa 8.3 m	290	19.0	Non DEHP PVC	48

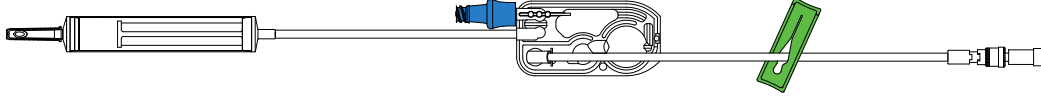


Set sangue

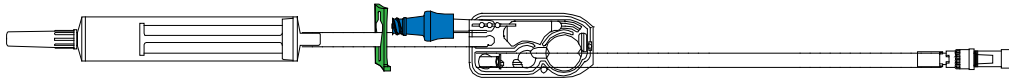
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14212	Primary Plum Set ematico a Y, Filtro da 200 micron, Accesso secondario Clave, Senza aperture, Secure Lock, 279 cm / 49 ml	279	49.0	PVC non-DEHP	48



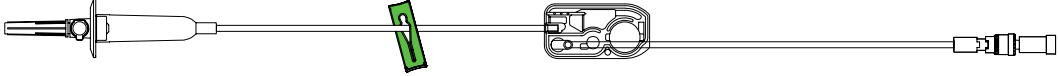
Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14211	Accesso secondario pre-forato, Secure Lock, Primary Plum Set ematico, Filtro da 200 micron, 279 cm / 52 ml	279	52.0	PVC non-DEHP	48

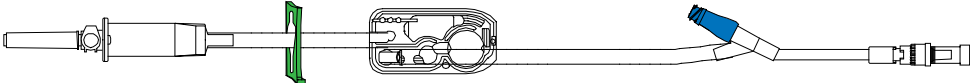


Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
19673	Primary Plum Set ematico, Filtro da 200 micron, Accesso secondario Clave, Senza foro di ventilazione, Secure Lock, 259 cm / 51 ml	259	51.0	PVC non-DEHP	48

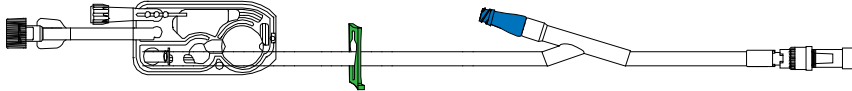


Set primari a una via/ singolo canale

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14018	Set Plum primario, filtro da 15 Micron nella camera di gocciolamento, cassetta a canale, singolo, Secure Lock, 272 cm / 19 ml	272	19.0	PVC non-DEHP	50
					

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14019	Set Plum primario, filtro da 15 Micron nella camera di gocciolamento, cassetta a canale, singolo, raccordo a Y Clave, Secure Lock, 272 cm / 19 ml	272	19.0	PVC non-DEHP	50
					

Set primario personalizzato

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza (cm)	PV (mL)	Materiale del tubo	Qtà confezione
14238	Microbore Conversion Plum Set, Sito a Y pre-forato, Secure Lock, 188 cm / 7.1 ml	188	7.1		50
					

Accessori per il montaggio su asta portaflebo Provita



Cod. articolo	Qtà confezione
323840	1
Descrizione	
Asta rinforzata Provita. L'asta può ospitare fino a 5 pompe Plum 360. Per questa configurazione sono necessari un supporto triplo e un supporto doppio per pompe	

Cod. articolo	Qtà confezione
175191	1
Descrizione	
Asta standard Provita. L'asta può ospitare fino a 2 pompe Plum 360 (collegate direttamente all'asta)	

	
Cod. articolo	Qtà confezione
324751	1
Descrizione	
Supporto doppio per pompe Provita. Permette di collegare due pompe Plum 360 a un'asta portaflebo premium o rinforzata	

	
Cod. articolo	Qtà confezione
324283	1
Descrizione	
Supporto triplo per pompe Provita. Permette di collegare tre pompe Plum 360 a un'asta portaflebo premium o rinforzata	

	
Cod. articolo	Qtà confezione
324292	1
Descrizione	
Porta sacchetti Provita. Sacchetti a portata di mano e flessibili in ordine in presenza di più pompe montate sull'asta	

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente e reca il marchio CE corrispondente (2797). Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del produttore.