




Sistema de obtención de muestras de sangre SafeSet SafeSet™

Reduzca los residuos sanguíneos y aumente la eficiencia del proceso de obtención de muestras de sangre.

Un sistema de obtención de muestras de sangre cerrado en la vía y sin aguja que reduce los residuos sanguíneos, al tiempo que reduce al mínimo el riesgo de contaminación de la vía IV y de transmisión de enfermedades infecciosas.

Sistema de obtención de muestras de sangre SafeSet

En respuesta a los problemas y riesgos asociados al tratamiento de la sangre, ICU Medical ha desarrollado el sistema de obtención de muestras de sangre SafeSet. SafeSet es un sistema intuitivo y fácil de usar que ayuda a conservar la sangre al tiempo que protege contra la exposición a patógenos de transmisión hemática y aumenta la eficiencia y la seguridad del proceso de obtención de muestras de sangre.

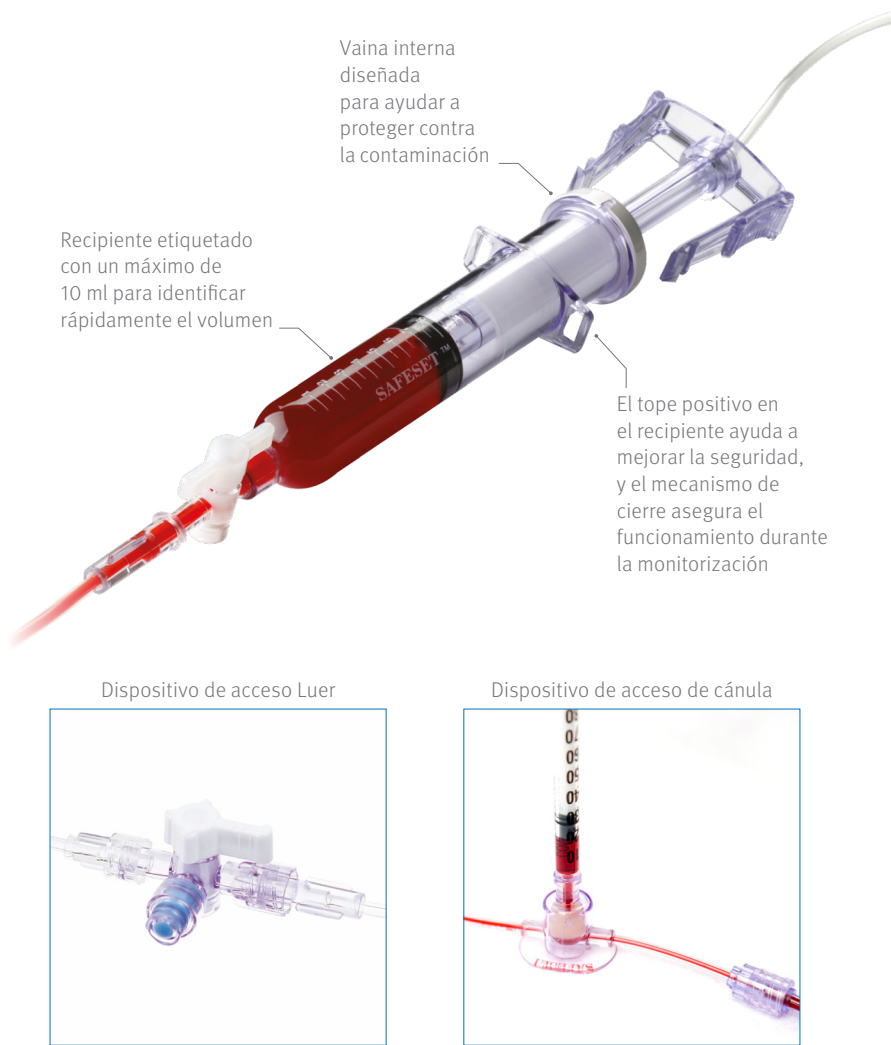

Seguridad y eficiencia del sistema SafeSet definido

- SafeSet tiene un diseño cerrado en la vía que ayuda a proteger la sangre de los pacientes de la exposición a microorganismos que puedan causar infecciones del torrente sanguíneo, y ayuda a proteger a los cuidadores limitando la exposición a posibles patógenos de transmisión hemática.
- El volumen extraído puede volver a infundirse al paciente, lo que puede ayudar a reducir los residuos sanguíneos y el riesgo de anemia iatrogénica.
- Dos opciones de dispositivo de acceso sin aguja, Luer y cánula, ayudan a proteger a los médicos de la exposición a enfermedades infecciosas.
- La caja de policarbonato ayuda a proteger la vaina y el émbolo de la exposición al entorno no estéril.
- Las configuraciones del kit se adaptan tanto a la población de pacientes adultos como a la de pacientes neonatos/pediátricos.
- Disponible como sistema independiente o con los kits de monitorización de la presión Transpac™ de ICU Medical.

Especificaciones del producto	
Recipiente	Adulto, 1-10 ml y neonatal/pediátrico, 1-3 ml
Sin componentes de látex	Sí

Accesorios del producto	
Cánula con punta roma protegida	
Cánula con punta roma protegida con soporte de tubo	

SafeSet: Un sistema de conservación de la sangre que le ayudará a alcanzar sus objetivos de manejo de la sangre.

El producto cumple con la legislación vigente y posee el correspondiente marcado CE. Para información adicional, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte el manual de usuario del fabricante.

icumedical
human connections