


Gripper Plus™ Power P.A.C.

Aiguille d'accès pour chambre implantable

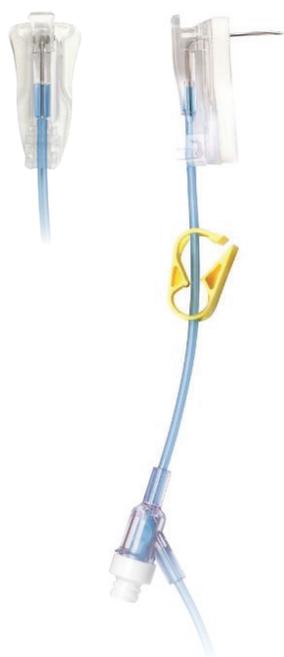

Aiguille de Huber sécurisée

- › Une aiguille de Huber sécurisée destinée à l'administration de médicaments à partir de chambres implantables
- › Disponible dans différentes gauges et longueurs
- › Le mécanisme de sécurité s'active lors du retrait de l'aiguille ; un clic sonore confirme que le mécanisme de sécurité est activé et en position verrouillée
- › La plateforme rembourrée repose contre la peau lorsque l'aiguille est en place
- › Aiguille non siliconée
- › La tubulure d'extension de 20 cm de long est disponible avec ou sans site en Y avec site d'injection sans aiguille (NAC) activé par Luer-lock
- › La couleur bleue de la tubulure d'extension la différencie des aiguilles non haute pression
- › Clamps à code couleur
- › Volume de purge : 0,3 mL ou 0,8 mL, en fonction de la présence ou de l'absence de site en Y sur la tubulure d'extension
- › Injections sous pression jusqu'à 5 mL/s et pression jusqu'à 300 psi
- › Évaluation ANTT positive

Informations de commande

Site en Y sans aiguille (NAC) - site d'injection sans aiguille activé par Luer-lock

Référence	Gauge	Longueur (mm)	Unités
21-3464-24		16	
21-3465-24	● 20	19	12/boîte
21-3466-24		25	
21-3467-24		32	
21-3468-24		19	
21-3469-24	● 19	25	12/boîte
21-3470-24		32	

Sans site en Y

Référence	Gauge	Longueur (mm)	Unités
21-3369-24		16	
21-3367-24	● 20	19	12/boîte
21-3362-24		25	
21-3363-24		32	
21-3368-24		19	
21-3364-24	● 19	25	12/boîte
21-3365-24		32	



Ce produit est conforme à la législation en vigueur et porte le marquage CE correspondant. Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi officiel. Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié.