



BLUセレクト™ 気管切開チューブ

Product Brochure

icumedical
human connections

BLU セレクト 気管切開チューブ

ブルーラインウルトラ気管切開チューブは、従来の利点に加え、識別性の向上と可塑剤 DEHP 不使用により、BLU セレクト気管切開チューブとして生まれ変わりました。


※ BLU=Blue Line Ultra



X線不透過

明瞭なサイズ表記とサイズごとのカラーによる識別性の向上

- 分泌物や洗浄により色落ちしないレーザープリントによる表記を採用しました。
- チューブの内径サイズを大きく表記。また、チューブの長さ及び外径を併記しました。
※チューブの長さ: C チューブ外径: OD と表記。
- 孔開きチューブにチェック模様と有窓 (Fenestrated) の意味である「FEN」の表記を追加しました。
- 可塑剤 DEHP (フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) 不使用です。

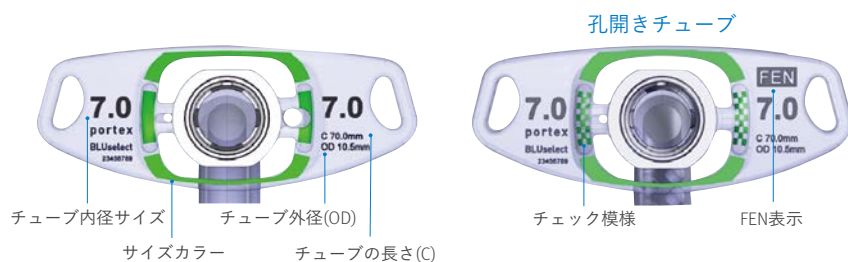

チューブサイズ	サイズカラー
6.0mm	ピンク
7.0mm	グリーン
7.5mm	ブラウン
8.0mm	グレー
8.5mm	パープル
9.0mm	ブルー
10.0mm	イエロー

二重管で気道の開存性を維持

チューブ本体を交換しなくても、インナーカニューレの定期交換でチューブ内腔の清浄化が保てます。

さらに、改良された薄い内腔のインナーカニューレでエアフロー抵抗の改善が実現しました。




吸引孔と吸引ラインを使った発声

ワイドな吸引孔

後ろから横に開いた吸引孔は、カフ上部に溜まった分泌物を効率的に吸引できるよう、デザインされています。

大きな吸引ライン内径

半埋め込み型にデザインされた吸引ラインは、円形状が維持され内腔が大きく、分泌物の効率的な除去ができるよう、デザインされています。サクションラインから酸素や空気を送気することで、発声のサポートをすることができます。

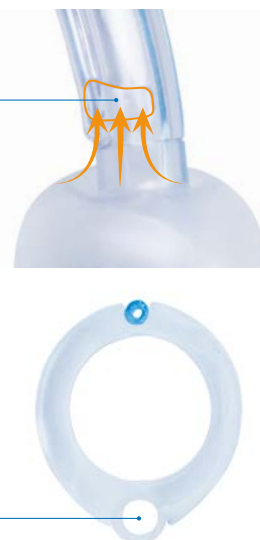



101/860/080CZ

BLUセレクト サクションエイド カフ付 (一重管)								・吸引あり ・発声訓練可
品番	サイズ	サイズカラー	内径	外径	長さ	静止カフ外径	チューブ角度	販売単位
101/860/060CZ	6.0 mm	ピンク	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	20.0 mm	105°	1
101/860/070CZ	7.0 mm	グリーン	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	24.0 mm	105°	1
101/860/075CZ	7.5 mm	ブラウン	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/860/080CZ	8.0 mm	グレー	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	30.0 mm	105°	1
101/860/085CZ	8.5 mm	パープル	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/860/090CZ	9.0 mm	ブルー	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/860/100CZ	10.0 mm	イエロー	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	30.0 mm	105°	1



101/800/080CZ

BLUセレクト 気管切開チューブ カフ付 (一重管)								
品番	サイズ	サイズカラー	内径	外径	長さ	静止カフ外径	チューブ角度	販売単位
101/800/060CZ	6.0 mm	🟡 ピンク	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	20.0 mm	105°	1
101/800/070CZ	7.0 mm	🟢 グリーン	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	24.0 mm	105°	1
101/800/075CZ	7.5 mm	🟤 ブラウン	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/800/080CZ	8.0 mm	⚫ グレー	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	30.0 mm	105°	1
101/800/085CZ	8.5 mm	🟣 パープル	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/800/090CZ	9.0 mm	🟠 ブルー	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/800/100CZ	10.0 mm	🟡 イエロー	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	30.0 mm	105°	1



101/802/080CZ

BLUセレクト 気管切開チューブ カフ付 (一重管/孔開き)								
品番	サイズ	サイズカラー	内径	外径	長さ	静止カフ外径	チューブ角度	販売単位
101/802/060CZ	6.0 mm	🟡 ピンク	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	20.0 mm	105°	1
101/802/070CZ	7.0 mm	🟢 グリーン	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	24.0 mm	105°	1
101/802/075CZ	7.5 mm	🟤 ブラウン	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/802/080CZ	8.0 mm	🟠 グレー	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	30.0 mm	105°	1
101/802/085CZ	8.5 mm	🟣 パープル	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/802/090CZ	9.0 mm	🔵 ブルー	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/802/100CZ	10.0 mm	🟡 イエロー	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	30.0 mm	105°	1



101/870/080CZ

BLUセレクト サクションエイド カフ付 (二重管)								・吸引あり ・発声訓練可
品番	サイズ	サイズカラー	内径	外径	長さ	静止カフ外径	チューブ角度	販売単位
101/870/060CZ	6.0 mm	ピンク	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	20.0 mm	105°	1
101/870/070CZ	7.0 mm	グリーン	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	24.0 mm	105°	1
101/870/075CZ	7.5 mm	ブラウン	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/870/080CZ	8.0 mm	グレー	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	30.0 mm	105°	1
101/870/085CZ	8.5 mm	パープル	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/870/090CZ	9.0 mm	ブルー	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/870/100CZ	10.0 mm	イエロー	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	30.0 mm	105°	1



101/810/080CZ

BLUセレクト 気管切開チューブ カフ付 (二重管)								
品番	サイズ	サイズカラー	内径	外径	長さ	静止カフ外径	チューブ角度	販売単位
101/810/060CZ	6.0 mm	🟡 ピンク	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	20.0 mm	105°	1
101/810/070CZ	7.0 mm	🟢 グリーン	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	24.0 mm	105°	1
101/810/075CZ	7.5 mm	🟤 ブラウン	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/810/080CZ	8.0 mm	🟠 グレー	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	30.0 mm	105°	1
101/810/085CZ	8.5 mm	🟣 パープル	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/810/090CZ	9.0 mm	🔵 ブルー	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	30.0 mm	105°	1
101/810/100CZ	10.0 mm	🟡 イエロー	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	30.0 mm	105°	1



101/811/080CZ

BLUセレクト 気管切開チューブ カフなし（二重管）							
品番	サイズ	サイズカラー	内径	外径	長さ	チューブ角度	販売単位
101/811/060CZ	6.0 mm	ピンク	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm	105°	1
101/811/070CZ	7.0 mm	グリーン	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm	105°	1
101/811/075CZ	7.5 mm	ブラウン	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm	105°	1
101/811/080CZ	8.0 mm	グレー	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm	105°	1
101/811/085CZ	8.5 mm	パープル	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm	105°	1
101/811/090CZ	9.0 mm	ブルー	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm	105°	1
101/811/100CZ	10.0 mm	イエロー	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm	105°	1



101/850/---CZ
101/856/---
101/858/---

BLUセレクト用インナーカニューレ（孔なし）							
品番	販売単位			カラー	インナー カニューレ内径	チューブ 長さ	適合気管切開 チューブ内径
	2本/箱	20本/箱	50本/箱				
	101/850/060CZ	101/856/060	101/858/060	🟡 ピンク	5.0 mm	64.5 mm	6.0 mm
	101/850/070CZ	101/856/070	101/858/070	🟢 グリーン	6.0 mm	70.0 mm	7.0 mm
	101/850/075CZ	101/856/075	101/858/075	🟤 ブラウン	6.5 mm	73.0 mm	7.5 mm
	101/850/080CZ	101/856/080	101/858/080	🟠 グレー	7.0 mm	75.5 mm	8.0 mm
	101/850/085CZ	101/856/085	101/858/085	🟣 パープル	7.5 mm	78.0 mm	8.5 mm
	101/850/090CZ	101/856/090	101/858/090	🟡 ブルー	8.0 mm	81.0 mm	9.0 mm
	101/850/100CZ	101/856/100	101/858/100	🟠 イエロー	8.5 mm	87.5 mm	10.0 mm



101/851/---CZ

BLUセレクト用インナーカニュレ（孔開き）							
品番	販売単位			カラー	インナー カニュレ内径	チューブ 長さ	適合気管切開 チューブ内径
	2本/箱	20本/箱	50本/箱				
101/851/060CZ	—	—	—	ピンク	5.0 mm	64.5 mm	6.0 mm
101/851/070CZ	—	—	—	グリーン	6.0 mm	70.0 mm	7.0 mm
101/851/075CZ	—	—	—	ブラウン	6.5 mm	73.0 mm	7.5 mm
101/851/080CZ	—	—	—	グレー	7.0 mm	75.5 mm	8.0 mm
101/851/085CZ	—	—	—	パープル	7.5 mm	78.0 mm	8.5 mm
101/851/090CZ	—	—	—	ブルー	8.0 mm	81.0 mm	9.0 mm
101/851/100CZ	—	—	—	イエロー	8.5 mm	87.5 mm	10.0 mm

販売名：BLU 気管切開チューブ
認証番号：228AIBZX00025000

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者

ICUメディカルジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

受注センター：0120-582-855

icumedical
human connections

For safe and proper use, refer to the Instructions for Use.

© 2025 ICU Medical Inc. | www.icumed.com | P25-5649-2-JP | 0101021 | Page 4 of 4

www.icumed.com