



CADD-Solis VIP™

Sistema de infusión ambulatoria a domicilio

Sistema de infusión inteligente multiterapia fácil de usar a diario

icumedical
human connections

Diseñado para ser fácil de usar y permitir un uso seguro en casa

La bomba de infusión ambulatoria CADD-Solis VIP es ideal para su uso en casa, con un diseño pequeño y portátil, y una interfaz fácil de usar. Las pantallas intuitivas de ayuda permiten solucionar los problemas en casa y pueden limitar la necesidad de intervención del médico. Las pantallas codificadas por colores proporcionan un estado instantáneo del progreso de la terapia, mientras que los depósitos CADD contribuyen a la seguridad de la medicación y a la protección del flujo libre de la administración de fluidos. Con cinco modos de administración versátiles, la bomba ambulatoria CADD-Solis VIP le ayuda a proporcionar cuidados de infusión desde la comodidad de su hogar.



Las pantallas intuitivas de estado del suministro muestran el progreso de la infusión



- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>PCA</p> <p>Tratamiento del dolor con los siguientes métodos de administración de forma individual o combinados entre sí: Velocidad "Continuous" (Continua); dosis "PCA" y "Clinician bolus" (Bolo clínico)</p> | <p>Taper (Gradual)</p> <p>Velocidad continua con reducción opcional al principio y al final</p> | <p>Intermittent (Intermitente)</p> <p>Volumen específico a un intervalo programado durante una duración determinada</p> | <p>Continuous (Continua)</p> <p>Velocidad constante y programada</p> | <p>Step (Paso por paso)</p> <p>Incremento de la velocidad desde una velocidad inicial hasta una velocidad continua máxima especificada para un volumen total</p> |
|--|--|--|---|---|

La bomba ambulatoria CADD-Solis VIP versátil está indicada para infusiones intravenosas, intraarteriales, subcutáneas, intraperitoneales, perineurales, en el sitio quirúrgico, en el espacio epidural o en el espacio subaracnoideo, con cinco modos de administración.

Ayudar a aumentar la independencia del paciente

Pantallas de ayuda para alarmas

Las pantallas de ayuda de las alarmas de la bomba ayudan a resolver las condiciones de alarma con instrucciones guiadas en pantalla. Estas pantallas pueden ayudar a reducir la intervención del clínico y las visitas sobre el terreno y a mantener la continuidad de la infusión.



Ejemplos de ilustraciones de pantallas de ayuda de alarmas de alta presión que guían al paciente a través del proceso de resolución de problemas

Alarmas diferenciadas

Alarmas diferenciadas por color y sonido con prioridad alta (rojo), media (ámbar) y baja (azul)




Alarma de prioridad alta

Alarma de prioridad media

Alarma de prioridad baja

Informes de la bomba

Los informes de la bomba proporcionan datos de tendencias y ayudan a evaluar a los pacientes

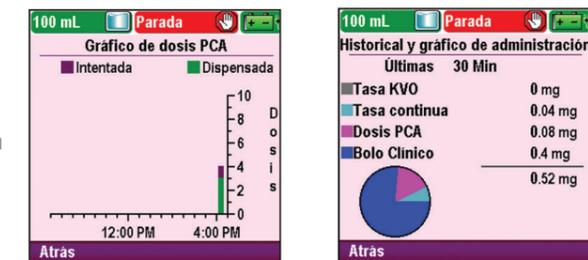


Pantalla de informe de dosificación

Pantalla de informe de la historia de administración

Sistema de infusión ambulatoria CADD-Solis VIP

Mayor comodidad para los pacientes y el personal de enfermería

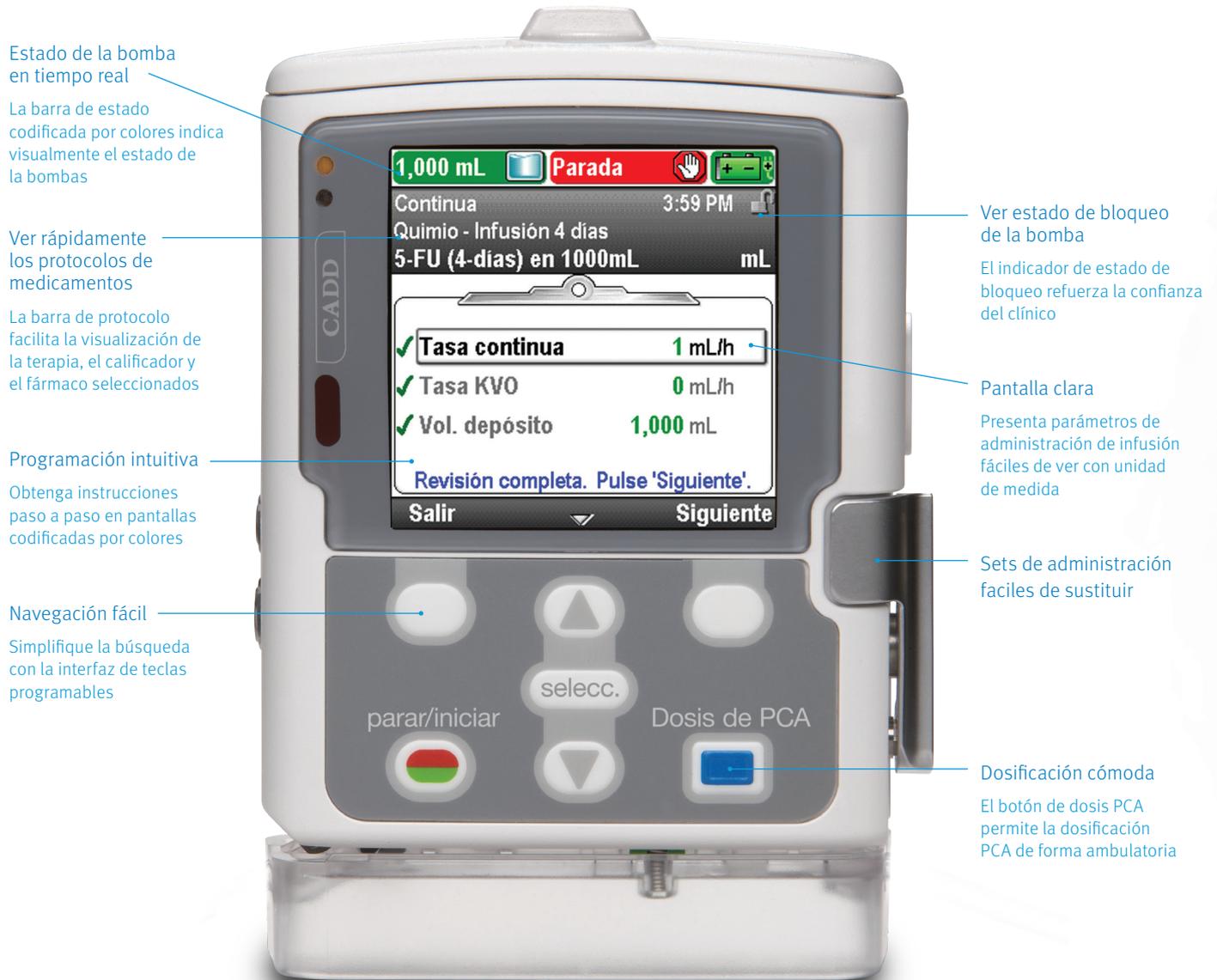

Apoye hoy mismo la independencia de sus pacientes.

Llame al número +34 93 363 84 00 o visite www.icumed.com para obtener más información.

El producto cumple la legislación vigente y dispone del correspondiente marcado CE. Para obtener más información, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte el manual del usuario del fabricante.

icumedical
human connections