



SuperCath[®] 5

Catetere endovenoso di
sicurezza da 26 G



Catetere endovenoso di sicurezza periferico con tecnologia studiata per agevolare l'accesso a vasi piccoli e difficili.


icumedical
human connections

Aiutiamo a prestare cure sicure ed efficaci nel rispetto delle raccomandazioni cliniche

Progettato per ottimizzare l'accesso ai vasi sanguigni nei pazienti neonatali, SuperCath 5 è il primo e unico catetere di sicurezza diritto da 26 G. Questo esclusivo calibro e la finestra integrata nell'ago consentono di migliorare la precisione della prima iniezione ed evitare ripetuti tentativi di inserimento, ottimizzando la velocità e la probabilità di visualizzazione del reflusso durante l'accesso a vasi piccoli e difficili.

Raccomandazione di Infusion Therapy Standards of Practice

Scegliere sempre il catetere periferico di calibro più piccolo adatto alla terapia prescritta e alle esigenze del paziente.¹

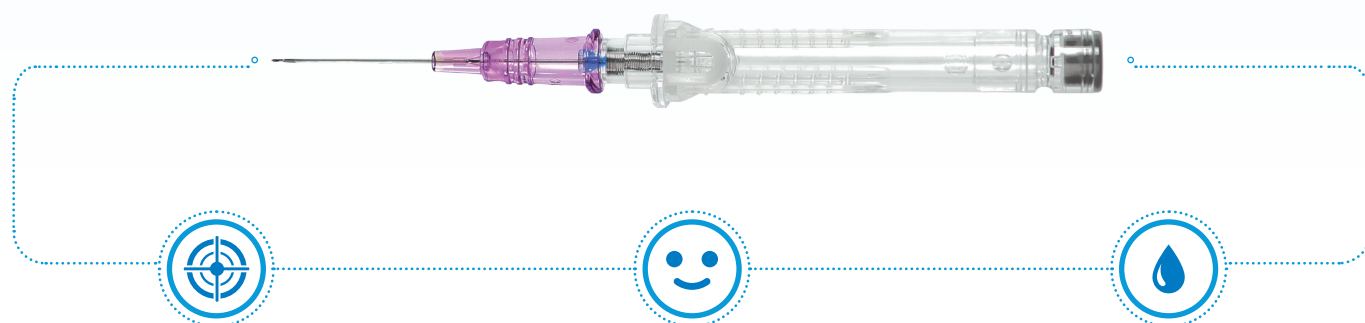

Ottimizza la precisione al primo tentativo di inserimento

Contribuisce ad assicurare che il catetere si trovi correttamente nel vaso al primo tentativo, grazie alla finestra sull'ago.

Riduce al minimo il disagio per il paziente

Aiuta a ridurre il disagio del paziente e la necessità di più tentativi di inserimento, grazie a un ago piccolo (26 G) dotato di finestra.

Riduce il rischio di lesioni da punture

Evita punture ed esposizioni accidentali dell'ago, grazie all'incapsulamento dell'ago caricato a molla e azionato da un pulsante.

Informazioni sul prodotto

Codice del prodotto senza alette	Codice del prodotto con alette	Calibro	Lunghezza (mm)	D.E. (mm)	D.I. (mm)	Velocità di flusso (ml/min)
SP125-26-14T*	SP125-26-14-WT*	● 26	14	0,6	0,4	14
SP125-26-19T*		● 26	19	0,6	0,4	12

*Nessuna valvola di contenimento ematico.

1. Infusion Nurses Society. Infusion nursing standards of practice. J Infus Nurs. 2016; 39 (suppl 1): S51

SuperCath è un marchio registrato di MediKit Co., Ltd.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente e reca la corrispondente marcatura CE.
Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, consultare il manuale d'uso del fabbricante.

© 2023 ICU Medical, Inc. | P23-4630-EMEA-IT

icumedical
human connections

+39 800 969 589 | www.icumed.com